

Содержание набора:



*Транспортные материалы также предоставляются

Общие рекомендации

- Избегайте сильного повторяющегося давления на уколотый палец ("доения"). Это может привести к гемолизу или загрязнению образца тканевой жидкостью.
- Не трите и не размазывайте образец крови.
- Сушите только на открытом воздухе.
- Отсутствие или неполная информация в бланке заявки на анализ приведет к задержке обработки Вашего образца.
- Дождитесь, пока достаточное количество крови впитается и полностью заполнит размеченный круг на фильтровальной бумаге.
- Результаты анализов будут отправлены непосредственно в офис Вашего лечащего врача, отправка может занять 5-10 рабочих дней с даты получения лабораторией Вашего образца.
- US Biotek не принимает образцы из штатов Нью-Йорк и Пенсильвания.

Прием пищи

Рекомендуется, чтобы Вы придерживались своих обычных пищевых привычек и употребляли, по возможности, разнообразные продукты в течение двух недель до сбора образца крови, если только Ваш лечащий врач не назначит Вам иное.

Избегайте употребления продуктов, которые потенциально могли привести к произошедшей неблагоприятной реакции и/или анафилаксии, так как вторичное воздействие может привести к летальному исходу.

Предупреждения и меры предосторожности

- Комплект содержит Пакет для транспортировки биологически опасных материалов, включающий осушитель. Чтобы сохранить целостность осушителя, не оставляйте Пакет открытым до, во время или после сбора крови. Оставьте осушитель внутри Пакета с собранным образцом крови и плотно закройте Пакет для отправки.
- Материалы, входящие в комплект, предназначены только для одноразового использования. Не используйте скальпель повторно. Не используйте бумагу для сбора крови более чем для одного образца крови.
- Не выполняйте этот тест, если Вы принимаете препараты, разжижающие кровь, или если у Вас есть нарушение свертываемости крови, только если это не разрешено Вашим лечащим врачом.
- Стиллет не рекомендуется применять для детей младше одного года. По запросу предоставляются детские скальпели и палочки.
- Образцы крови не следует брать из опухших или ранее проколотых мест и мочек ушей. Нельзя прокалывать мизинец, потому что глубина ткани у него недостаточна и возможно повреждение костей.

Назначение использования:

Набор для сбора образца крови Лаборатории US BioTek предназначен для использования в качестве носителя для сбора образцов мочи и их транспортировки в лабораторию для выполнения лабораторного исследования.

Прием лекарственных препаратов:

Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с Вашим лечащим врачом по поводу любых изменений в режиме приёма лекарств.


Иммуносупрессивные препараты, такие как пероральные или интраназальные кортикостероиды (например, преднизолон, беклометазон, флутиказон, триамцинолон) и суспензии и кремы с кортизоном местного применения, в дополнение к иммуномодулирующим препаратам, могут повлиять на результаты анализов по определению антител.



Остались вопросы? Отправьте нам письмо на contact@karimchubin.com

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРУ И ОТПРАВКЕ ОБРАЗЦА СУХОГО ПЯТНА КРОВИ (СПК)

Панели определения антител IgA/IgG/IgG4 к пище и ингаляторам / Food Panel
Панель антител и антигенов к Кандиде / Candida

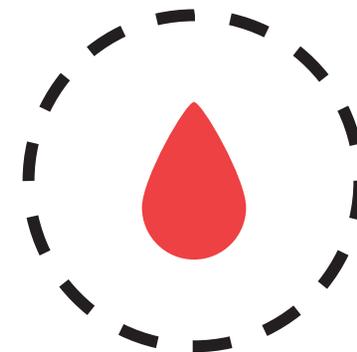


Внимательно прочтите этот документ, прежде чем использовать содержимое данного набора.


Инструкции Лабораторий US Biotek по сбору и доставке образцов сухого пятна крови разрешается использовать только под руководством лечащего врача. По любым вопросам касательно использования медицинского скальпеля надлежащим образом, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.



Подготовка:

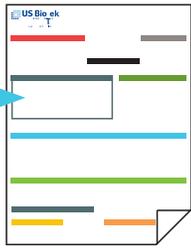


Бланк заявки
Заполните Раздел
данных о пациенте.

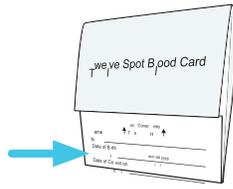

**Карточка сбора образца сухого
пятна крови:**

- Разборчиво напишите свои данные: ФИО, дату рождения и дату сбора образца в соответствующих полях заявки.
- ФИО на карточке сбора образца и в заявке должны совпадать.
- Непромаркированные карточки не принимаются.

Разложите материалы для сбора образца

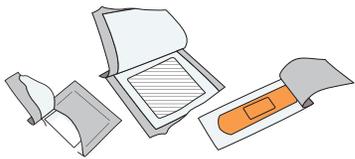


**Спиртовую салфетку/ Марлю/
Пластырь:** вскройте упаковки,
оставив салфетку, марлю и
пластырь внутри до использования.



Не-латексные перчатки:
Перчатки предназначены
для помощника по сбору,
если у Вас он есть


Подготовьте Карточку для сбора образца:

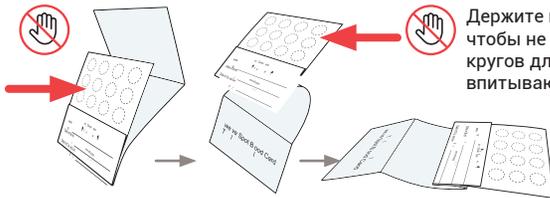

Держите карточку так,
чтобы не касаться
кругов для образца на
впитывающей части.

Раскройте карточку для
сбора крови.

Согните
здесь. Не складывайте
Карточку для
сбора крови.

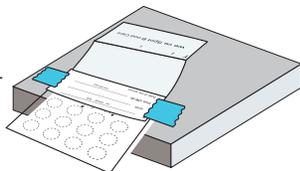


Совет:
Можно приклеить внешнюю
часть карточки к краю столешни-
цы, чтобы зафиксировать
карточку для сбора крови.




Мойте руки в течение 30-60 секунд под теплой водой.
Согревание рук перед сбором образца может
увеличить приток крови к пальцам и облегчить сбор.


Сбор образца:

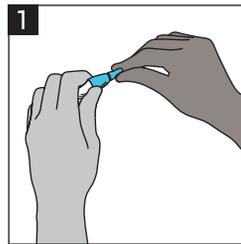


1
Откройте синий наконечник,
чтобы сломать пломбу на
скальпеле. Не прикасайтесь и не
нажимайте на белый наконечник.

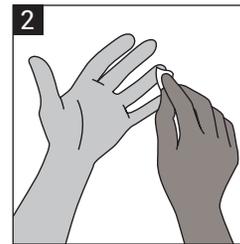


2
Используйте прилагаемую
спиртовую салфетку для очистки
кончика пальца (среднего или
указательного пальца).

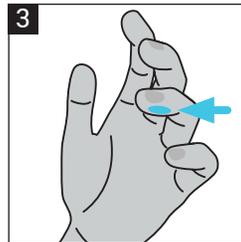


3
Поместите острие скальпеля
сбоку от кончика пальца. Со
стороны, обращенной к
мизинцу.

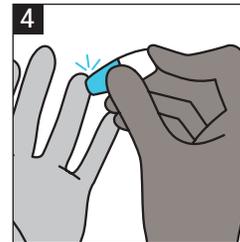


4
Сильно нажмите до щелчка.

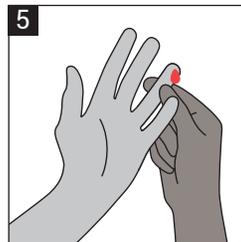

5
Осторожно надавите на
уколотый палец снизу места
прокола, чтобы образовалась
большая капля крови.

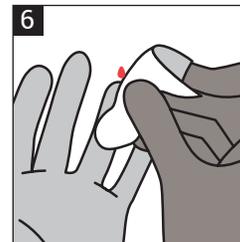

6
Вытрите первую каплю
крови марлей.

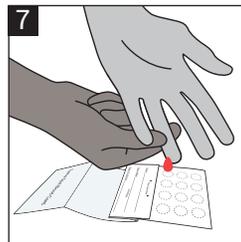

7
Держите руку пальцем,
чтобы кровь капала на круги.

Совет:

Постарайтесь заполнить большее
количество пятен, чем требуется, если
Вы не сразу остановите кровоток, что
обеспечит достаточное количество
образцов для исследования.


**Убедитесь, что
кровь пропитывает
карту насквозь.**



После завершения сбора образцов наложите
прилагаемую повязку на место прокола.

Изображение карточки сбора пятен крови

Годный образец:

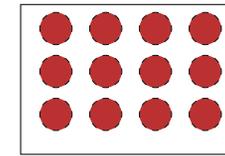


Спереди и сзади

Достаточно для исследования

Кровь должна пропитать всю
карточку насквозь

Недопустимый образец:

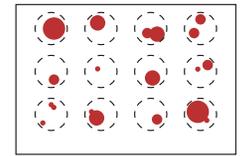

Спереди и сзади

Недостаточно для
исследования

Неравномерно и неполностью
заполненная карточка будет отклонена

Сушка:

Полностью просушите на воздухе. Приподнимите карточку или оставьте ее на столе и дайте высохнуть на воздухе не менее 3 часов. Хранить вдали от влаги и солнечного света. Важно, чтобы кровь не соприкасалась с обложкой.

После полного высыхания заправьте обложку в кармашек, как показано на рисунке. Вставьте карточку для сбора образца пятен крови в Пакет для транспортировки биологически опасных материалов, включающий осушитель, и плотно запечатайте (каждый закрывающийся пакет вмещает не более 5 карточек).

Доставка:

Отгрузки в пределах США

Заполните наклейку FedEx Express об оплате расходов по доставке на Медицинскую упаковку FedEx. Это должна быть наклейка о предоплате доставки службой FedEx в 2-х дневный срок в нижеперечисленные 48 штатов.

Свяжитесь со службой FedEx для
забора отправки по телефону:
1.800.463.3339.

НЕ оформляйте или запраши-
вайте отгрузку FedEx с забором
груза в субботу. Это может
повлечь за собой дополнитель-
ные расходы по доставке.

Внимание:
штаты Вашингтон, Аляска,
Гавайи и Пуэрто-Рико

отправляют образцы через
почтовую службу США с
использованием услуги
Приоритетная предоплаченная
маленькая коробка по единому
тарифу (Priority Mail Small Flat
Rate Box), в коробке, которая
предоставляется на почте.
Более срочная доставка
осуществляется за счет
практикующего лечащего врача.

Отправки из Канады

Содержимое отправки включает:

- 1 большую Медицинскую упаковку
- 1 заклеивающийся пакет FedEx с почтовой этикеткой (прилагается к Медицинской упаковке)
- 2 накладных (прилагаются к пакету Fed-ex)
- 1 коммерческий инвойс (прилагается к пакету FedEx)

Вложите упрочненную картонную
коробку внутрь Медицинской
упаковки FedEx и заклейте.

Не убирайте приложенные
накланые и коммерческий
инвойсы изнутри заклеивающего-
ся пакета FedEx.

Свяжитесь со службой FedEx для
забора отправки по телефону:
1.800.463.3339.

Отгрузки за предела- ми США и Канады

Клиент несет ответственность
за стоимость доставки