


AIR RELAX®

KOMPRESSIONS-GERÄT

AIR RELAX®

KOMPRESSIONS-GERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

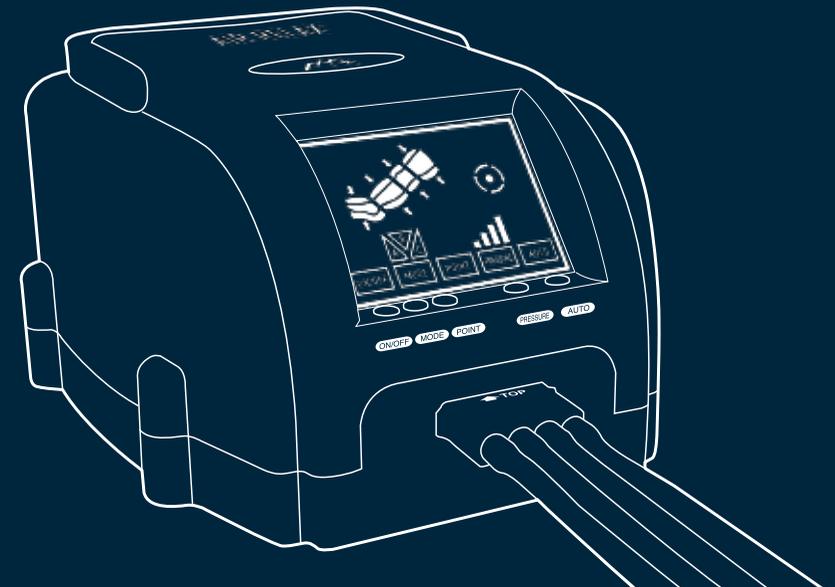

AIR RELAX

990 S. Via Rodeo, Placentia, CA 92870
sales@air-relax.com
http://www.air-relax.com



➤ Hinweis zur Nutzung

Dieses Produkt wurde zur Nutzung von Ärzten oder von Patienten zu Hause, die unter medizinischer Beobachtung stehen, entwickelt. Es können verschiedene Krankheiten behandelt werden: z.B. Primäres Lymphödem, Ödeme durch Verletzungen, Sportverletzungen und Sportregenerierung, venöse Insuffizienz, Lymphödem.

Lesen Sie diese Anleitung genau durch, und bewahren Sie diese für später auf.

ACHTUNG: Das Bundesgesetz schreibt vor, dass dies nicht von einem Arzt verkauft werden darf.

INHALT

• 2 Inhalt
• 3-4 Sicherheitsinformation
• 5 Anweisung zum sicheren Nutzen
• 6 Sichere Aufbewahrung und Wartung der Manschetten
• 7 Anwendung
• 8 Bildschirm Fenster
• 9-10 Funktionstasten
• 11-13 Anwendungs-Zyklus
• 14-15 Wie das Produkt verwendet wird
• 16 Fehlerbehebung
• 17 Angaben Model Marke
• 18 Information zur Gewährleistung
• 19 Rückgaberecht

- Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie die Anleitung in Ihrer Nähe auf, um es bei Bedarf lesen zu können.
- Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren und Eigentumsverlust vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.
- Wenn dieses Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder Aussetzt, schalten Sie es sofort aus.
- Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.

-  **ACHTUNG** Tod oder schwere Verletzungen können auftreten, wenn der Nutzer den Anweisungen nicht folgt.
-  **VORSICHT** Bitte folgen Sie allen Anweisungen. Falls Sie das nicht machen, können Verletzungen oder Schäden verursacht werden.
-  **VERBOTEN** Unterweisung ist verboten.
-  **EINHALTUNG** Zerlegen des Geräts ist verboten. Versuchen Sie nicht das Hauptteil des Geräts zu öffnen, zu reparieren, zu zerlegen oder abzuwandeln. Falls Sie das machen, kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung kommen.

Sicherheitsinformation

1. Das Gerät ist nur zum Nutzen im Haus geeignet. Verwenden Sie Air Relax nicht im Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Sauna oder Badezimmer. Dies könnte zu einem mechanischen oder physischen Schaden, einem Stromstoß oder Brand führen.

ACHTUNG

2. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da es zu einem Stromstoß oder anderen Verletzungen kommen kann.

ACHTUNG

3. Wenn es zu einem Unfall kommt, stecken Sie das Stromkabel aus oder schalten Sie das Gerät durch drücken des „ON/OFF“ Schalters aus. Dann ziehen Sie den Schlauch aus Anschlussstelle, damit die Luft in wenigen Minuten aus den Manschetten herausgeht. Danach öffnen Sie den Reißverschluss der Bein-Manschetten.

ACHTUNG

4. Wenn Sie das Gerät benutzen oder transportieren, bitte vermeiden Sie es zu schütteln oder, dass es zu Boden fällt, da dies zu Schäden oder Störungen bei der Verwendung führen kann.

VORSICHT

5. Stecken Sie nicht zu viele Anschlüsse in einem Verteiler. Verwenden Sie einen Verteiler mit Schutzschalter, um ein mögliches Brandrisiko zu vermeiden.

VORSICHT

6. Im Falle eines Gewitters oder eines Stromausfalls, stecken Sie es aus.

VORSICHT

7. Halten Sie Stecker fest, und nicht das Kabel, wenn Sie das Gerät ein- oder ausstecken wollen. Dies könnte zu einem physischen Schaden, durch Stromstoß oder Brand führen.

VERBOTEN

8. Falten oder biegen Sie das Kabel nicht absichtlich oder stellen Sie keine schweren Objekte darauf. Dies könnte zu einem Brand führen.

VERBOTEN

9. Stecken Sie den Stecker gänzlich in die Steckdose, um ein mögliches Brandrisiko zu vermeiden.

➤ Sicherheitsinformation

⊘ VERBOTEN

10. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät verschieben möchten. Hören Sie auf es zu benutzen, wenn das Kabel beschädigt ist.

⊘ VERBOTEN

11. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen, reparieren oder es abzuwandeln. Falls Sie das machen, kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder einer Verletzung kommen.

⊘ VERBOTEN

12. Verwenden Sie kein Öl, Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien um es zu putzen. Das Gerät sollte mit einem trockenen Tuch oder Handtuch sanft abgewischt werden.

⊘ VERBOTEN

13. Passen Sie auf, dass kein Staub, Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Hauptteil des Geräts oder in das Gerät eindringen. Positionieren Sie das Gerät nicht an einem Ort wo es ins Wasser fallen oder gezogen werden kann. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder in der Nähe von Wasser.

⊘ VERBOTEN

14. Verwenden Sie es nicht über einer Temperatur von 35°C oder unter 0°C. Wenn Sie dies machen, könnte es zu mechanischen Problemen, Stromstoß, Brand, physische Schäden oder Eigentumsverlust kommen.

⊘ VERBOTEN

15. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät oder die Bein-Manschetten während der Nutzung. Dies könnte zu einem Brand oder physischen Schäden führen.

- Hören Sie auf es zu benutzen, wenn es einen ungewöhnlichen Geruch abgibt. In diesem Fall, schalten Sie und stecken Sie es aus, und kontaktieren Sie uns für weitere Anweisungen. Die Verwendung könnte einen Brand oder Stromstoß auslösen.

Anweisung zum sicheren Nutzen ↙

Kontraindikation

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Erfahrung mit Entzündungen, Infektionen, Schmerzen von unbekanntem Ursprung, oder Blutungen (innere und äußere) an oder in der Nähe der Verwendungsstelle haben, oder wenn Sie eine Wunde an oder in der Nähe der Verwendungsstelle haben.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an eine der folgenden Krankheiten leiden:
 - Akutes Lungenödem
 - Akute Thrombophlebitis
 - Akute Infektionen
 - Tiefe Venenthrombose
 - Anfälle von Lungenembolie
- Eine Krankheit, bei der verstärkter venöser oder lymphatischer Rückfluss unerwünscht ist, oder Tumore an oder in der Nähe der Anwendungsstelle
- Knochenbrüche oder Fehlstellungen an oder in der Nähe der Anwendungsstelle.
- Verwenden Sie es nicht an Patienten, die eine Wunde oder Entzündungen an der Anwendungsstelle haben.

1. Bitte suchen Sie einen Arzt vor der Nutzung auf, wenn:
Wenn Sie schwanger sind oder sich schwach fühlen /
Wenn Sie ein Implantat an der Verwendungsstelle haben.
Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben.

2. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, schalten Sie das Gerät sofort, durch drücken des „ON/OFF“ Schalters aus.

⊘ VERBOTEN

3. Hören Sie auf es zu verwenden, wenn Sie ungewöhnliche physische Zustände während der Nutzung verspüren.

⚠ ACHTUNG

4. Im Falle eines Stromausfalls, entfernen Sie den Schlauch von den langen Stiefeln (die Luft wird ausgehen, wenn Sie den Schlauch entfernen).

⚠ VORSICHT

Üben Sie mit dem Gerät keinen direkten Druck auf Augen, Nase, Mund und Ohren aus. Wenn Sie das machen, kann es zu schweren Schäden kommen.

⚠ VORSICHT

6. Entfernen Sie alle Gegenstände, die Sie in Ihren Hosentaschen tragen, bevor Sie die Manschetten anlegen. (Wenn Sie das nicht machen, können Ihre Gegenstände oder die Manschetten beschädigt werden).
7. Gegen Sie sicher, dass das Gerät nach der Nutzung ausgesteckt wird und verstauen Sie es an einem sicheren Ort.
8. Vorsicht: Kleidung, Körperbehaarung oder Haut, könnte mit dem Reißverschluss eingeklemmt werden.

⚠ ACHTUNG

10. Der Schlauch darf nicht gefaltet oder abgeknickt werden.

↘ Sichere Aufbewahrung und Wartung der Manschetten

Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung unserer Manschetten. Sie sind zur Nutzung pneumatischer Anwendungen und können nicht einfach repariert werden.

1. Die Bein-Manschetten sind zur Verwendung eines einzigen Nutzers vorgesehen, um eine Ansteckung von Infektionen zwischen den Nutzern zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG

2. Die Manschetten sind nicht waschbar.

Die Haltbarkeit der Manschetten könnte beeinträchtigt werden, wenn Sie nass sind, daher wird empfohlen sie mit einem feuchten weichen Tuch abzuwischen und sie anschließend lufttrocknen lassen.

⊘ VERBOTEN

3. Blasen Sie die Manschetten nicht auf, ohne sie zu tragen.

Verwenden Sie nicht andere Pumpen, um die Manschetten aufzublasen. Dies könnte sie beschädigen.

⊘ VERBOTEN

4. Legen Sie die Manschetten nicht in die Nähe eines Herds, Zigaretten, Nadeln oder Scheren, um sie nicht zu beschädigen.

⚠ ACHTUNG

5. Bewahren Sie die nicht benutzten Manschetten an einem sauberen Ort auf. Setzen Sie die Manschetten nicht extremer Temperatur aus.

6. Falten oder biegen Sie die Manschetten nicht absichtlich, und stellen Sie keine schweren Objekte darauf.


↘ Sichere Aufbewahrung und Wartung

1. Bewahren Sie sie an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit auf.
2. Bewahren Sie sie an einem Ort auf, wo es keine beschädigenden Bedingungen gibt, wie zum Beispiel: Dampf, Temperatur, Feuchtigkeit, Luftzug, Sonnenlicht, Staub und hoher Salzgehalt.
3. Wenn Sie das Gerät einsetzen oder tragen, gehen Sie sicher, dass Sie es nicht schütteln oder fallen lassen.
4. Bewahren Sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bewahren Sie es nicht in der Nähe von Gas oder Chemikalien auf.
6. Inspizieren Sie es und kontrollieren Sie die Ausrüstung gelegentlich.
7. Vor dem Nutzen des Geräts, kontrollieren Sie es sauber ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Anwendung ↙

Luft wird vom Gerät durch den Silikonschlauch gepumpt, der mit den Bein-Manschetten verbunden ist. Die Luft wird in ein Ventil gepresst. Die Spulenventile werden durch Kreislaufversorgung kontrolliert und geben die Luft an jede Manschetten-Kammer, durch öffnen und schließen, ab.

Teile ↙

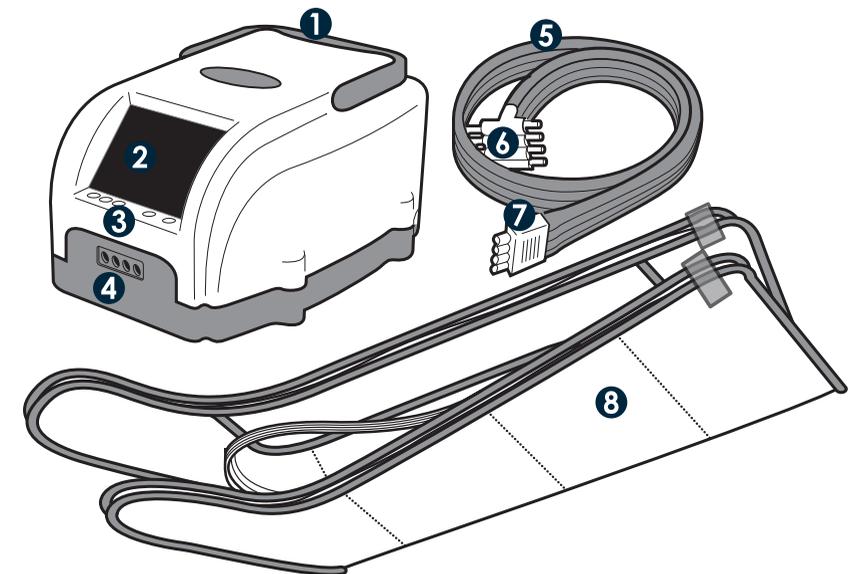

1. Henkel: Wird zum Tragen verwendet.
2. Bildschirm Fenster: Zeigt den Status der Anwendung
3. Anwendungs-Knöpfe: Bieten an, zwischen „ON/OFF“, „MODE“, „POINT“ (Manuell), „PRESSURE“ und „AUTO“ zu wählen.
4. Luftanschluss: Der Schlauch wird mit diesem Anschluss verbunden, so dass sie Pfeile nach oben zeigen.
5. Silikonschlauch: Luft wird durch den Schlauch geblasen um die Manschetten aufzublasen.
6. T-Anschlussstelle: Verbinden die Bein-Manschetten.
7. Schlauchstecker: Verbindung mit dem Luftanschluss.
8. Bein-Manschetten: Rechtes und linkes Bein sind markiert. Gehen Sie sicher, dass die Reißverschlüsse bis nach oben geschlossen sind und die Klettbänder sicher sitzen.

↘ Bildschirm Fenster




- ❶ **Bildschirm:** Zeigt 4 Kanäle an (Knöchel, Wade, Knie und Oberschenkel)
Sobald der Bildschirm einen Kanal aufleuchtet, wird diese Kammer mit Luft befüllt.
- ❷ **Autoprogramm Anzeige:** Zeigt den Status des Auto Programms.
- ❸ **ON/OFF:** Zeigt den Energie-Status an (EIN/AUS)
- ❹ **MODUS A, B, C:** Zeigt den Funktionsstatus an, der gerade angewandt wird.
- ❺ **POINT (Manuell):** Es zeigt des „POINT“ Status an.
Das Anwendungsgebiet an der Manschette wird gewählt.
- ❻ **DRUCK:** Luftdruck Levels reichen von 0-230mmHg.
Es gibt 4 Druckstufen, die während der Anwendung gewählt werden können.
Der Standard-Druck ist Level 1.
Level 1: 0 - 60 mmHg.
Level 2: 60 - 120 mmHg.
Level 3: 120 - 180 mmHg.
Level 4: 180 - 230 mmHg.
- ❼ **AUTO:** Wird angezeigt und angewandt, wenn der „AUTO“ Knopf gedrückt wird.

Funktionsknöpfe ↙

ON/OFF, MODE

❶ „ON/OFF“ Schaltknopf

- Wenn der ON/OFF Schaltknopf gedrückt wird, kommt zuerst das AUTO Programm im Modus A (Druckstufe Level 1)
- Es schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus, solange keine anderen Schaltflächen während des Vorgangs gedrückt werden.
- Wenn anderen Schaltflächen während eines gewöhnlichen Vorgangs gedrückt werden, beginnen 15 Minuten erneut, ab Beginn der gedrückten Schaltknopfes.

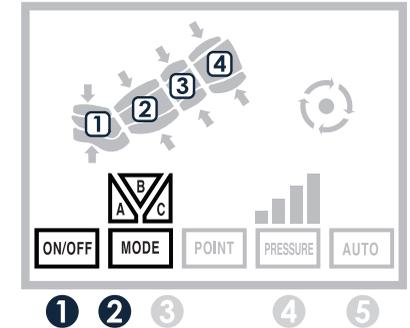


❷ „MODE“ Schaltknopf

- Sie können zwischen A, B und C Modus wählen.
Drücken Sie den MODE Knopf einmal, wenn Sie den Modus ändern wollen.
- Wenn „MANUAL“ oder „AUTO“ während des Vorgangs gedrückt wird, geht das „MODE“ Licht aus und der neue gewählte Modus leuchtet auf.


Fügt zum nächsten „MODE“ Diagramm hinzu



Jede individuelle Kammer wird mit Luft aufgefüllt und abgelassen, eine nach der anderen.

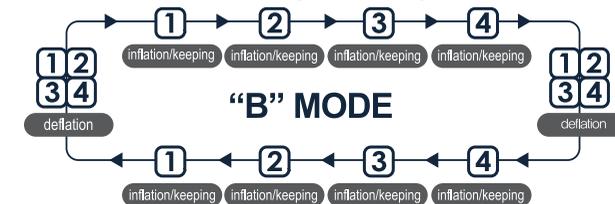


Jede Kammer wird aufgefüllt und bleibt so, bis alle Kammern aufgefüllt sind.
Sie werden dann ALLE gleichzeitig abgelassen.

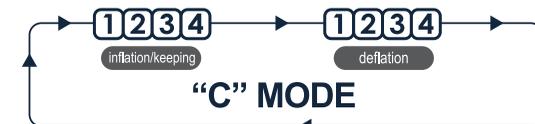

Alle vier Kammern werden gleichzeitig aufgefüllt und dann gemeinsam abgelassen.

↘ Funktionstasten


POINT, PRESSURE, AUTO (Punkt, Druck, Auto)

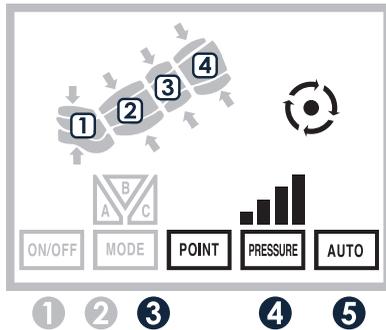

3 POINT (Manual) Schaltknopf

- Bietet Ihnen die Möglichkeit bestimmte Punkte/Kammern zu wählen, um sich auf diese zu konzentrieren.
- Sie können zwischen 4 Sektionen an der Beincompression wählen.
- Falls „MODE“ oder „AUTO“ während der Anwendung gewählt wird, geht das POINT Licht aus und die neu gewählte Funktion leuchtet auf.
- Alle Anwendungen unter „POINT“ befüllen und entleeren nur diese Gegend. Sehen Sie unten die Bildbeschreibung, um Punkte/Kammern zu wählen.

- Druckgebiet wird geändert sobald der Knopf gedrückt wird.

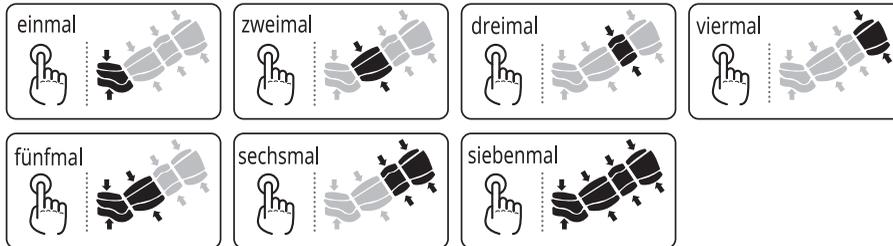

4 PRESSURE (DRUCK) Schaltknopf


- Es gibt 4 Druckstufen, die durch jeweils einmaligem Drücken während des Vorgangs gewählt werden können. Die Standard Druckstufe ist Level 1. Durch kontinuierliches Drücken des Schaltknopfes, gelangen Sie zu einem höheren Level.

5 AUTO Schaltknopf


- Die AUTO Funktion startet, wenn sie während des Vorgangs gedrückt wird. Sie schaltet sich aus, wenn ON/OFF gedrückt wird.
- Das AUTO Programm kombiniert Modus (A, B, C) und „Point“ in einer dieser Sequenzen.
- Die Druckstufe kann während des AUTO Programms gewählt werden.

Anwendungs-Zyklus ↙


Anwendungs-Zyklus von MODE

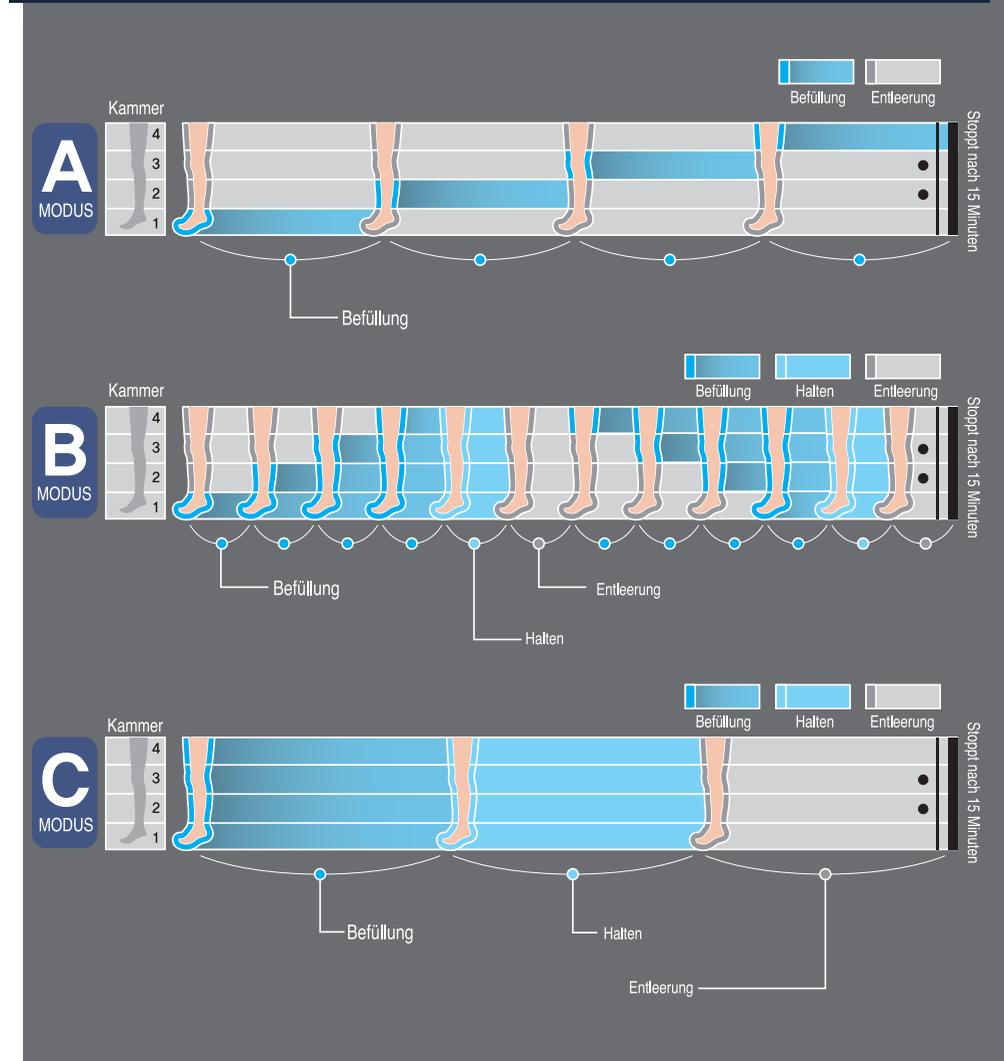

➤ Anwendungs-Zyklus von „POINT“ Punkt

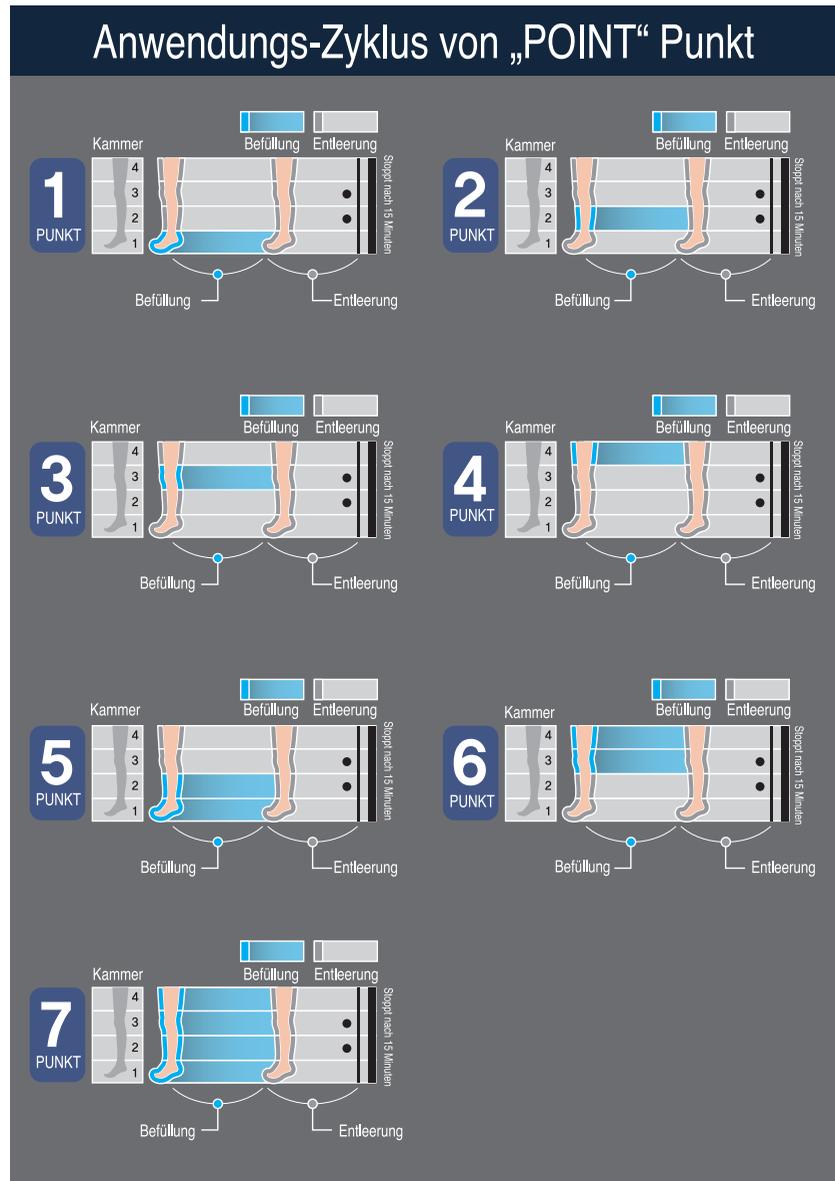




Anwendungs-Zyklus von „AUTO“ ↙

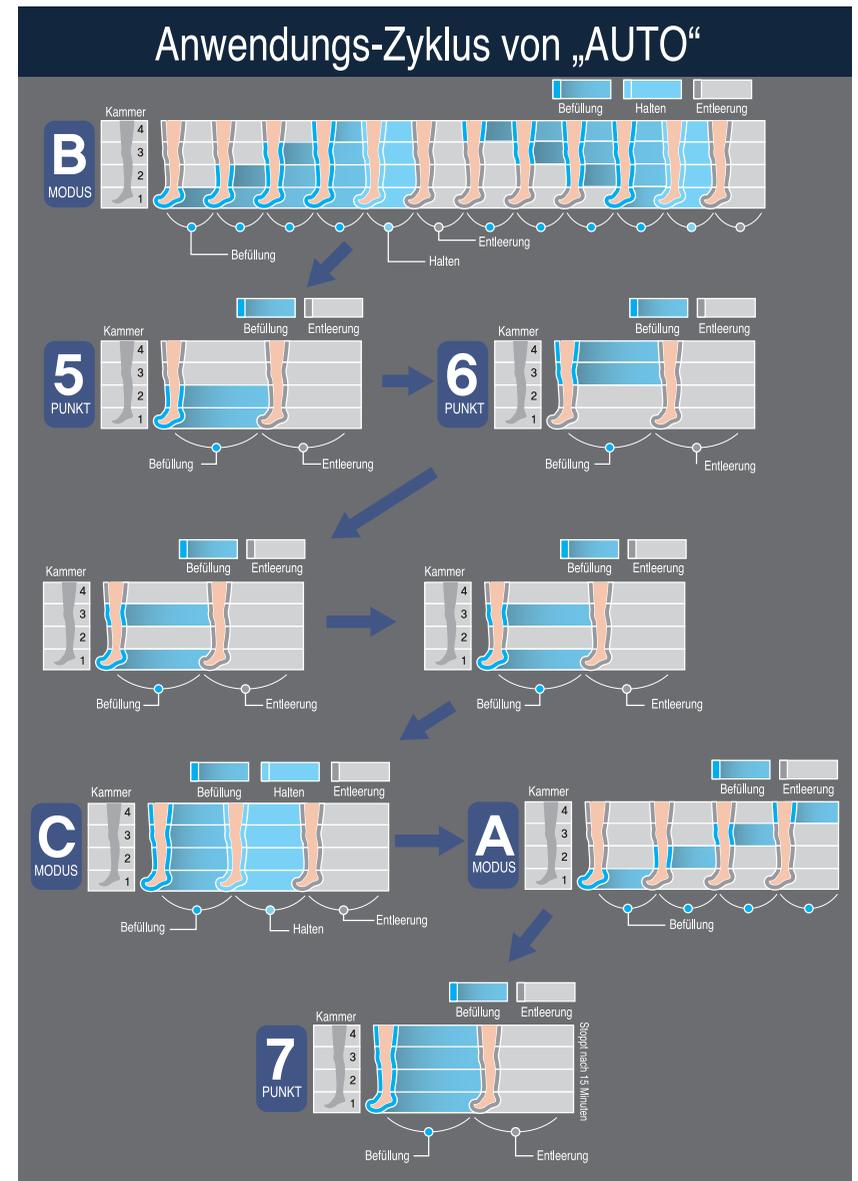

↘ Wie das Produkt verwendet wird 1

ACHTUNG: Wenn Sie das Produkt bekommen, werden alle Schläuche angeschlossen sein, ausgenommen der Schlauchstecker, welcher mit dem Gerät verbunden wird.



❶ Anschließen der T-Anschluss-Schläuche

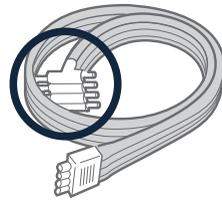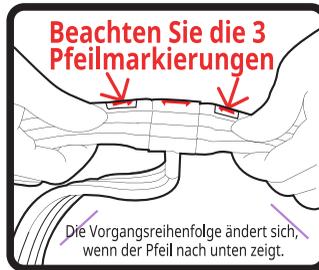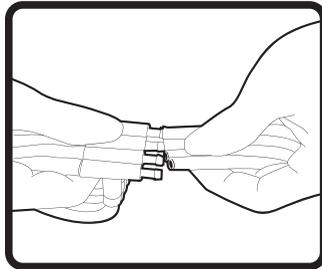

T-Anschluss-Schlauch

1. Die Schläuche sollten nicht verdreht oder gefaltet werden.
2. Die Pfeile auf der linken und rechten Manschette stehen sich gegenüber und sind mit dem T-Anschluss verbunden.

❷ Verbindung des Schlauchsteckers mit dem Gerät

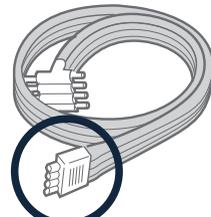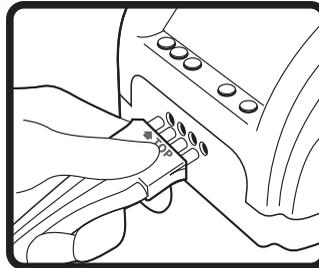

Schlauchstecker



- 1) Der Schlauch sollte nicht verdreht oder gefaltet werden.
- 2) Schließen Sie den Schlauchstecker an die Luftanschlussstelle des Geräts an und gehen Sie sicher, dass der Pfeil nach oben zeigt.
- 3) Der Schlauchstecker sollte gut angeschlossen werden, damit keine Luft austreten kann.

❸ Anschließen des Stromkabels (110 bis 120 V Stromquelle)

1. Kontrollieren Sie, ob die Stromstärke die gleiche des Geräts ist. **FALSCHES STROMSTÄRKE KANN DAS PRODUKT DAUERHAFT BESCHÄDIGEN UND BRAND VERURSACHEN.** Wenn Sie die falsche Stromstärke verwenden verlieren Sie die Garantie.
2. Stecken Sie das Stromkabel gut an. Das Gerät wird zweimal einen Piepton machen, wenn es eingeschaltet ist.
3. Positionieren Sie das Produkt auf einem flachen Untergrund.




Wie das Produkt verwendet wird 2 ↙

❹ Anziehen der Bein-Manschetten

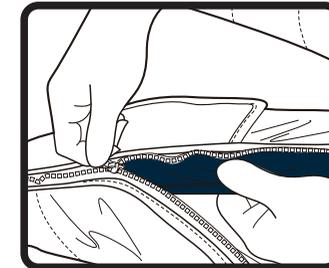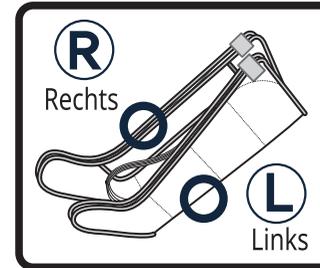

Schutzabdeckung
Positionieren Sie die Schutzabdeckung, um Ihre Haut zu schützen.

1. Tragen Sie leichte Kleidung bei der Nutzung dieses Produkts
2. Gehen Sie sicher, dass Sie die „linke“ und „rechte“ Manschette entsprechend angezogen haben.
3. Schließen Sie den Reißverschluss bis ganz nach oben, und passen Sie auf, dass Ihre Kleidung nicht eingeklemmt wird.
4. Positionieren Sie den Reißverschluss flach wie am Bild ersichtlich, und ziehen Sie das Klettband fest zu.

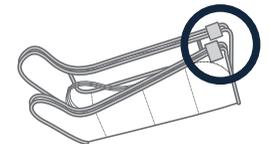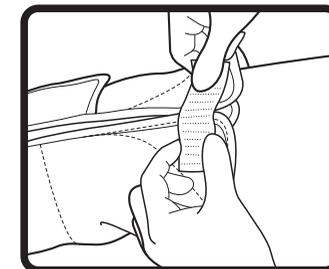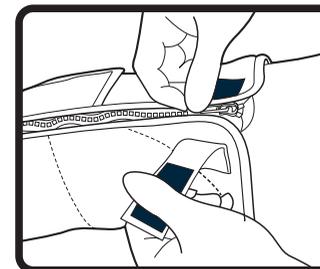


- Klettband
Befestigen Sie das Klettband, um zu verhindern, dass der Luftdruck den Reißverschluss öffnet, wenn sich die oberen Kammern füllen. Falls dies passiert, machen Sie sich keine Sorgen – Schalten Sie einfach das Gerät aus und befestigen Sie den Reißverschluss wie oben empfohlen.

↘ Fehlerbehebung

Kontrollpunkte:

Bitte versuchen Sie die Fehlerbehebung durchzuführen, bevor Sie den Reparaturservice kontaktieren.

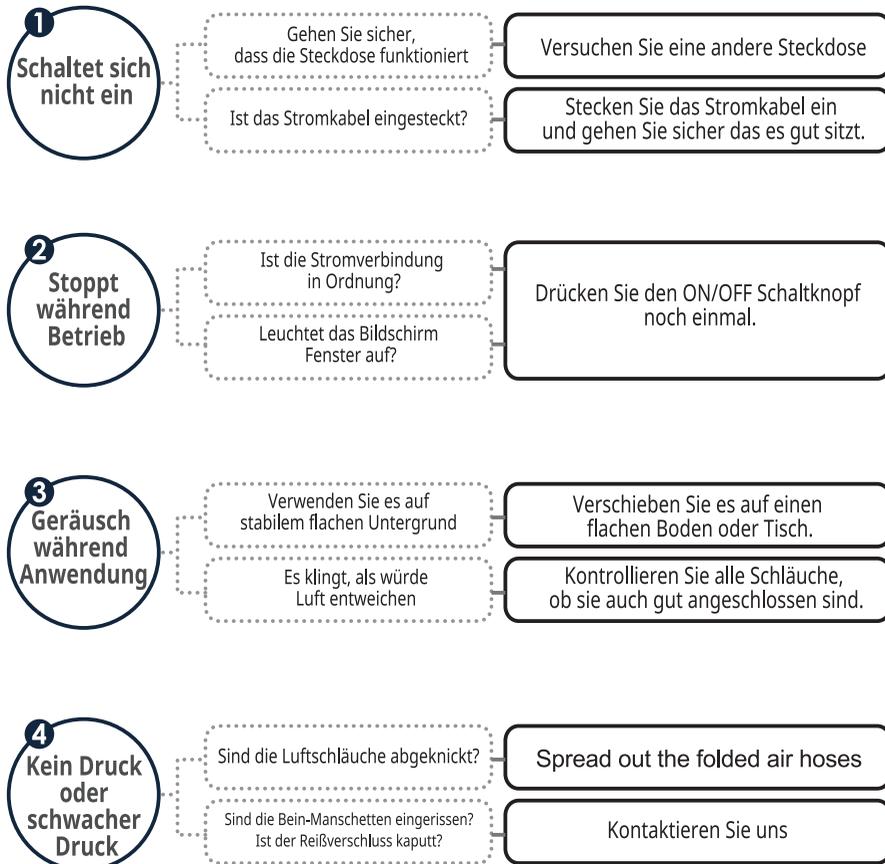

Angaben Model Marke ↙

Angaben	
Beschreibung: Kompressibles Glieder-Schlauch-System	Hergestellt in Korea
Model Name: UAM-8100	
Maxstar Industrial Co., Ltd. ZIP:10048 152-12, Hwangeum-ro 23 beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea	Verpackungsinhalt: 1 Stück
Typ: Klasse 2, BF Typ Zubehör   Verweist auf eine Bedienungsanleitung	
Spannung: 120 V, 60 Hz	Verbrauch: 30 W
Betriebsmodus: Betriebsfortsetzung mit Unterbrechung durch Aufladung	
Angaben zur Verwendung: UAM-8100 wurde zur Nutzung von Ärzten oder von Patienten zu Hause, die unter medizinischer Beobachtung stehen, entwickelt. Es können verschiedene Krankheiten behandelt werden: z.B. Primäres Lymphödem, Ödeme durch Verletzungen, Sportverletzungen und Sportregenerierung, venöse Insuffizienz, Lymphödem.	
Widerspruch: akutes Lungenödem akute Thrombophlebitis akute kongestive Herzinsuffizienz akute Infektionen Tiefenvenenthrombose Anfälle von Lungenembolie Eine Krankheit, bei der verstärkter venöser oder lymphatischer Rückfluss unerwünscht ist, oder Tumore an oder in der Nähe der Anwendungsstelle sind. Knochenbrüche oder Fehlstellungen an oder in der Nähe der Anwendungsstelle.	
ACHTUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht an Patienten die Wunden oder Entzündungen an oder in der Nähe der Anwendungsstelle haben.	
Aufbewahrung/Wartung:   Verweist auf eine Bedienungsanleitung	
SN <input type="text"/>	Typ <input type="checkbox"/> 

INFORMATIONEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG

Die Air Relax Einheit/Zubehöerteile werden vom Hersteller gegen Herstellungsschäden am Material und Werkstattarbeit für ein Jahr garantiert, ab dem Zeitpunkt des Kaufs bei Air-Relax. Im Falle eines Defekts während dieses Garantiezeitraums, wird das Produkt vom Hersteller nach seiner Wahl repariert oder Teile ersetzt, die zu diesem Schaden geführt haben. Die Reparatur oder die Teile oder der Ersatz des Produktes mit gleichem Design oder dann aktuellen Design wird nicht verrechnet. Die Air Relax Einheit beinhaltet die Manschetten, das Gerät und die Schläuche.

Die Garantie inkludiert nicht normale Gebrauchsabnutzung, Risse oder kosmetische Schäden und wird ungültig, sobald das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisung genutzt wird, falsch verwendet, abgewandelt oder durch jemanden, der kein offiziell befugter Mechaniker des Herstellers ist, repariert wird. Diese Garantie exkludiert ausdrücklich, Transport, Versand oder Versicherungskosten, oder Schäden, Fehler und Defekte durch missbräuchlicher, nicht ordnungsgemäßer oder fahrlässiger Verwendung.

AUSGENOMMEN WIE OBEN ANGEGEBEN, AIR RELAX GIBT KEINE VERTRAGLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND FITNESS FÜR EINEN BESTIMMTEN GRUND ODER NUTZEN, UND IST IN DER DAUER WIE OBEN GENANNT EINGESCHRÄNKT, AUSSER WIE OBEN AUSDRÜCKLICH BESAGT, AIR RELAX HAT KEINE VERPFLICHTUNG ODER VERANTWORTUNG GEGENÜBER SEINEN KUNDEN, ODER IRGEND EINER ANDEREN PERSON ODER WESEN. MIT RESPEKT FÜR JEDE VERPFLICHTUNG, VERLUST ODER SCHÄDEN DER DURCH DEN DIREKTEN ODER INDIREKTEN NUTZEN DES PRODUKTS ODER ZEITVERLUST, GELD UND EIGENTUMSVERLUST ODER ANDERE KONSEQUENZEN WERDEN NICHT DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT.

Manche Staaten erlauben nicht die Ausgrenzung oder Limitierung von Neben- oder Folgeschäden, wodurch die oben genannten Beschränkungen und Ausgrenzung für Sie nicht gelten. Die Garantie bietet Ihnen spezielle legale Rechte und diese weichen auch von Staat zu Staat ab. Im Falle eines Schadens während der Garantieperiode, senden Sie das Produkt an: Air Relax, 990 S.Via Rodeo, Placentia, CA 92870, mit vorausbezahlten Versandkosten und Versicherung und den Angaben zur Entstehung des Schadens.

Alle Ersatzteile und Produkte werden zum Eigentum von Air-Relax. Neue oder reparierte Teile könnten im Vorgang des Garantieservices genutzt werden. Reparierete oder ersetzte Teile werden nur für die restliche Garantieperiode garantiert. Reparaturen nach der Garantieperiode werden an Sie verrechnet.

RÜCKSENDUNGSRECHT

Dieser Grundsatz gilt nur, wenn Sie der Endverbraucher sind und Sie das Produkt direkt bei Air Relax gekauft haben.

Im unwahrscheinlichen Falle, dass Sie nicht zufrieden mit dem Produkt sind, können Sie es innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum, zurücksenden. Für alle Rücksendungen und Umtausche gelten folgende Bedingungen:

1. Rücksendungen und Umtausche müssen eine Nummer zur Rücksendung-Handelswaren-Autorisierung (RMA) haben. Erhalten Sie Ihre RMA-Nummer, indem Sie uns unter sales@air-relax.com kontaktieren. Rücksendungen ohne RMA-Nummer werden nicht zur Rückerstattung zugelassen.
2. Rücksendung müssen innerhalb 15 Tagen unter RMA Versicherung erhalten werden.
3. Das Produkt und die Verpackung müssen in neuem und unbeschädigtem Zustand zurückgesandt werden. Produkte die Tragespuren oder Verschmutzung aufweisen, werden nicht akzeptiert und auf Ihre Kosten zurückgesandt.
4. Rücksendungsprodukte unterliegen einer 10%igen Wiederbeschaffungs-Gebühr. Ein Rücksendungsprodukt ist ein Produkt, das zur Rückerstattung zurückgesandt wurde.
5. Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund gegen die Zahlung der Versandkosten weigern, wird Ihnen der Gesamtbetrag abzüglich der Versandkosten rückerstattet.
6. Alle Teil- und Gesamtrückerstattungen werden auf Ihr Kreditkarte, die Sie zum Kauf genutzt haben, überwiesen.
7. Air Relax ist nicht für verlorene oder beschädigte Produkte während des Versands verantwortlich.

Anweisungen zur Rücksendung:

Schritt 1: Kontaktieren Sie uns, um eine Nummer zur Rücksendung-Handelswaren-Autorisierung (RMA) zu bekommen.

Schritt 2: Geben Sie das Produkt mit der originalen Verpackung und den originalen Versanddokumenten in das Versandpaket. Gehen Sie sicher, dass Ihr Name, Bestellnummer, Kontaktinformation, Grund der Rücksendung und RMA Nummer im Paket sind, damit wir Ihre Rücksendung/Ihren Umtausch ordnungsgemäß durchführen können.

Schritt 3: Gehen Sie sicher, dass sich auch Ihr Name, Ihre Adresse und die RMA Nummer auch auf der Außenseite des Pakets befindet und senden Sie es an: **Air Relax, 990 S Via Rodeo, Placentia, CA 92870.**

Schritt 4: Versenden Sie das Paket mit Paketverfolgung und Versicherung. Air Relax trägt keine Verantwortung für Beschädigungen oder Verlust während des Versands.

Die Registrierung Ihres Produkts würde uns helfen, Sie mit schnellerem und effizienterem Service zu bedienen, und Ihnen zu versichern, dass Sie das Beste aus der Garantie bekommen. Registrieren Sie ein Produkt auf air-relax.com.