



05. Do not put the product into the fire or close to the fire source.

08. Do not operate or put on charging the battery of the product without

10. Children under eight years old are prohibited from use, cleaning and

maintenance shall not be performed by children without adults around.

11. Due to the heat-producing surface of the device, those who are sensitive to

Do not intentionally drop the product.


monitoring.


heat need to use the product carefully.


12. To charge on the computer is prohibited.


07. Do not change or modify the product in anyway.


face of the massage head to avoid finger clipping.

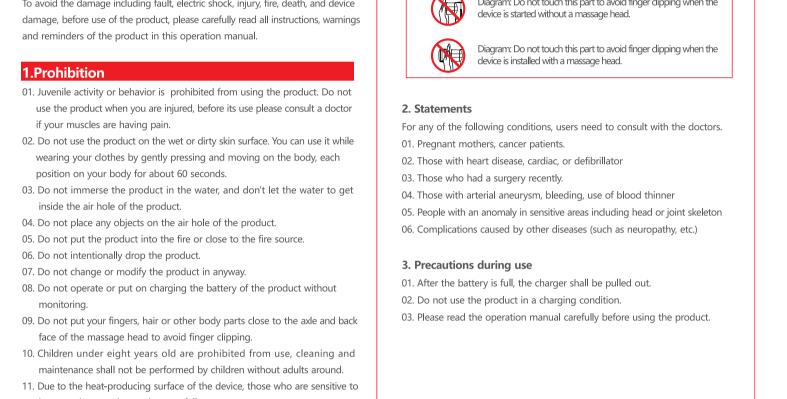


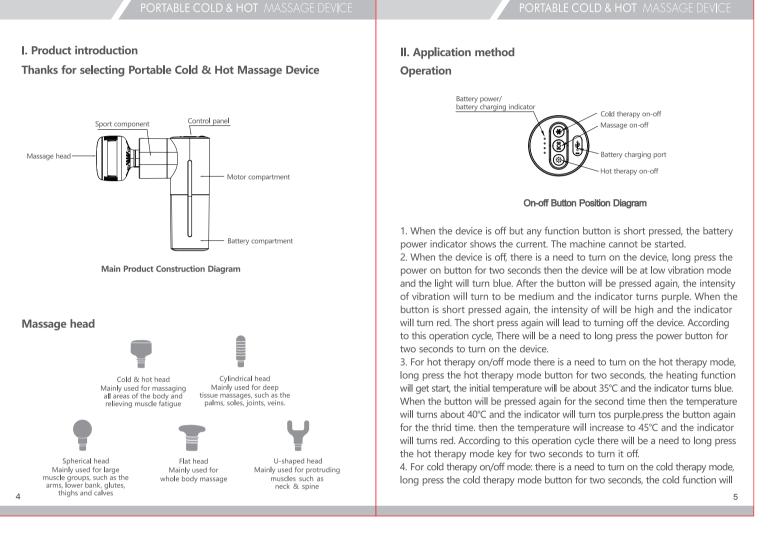


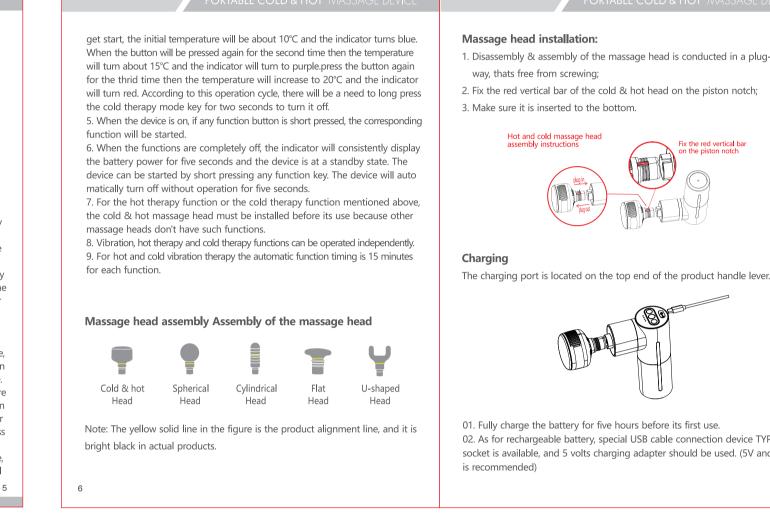

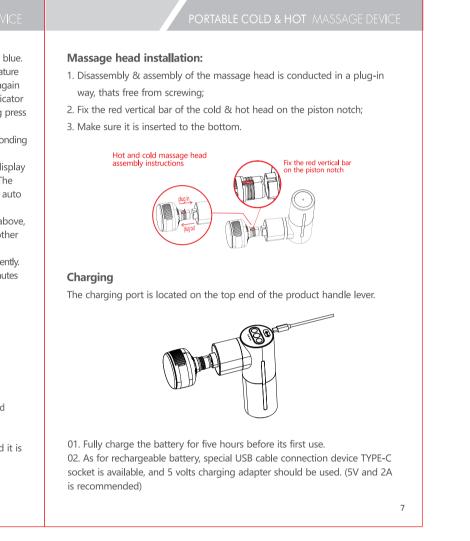


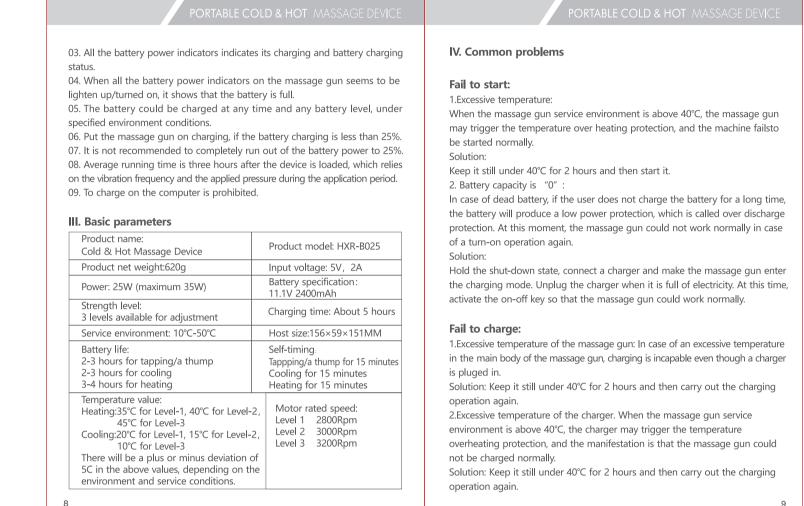


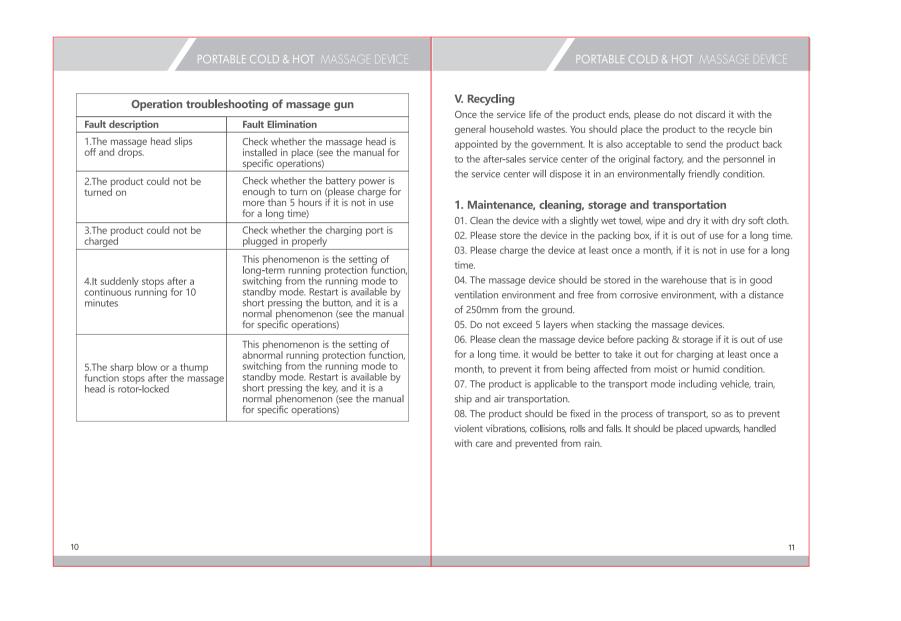


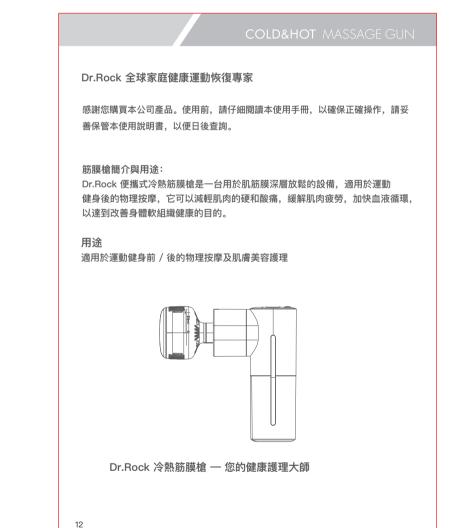



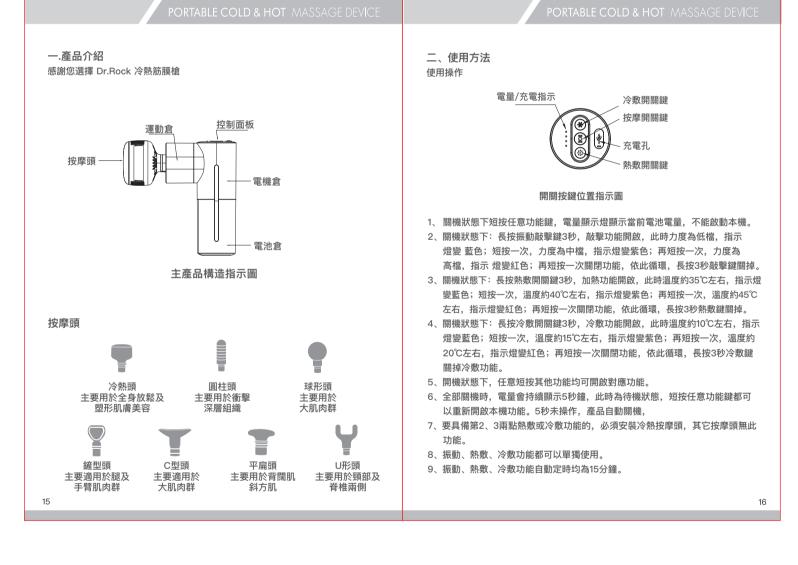

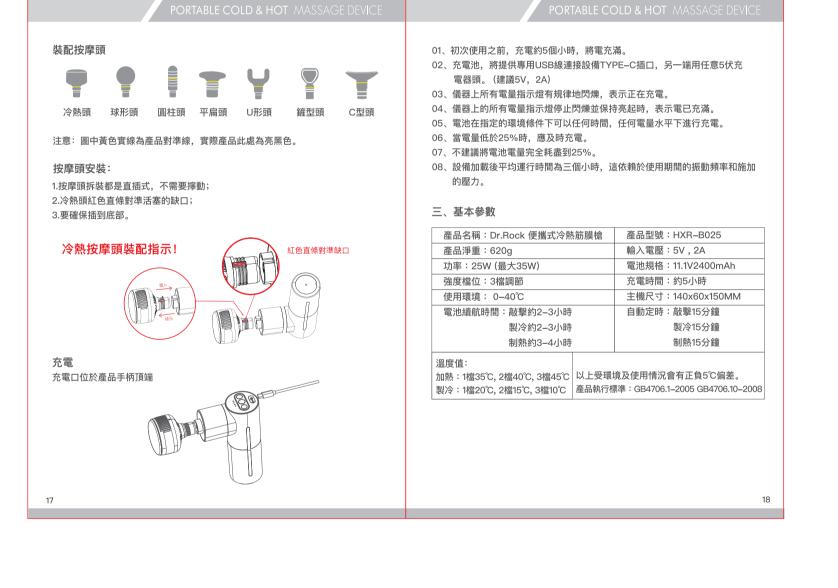

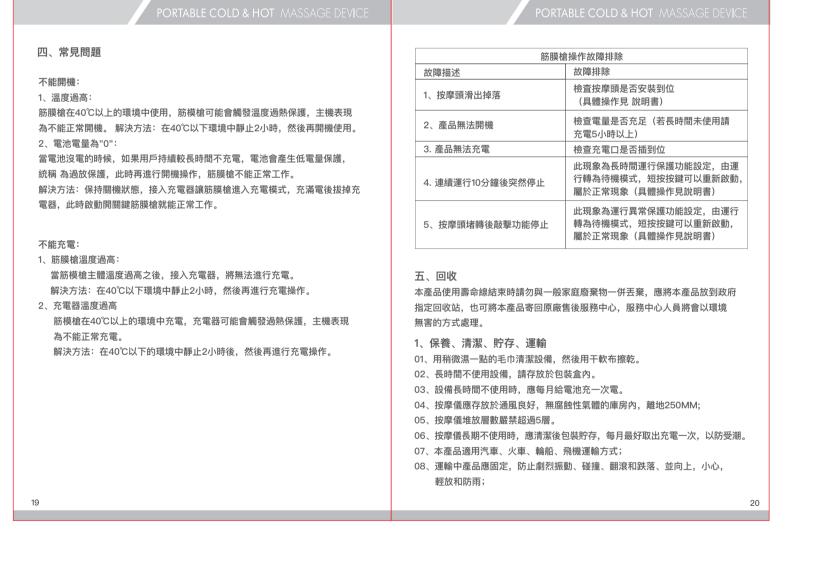


1、温度过高:


1、筋膜枪温度过高:


2、充电器温度过高

为过放保护,此时再进行开机操作,筋膜枪不能正常工作。


当筋模枪主体温度过高之后,接入充电器,将无法进行充电。

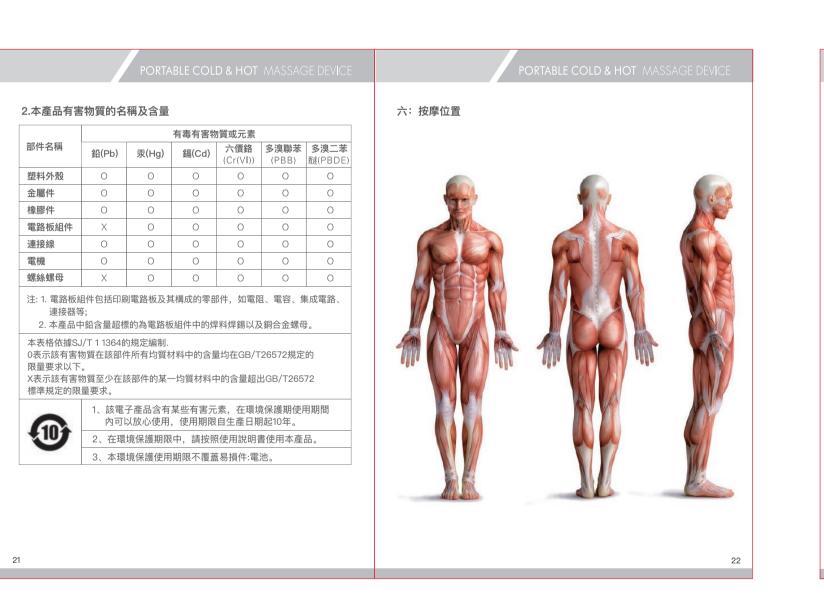

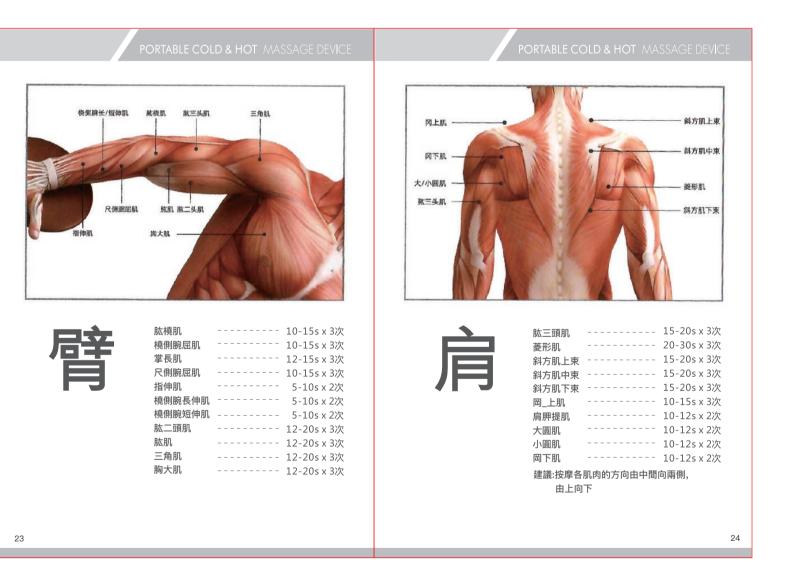

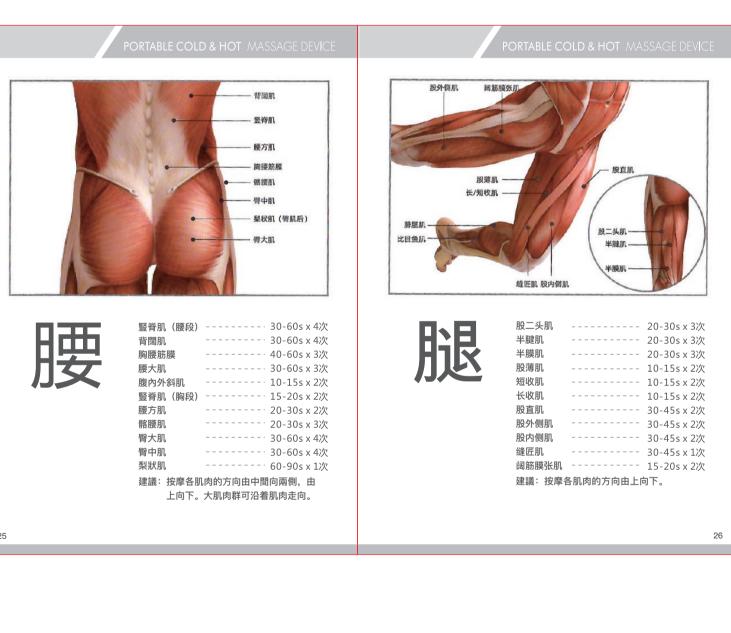




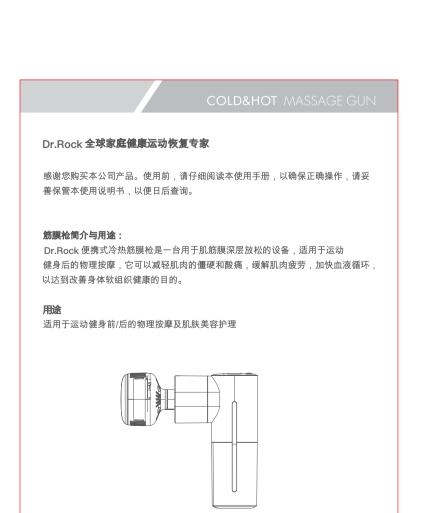

Dr.Rock 冷热筋膜枪 — 您的健康护理大师



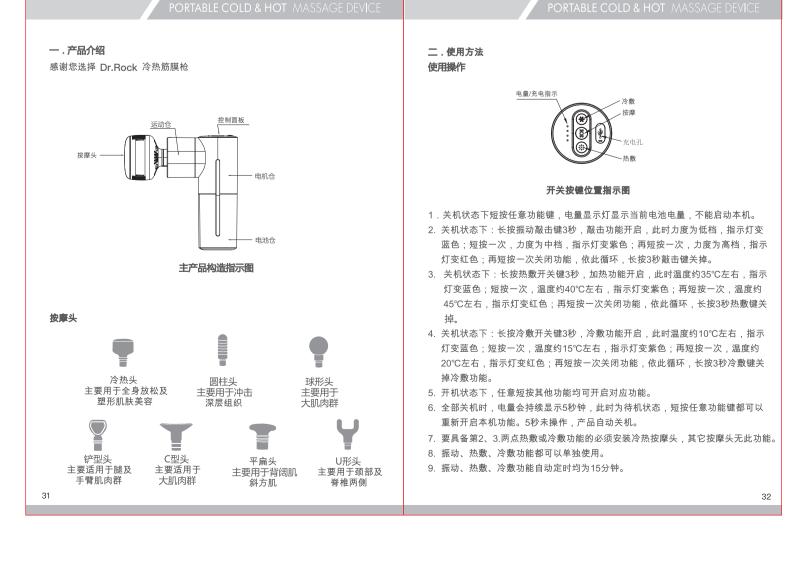



PORTABLE COLD & HOT MASSAGE DEVICE		PORTA				
						Ī
筋膜枪	操作故障排除	2. :	本产品有害物	顶质的名称及	支含量	
故障描述	故障排除					有
1.按摩头滑出掉落	检查按摩头是否安装到位(具体操用见 说明书)	当	8件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	
2.产品无法开机	检查电量是否充足(若长时间未使用请 充电5小时以上)		型料外売 会属件	0	0	L
3.产品无法充电	检查充电口是否插到位		象胶件	0	0	H
	此现象为长时间运行保护功能设定.由运			X	0	\vdash
4.连续运行10分钟后突然停止	行转为待机模式,短按按键可以重新启		1路板组件			\vdash
4. 庄朱色1710万针/0天然停止	动,属于正常现象(具体操作见说明书)		主接线	0	0	H
5.按摩头堵转后敲击功能停止	此现象为运行异常保护功能设定.由运行 转为待机模式,短按按键可以重新启动,		B机 累丝螺母	O X	0	
	属于正常现象(具体操作见说明书)	jà		、连接器等		
五. 回收 本产品使用寿命线结束时请勿与一般家庭废弃物一并丢弃,应将本产品放到政府指定 回收站,也可将本产品寄回原厂售后服务中心,服务中心人员将会以环境无害的方式 处理。		O 原 X	本表格依据SJ/T 11364的规定编制 O表示该有害物质在该部件所有均质 限量要求以下。 X表示该有害物质至少在该部件的某 标准规定的限量要求。			
1、保养、清洁、贮存、运输 01、用稍微湿一点的毛巾清洁设备,然后用干软布擦干。					子产品含有 以放心使用	
02、长时间不使用设备,请存放于包装盒内。			JU	2、在环	境保护期限	- ? d
03、设备长时间不使用时,应每月给电池充一次电。				3、本环	境保护使用] 其
04、按摩仪应存放于通风良好,无腐蚀性气体的库房内,离地250MM;						
05、按摩仪堆放层数严禁超过5层。						
	包装贮存,每月最好取出充电一次,以防受潮。					
07、本产品适用汽车、火车、轮船、 ⁻						
	动、碰撞、翻滚和跌落、并向上,小心,轻放					
和防雨;						

