

Augenmassagegerät - SRMY01



Bitte vor der Erstbenutzung aufmerksam lesen !

Hinweis

Vielen Dank für den Kauf des Augenmassagegerätes. Bitte lesen Sie für einen optimalen Einsatz des Produktes und evtl. Garantieleistungen den Inhalt dieser Bedienanleitung aufmerksam durch.

Die Produktbilder und zugehörige Produkteigenschaften sind lediglich als Referenz gedacht. Die tatsächliche Verwendung und Nutzung kann je nach Produkttyp ggfs. abweichen.

Wärme + Hochfrequenz-Vibration

Eine konstant warme Temperatur von 40 °C (± 3 °C) kombiniert mit einer angenehmen 160 Mal/Sekunde Hochfrequenz-Vibration glättet die Haut rund um die Augen und lässt dunkle Augenringe bereits nach drei Minuten Massage verschwinden. Ein unentbehrliches Utensil nicht nur für Nachtschwärmer.


EMS Mikrostrom

40 °C ± 3 °C konstant warme Temperatur zusammen mit einer 160Mal/Sekunde oszillierenden Vibrationsmassage plus ein Mikrostrom Hautlifting und -straffung. Im Zusammenspiel mit einer Hautpflegecreme für eine samtweiche, faltenfreie Haut.

Packungsinhalt

Augenmassagegerät mit Schutzkappe, USB Ladekabel und Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

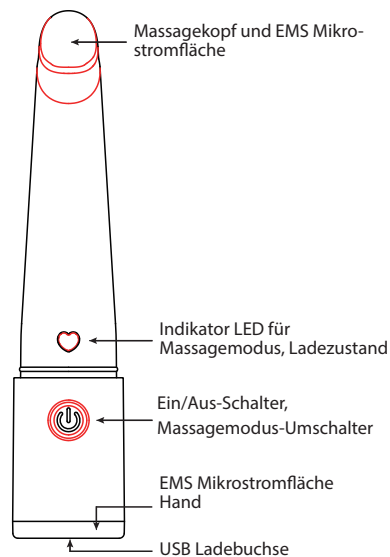

Benutzung des Gerätes

1. Einschalten des Gerätes: Drücken und Halten Sie den Ein/Aus-Schalter für ungefähr zwei Sekunden bis die LED rot leuchtet. Das Massagegerät schaltet in den Warmmodus kombiniert mit der Vibrationsmassage.
2. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter nochmal kurz, wechselt die LED nach blau und das Massagegerät schaltet neben dem Wärme- und Vibrationsmodus auch noch die EMS Mikrostromfunktion hinzu.
3. Das Gerät kann zusammen mit Hautpflegeprodukten zur Entspannung müder Augen und zur Straffung der Haut rund um die Augen benutzt werden. Pro Augenbereich wird eine 3-minütige Massage empfohlen.
4. Nach der Benutzung kann der Massagekopf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und zur Aufbewahrung in die Schutzkappe wieder aufgesetzt werden.

Achtung

1. Das Gerät ist für den Augenbereich und das Gesicht geeignet, es KANN NICHT während des Ladens verwendet werden.
2. Benutzen Sie saubere Hände bevor Sie ein Hautpflegeprodukt auf Ihr Gesicht auftragen. Tauchen Sie das Gerät nicht direkt in Cremes oder andere Flüssigkeiten. Nach dem Einsatz können Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
3. Nach der Benutzung sollte das Gerät mit aufgesetzter Schutzkappe in einem trockenen, gelüfteten Bereich aufbewahrt werden, abseits von Feuer oder anderen hohen Temperaturen.
4. Das Gerät ist nicht für Kinder geeignet. Es ist kein Spielzeug und sollte ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern und Babies gelagert werden.

5. Zerlegen und modifizieren Sie das Gerät nicht ohne vorherige Zustimmung. Ein eventuell hierdurch entstandener Schaden verursacht durch den Käufer führt zu einem Verfall der Garantieleistung.
6. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Farbverdünner, Benzin oder Nagellackentferner, da dies zu einer Schädigung des Gerätes führen kann.

Ladevorgang

1. **Batteriewarner:** Bei niedrigem Ladezustand der Batterie, fängt die LED rot zu blinken an.
2. **Ladevorgang:** Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in die untere Buchse am Gerät und das andere Ende in eine USB-Ladebuchse oder in einen USB Anschluss an einem Computer. Beim Ladevorgang blink die LED rot, bis die Batterie voll geladen ist. Dann leuchtet die LED konstant für 5 Minuten bevor diese erlischt.
3. **Ladezeit:** Die Ladezeit für das Massagegerät beträgt ca 2 - 2.5 Stunden.

Benutzen Sie mit dem Gerät keine ätzenden Lösungen.



Produktparameter

Name	Augenmassagegerät
Modell	SRMY01
Batteriekapazität	350mAh
Ladezeit	ca. 2.5h
Betriebsdauer	ca. 60min
Produktdimensionen	€26.5*L129.5mm
Nettogewicht	150g
Stromeingang	5VDC/0.5A
Energie	≤2W
Vibrationsfrequenz	ca. 180 Mal/Sekunde



<https://facevital.com>



info@facevital.com