



Pistola Masajeadora

4 CABEZALES



ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Nombre: Pistola Masaje Muscular

Modelo: 4 Cabezales Lhotse Fit

Dimensiones: 95x48x143mm

Peso neto: 370g

Niveles: 4 Niveles

Velocidad de rotación: 1700 ~ 3200rpm

Tipo de batería: Batería de litio

Capacidad de batería: 2000mAh

Tiempo de carga: Aprox. 200min

Duración de batería: Aprox. 400min


Voltaje: 7.4V

Corriente: 4.5A

Potencia: 33.3W

Entrada: DC5V/2A


Volumen máximo: 50dB

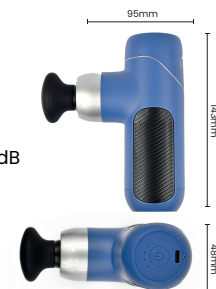

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pieza principal

1. Cabezal de masaje de desmontaje rápido
2. Mango
3. Indicador de nivel
4. Indicador de batería
5. Botón On/off
6. Entrada tipo C

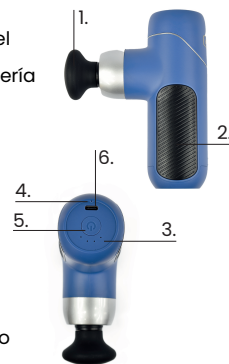

Accesorios

1. Cabezal redondo
2. Cabezal cilíndrico
3. Cabezal plano
4. Cabezal plano Cabezal tipo U
5. Cable USB a C



INDICACIONES DE SEGURIDAD

Precauciones

1. Este dispositivo se usa con cargadores 5V/2A o con algún adaptador de carga rápida.
2. Por favor, cargue la batería completamente antes de usarlo por primera vez.
3. Antes de cargar, confirme que el voltaje del enchufe sea consistente con el voltaje del adaptador.
4. No cambie el cabezal mientras el dispositivo esté andando.
5. No sumerja el dispositivo en agua.
6. No aplique el dispositivo andando en la cabeza, genitales, pecho u otras partes del cuerpo después de una cirugía o alguna recuperación.
7. Por favor, no trate de reemplazar o complementar un tratamiento medico con este dispositivo. Si usted tiene algún dolor en el cuerpo, está pasando por un tratamiento médico o utilizando otros dispositivos médicos; consulte a su doctor antes de usar este dispositivo.
8. En caso de cualquier falla, consulte un técnico antes de desarmarlo usted mismo.

Advertencias

- Ante las siguientes circunstancias o ante algún caso relacionado con su salud, consulte su doctor antes de ocupar este dispositivo
1. Personas embarazadas y personas diabéticas o con alguna complicación como neuropatía o daños en la retina.
 2. Aquellos con un marcapasos implantado, pasado por una cirugía recientemente, con epilepsia o migraña, hernia discal o problemas en la columna.
 3. Aquellos que hayan pasado recientemente por un reemplazo articular, se hayan introducido un dispositivo intrauterino o alguna pieza metálica, u otros problemas relacionados al cuerpo.

Respecto al medio ambiente

Este producto, está hecho con una batería de litio recargable. Cuando sea desechado, no lo junte con el resto de la basura. Asegúrese de manejarlo de manera segura y deséchelo en lugares de residuos peligrosos o centros de reciclaje electrónico.

GUÍA DE USO

Guía de uso

1. Instalación de cabezales

- (1) Antes de instalar los cabezales, apague el dispositivo.
- (2) Seleccione al cabezal que necesite.
- (3) Despacio, inserte el cuadrado convexo de la cabeza del masajeador en la ranura del masajeador.

2. On/Off

- (1) Luego de mantener apretado el botón de On/off por 1.5 segundos, se prenderá el indicador del nivel 1, y el dispositivo comenzará a funcionar.
- (2) Para apagarlo, mantenga apretado el botón de On/Off por 1.5 segundos, y el dispositivo dejará de funcionar.

3. Introducción de funcionamiento

Estado operativo: Cuando el dispositivo este prendido, presiona el botón para cambiar niveles del más bajo al más alto; cuando esté en nivel 4, al presionarlo, cambiará a nivel 1.

4. Descripción de niveles

- (1) Nivel 1: 1,700 rpm, indicado para la estimu-

lación del musculo.

- (2) Nivel 2: 2,200 rpm, indicado para la relajación de la fascia.
- (3) Nivel 3: 2,700 rpm, indicado para la descomposición del ácido láctico.
- (4) Nivel 4: 3,200 rpm, indicado para masajes profundos.

5. Instrucciones de carga

- (1) Cuando la batería esté baja, la luz estará roja.
- (2) Cuando se esté cargando, la luz estará roja.
- (3) Cuando esté completamente cargado, la luz estará verde.

6. Descripción de protección

- (1) Protección de sistema (indicaciones para batería baja): la luz roja parpadeará cuando el voltaje sea mejor a 7.3V mientras el dispositivo esté en uso; cuando sea mejor a 7.0V, se apagará de forma automática.
- (2) Protección bloqueo de corriente: Cuando la corriente llega a su máxima capacidad, el motor dejará de funcionar; después de estar en su estado bloqueado, presione el botón "Function" para funcione de nuevo en el

siguiente nivel.

- (3) Protección de duración de masajes: El dispositivo dejará de funcionar automáticamente después de 15 minutos funcionando continuamente. Si necesita usarlo por más tiempo, apáguelo y vuelva a prenderlo.



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!
Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si posee más dudas contactar a ayuda@lhotse.cl

