


LA*FORÊTT

LYS

LIMPIADOR FACIAL
ULTRASÓNICO

MANUAL DE USUARIO

LF-00S1

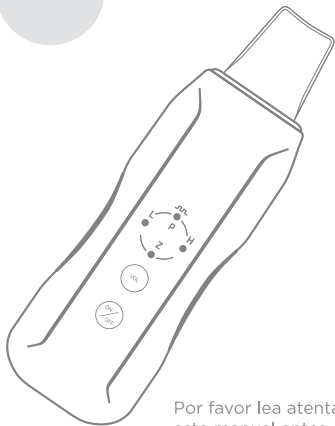

Por favor lea atentamente
este manual antes de usar

CONTENIDO

Nuestro Producto	1
Eficacia de Terapia Física	1
Modo de Aplicación	2
Precauciones	6
Parámetros Técnicos	6

NUESTRO PRODUCTO

Este es un Limpiador Facial de Anión que funciona con rotación de 28.000 veces por segundo. Su gran eficacia ayuda a atenuar y eliminar poros, puntos negros, impurezas y acné. El aplicador con iones negativos funciona bajo el principio de vibración ultrasónica, utilizando la onda vibratoria para masajear y generar calor en la piel. El efecto de este limpiador sobre los tejidos subcutáneos generará una serie de reacciones bioquímicas, tanto en la generación y absorción de vitaminas y minerales, como en la distribución de iones en la piel.



EFICACIA DE TERAPIA FÍSICA



El envejecimiento de las células de la epidermis desacelera el metabolismo y aumenta los efectos de los rayos UV, con lo que la melanina se debilita provocando la aparición de puntos negros y pigmentación. Sin embargo, la vibración ultrasónica de este producto penetrará profundamente en los poros, removiendo impurezas, reactivando el funcionamiento celular, acelerando la circulación sanguínea y mejorando el metabolismo de la piel.


1. Penetra efectivamente en los poros, limpiando la piel profundamente.
- 2.El adaptador en forma de espátula penetrará profundamente en la piel, removiendo impurezas y signos de envejecimiento.

3. La vibración ultrasónica atomiza y aclara los productos de belleza, facilitando su absorción y asimilación en la piel.
4. Función especial para remover residuos de cosméticos y transpiración en los poros.
5. Descompone melanina y disipa impurezas.
6. Elimina arrugas y relaja la piel.

MODO DE APLICACIÓN

1. **ON / OFF:** Botón de encendido
2. **VOL:** selección de funciones
3. **P:** luz indicadora de encendido
4. **L:** luz indicadora de funcionamiento débil
5.  : luz indicadora de pulso
6. **H:** luz indicadora de funcionamiento intenso
7. **Z:** luz de ión negativo
8. Para comenzar, abra la cubierta protectora del cabezal de espátula
9. Encienda el aparato (ON). La luz "P" se encenderá.
10. La luz "L" se encenderá en la posición por defecto
11. Presione **VOL** para seleccionar la función: funcionamiento débil, pulso e intenso (3 niveles).
 - 1) **L** para funcionamiento ultrasónico débil
 - 2)  para funcionamiento con pulso ultrasónico.
 - 3) **H** para funcionamiento ultrasónico intenso
 - 4) **Z** para funcionamiento ultrasónico + anión


12. Alerta de bajo voltaje: "DU" "DU" "DU" "DU" parpadeante. Luego de 5 alarmas, se apagará.
13. Temporizador de 10 minutos. Se apagará luego de 2 alarmas "DU" "DU".
14. Las luces P, L y H parpadearán juntas cuando la carga haya finalizado.
15. Las luces L, , H y Z parpadearán circularmente durante la carga.
16. Las luces L, , H y Z parpadearán cuando la carga esté completa.

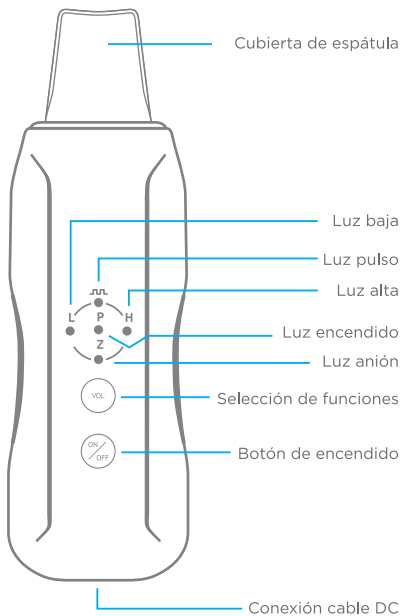



Ultrasonico 28.000

Compuesto por 2 piezas que se intercalan, produce hasta 28.000 ondas de belleza ultrasónica, ayudando a resolver efectivamente los problemas de su piel.

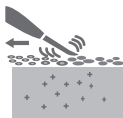

Absorción de nutrientes

Con su capacidad ultrasónica de 28.000 vibraciones por segundo, promueve la absorción y producción de colágeno y otros nutrientes, los descompone facilitando su absorción y mejorando la permeabilidad de productos cosméticos.



Descomposición de impurezas

La gran capacidad vibratoria facilita la descomposición de impurezas y suciedad. Las ondas ultrasónicas otorgan calor y masajean, acelerando la circulación sanguínea y favoreciendo la desintoxicación de la piel.



Detector de acero

El detector de acero en forma de espada ha sido fabricado con material anti-corrosivo y resistente a altas temperaturas. Posee gran estabilidad, durabilidad y otorga un uso seguro y duradero.

PRECAUCIONES

1. Antes o después de cada uso, limpie el cabezal con alcohol.
2. Evite golpear o dejar caer el cabezal.
3. El cabezal no debe permanecer inmóvil sobre la piel durante más de 3 segundos. Manténgalo en constante movimiento.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Adaptador eléctrico

Entrada: 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz

Salida: 5.5 V DC 500 mA

Voltaje de carga: 5.5 V / 500 mA

Batería: 3.7V / 1000 mA^H

Corriente máxima: 1,2 W + 10%

Tiempo de carga: 3 horas

Tiempo de uso continuo: 2 horas

Material: ABS

Dimensiones: 170 x 52 x 20mm (largo x ancho x alto)

Peso: 125gr

Para más información visita nuestra página web **www.laforett.com** y síguenos en nuestras redes sociales.

