

LA * FORETT

REVEAL YOURSELF



TERAPIA
GALVÁNICA



TERAPIA DE
RADIOFRECUENCIA



ELECTRO ESTIMULACIÓN
MUSCULAR (EMS)




MICROVIBRACIÓN
(MASAJES)



TERAPIA DE
FOTONES



CRIOTERAPIA
(TERAPIA DE FRIO)

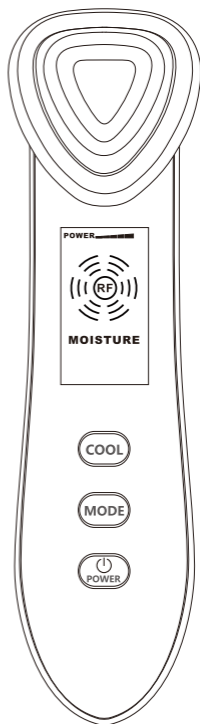

Lena

REJUVENECEDOR FACIAL 6 EN 1

LF-0155

Por favor lea atentamente
este manual antes de usar

Estimado usuario:

Gracias por adquirir nuestro producto. Para asegurar un uso seguro y apropiado, por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el aparato. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Este manual aplica solo para el producto LENA, Rejuvenecedor Facial de La-Forêt. La compañía se reserva el derecho de interpretación final de estas instrucciones. Todos los contenidos de este manual son de referencia. Si el producto presentara alguna falla, por favor contacte a su servicio de post-venta.

Notas especiales:

1. El contenido de todo este manual ha sido revisado exhaustivamente. Si usted encuentra algún error o presenta dudas, por favor hágaselas saber a la compañía.
2. El producto puede ser modificado sin previo aviso.



24 meses de Garantía



@laforett_chile



www.laforett.com



contacto@laforett.com

▼ CAPÍTULO 1: Precauciones para un uso seguro

Antes de usar, por favor lea todas las indicaciones de seguridad para asegurar un uso correcto. Estas instrucciones le guiarán para un uso correcto del producto, al seguir las evitará daños personales o a su propiedad. Respete las indicaciones de seguridad que se entregan.

Prohibiciones

1. Las siguientes personas no deben usar este aparato:

- Niños
- Mujeres en período de menstruación, embarazo o lactancia
- Personas que sufran de alergia
- Personas que sufran de lesiones traumáticas, eczema, inflamación en la piel, enfermedades a la piel, dermatitis atópica o alergias en la piel
- Personas con condiciones mentales alteradas
- Personas con marcapasos u otros dispositivos
- Personas con fiebre u otras enfermedades físicas, enfermedades al corazón, enfermedades malignas, tuberculosis, problemas de circulación sanguínea u otros síntomas.

2. No utilice sobre ojos o párpados (excepto en modo FRIO / COOL), heridas, cuello, zona del corazón.

3. No utilice diluyentes, bencina u otros solventes para limpiar el producto.

4. No sumerja en el agua u otros líquidos.

5. Mantenga alejado del fuego o fuentes de calor. No exponga a altas temperaturas.

6. Evite caídas o golpes del producto. No utilice si el aparato presentara daños.

7. No intente reparar, retirar partes o transformar el aparato usted mismo. En caso de necesitar mantención, por favor diríjase a un servicio técnico especializado o contacte a su distribuidor.

8. No comparta este aparato con otras personas.

9. Mantenga el producto alejado de fuentes electromagnéticas (tal como horno por inducción)

10. No utilice accesorios no fabricados o recomendados por el fabricante.

11. Evite dañar el cable de carga y sus partes. No tire o tuerza el cable. No envuelva el cable alrededor del aparato. Si el cable presenta daños o sobrecalentamiento, por favor detenga su uso inmediatamente. No seguir estas indicaciones podría ocasionar un corto circuito, incendio u otro tipo de daños.

12. Por favor no toque el aparato con sus manos húmedas o mojadas ya que podría ocasionar un corto circuito o incendio.



¡Atención!

1. Antes y después de cada uso, limpie el cabezal con un paño limpio, suave y levemente humedecido con agua.

2. Antes de usar, asegúrese de que el aparato no presente daños. No utilice si se observara alguno.

3. Detenga el uso y consulte a su médico especialista si usted presentara algún tipo de reacción durante el uso.

4. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

5. El uso excesivo de este aparato podría dañar su piel.



6. Durante el uso, mueva constantemente el aparato, no lo posicione durante más de 3 segundos sobre un mismo lugar. En cuanto sienta algo de calor, mueva el aparato hacia otra zona.

7. Cada piel reacciona de forma diferente con la Radio Frecuencia (RF).

8. El modo LED puede molestar sus ojos. Se recomienda usar este modo con ojos cerrados, y mantener el aparato a una distancia de 5cm de los ojos. No mire directamente a la luz LED ya que generará molestia en sus ojos.



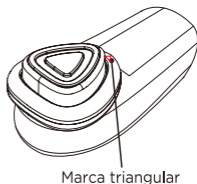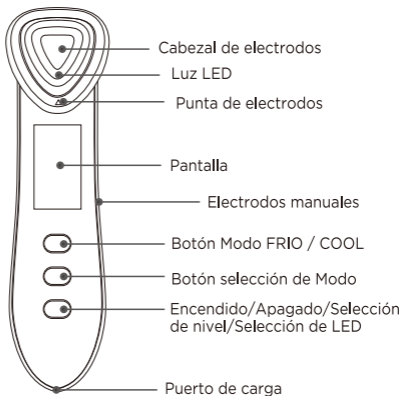

9. Después de un largo uso, es posible que la cubierta se caliente. Si esto sucede, por favor detenga el uso y espere al menos 30 minutos hasta que se enfríe.


▼ CAPÍTULO 2: Nombre de las partes y componentes



▼ CAPÍTULO 3: Modo de aplicación


1. INTERFAZ Y BOTÓN DE PANTALLA

- Mantenga presionado  durante 3 segundos. El producto se encenderá y la pantalla se iluminará. Presione  y escoja el nivel (presione  para escoger función entre **CLEAN** (Limpieza)/ **MOISTURE** (Humectación) / **EMS** (Electro Estimulación Muscular) y uno de los cinco niveles. Presione  para cambiar el color de la luz LED. La luz LED no funciona en el modo **COOL** (Frío).

- Una vez encendido, el sistema se inicia automáticamente en modo **CLEAN** (Limpieza). Presione  y cambie entre modos **MOISTURE** (Humectación) - **EMS** (Electro Estimulación Muscular) - **LED - CLEAN** (Limpieza).

- Presione  y active el modo **COOL** (Frío) mientras está en el modo **CLEAN - MOISTURE - EMS** o **LED**.

- Presione **(MODE)** y escoja otro modo mientras está en modo **COOL** (Frío).
- Presione **(POWER)** durante 3 segundos para apagar el aparato.
- La luz de carga no se enciende durante el funcionamiento normal. Solo se enciende cuando el nivel de batería es bajo.

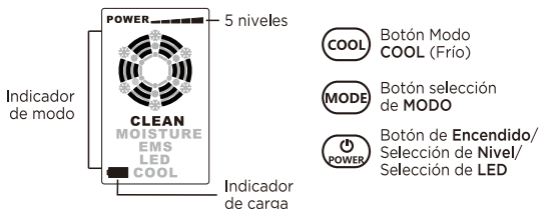

2. USO DE MODOS

BOTÓN MODE (Modo) / BOTÓN COOL (Frío)





- Después de iniciarse, el sistema activará automáticamente en modo **CLEAN**. Presione **(MODE)** para cambiar el modo en secuencia **MOISTURE - EMS - LED - CLEAN**. Presione **(COOL)** para activar el modo **COOL**. En modo **COOL**, presione **(POWER)** para cambiar el modo en secuencia **CLEAN - MOISTURE - EMS - LED**.

- La función de **Radio Frecuencia (RF)** funciona cuando el signo **(RF)** se ilumina en pantalla durante los modos **CLEAN - MOISTURE - EMS - LED**. Cuando la función no se ilumina en pantalla, entonces no está funcionando.






MODE	CLEAN	MOISTURE	EMS	LED	COOL
FUNCIÓN	RF/ Cación/ Vibración	RF/ Anión/ Vibración	RF/ EMS	RF / Luz LED de 3 colores Roja/Verde /Azul	Enfriar
PANTALLA					



INDICADOR DE NIVEL

PRIMER NIVEL	SEGUNDO NIVEL	TERCER NIVEL	CUARTO NIVEL	QUINTO NIVEL

- Presione  y escoja el nivel de ion en modo **CLEAN** (Limpieza) o **MOISTURE** (Humedectación).
- Presione  y escoja el nivel **EMS** en modo **EMS**.
- Presione  y escoja el color de luz **LED** (Roja / Verde / Azul) en modo **LED**.
- Escoja en nivel de su preferencia entre los 5 disponibles (presione  cada vez para cambiar en secuencia **PRIMER NIVEL - SEGUNDO NIVEL - TERCER NIVEL - CUARTO NIVEL - QUINTO NIVEL**)
- El nivel de **RF** no se puede cambiar.
- Durante el primer uso, asegúrese de usar el **PRIMER NIVEL** para que su piel se adapte al producto.

INDICADOR DE MODO

NOMBRE DE MODO	FUNCIÓN	INDICADOR EN PANTALLA
CLEAN	RF Limpieza	
MOISTURE	RF Humedectación	
EMS	RF Electro Estimulación Muscular	
LED	RF LED	
COOL	ENFRIAR	

- Cuando se realiza la terapia de nutrición en modo **CLEAN/MOISTURE/EMS** o **LED**, la **RF** comienza a funcionar cuando se emite un "bip" y el símbolo  se enciende en pantalla.
- Al oír el "bip", la función ion / EMS se activa y el símbolo  desaparece de la pantalla.

MODO ESPERA INTELIGENTE

- Después de la función **CLEAN/MOISTURE/EMS**, el aparato activa el modo espera inteligente después de 2 minutos sin actividad. Una luz se encenderá en pantalla y mostrará el modo espera. Presione  para activar el siguiente modo. Luego de 2 minutos sin uso, el aparato emitirá 2 "bip" y luego se apagará.
- Después del modo **LED / COOL**, el modo espera no se activará, pero el aparato se apagará automáticamente luego de escuchar 2 "bip".

3. DESCRIPCIÓN DE MODOS


MODO	FUNCIÓN	CARACTERÍSTICAS	ALMOHADILLA DE ALGODÓN	PRODUCTOS DE BELLEZA RECOMENDADOS	AJUSTE DE INTENSIDAD
CLEAN	RF/ Cación/ Vibración	Efecto cálido en las capas profundas de la piel, absorbe y elimina la suciedad que no es removida limpiando de forma normal el rostro. Conduce a una piel más pura y relajada.	Necesita	Tónico facial	Ion 5 intensidades RF (no)
MOISTURE	RF/ Anión/ Vibración	Efecto cálido en las capas profundas de la piel, los nutrientes penetran profundamente en su piel, nutriéndola y dejándola más humectada y reluciente.	No necesita	Máscara	Ion 5 intensidades RF (no)
EMS	RF/ EMS	Efecto cálido en las capas profundas de la piel, masajea sus músculos, la piel se torna más flexible. Puede ser utilizado en rostro, cuello y hombros.	Necesita	Tónico o gel facial	EMS 5 intensidades RF (no)
LED	RF / Luz LED de 3 colores Roja/ Verde /Azul	Efecto cálido en las capas profundas de la piel, la luz LED ayuda a nutrir, humectar y relucir su piel. Luz roja: promueve la proliferación de colágeno, Verde: efecto calmante sobre la piel, Azul: anti bacterial, disminuye el acné.	No necesita	Tónico o gel facial	Ninguna
COOL	Enfriar	Refresque su piel, atenúa poros, dejando su piel más humectada y tonificada.	No necesita	No se recomienda	Ninguna

¡Atención!




- Durante el uso, asegúrese de mantener el aparato en constante movimiento sobre su piel. Solo en modo **COOL** (Frío), puede mantenerlo durante algunos segundos más sobre un mismo lugar.
- El movimiento constante del aparato significa que no debe ponerlo sobre un mismo lugar durante más de 3 segundos, o bien hasta que comience a sentir algo de calor, lo que ocurra primero.
- Por favor utilice solo productos cosméticos en base a agua. No utilice productos solubles en aceite ni cremas exfoliantes.
- La **RF** le hará sentir diferentes temperaturas dependiendo de su piel.
- El modo **LED** puede molestar sus ojos. Asegúrese de no acercar la luz a más de 5 cm de sus ojos y nunca mire directamente a la luz LED.
- Después de utilizar el modo FRÍO durante un largo período, la cubierta del aparato se calentará. Por favor apague el aparato y espere al menos 30 minutos o hasta que se sienta nuevamente frío. Solo entonces podrá encenderlo y utilizarlo nuevamente.

4. USO DE LA ALMOHADILLA DE ALGODÓN

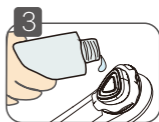- Retire el anillo sujetador que se encuentra en el cabezal del aparato.
- Coloque la almohadilla de algodón sobre el cabezal de electrodo y luego instale el anillo sujetador. Nunca utilice la almohadilla de algodón para más de una sesión. Al finalizar cada sesión, elimine la almohadilla. Utilice solo almohadillas de algodón delgadas, y solo una por vez (de lo contrario, el anillo sujetador no quedará firme).
- Coloque el producto cosmético de su elección sobre la almohadilla, solo la cantidad suficiente para que sea absorbida por la almohadilla. Mucho producto podría dañar el aparato ya que éste no es resistente al agua. En caso de haber aplicado mucho líquido, por favor séquelo con un paño suave.



5. FORMAS DE CUIDAR SU PIEL

- Lave y limpie su rostro, elimine grasa e impurezas para que su piel luzca renovada y fresca.
- Cuando lo necesite, utilice el aparato con una almohadilla de algodón, y coloque en ella el tónico o gel de su preferencia.
- Mantenga presionado  para encender. Presione  para escoger el modo. Luego presione  para escoger el nivel de intensidad deseado.
- Durante el uso, su mano debe estar en constante contacto con la zona de electrodos de mano.
- Coloque el cabezal de electrodo en contacto con su rostro.
- Después de la sesión, aplique crema facial o algún otro producto cosmético de su elección.
- Retire la almohadilla de algodón (si la utilizó), limpie el cabezal de electrodo, anillo sujetador y resto del aparato.

6. OPCIÓN DE MASAJE

Modo CLEAN/MOISTURE/EMS/LED

- La velocidad de movimiento del aparato sobre su piel para estos modos debe ser de unos 2cm / segundo.
- Si siente demasiado calor sobre su piel, entonces mueva el aparato más rápidamente.
- El cabezal de electrodos debe estar en constante contacto y movimiento sobre su piel. No utilice ninguno de estos modos sobre párpados o zona inmediatamente circundante con sus ojos.

Modo CLEAN/MOISTURE/EMS/LED


- Mueva el aparato como ilustra la figura. Cuando utilice el modo LED, evite acercarse al electrodo a más de 5cm de sus ojos, ya que la luz molestará y podría lastimarlos.



MODO EMS




 Mueva en dirección de las flechas.

 Muestra zonas sobre las que no debe ser utilizado.

 Siga el movimiento de esta flecha.

Utilice repetidamente, siguiendo la secuencia, presionando y moviendo.

MODO COOL

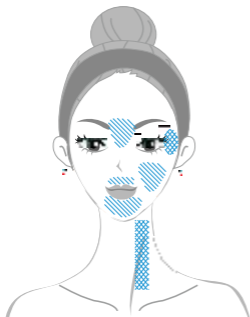

Utilice repetidamente, siguiendo la secuencia, presionando y moviendo.

 Partes compactas

 Partes frescas

Para mantener el aparato limpio, asegúrese de limpiar el cabezal después de cada uso.

▼ CAPÍTULO 4: Instrucciones de carga

Este aparato cuenta con una batería de polímero de litio integrada. Una vez cargada esta batería, usted puede utilizar el aparato sin necesidad de estar conectado a la corriente eléctrica. Para cargarlo de forma adecuada y segura, siga las siguientes instrucciones:

1. Cuando la carga de la batería esté baja, se emitirá un sonido de alerta (3 bip) para indicar que necesita ser recargada a la brevedad. Además, el símbolo de batería baja parpadeará 3 veces y luego el aparato se apagará.
2. Conecte el cable de carga DC 3.5. Un extremo en el conector del aparato, y el otro extremo en la corriente eléctrica. Durante la carga, la luz indicadora parpadeará. Por favor utilice siempre el cargador original.
3. Cuando el aparato esté completamente cargado, la luz indicadora se encenderá de forma permanente. El tiempo total de carga es de unas 2 horas.

Durante la carga



Luz parpadea

Carga completa



Luz encendida
constantemente

Atención: La luz indicadora de carga no se enciende durante el uso del aparato.

▼ CAPÍTULO 5: Parámetros y especificaciones

Energía: DC 9V = 2A

Características de batería: Polímero de litio, 7.4V 400mAh

Potencia: 9W

Material del producto: ABS

Dimensiones: 17 x 4.4 x 5.9 cm aprox.



Peso: 180 gr aprox.

▼ CAPÍTULO 6: Mantenición y cuidados

1. Para eliminar manchas o suciedad, utilice solo un paño suave, humedecido con agua. No utilice agentes limpiadores alcalinos, en base a alcohol ni diluyentes.
2. No exponga el aparato a altas temperaturas. Manténgalo en un lugar seco y ventilado.
3. Si no lo utiliza, el aparato debe ser cargado al menos una vez cada 3 meses.
4. Si no utilizará el aparato durante un período prolongado, manténgalo en un espacio seco y sin filtraciones.
5. Revise el estado del aparato regularmente, incluso si no ha sido utilizado.
6. Si va a desechar el aparato, por favor no lo coloque con la basura común de su hogar. Diríjase a un centro de reciclaje especializado y deséchelo de forma apropiada.

▼ CAPÍTULO 7: Resolución de problemas

En caso de falla o mal funcionamiento, por favor revise las siguientes recomendaciones. En caso que las fallas continúen, póngase en contacto con su servicio de postventa. No intente desarmar ni reparar el aparato usted mismo.

FALLA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Aparato no enciende	No mantuvo presionado el botón 	Presione el botón  durante más de 3 seg.
Aparato no enciende	La carga de la batería no es suficiente.	Cargue la batería por completo
Aparato se calienta	Lo ha utilizado por un tiempo demasiado largo	Apague el aparato y espere al menos 30 min. para que se enfríe