

# LILÛ II

Anticelulítico y Reafirmante




TERAPIA DE  
RADIOFRECUENCIA



TERAPIA DE  
ULTRASONIDO



TERAPIA DE  
FOTONES

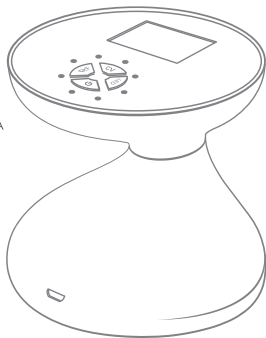

Por favor lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras referencias.



## TABLA DE CONTENIDOS

<b>Descripción del producto</b>	
Estructura del aparato .....	3
Descripción de botones .....	4
Descripción de niveles .....	5
Introducción a funciones y modos .....	5
Función de auto apagado .....	6
Cómo cargar .....	6
<b>Instrucciones para antes de usar</b>	
Probar reacción de la piel .....	7
Instrucciones de uso para cada modo .....	8
Zonas corporales no aptas para el uso .....	9
Cómo utilizar en cada zona corporal .....	9
<b>Instrucciones para después de usar</b>	
Limpieza del aparato .....	11
Mantenimiento del aparato .....	11
Resolución de problemas .....	11
Problemas comunes .....	13
Especificaciones del producto .....	14
Servicio de post venta .....	14
Garantía .....	14

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESTRUCTURA DEL APARATO

Modo RF  
(Radio Frecuencia)

Botón de encendido y apagado  
(ON / OFF)

Puerto de carga USB

Modo CV  
(Cavitación)



Modo LED  
(luz LED roja y azul)

Visualización de Modo


Indicador de nivel de intensidad

Visualización de nivel de batería

Ícono de Modo

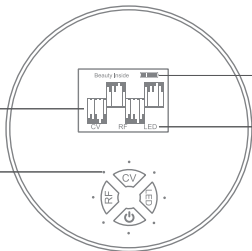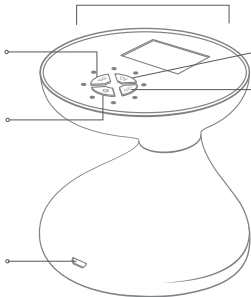

## SUPERFICIE DE ELECTRODOS

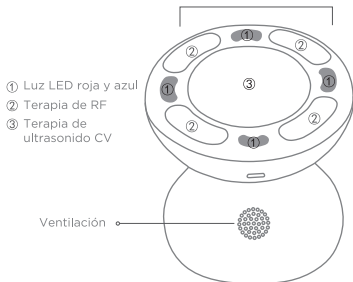


## DESCRIPCIÓN DE BOTONES


Botón	Función	Luces indicadoras
	Encendido Apagado	Luz azul se enciende Luz azul se apaga
	2 niveles	En modo RF, se enciende la luz azul
	2 niveles	En modo CV, se enciende la luz azul
	Modo completo	Modo LED se enciende

## DESCRIPCIÓN DE NIVELES

2 niveles para terapia de RF: presione una vez para nivel 1, presione dos veces para nivel 2 (2 luces se encienden).

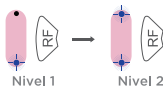

2 niveles para terapia de ultrasonido CV: presione una vez para nivel 1, presione dos veces para nivel 2 (2 luces se encienden).

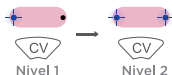

1 nivel para fototerapia LED roja y azul: presione una vez (2 luces se encienden).



Para cada modo, a mayor nivel, mayor intensidad.

## INTRODUCCIÓN A FUNCIONES Y MODOS

El sistema Anticelulítico y Reafirmante LILÛ II incorpora la última tecnología de alta frecuencia BTL, es decir, combina ultrasonido con RF, y fototerapia de luz roja y azul. Ha sido especialmente diseñado para adelgazar, modelar y atenuar líneas.

El sistema utiliza 3 modos principales, y el modo de luz LED puede ser combinado con los otros 2 modos.

## DESCRIPCIÓN DE LOS 3 MODOS

### **Modo de terapia RF:**

Ondas radiales de alta frecuencia que funcionan 6 millones de veces por minuto. Apropriadas para apretar, reducir celulitis y atenuar líneas.

### **Modo ultrasonido CV:**

La terapia de ultrasonido de 1Mhz es comúnmente utilizada en equipos adelgazantes profesionales. La vibración de alta frecuencia provocada por la terapia de ultrasonido, es capaz de remover la celulitis de las capas más internas de la piel, reducir grasa y lograr un efecto adelgazante y modelador corporal.

### **Modo de terapia LED roja y azul:**

Las luces roja y azul son luces frías de alta intensidad. Tienen la capacidad de mejorar la condición de la piel, suavizarla, rejuvenecerla y revitalizarla.

## FUNCIÓN DE AUTO APAGADO

El tiempo de uso por defecto para cada modo es de 5 minutos. El aparato entrará a modo de reposo después de 5 minutos sin uso.

El modo de reposo dura 2 minutos. Después de estos 2 minutos, el equipo se apaga automáticamente.


Esta función de auto apagado permite proteger el sistema y evitar que se sobrecaliente.

## CÓMO CARGAR

Este aparato está equipado con una batería recargable. Antes de usar, cargue la batería completamente. Asegúrese de realizar una carga completa antes del primer uso, así como antes de un largo período sin uso.

Conecte el cable USB en el aparato y luego en la toma de corriente. El ícono de la batería se activará y mostrará carga completa cuando ésta haya finalizado. Desconecte el cable después de cada carga.

## ILUSTRACIÓN DEL MODO DE CARGA

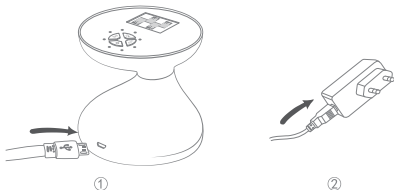

### ATENCIÓN

- No cargue en ambientes húmedos.
- Si la luz de carga no se enciende, desconecte el cable de carga y vuelva a intentarlo.
- Antes de cargar, retire cualquier residuo de crema, gel o suciedad del aparato.

## PROBAR REACCIÓN DE LA PIEL

Se recomienda realizar una prueba sobre su piel antes de utilizar por primera vez.

1. Limpie y seque el interior de su brazo (ver imagen).
2. Aplique un gel o loción sobre la piel de su brazo, active el modo RF o modo ultrasonido CV del aparato y utilícelo durante unos 3 minutos. Deslice suavemente el aparato sobre su piel. Si no observa ninguna reacción desfavorable después de 24 horas, entonces es seguro de utilizar sobre su piel. Nota: durante la prueba, utilice en el nivel 1.










- Suspenda la prueba si observa sarpullido o irritación sobre la piel.
- Detenga el uso si siente alguna anomalía sobre su piel.

## INSTRUCCIONES DE USO PARA CADA MODO

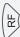Antes de usar, aplique gel, crema o esencia de forma pareja en su piel. Durante el tratamiento, mantenga su piel hidratada para asegurar un efectivo tratamiento.

Botón	Función	Zona de tratamiento	Frecuencia
	Reductor de celulitis	Cualquier zona corporal que necesite este tratamiento	2 a 3 veces cada zona. Aprox. 10 minutos por zona.
	Adelgazante corporal	Cualquier zona corporal que necesite este tratamiento	
	Modelador y suavizante corporal	Cualquier zona corporal o facial que necesite este tratamiento	



Durante el tratamiento con RF o CV, no mantenga el aparato sobre una misma zona por un período prolongado. Hacerlo podría ocasionar molestias o daños. El uso en nivel alto puede dañar su piel. Asegúrese de deslizar en círculos constantemente el aparato sobre su piel.

## ⊗ ZONAS CORPORALES NO APTAS PARA EL USO

Las siguientes zonas o partes del cuerpo no son aptas para el uso de este aparato: zona oral, zonas privadas, mucosas, cuello, manzana de Adán, sobre o cerca del corazón, dedos, muñeca, tobillo (o cualquier otra zona con piel delgada). Además, no aplique sobre zonas irritadas, con cirugía, afiebradas o inflamadas.

Los modos RF y CV no deben ser utilizados sobre el rostro ni cabeza.

### Posición del aparato sobre la piel

Asegúrese de que la superficie de electrodos esté en completo y constante contacto con la piel, según muestra la ilustración de la izquierda:



## CÓMO UTILIZAR EN CADA ZONA CORPORAL

Asegúrese de que el aparato esté en constante contacto con la piel durante el tratamiento.




: Zonas para terapia RF



: Dirección de movimiento


### Brazos (5 min. en cada uno)

1. Coloque la palma de las manos hacia arriba y estire el brazo.
2. Deslice el aparato desde los codos hacia la axila.
3. Realice el mismo proceso para el otro brazo.

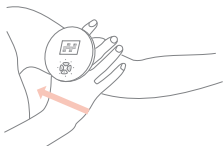



### Muslos (5 min. en cada uno)

1. En la parte interior del muslo, mueva el aparato desde las rodillas hacia la parte superior de la pierna.
2. En la parte exterior del muslo, mueva el aparato desde las rodillas hacia la parte superior de la pierna.
3. Realice el mismo proceso para el otro muslo.

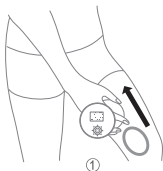

### Abdomen (paso 1. durante 5 min., pasos 2 + 3 durante 5 min.)

1. Mueva el aparato desde los extremos del abdomen hacia el interior, en forma de Z (imagen ②). Deslice lentamente desde la cintura hacia la zona del ombligo.
2. Deslice desde la parte superior del abdomen hacia abajo.
3. Realice movimientos circulares alrededor del ombligo.

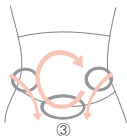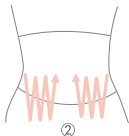

### Nalgas (paso 1. durante 5 min., pasos 2 + 3 durante 5 min.)

1. Deslice desde la parte interior de las nalgas hacia la parte exterior, en forma de Z (imagen ④)
2. Deslice desde la parte interior hacia la parte exterior.
3. Deslice de arriba hacia abajo, desde el centro hacia afuera.



## LIMPIEZA DEL APARATO

Para evitar mal funcionamiento o fallas en el aparato, limpie la zona de los electrodos después de cada uso. Utilice un paño suave.

Asegúrese de apagar el aparato antes de limpiar. Desconecte de la corriente eléctrica. No limpie mientras se está cargando. Puede utilizar una esponja o paño suaves. Si estuviera muy sucio, puede agregar una pequeña cantidad de jabón neutro para limpiar el aparato, y un poco de alcohol para limpiar la superficie de los electrodos.

No utilice limpiadores alcalinos, diluyentes, gasolina ni acetona.

## MANTENCIÓN DEL APARATO

- Si no va a utilizar por un tiempo prolongado, limpie el aparato antes de guardarlo.
- Apague el aparato y desconéctelo de la corriente cuando no lo utilice.
- No exponga a ambientes demasiado cálidos ni húmedos. No exponga a la luz directa del sol.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Solución
El aparato no enciende	→ No presionó el botón de encendido	→ Presione el botón de encendido
	→ La batería está agotada	→ Cargue la batería y luego utilícelo
El aparato funciona solo durante unos pocos minutos	→ La carga de la batería está baja	→ Cargue la batería y luego utilícelo
	→ Tiempo de auto apagado previamente configurado	→ Encienda nuevamente el aparato
No carga	→ El cable USB no está bien conectado	→ Revise y corrija las conexiones del cable USB
	→ La batería se encuentra completamente cargada	→ Cuando la batería está completamente cargada, el ícono de batería estará lleno

No siento la terapia de RF	→	La zona de tratamiento está muy seca o no ha aplicado producto humectante	→	Aplique un producto humectante antes de realizar el tratamiento
	→	El nivel es muy bajo	→	Ajuste un nivel más alto
	→	Está realizando movimientos muy rápidos	→	Mueva el aparato más lentamente, a unos 2 – 5 cm por seg.
	→	La superficie de electrodos no se encuentra en completo contacto con la piel	→	Corrija la posición del aparato, asegurándose que los electrodos estén en completo contacto con la piel
La terapia RF se siente muy fuerte	→	Ha dejado los electrodos mucho tiempo en una misma zona	→	Mueva el aparato constantemente, a unos 2 – 5 cm por seg.
	→	La superficie de electrodos no se encuentra en completo contacto con la piel	→	Corrija la posición del aparato, asegurándose que los electrodos estén en completo contacto con la piel
	→	El nivel es muy alto	→	Ajuste un nivel más bajo
La vibración de ultrasonido no se siente	→	Es normal que la vibración de ultrasonido no sea percibida		
El aparato suena durante el uso	→	Es normal que la vibración del ultrasonido genere algo de ruido		

## PROBLEMAS COMUNES

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
¿Cuál es el mejor momento para utilizarlo?	Se recomienda usar después del baño, mientras su piel aún está tibia.
¿Pueden utilizarlo personas con piel sensible?	Por favor lea la sección "Probar reacción de la piel". Si no observa ninguna reacción, entonces puede utilizarlo.
¿Qué tipo de lociones debo aplicar en la piel?	Cualquier tipo de crema, esencia o gel.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: LF-1705

Corriente: DC 5V, 1A

Dimensiones: 85.8mm (diámetro) x 85mm (alto)

Peso neto: 270 gr aprox (solo el aparato)

Accesorios incluidos: aparato principal, cable USB, manual del usuario

## SERVICIO DE POST VENTA

Estimado cliente: muchas gracias por adquirir nuestro producto. Esperamos que disfrute su uso y beneficios. Si tiene dudas o dificultades en el uso, por favor contacte a su vendedor.

## GARANTÍA

Este producto posee garantía de 2 años desde la fecha de compra.



[www.laforett.com](http://www.laforett.com)

