

LA•FORÊTT
BEAUTY & HEALTH



Para más información visita nuestra página web
www.laforett.com y síguenos en nuestras redes
sociales.



LA•FORÊTT
BEAUTY & HEALTH

Lara

ANTIAGE ROLLER



TECNOLOGÍA DE
MICROCORRIENTE




REAFIRMANTE
DE LA PIEL



TECNOLOGÍA
ECOLÓGICA




MASAJE FACIAL
& CORPORAL

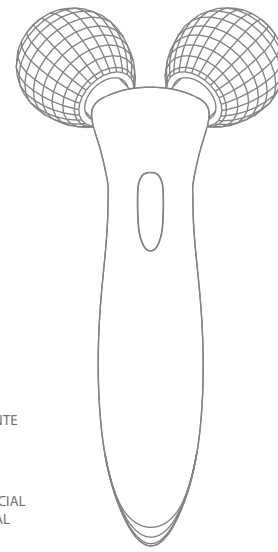

MANUAL DE USUARIO LF-2130

Por favor lea atentamente
este manual antes de usar

▼ Detalle de las partes

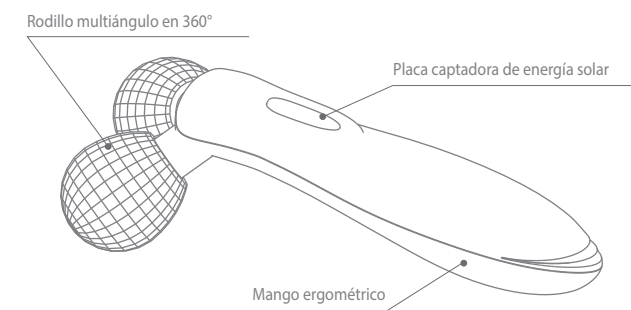

▼ Principios del producto

- Se dice que el cuerpo humano posee corriente eléctrica natural, y que ésta cambia de forma irregular debido al estrés y envejecimiento. Como resultado, la piel envejece, pierde firmeza, aparecen manchas, etc.
- Este masajeador absorbe la energía del sol y la transforma en energía cinética que luego es utilizada para ponerse en funcionamiento. Al mismo tiempo, libera iones de la misma longitud de onda de la corriente eléctrica, haciendo más eficiente su funcionamiento.

▼ Especificaciones del producto

Modelo	LF-2130
Nombre	Masaje Lifting Facial & Corporal
Dimensiones	165 x 82 x 61 mm aprox.
Peso	170 gr aprox.
Material	ABS, metal
Accesorios	Bolsa protectora, manual del usuario


▼ Descripción del producto

El masajeador manual 3D, muy popular en Japón, posee un diseño único en forma de Y, rodillos separados e incrustados en una argolla dorada, logrando que el ángulo de masaje otorgue mayor sensibilidad, sintiéndose como un masaje de aire. Utilícelo para masajear su rostro y cuerpo. Podrá sentir el aumento en la circulación sanguínea y podrá notar cómo su piel recobra vitalidad y elasticidad, retrasando el envejecimiento de su piel. Además de los beneficios en su rostro, este masajeador le ayudará a relajar sus músculos y mente, eliminar fatiga, mejorar el aspecto de las manchas, piel seca y otras condiciones.

2

▼ Instrucciones de uso

- Utilice realizando movimientos de los rodillos hacia adelante y hacia atrás, siempre en contacto con la piel.
- Después de utilizar, es posible que note enrojecimiento en su piel. Esto es normal y su piel volverá a su color normal luego de unos minutos.
- Asegúrese de utilizar el masajeador a una intensidad apropiada, ya que mucha fuerza podría dañar su piel.
- El tiempo de cada sesión dependerá de la condición de su piel.
- Para obtener mejores resultados, utilice diariamente por 10 minutos en conjunto a otros productos de cuidado facial.

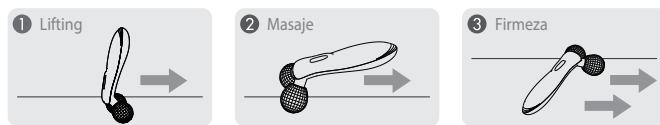


▼ Cuidado Facial



3

▼ Cuidado corporal

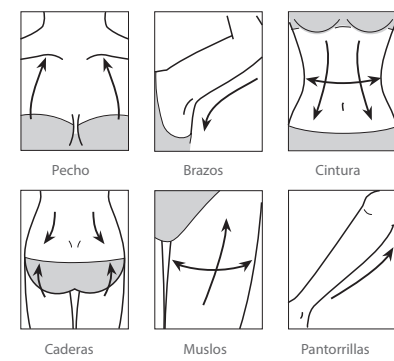

▼ Precauciones

- No almacene en espacios húmedos y con polvo ya que podrían dañar el producto.
- No acerque al fuego.
- Antes y después de utilizar, limpie el aparato con un paño seco.
- Ya que este es un instrumento de precisión, no lo golpee ni deje caer.
- No lo utilice sobre la ropa ya que podría dañar las telas.
- No intente desarmar ni modificar el producto.
- No utilice este producto para otros fines distintos a los indicados.
- Almacene en un lugar seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Utilice con precaución si es una persona alérgica.

4

▼ Protección y garantía

- Usted podrá devolver este producto hasta 3 meses después de la fecha de compra en caso que no haya quedado satisfecho con él.
- Para hacer válida la devolución, está deberá hacerse con todo el empaque y accesorios del producto.
- El usuario deberá cubrir los costos de despacho y entrega en caso de devolución del producto.
- Usted tendrá 3 meses para cambiar el producto si este presentara fallas de fabricación.
- Para hacer válida la devolución, está deberá hacerse con todo el empaque y accesorios del producto.
- Después de dos recambios de producto consecutivos, si el tercer producto presentara fallas, entonces el cliente podrá solicitar la devolución de su dinero.
- La empresa se hará responsable por la calidad del producto durante 2 años, periodo durante el cual usted podrá solicitar repuestos y reparación sin costo para usted. El cliente deberá cubrir los costos de despacho y entrega.
- La garantía quedará inválida en las siguientes circunstancias:

- Fallas ocasionadas por el usuario que ha intentado desarmar o modificar el producto.
- Caidas accidentales del producto.
- Fallas ocasionadas por desastres naturales.
- Fecha de compra superior a 2 años.
- Desgaste natural del aparato debido al uso.
- Boleta de compra adulterada o irreconocible.

5

24 meses de Garantía
@laforett_chile
www.laforett.com
contacto@laforett.com