


LA\*FORÊTT

# TESSA

REJUVENECEDOR FACIAL


**MANUAL DE USUARIO**

LF-9901

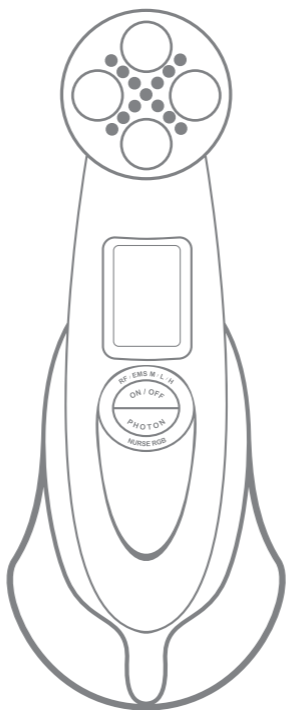

Por favor lea atentamente este manual antes de usar

## EL PRODUCTO

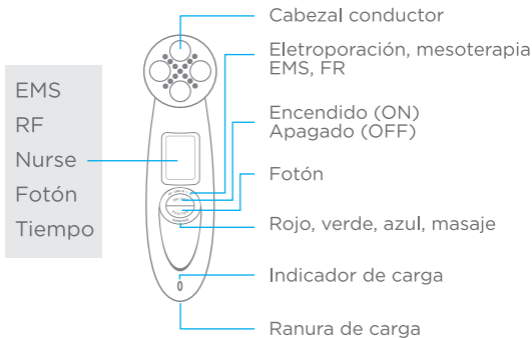

Aparato x 1 unidad




Adaptador x 1 unidad





Soporte x 1 unidad

## FOTÓN

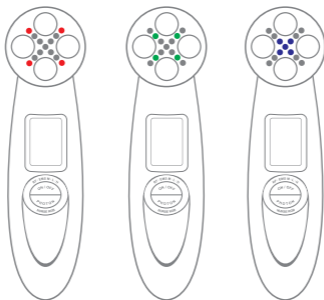

**Importante:** Por favor no mire directamente al fotón cuando la luz esté encendida. Hacerlo podría dañar su vista.

Este producto está equipado con una batería de li-ion. La luz LED se encenderá en rojo durante la carga y cambiará a verde cuando la carga esté completa.

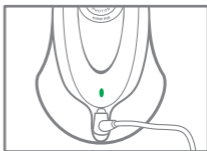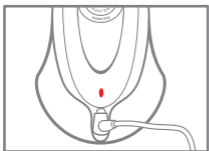

Funciones del fotón para rejuvenecer la piel:

**Luz roja:** con una amplitud de onda de 630nm, aclara y disminuye manchas, empareja el tono de la piel y atenúa marcas de expresión. Repara piel dañada, disminuye arrugas y poros, y multiplica la producción de colágeno en la piel.

**Luz verde:** con una amplitud de onda de 525nm, neutraliza, balancea y calma la piel. Efectivo para tratar piel estresada, produce un drenaje linfático y ayuda a eliminar edemas o inflamación.


**Luz azul:** con una amplitud de onda de 415nm, disminuye la inflamación, mata bacterias y disminuye bacterias que causan el acné, atenúa cicatrices, etc.

## EL CUERPO

Piernas (frente) - 5 min.

Piernas (atrás) - 5 min.


Cintura - 5 min.

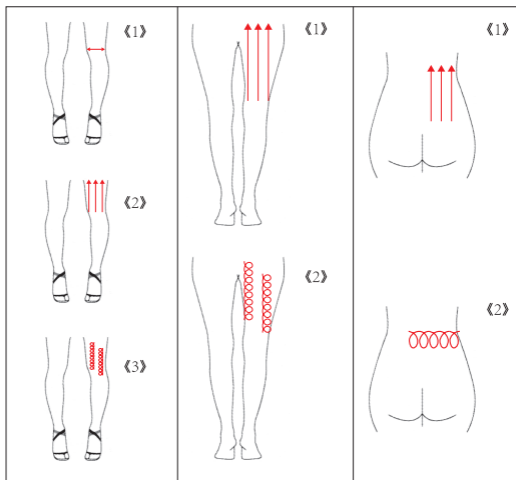

Brazos - 5 minutos

Caderas - 5 minutos

Abdomen - 5 minutos

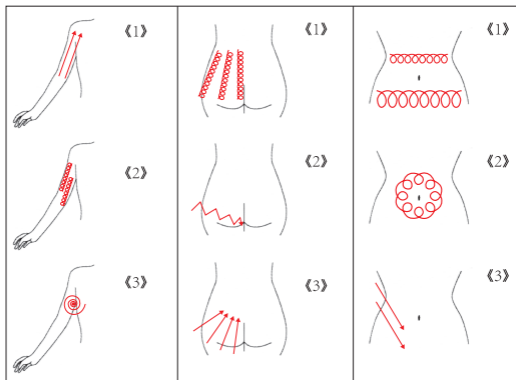

**Importante:** lea detenidamente las siguientes instrucciones y sígalas durante el uso de este producto. No hacerlo podría causarle serios daños a su cuerpo.

## Peligro

No utilice este aparato en conjunto con los siguientes dispositivos. Además, retire todas las joyas o accesorios de su cuerpo antes de comenzar un tratamiento con este aparato.

1. Instrumento médico eléctrico implantado.
2. Corazón o pulmón artificial.
3. Electrocardiógrafo.
4. Cualquier dispositivo metálico implantado en su cuerpo.

## Advertencia

No intente reparar, desarmar o modificar este aparato. Hacerlo podría ocasionar un incendio o daños físicos.

Por favor deje de utilizar si el aparato comienza a emitir sonidos inusuales. Lleve a un servicio técnico especializado para su reparación.

Tenga cuidado con el manejo del cable de carga. Un mal uso puede ocasionar corto circuito, descarga eléctrica, etc.

Por favor utilice este aparato solo para el uso indicado y según instruye este manual.

Las siguientes personas no deben utilizar este aparato:

1. Personas con enfermedades cardíacas, corazón o pulmón artificial, o con marcapasos.
2. Personas con implantes metálicos.
3. Personas con cáncer, en especial cáncer a la piel.
4. Personas hipertensas, con fiebre o enfermas.
5. Personas con enfermedades a la piel o insoladas por el sol.
6. Personas que se encuentran en tratamiento médico.
7. Personas embarazadas o en período de lactancia.
8. Personas con enfermedad de piel sensible.

## Especificaciones

Dispositivo de Belleza Recargable RF y Electroporación

Energía de entrada: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz

Amplitud de onda del fotón: 415nm / 525nm / 630nm



Dimensiones: 17,5 x 4,5 x 4,0 cm

Peso: 100g

Potencia: 3W

## Cara

Tiempo de tratamiento facial: 10 minutos.

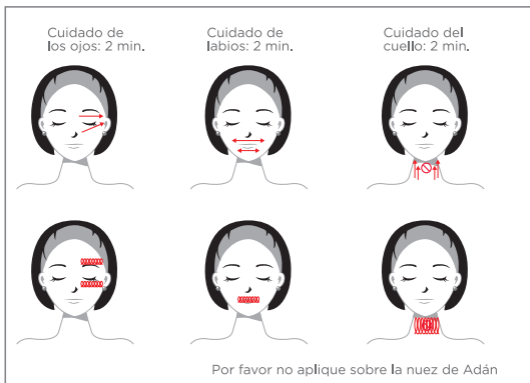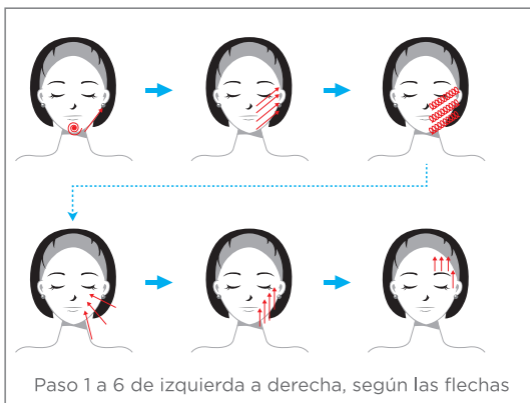

### **Electroporación:**

El tratamiento por electroporación le brindará notables beneficios en la nutrición y aspecto de su piel. La electroporación es un método de belleza que inyecta colágeno y ácido hialurónico a las capas profundas de la piel sin el uso de agujas. Los componentes macromoleculares como el colágeno y el ácido hialurónico, no son fáciles de penetrar profundamente en la piel, pero con esta tecnología de electroporación, esto es posible y sin causar dolor.

### **Mesoterapia:**

La mesoterapia es una combinación de mesoterapia y electroporación muy utilizada en Europa y que no utiliza agujas. Logra alcanzar altos niveles de penetración en la piel. Estudios muestran que el grado de penetración es cerca de 10 veces más que el clásico tratamiento por iones y tiene increíbles efectos en el blanqueamiento y rejuvenecimiento facial.

### **EMS (estimulación muscular eléctrica):**

El sistema EMS estimula la piel suavemente produciendo movimientos musculares secundarios con los que su piel sentirá pequeños pinchazos y elasticidad. Esto estimula la hipodermis para activar las células y el colágeno, con lo que luego se producirá más colágeno y su piel quedará más firme, con más fuerza y más elástica. Este tratamiento atenúa arrugas y marcas de expresión, dejando la piel más suave, brillante, flexible y aclarada.

### **RF (Radio Frecuencia):**

El sistema de Radio Frecuencia incorpora energía eléctrica que acorta la distancia entre 2 electrodos. Cuando la electricidad corre por el tejido de la piel, la energía que libera genera calor, por lo que sentirá una temperatura más elevada en su piel.

### **PDT (Terapia Fotodinámica):**

La Terapia Fotodinámica funciona estable y eficientemente sin dañar su piel. Utiliza una luz LED desarrollada exclusivamente para el uso en dispositivos de belleza.

### **Nurse:**

Masaje con vibración que mejora la eficacia de las cremas y geles faciales en toda la zona de su rostro, incluyendo los ojos.

## GARANTÍA

Estimado cliente:

Gracias por escoger nuestro Dispositivo de Belleza RF y Electroporación. Por favor guarde esta tarjeta ya que es su garantía.

1. 2 años de garantía
2. Garantía no cubre en los siguientes casos:
  - a. Extravío de esta tarjeta
  - b. Mal uso del aparato
3. En caso de término de la garantía, usted deberá costear el servicio técnico.

Nombre del cliente: \_\_\_\_\_

Modelo No.: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

Para más información visita nuestra  
página web [www.laforett.com](http://www.laforett.com) y síguenos  
en nuestras redes sociales.

