

The logo for FTX, consisting of the letters 'FTX' in a bold, stylized, sans-serif font. The 'F' and 'T' are connected, and the 'X' has a unique, angular design.

**Manuel d'Utilisation**


**Appareil Anti-Cellulite  
à Ultrasons CavitatX**

# Sommaire

Nous vous remercions pour l'achat de notre Appareil Anti-Cellulite à Ultrason CavitatX, lisez attentivement ce manuel avant utilisation afin de vous assurer du bon usage de votre appareil.

Description du CavitatX	Page 2
Caractéristiques	Page 3
Précautions	Page 3
Mode d'emploi	Page 4
Chargement	Page 5
Spécifications	Page 5

# Description du CavitatX

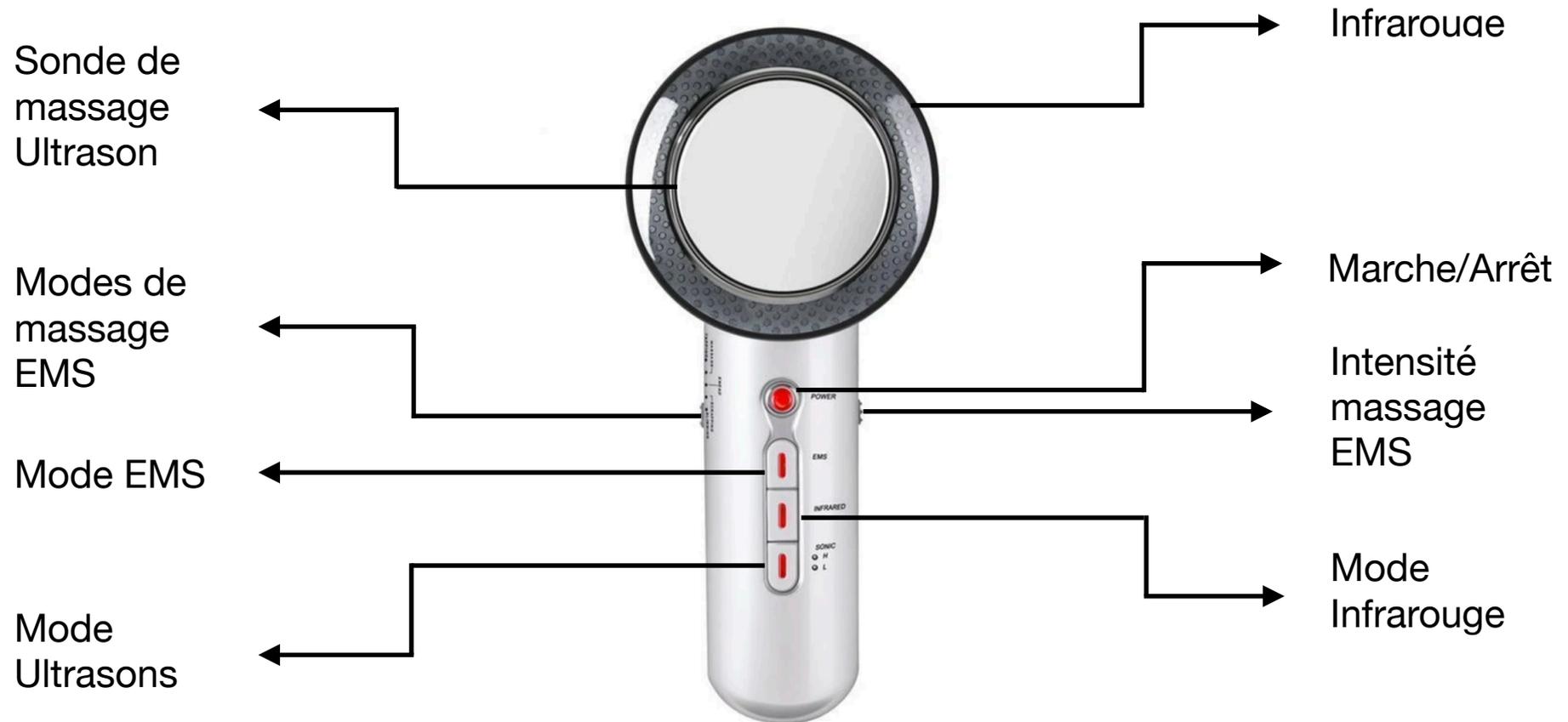

Votre appareil est livré avec des électrodes et un chargeur.

# Guide d'Utilisation Rapide

L'appareil Anti-Cellulite à Ultrasons CavitatX est doté de 3 fonctions minceur et beauté, vous apportant des effets encore plus important. Cet appareil vous permettra de façonner votre corps selon votre envie. Vous avez 3 fonctions principales : la fonction EMS, la fonction Infrarouge et la fonction Ultrasons qui se compléteront chacun pour vous donner les meilleurs résultats.

## **Affiner Votre Corps :**

### **Étape 1 :**

Nettoyez votre peau avant toute utilisation

### **Étape 2 :**

Utilisez le mode EMS pendant 15-20 minutes sur les parties du corps que vous souhaitez affiner.

### **Étape 3 :**

Vous pouvez appliquer une crème minceur en complément

### **Étape 4 :**

Massez votre peau avec le mode ultrason et infrarouge. Cette étape favorise l'absorption d'une crème, stimule la circulation sanguine et retend la peau. (Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur sur votre peau cela est normal, si vous ne supportez pas cette sensation, veuillez cesser l'utilisation de l'appareil.)

# Mode Ultrason

Il est conseillé d'appliquer une crème minceur en complément de ce mode, c'est un très bon moyen de conduction. Il offrira à votre peau la nutrition dont elle a besoin.

## **Étape 1 :**

Nettoyez votre peau avant toute utilisation.

## **Étape 2 (Facultatif) :**

Appliquez votre crème uniformément.

## **Étape 3 :**

Branchez votre appareil CavitatX.

## **Étape 4 :**

Allumez votre appareil, une lumière rouge apparaîtra.

## **Étape 5 :**

Appuyez sur le bouton « Sonic » une fois pour une basse intensité, deux fois pour une haute intensité. La basse intensité est utile pour le visage, la haute intensité convient aux bras, jambes et autres parties du corps.

## **Étape 6 :**

Commencer votre massage. **Évitez le contact avec les articulations.**

# Méthodes de Massage



## **Pour la taille :**

Sous l'estomac, faites des tours dans le sens des aiguilles d'une montre, et poussez la peau vers la zone gastrique et vers l'avant du nombril.



## **Pour les jambes :**

Partez de la cheville et remontez vers la cuisse, faites des mouvements circulaires, n'oubliez pas l'intérieur des cuisses.



## **Pour les pieds :**

Partez de la plante du pied, de vos orteils vers la cheville, effectuez la même opération pour la face interne et externe du pied.

# Méthodes de Massage

## **Pour les fessiers :**

- 1) Massez à partir du centre de la fesse en faisant des mouvements circulaires.
- 2) À partir de la fin du coccyx poussez la peau des fesses en montant jusqu'à la taille.
- 3) Sur le haut de la fesse, faites des mouvements circulaires en poussant la peau vers le haut et l'extérieur.

## **Pour les bras :**

Commencez par le poignet et remontez jusqu'à l'épaule. Pratiquez des mouvements de massage de haut en bas sur les zones internes et externes. Vous pouvez effectuer la même méthode avec des mouvements circulaires.

# Mode EMS

## Étape 1 :

Nettoyez les parties du corps qui vont être massées, si vous l'effectuez sur le visage, veuillez enlever votre maquillage.

## Étape 2 :

Branchez le fil de fixation sur une tranche de l'électrode.  
Mettez les pôles positifs et négatifs des électrodes sur les différentes parties du corps.

## Étape 3 :

Placez les électrodes autocollantes sur les parties à traiter.

## Étape 4 :

Régler l'intensité du bouton sur la première intensité (plus bas)

## Étape 5 :

Connectez le fil au dispositif en utilisant le bouchon.

## Étape 6 :

Allumez l'appareil CavitatX.

## Étape 7 :

Choisissez le mode du massage Percussion/  
Massage/Malaxer/Grattage/Amincissement.

## Étape 8 :

Appuyez sur le bouton EMS.

## Étape 9 :

Ajustez l'intensité en fonction de votre confort.

## Étape 10 :

L'appareil s'arrêtera de fonctionner au bout de 10 minutes. Si vous souhaitez recommencer la procédure sur une autre zone rallumez l'appareil, et recommencez.

## Étape 11 :

Après avoir fini la thérapie, ajustez le bouton de sélection sur la partie « No mode » et réglez l'intensité à 0.

# Les différents Mode EMS



Réglage de l'intensité



Choix des modes EMS

Déplacez les boutons selon votre volonté, essayez tout d'abord à l'intensité minimale et augmentez progressivement selon votre sensibilité.

**Chaque thérapie dure 10 minutes, il n'est pas conseillé de l'utiliser au delà de 30 minutes par jour.**

# Mode Infrarouge

## **Étape 1 :**

Nettoyez votre peau avant toute utilisation.

## **Étape 2 :**

Branchez votre appareil CavitatX.

## **Étape 3 :**

Allumez votre appareil, une lumière rouge apparaîtra.

## **Étape 4 :**

Allumez sur le bouton « Infrared » infrarouge.

## **Étape 5 :**

Quand la lumière rouge est émise de la tête de l'appareil, cela signifie que l'énergie infra rouge commence à fonctionner.

## **Étape 6 :**

Pointez l'infrarouge sur la partie de votre corps désirée, et l'énergie infrarouge sera envoyée vers votre peau.

## **Après Utilisation :**

1. Assurez vous que tous les boutons soient éteints.
2. Éteignez l'appareil CavitatX.
3. Rangez les électrodes.
4. Nettoyez la tête de la machine et les électrodes avec un chiffon humide.
5. N'utilisez aucun produit chimique pour nettoyer cet appareil et ne l'immerger dans aucun produit.
6. Rangez votre appareil dans sa boîte.

# Précautions d'Utilisation

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, éviter tout accident, ou tous mauvais usages, veuillez lire et respecter les précautions d'utilisations ci dessous.

1. Stockez votre produit à l'écart de l'humidité, ne l'utilisez pas sous l'eau ou avec les mains ou toute autre partie du corps mouillées, les composants pourraient court-circuiter, il existe un risque d'électrocution.
2. Ne placez pas ce produit proche d'une source de chaleur, cela pourrait causer des dysfonctionnement, raccourcir la durée de vie du produit.
3. Évitez toute forme de collision ou de choc, cela pourrai endommager nos composants.
4. Ne démontez pas votre produit, sous peine d'une annulation de garantie.
5. Si vous rencontrez un problème, une défaillance lors de votre première utilisation contactez notre service client, nous vous aiderons à trouver une solution.
6. N'utilisez que des accessoires fournis par notre site internet, l'utilisation d'accessoires autres pourraient causer des dommages, nous ne pourrions pas être responsable.
7. Ne tirez pas sur le câble du chargeur pour le brancher.
8. Rangez tous les fils ensemble proprement, ne les enroulez pas cela pourrait les endommager.
9. Si vous présentez des pathologies sérieuses ou un état nécessitant une surveillance n'utilisez pas cet appareil ou demandez un avis médical (patients présentant une tumeur maligne, femme enceinte, patient présentant une dermatose).

# Précautions d'Utilisation

1. Notre appareil est conçu pour une utilisation pour les adultes responsables, rangez ce produit hors de portée des enfants, cet appareil ne convient pas aux enfants, aux personnes présentant des déficiences mentales ou physiques sévères, dans un tel cas l'utilisation devrait être supervisée par un adulte responsable.
2. Si vous avez des enfants dans votre entourage, assurez qu'ils n'aient pas accès à cet appareil, ils pourraient le démonter et avaler des composants accidentellement.
3. Le temps d'utilisation recommandé est de 5-15 minutes par mode.
4. Si vous ressentez une douleur, une sensation de brûlure ou désagréable, cessez d'utiliser cet appareil et consultez un médecin.
1. N'utilisez pas cet appareil plus de 30 minutes par jour.
2. Veuillez ne pas utiliser l'appareil CavitatX trop longtemps sur la même partie de votre corps.
3. Faites des mouvements réguliers, évitez de rester sur la même zone cela peut entraîner un effet de concentration et des démangeaisons et brûlures.
4. Pendant l'utilisation, posez bien la partie en métal contre peau, un contact trop distant pourrait réduire l'efficacité.
5. Quand vous avez fini votre thérapie, nettoyez la tête de l'appareil avec une serviette humide, n'immergez pas votre appareil dans un liquide, n'utilisez pas de produits chimiques.

# Spécifications Produit

Puissance de l'adaptateur d'entrée : AC100-240V

Puissance de l'adaptateur de sortie : 15V, 800mA

Dimensions.: 190x80x60mm

Poids : 140g

Fréquence des Ultrasons : 1MHz

Annexe : 2 paires d'électrodes

**Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site [ftx-store.fr](http://ftx-store.fr)**