



DEPILADORA IPL HAPPY SKIN TECNOLOGÍA ICE COOLING

Manual de uso

La depiladora portátil de luz pulsada intensa (IPL) HAPPYSKIN con tecnología ICE COOLING, está diseñada para eliminar el crecimiento del vello de manera permanente, su aplicación de ligeras pulsaciones en la raíz previene que el vello vuelva a crecer en las zonas en las que deseas lucir una piel increíble y suave, además cuenta con la última tecnología en depilación ICE COOLING la cual ayuda a calmar la piel, y aliviar el enrojecimiento permitiéndote realizar la depilación y el cuidado de enfriamiento al mismo tiempo, es exactamente el tratamiento indoloro y cómodo que necesitabas.

LUZ PULSADA



Tu depiladora está científicamente probada y certificada por la NOM, que es un tratamiento 100% seguro y efectivo para eliminar el vello, probada por más de 15 años.

Normalmente se ven resultados, a partir de la 4ta sesión y se ve una disminución mayor de vello en la 8va a 10ma sesión, claro está que cada cuerpo es diferente y los resultados pueden variar, tenemos casos de personas que a partir de la primera sesión ven una disminución en el crecimiento.



La luz pulsada es un tratamiento super efectivo, cómodo y práctico, ya que no duele y lo puedes hacer en la comodidad de tu casa.

TIPO DE PIEL APTA PARA EL tratamiento

Tipo de Piel	Historial de Bronceado	Máximo Nivel	
I	Blanca	Siempre me quemo, nunca me bronceo	Los 5 niveles pueden ser usados
II	Beige	Siempre me quemo	Los 5 niveles pueden ser usados
III	Café clara	Me quemo poco	Los niveles 1, 2, 3, y 4 pueden ser usados
IV	Café medio	Raramente me quemo y me bronceo fácilmente	Los niveles 1, 2, 3, y 4 pueden ser usados
V	Café oscuro	Difícilmente me quemo y siempre me bronceo	Los niveles 1, 2, 3 pueden ser usados
VI	Negro	Nunca me quemo	No adecuado para tratamiento IPL

SUGERENCIA DE FRECUENCIA DE USO PARA EL TRATAMIENTO

LOS PRIMEROS 3 MESES	Cada semana
DEL 4TO AL 6TO MES	Cada 2 semanas
APARTIR DEL 6TO MES	Cada 4 a 6 semanas ó de acuerdo a la necesidad

COMO USAR MI DEPILADORA HAPPY SKIN ICE COOLING

1. Botón de encendido
2. Botón central
3. Modo cooling
4. Pantalla



- 1 Antes de utilizar tu depiladora la zona a tratar debe de estar rasurada limpia y seca
- 2 Por precaución te recomendamos realizar una prueba en una pequeña área del cuerpo utilizando cada uno de los niveles, de esta forma podrás conocer el nivel máximo que tu piel aceptara, este puede variar de acuerdo a tu tipo de piel y sensibilidad.
- 3 Para encender tu depiladora debes de conectarla a la electricidad, pulsa el botón de encendido lateral para comenzar, la pantalla se encenderá indicando que lo hiciste de la manera correcta tres segundos.
- 4 Para cambiar de nivel presiona el botón donde la encendiste el número de veces que sean necesarias para llegar al nivel deseado (ejemplo para llegar al nivel 5 presionar 5 veces) y si llegaste al nivel máximo que es 5 y deseas regresar al nivel uno solo debes de presionar ese mismo botón nuevamente solo debes de presionar ese mismo botón nuevamente.
- 5 Para realizar tus sesiones con el modo cooling el cual evitará que tu piel se enrojezca o irrite, así como que tu maquinita se caliente solo debes de presionar el botón lateral con el capota de nieve, para asegurarte de que hayas desactivado el modo cooling en la pantalla aparecerá un copo de nieve, si deseas desactivar el modo cooling solo debes de presionar nuevamente el botón donde lo activaste
- 6 Para lanzar flashes debes de presionar el botón central de tu depiladora, por tu seguridad la maquinita no lanzara flashes si no está en contacto con tu piel
- 7 Tu depiladora cuenta con un modo automático para áreas grandes, activalo manteniendo presionado el botón lateral por 3 segundos, en la pantalla aparecerá un círculo de flechas indicando que los has activado correctamente, para desactivarlo presiona el mismo botón donde lo activaste por 3 segundos
- 8 Para apagar tu depiladora solo debes de presionar el mismo botón con el que la encendiste por 3 segundos, después de esto comenzara una cuenta regresiva de 10 segundos apagándose por completo después de este tiempo
- 9 Realiza tus sesiones semanalmente, recuerda que para poder ver resultados debes ser muy constante
- 10 Puedes utilizar tu depiladora en las siguientes partes del cuerpo



AYUDA A TUS DUDAS

- 1 **No puedo subir ni bajar el nivel de intensidad de mi maquinita**
Es normal que después de un tiempo de uso se active la protección automática de sobrecalentamiento de la maquina por lo que es necesario reiniciarla, apágala, desconéctala y vuelve a intentar.
- 2 **Presiono el botón y no sale la luz**
Es normal que después de un tiempo de uso se active la protección automática de sobrecalentamiento de la maquina por lo que es necesario reiniciarla, apágala, desconéctala y vuelve a intentar.
- 3 **Mi piel esta extremadamente sensible después de mi tratamiento**
Es probable que estés utilizando un nivel de intensidad mas alto que el que tu piel tolera, te sugerimos bajar la intensidad e ir la subiendo gradualmente conforme tu piel lo indique.

Mantenimiento DEL APARATO

- 1 Limpia y sanitiza el aparato con una toallita húmeda desinfectante.
- 2 Guarda la maquinita en un lugar seco y en una temperatura ambiente.
- 3 Evita almacenar tu maquina depiladora y adaptador cerca de líquidos.
- 4 Después de utilizar tu depiladora espera a que esta se enfríe antes de guardarla.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

- No uses la máquina si tienes la piel del tipo VI (nunca me quemo). En este caso, corre un alto riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, como hiperpigmentación e hipopigmentación.
- No uses la máquina si estas embarazada o en período de lactancia, ya que no ha sido probado en mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No uses la máquina si tienes un implante activo, como un marcapasos, un neuroestimulador, una bomba de insulina, etc.
- Espera al menos 48 horas para broncearte después y antes de utilizar la máquina depiladora.
- Utiliza protección solar (*SPF 50) durante las 48 horas posteriores al nivel.
- No utilices la máquina depiladora si sufres de quemaduras del sol en la piel.
- El cloro del agua de albercas puede provocar co-mezón.
- Evite el uso de limpiadores agresivos o tratamientos de peeling.
- Ten en cuenta que todos los tipos de bronceado oscurecen la piel por lo que si utilizas la máquina depiladora después de tomar el sol deberás de adaptar el nivel de potencia de acuerdo al color de piel que tengas.

NO USAR EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1 Cáncer de piel, si tienes antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- 2 Antecedentes de trastorno vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- 3 Piel extremadamente sensible a la luz y con facilidad de reacciones alérgicas o erupciones.
- 4 Infecciones, eccemas, quemaduras, folicúlos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simple, heridas o lesiones y hematomas en las zonas que se van a tratar.
- 5 En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente ya que el tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel.
- 6 Si el cristal de la lámpara se rompió.

IMPORTADO POR:
ANGULAR TECH S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 915,
COLONIA SANTA ELENA, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20230
R.F.C.: ATE190803J23
DEPILADOR A BASE DE PULSOS DE LUZ
CONTENIDO: 1 JUEGO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.8 A
SALIDA: 12 Vcc 3.0 A

HECHO EN CHINA
LEER INSTRUCTIVO ANEXO



DEPILADORA IPL HAPPY SKIN TECNOLOGÍA ICE COOLING

Manual de uso

La depiladora portátil de luz pulsada intensa (IPL) HAPPY SKIN con tecnología ICE COOLING, está diseñada para eliminar el crecimiento del vello de manera permanente, su aplicación de ligeras pulsaciones en la raíz previene que el vello vuelva a crecer en las zonas en las que deseas lucir una piel increíble y suave, además cuenta con la última tecnología en depilación ICE COOLING la cual ayuda a calmar la piel, y aliviar el enrojecimiento permitiéndote realizar la depilación y el cuidado de enfriamiento al mismo tiempo, es exactamente el tratamiento indoloro y cómodo que necesitabas.

LUZ PULSADA



Tu depiladora está científicamente probada y certificada por la NOM, que es un tratamiento 100% seguro y efectivo para eliminar el vello, probada por más de 15 años.

Normalmente se ven resultados, a partir de la 4ta sesión y se ve una disminución mayor de vello en la 8va a 10ma sesión, claro está que cada cuerpo es diferente y los resultados pueden variar, tenemos casos de personas que a partir de la primera sesión ven una disminución en el crecimiento.



La luz pulsada es un tratamiento super efectivo, cómodo y práctico, ya que no duele y lo puedes hacer en la comodidad de tu casa.

TIPO DE PIEL APTA PARA EL tratamiento


Tipo de Piel	Historial de Bronceado	Máximo Nivel	
I	Blanca	Siempre me quemó, nunca me bronceo	Los 5 niveles pueden ser usados
II	Beige	Siempre me quemó	Los 5 niveles pueden ser usados
III	Café clara	Me quemó poco	Los niveles 1, 2, 3, y 4 pueden ser usados
IV	Café medio	Raramente me quemó y me bronceo fácilmente	Los niveles 1, 2, 3, y 4 pueden ser usados
V	Café oscuro	Difícilmente me quemó y siempre me bronceo	Los niveles 1, 2, 3 pueden ser usados
VI	Negro	Nunca me quemó	No adecuado para tratamiento IPL

SUGERENCIA DE FRECUENCIA DE USO PARA EL TRATAMIENTO

LOS PRIMEROS 3 MESES	Cada semana
DEL 4TO AL 6TO MES	Cada 2 semanas
APARTIR DEL 6TO MES	Cada 4 a 6 semanas ó de acuerdo a la necesidad

COMO USAR MI DEPILADORA HAPPY SKIN ICE COOLING

1. Botón de encendido
2. Botón central
3. Modo cooling
4. Pantalla

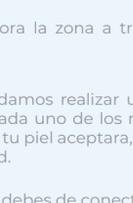

- 1 Antes de utilizar tu depiladora la zona a tratar debe de estar rasurada limpia y seca
- 2 Por precaución te recomendamos realizar una prueba en una pequeña área del cuerpo utilizando cada uno de los niveles, de esta forma podrás conocer el nivel máximo que tu piel aceptara, este puede variar de acuerdo a tu tipo de piel y sensibilidad.
- 3 Para encender tu depiladora debes de conectarla a la electricidad, pulsa el botón de encendido lateral para comenzar, la pantalla se encenderá indicando que lo hiciste de la manera correcta tres segundos.
- 4 Para cambiar de nivel presiona el botón donde la encendiste el número de veces que sean necesarias para llegar al nivel deseado (ejemplo para llegar al nivel 5 presionar 5 veces) y si llegaste al nivel máximo que es 5 y deseas regresar al nivel uno solo debes de presionar ese mismo botón nuevamente solo debes de presionar ese mismo botón nuevamente.
- 5 Para realizar tus sesiones con el modo cooling el cual evitará que tu piel se enrojezca o irrite, así como que tu maquina se caliente solo debes de presionar el botón lateral con el copo de nieve, para asegurarte de que hayas desactivado el modo cooling en la pantalla aparecerá un copo de nieve, si deseas desactivar el modo cooling solo debes de presionar nuevamente el botón donde lo activaste
- 6 Para lanzar flashes debes de presionar el botón central de tu depiladora, por tu seguridad la maquina no lanzara flashes si no está en contacto con tu piel
- 7 Tu depiladora cuenta con un modo automático para áreas grandes, activalo manteniendo presionado el botón lateral por 3 segundos, en la pantalla aparecerá un círculo de flechas indicando que los has activado correctamente, para desactivarlo presiona el mismo botón donde lo activaste por 3 segundos
- 8 Para apagar tu depiladora solo debes de presionar el mismo botón con el que la encendiste por 3 segundos, después de esto comenzara una cuenta regresiva de 10 segundos apagándose por completo después de este tiempo
- 9 Realiza tus sesiones semanalmente, recuerda que para poder ver resultados debes ser muy constante
- 10 Puedes utilizar tu depiladora en las siguientes partes del cuerpo



AYUDA A TUS DUDAS

- 1 **No puedo subir ni bajar el nivel de intensidad de mi maquina**
Es normal que después de un tiempo de uso se active la protección automática de sobrecalentamiento de la maquina por lo que es necesario reiniciarla, apágala, desconéctala y vuelve a intentar.
- 2 **Presiono el botón y no sale la luz**
Es normal que después de un tiempo de uso se active la protección automática de sobrecalentamiento de la maquina por lo que es necesario reiniciarla, apágala, desconéctala y vuelve a intentar.
- 3 **Mi piel esta extremadamente sensible después de mi tratamiento**
Es probable que estés utilizando un nivel de intensidad mas alto que el que tu piel tolera, te sugerimos bajar la intensidad e ir subiendo gradualmente conforme tu piel lo indique.

Mantenimiento DEL APARATO

- 1 Limpia y sanitiza el aparato con una toallita húmeda desinfectante.
- 2 Guarda la maquina en un lugar seco y en una temperatura ambiente.
- 3 Evita almacenar tu maquina depiladora y adaptador cerca de líquidos.
- 4 Después de utilizar tu depiladora espera a que esta se enfríe antes de guardarla.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

- No uses la máquina si tienes la piel del tipo VI (nunca me quemó). En este caso, corre un alto riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, como hiperpigmentación e hipopigmentación.
- No uses la máquina si estas embarazada o en período de lactancia, ya que no ha sido probado en mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No uses la máquina si tienes un implante activo, como un marcapasos, un neuroestimulador, una bomba de insulina, etc.
- Espera al menos 48 horas para broncearte después y antes de utilizar la máquina depiladora.
- Utiliza protección solar (*SPF 50) durante las 48 horas posteriores al nivel.
- No utilices la máquina depiladora si sufres de quemaduras del sol en la piel.
- El cloro del agua de albercas puede provocar co-mezón.
- Evite el uso de limpiadores agresivos o tratamientos de peeling.
- Ten en cuenta que todos los tipos de bronceado oscurecen la piel por lo que si utilizas la máquina depiladora después de tomar el sol deberás de adaptar el nivel de potencia de acuerdo al color de piel que tengas.

NO USAR EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1 Cáncer de piel, si tienes antecedentes de cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer localizado en las zonas que se van a tratar.
- 2 Antecedentes de trastorno vascular, como presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas que se van a tratar.
- 3 Piel extremadamente sensible a la luz y con facilidad de reacciones alérgicas o erupciones.
- 4 Infecciones, eccemas, quemaduras, folicúlos inflamados, heridas abiertas, abrasiones, herpes simple, heridas o lesiones y hematomas en las zonas que se van a tratar.
- 5 En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente ya que el tratamiento puede ocasionar quemaduras y cambios en el color de la piel.
- 6 Si el cristal de la lámpara se rompió.

IMPORTADO POR:
ANGULAR TECH S.A. DE C.V.
AV. DE LA CONVENCION DE 1914 No. 915,
COLONIA SANTA ELENA, AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20230
R.F.C.: ATE19081323
DEPILADOR A BASE DE PULSOS DE LUZ
CONTENIDO: 1 JUEGO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.8 A
SALIDA: 12 Vcc 3.0 A

HECHO EN CHINA
LEER INSTRUCTIVO ANEXO

