


## Manuel d'utilisation du Thermo

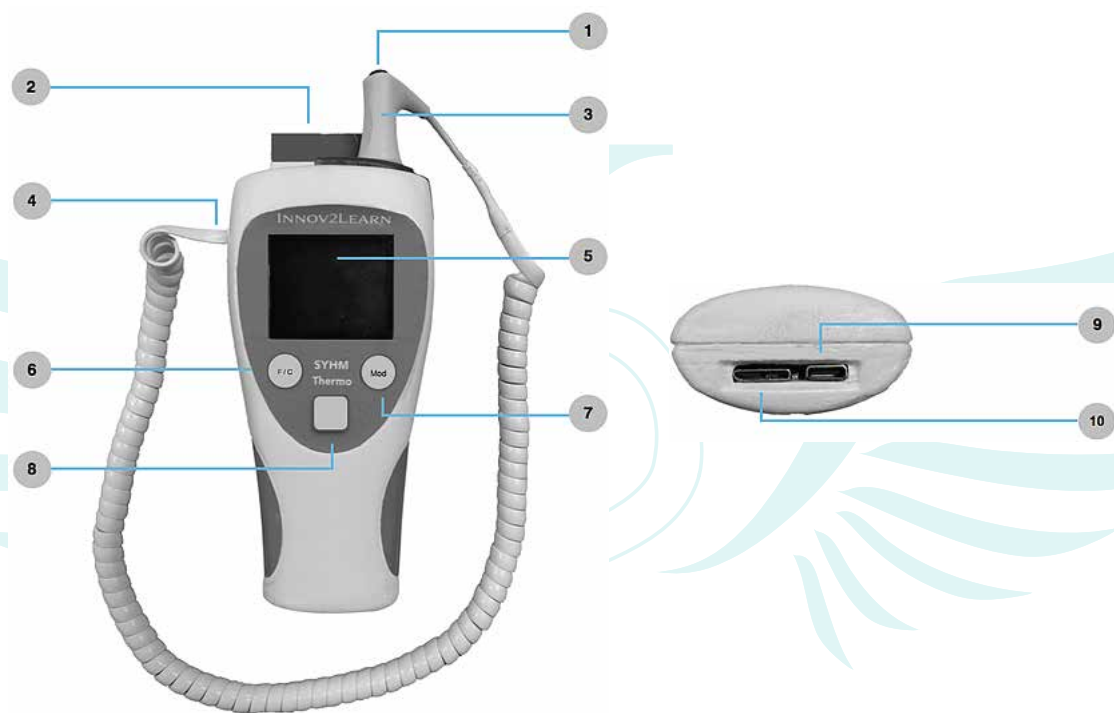

### a- Bouton d'éjection

Éjecter le couvercle de la sonde en appuyant sur le bouton d'éjection (1).

### b- Boîte de sonde couvercles (2).

### c- Sonde (3).

### d- Connecteur de sonde (4).

### e- Ecran LCD

Affiche les résultats du test en cours (5).

### f- Bouton °F/°C (Fahrenheit/Celsius)

Appuyer sur la touche °F/°C pour basculer entre les échelles de température à chaque fois qu'une température est affichée sur l'écran LCD (6).

### g- Sélection du mode

Appuyer sur le bouton (7) pour modifier la mesure actuel.

### h- Bouton ON/OFF

Allumer ou éteindre l'appareil pour afficher l'état actuel de la batterie. (8)

- Maintenir le bouton pendant 3 secondes pour l'allumer ou l'éteindre.

### l- USB type C

Insérer le câble USB pour recharger l'appareil (9).

### m- USB 3 Micro-B

Insérer le câble USB pour recharger l'appareil (10).

## Manuel d'utilisation du Thermo

### Comment ça fonctionne

#### **1- Allumer l'appareil**

Maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes.

#### **2- Connexion à l'appareil**

Ouvrir l'application SYHM

##### **2.1 - Applications Android/iOS :**

- Ouvrir l'application, sélectionner la langue puis cliquer sur OK.
- Cliquer sur Thermomètre.
- Votre appareil doit être affiché dans la liste disponible.
- Cliquer sur le nom de l'appareil.

##### **2.2 - Applications Windows / Mac OS X :**

- Connecter l'USB "bluetooth dongle" à votre PC.
- Ouvrir l'application et cliquer sur "Ajouter Appareil +".
- Votre terminal doit maintenant apparaître sur la liste.
- Cliquer sur le nom de l'appareil.

#### **3- Insérer la sonde**

Insérer la pointe de la sonde sur le lieu désigné.

#### **4- Modifier l'état du thermomètre**

Sur l'application SYHM, appuyez sur le bouton "Analyse".

#### **5- Vérifier l'état de l'appareil**

L'écran LCD affiche maintenant "Processing....".

#### **6- Envoyer le résultat du test à l'appareil**

L'application affiche maintenant une notification indiquant que l'appareil est prêt à recevoir les résultats du test.

Entrer la valeur désirée et cliquer sur le bouton "Envoyer".

#### **7- Vérifier les résultats**

Les résultats s'affichent sur l'écran LCD

### Recharger la batterie

Lorsque la pile est faible, le bouton ON/OFF devient au rouge.

Pour recharger l'appareil, brancher la charge sur l'un des ports USB. Les deux ports USB peuvent être utilisés pour recharger l'appareil.

Pendant que la batterie se recharge, le bouton ON/OFF reste jaune.

Lorsque la recharge est terminée, le bouton ON/OFF devient vert, indiquant que la batterie est à 100%.