


Mode d'emploi

1. Caractéristiques

- 1) Ecran LCD facile à lire
- 2) Convient pour usage oral, axillaire et rectal
- 3) Fonction de mise en veille automatique
- 4) Pas de mercure ni de verre, sûr pour enfant

2. Pièces & Fonctions

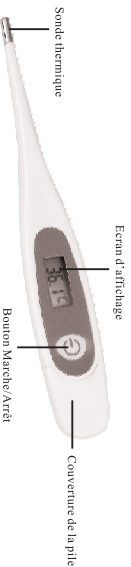

3. Guide d'utilisation

- 1) Désinfecter la sonde avec de l'alcool éthylique.
- 2) Appuyer sur le bouton On / Off.
- 3) Lorsque l'écran d'affichage indique Lo°C, positionner la sonde afin de mesurer la température.
- 4) Maintenir en place jusqu'au signal sonore, puis retirer pour lire la mesure.

Remarque : Pour afficher la dernière mesure prise, appuyer et maintenir appuyer le bouton de mise en marche pendant 5 secondes lorsque le thermomètre est éteint.

4. Méthodes de mesure

UTILISATION ORALE

Placer la sonde sous la langue du patient et ordonner lui de garder la bouche fermée durant toute la période de mesure.
La température normale par voie Oral est de 37°C

UTILISATION AXILLAIRE

A l'aide d'une serviette, sécher l'aisselle du patient. Placer la sonde contre l'aisselle du patient et garder le bras du patient fermement pliez contre son flanc.
La température normale par voir Axillaire est de 36,7°C

UTILISATION RECTALE

Lubrifier la sonde à l'aide d'un lubrifiant soluble dans l'eau. Insérer doucement la sonde d'environ 1cm dans le rectum du patient.
La température normale par voir Rectale est de 37,6°C

5. Comment remplacer la pile.

Lorsque la pile est faible, l'icône  apparaîtra sur l'écran d'affichage.

- 1) Enlever le couvercle du compartiment à pile.
- 2) Utiliser un cure-dent ou une tige isolée, non métallique afin de retirer la pile.
- 3) Insérer la pile neuve en respectant la polarité (le + vers le haut)
- 4) Remettre le couvercle.

REMARQUE : Ne pas recharger la pile. Jeter les piles usagées dans les conteneurs appropriés.

ATTENTION : Ne pas jeter de piles au feu au risque de les faire exploser.

6. Précautions

- 1) Eviter tout choc du thermomètre.
- 2) Seul la sonde est étanche, nettoyer le thermomètre uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- 3) Ne pas mettre le thermomètre en contact avec des diluants ou dissolvants obitiques.
- 4) Ne pas ranger l'appareil dans un endroit chaud ou à la lumière direct du soleil.
- 5) Ne pas plier le thermomètre.
- 6) Ne pas démonter l'appareil pour d'autres raisons que de changer la pile.