


Manuale Utente

1. Caratteristiche

- 1) Schermo LCD facile a leggere
- 2) Adattato per uso orale, ascellare o rettale
- 3) Funzione di spegna automatica
- 4) No mercurio o vetro, sicuro per bambini

2. Parts & Functions

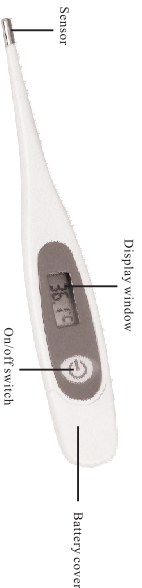

3. Guida dell'uso

- 1) Disinfettare il sensore con del alcool etilico.
- 2) Premere il pulsante On / Off.
- 3) Quando il schermo mostrerà Lo° C, posizionare il sensore per misurare la temperatura.
- 4) Mantenere il termometro fin' al segnale sonoro, poi togliere per leggere il risultato.

Nota: Per leggere l'ultimo risultato, premere e mantenere premuto il pulsante on / off durante 5 secondi quando il termometro è spento.

4. Metode di misura

USO ORALE

Posizionare il sensore sopra la lingua ed chiudere la bocca durante tutto l'operazione.

La temperatura normale da via orale è 37° C

USO ASCELLARE

Utilizzando un asciugamano, asciugare l'ascella del paziente.

Posizionare il sensore incontro l'ascella del paziente e mantenere il braccio del paziente fermamente contro il suo fianco.

La temperatura normale da via ascellare è 36.7° C

USO RETTALE

Lubrificare il sensore con un lubrificante solubile nell'acqua. Inserire delicatamente il sensore di circa 1 cm nel retto del paziente.

La temperatura normale da via rettale è 37,6° C

5. Cambiare la batteria

Quando la batteria è bassa, il schermo mostrerà l'icona .

- 1) Togliere il coperchio di batteria.
- 2) Usare un stuzzicadenti o un'asta non metallica per estrarre la batteria.
- 3) Inserire una nuova batteria rispettando la polarità corretta (+ verso l'alto).
- 4) Rimettere il coperchio.

NOTA: Non caricare la batteria. Buttare via le batterie nei contenitori adatti.

ATTENZIONE: Non buttare le batterie nel fuoco nel rischio di farle esplodere.

6. Precauzioni

- 1) Non far cadere o colpire il termometro.
- 2) Solo la sonda su questa unità è impermeabile, pulito solo strofinando con un panno asciutto.
- 3) Non lasciare il termometro a venire in contatto con diluenti o solventi chimici.
- 4) Non conservare l'unità a luce diretta del sole o ad alte temperature.
- 5) Non piegare il termometro.
- 6) Non smontare l'unità se non per sostituire la batteria.