

Manuel d'instruction

Appareil de beauté à domicile

Photo PLUS

HRF-10

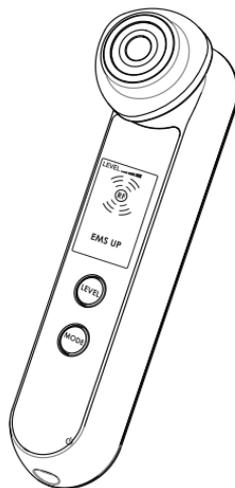


Table des matières

Précautions de sécurité	1
Utilisation dans les pays étrangers	6
Caractéristiques	7
Description du produit	7
Avant l'utilisation	8
Traitement	13
Après le traitement	17
Service après-vente	17
Dépannage	18
Foire aux questions (FAQ)	20

Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur pour garantir une utilisation sûre et correcte de l'appareil.



TO ACCESS SCAN WITH
YOUR CAMERA PHONE

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions.
- Reportez-vous aux Mesures de sécurité pour les informations importantes.
- Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure.

Précautions de sécurité

- ◆ Veuillez lire attentivement toutes les instructions pour une utilisation sûre et correcte.
- ◆ N'utilisez que ce qui est indiqué.
- ◆ Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de dysfonctionnement ou de réaction inhabituelle au traitement.
- ◆ Les précautions énumérées dans le manuel d'instructions sont très importantes. Pour votre sécurité, veuillez les suivre attentivement.
- ◆ Les précautions sont classées comme **DANGER**, **AVERTISSEMENT** ou **ATTENTION** afin de spécifier clairement le niveau de danger et les blessures ou dommages éventuels qui peuvent survenir en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

	DANGER	L'utilisation incorrecte de cet appareil pose un risque probable de décès ou de blessures graves.
	AVERTISSEMENT	L'utilisation incorrecte de cet appareil peut poser un risque de mort ou de blessures graves.
	ATTENTION	L'utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner un incendie, des blessures ou des dommages matériels.



Ce symbole vous indique ce que vous ne devez **PAS** faire.



Ce symbole vous indique ce que vous devez faire.



Ce symbole vous indique ce à quoi vous devez faire attention.



DANGER



Ne pas utiliser dans l'une des conditions suivantes, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement des dispositifs médicaux.

Ne pas utiliser en conjonction avec un équipement électronique médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un oxygénéateur, un électrocardiographe, etc.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser dans les conditions suivantes :

Le non-respect de ces règles peut entraîner un accident ou d'autres problèmes.

- Si vous souffrez d'une maladie cardiaque existante ou suspectée, ou de troubles connexes.
- Si vous n'êtes pas en mesure d'exprimer vos intentions.
- Si vous êtes incapable de sentir la température ou la stimulation.
- Si vous avez une maladie auto-immune.

Consulter un médecin avant de l'utiliser dans les conditions suivantes :

- Si vous avez une maladie aiguë - Si vous avez une maladie infectieuse.
- Si vous avez une tumeur maligne - Si vous avez une maladie fébrile.
- Si vous souffrez d'hypertension artérielle ou d'une maladie du sang.
- Si vous avez de la fièvre.
- Si vous souffrez d'une déficience sensorielle due à un dysfonctionnement circulatoire périphérique grave (par exemple, le diabète). • Si vous avez des lésions nerveuses/
- Si vous souffrez d'une maladie de la peau ou de dermatite atopique.
- Si vous consultez régulièrement un médecin et que vous prenez des médicaments.
- Si vous souffrez d'une allergie, d'une dermatite de contact, d'antécédents médicaux liés à la peau ou si vous avez des inquiétudes concernant votre peau lors de l'utilisation de cet appareil.

Ne pas utiliser dans les cas suivants ou sur les zones suivantes :

Le non-respect de ces règles peut entraîner un accident ou d'autres problèmes.

- Si votre peau est endommagée, présente une éruption cutanée, une inflammation ou d'autres anomalies.
 - Si vous êtes sous l'influence de l'alcool.
 - Tout endroit à l'intérieur de la bouche, autour de la région pubienne ou de toute muqueuse. • Les globes oculaires, les paupières (sauf en mode COOL), la gorge
 - Les grains de beauté en relief • Les verrues virales • Les zones où vous vous êtes cassé un os.
 - Zones présentant des symptômes d'hémorragie interne, de gonflement ou de croûtes après des traitements médicaux cosmétiques.
- Évitez d'utiliser l'appareil pendant 2 semaines après des traitements cosmétiques médicaux. Après cette période, consultez un médecin et n'utilisez l'appareil qu'après avoir obtenu son autorisation (par exemple, injections d'acide hyaluronique, injections de silicone, Botox, lifting avec fils, chirurgie des doubles paupières, HIFU, etc.)
- Zones où du métal a été implanté par chirurgie (reconstructive, chirurgie plastique ou esthétique.)



Ne pas appliquer sur la même zone de façon continue. Toujours déplacer l'appareil sur la peau pendant le traitement pour éviter d'éventuelles brûlures cutanées.



Ne placez pas l'appareil à proximité d'un feu ou d'une flamme et ne le mettez pas au rebut. N'utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas l'appareil dans un endroit où la température est élevée ou si l'appareil est chaud.



AVERTISSEMENT



Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables telles que diluant, benzène, dissolvant pour vernis à ongles, ou spray capillaire, car cela peut provoquer un incendie un risque de choc électrique ou une blessure.



Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni. Lors de l'utilisation de l'adaptateur CA, le brancher directement dans la prise murale. Ne pas utiliser de rallonge car cela pourrait provoquer un risque de choc électrique, un court-circuit ou un incendie.



Ne pas utiliser sur des enfants ou permettre à des enfants d'utiliser l'appareil. Garder hors de portée des enfants.

Ne pas laisser une personne handicapée utiliser l'appareil sans surveillance.

Éviter d'utiliser l'appareil sur des personnes à la peau sensible ou qui ne peuvent pas exprimer leurs intentions, car cela pourrait causer des blessures.



Si un problème survient pendant l'utilisation, notamment une odeur anormale, de la fumée ou une chaleur excessive, éteignez l'appareil et débranchez immédiatement l'adaptateur secteur.

Cessez d'utiliser l'appareil s'il y a de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituels.



L'utiliser uniquement comme indiqué dans ce manuel d'instructions. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.



Ne pas endommager, ne pas casser, ne pas modifier, ne pas plier de force, ne pas tirer, ne pas tordre et ne pas ficeler le cordon.

Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon et ne pas laisser se coincer entre d'autres objets, car cela pourrait endommager le cordon et provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne pas utiliser si l'adaptateur secteur est endommagé ou si la prise murale est desserrée.

Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.



Ne pas laisser l'unité principale, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation être mouillés.

Éviter d'utiliser l'appareil à proximité d'une source d'eau, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.



Ne démontez pas, n'essayez pas de réparer ou de modifier cet appareil de quelque façon que ce soit, car cela pourrait provoquer un incendie, un risque de choc électrique ou des blessures.

Consultez votre agent local si une réparation est nécessaire.



AVERTISSEMENT



Avant de charger l'appareil, vérifier que la fiche et la prise ne sont pas mouillées, car cela peut provoquer une décharge électrique, un court-circuit ou un risque d'incendie.



N'utiliser que du courant AC100-240V pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.



S'assurer de mettre l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsqu'il est nettoyé afin d'éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.



Tenir la tête de la fiche plutôt que le cordon pour débrancher l'adaptateur de la prise murale. Si le cordon est endommagé, cela peut provoquer une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie.



Cesser d'utiliser l'appareil s'il dégage une odeur inhabituelle ou s'il surchauffe afin d'éviter tout dommage ou incendie potentiel.



Ne pas utiliser et ne pas stocker l'appareil près d'un feu, sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits humides tels que la salle de bain. Ne pas le placer à proximité d'un équipement de chauffage, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.



Débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas manipuler avec des mains mouillées, car cela peut provoquer une décharge électrique, un court-circuit ou un risque d'incendie.



Choisir un niveau d'intensité plus faible pour permettre à la peau de s'adapter à la stimulation en cas de plombages ou de traitement dentaire suivi.

Pour éviter tout accident, toute blessure ou tout dysfonctionnement :



* Ne pas utiliser l'appareil en cas d'infection cutanée inhabituelle telle qu'une éruption, une irritation ou des démangeaisons.

* Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, s'il est tombé ou s'il a subi un choc.

* Ne pas utiliser l'appareil pour des traitements professionnels et évitez une utilisation continue ou excessive.



ATTENTION

Ne pas regarder directement dans la lumière LED lors de l'utilisation du mode LED RF.



- Lors de l'utilisation la lumière LED pour traiter les paupières (orbites), fermer les yeux et maintenir la tête de l'électrode à au moins 5 cm de la peau.

Ne pas utiliser successivement le mode froid :



- S'il est utilisé successivement, la tête ne refroidira pas complètement.
- Laisser un intervalle d'au moins 30 min avant la prochaine utilisation.

Ne pas essuyer l'unité principale avec de l'alcool, du diluant, du benzène, du dissolvant pour vernis à ongles ou tout autre solvant qui pourrait endommager l'appareil.



Ne pas mettre la tête de l'électrode en contact avec des métaux. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des blessures.



Ne pas appliquer sur des animaux de compagnie ou des animaux car cela pourrait provoquer des blessures.



Ne pas placer ou utiliser sur une surface instable. Évitez de faire tomber l'appareil ou de le soumettre à un choc, car cela pourrait entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.



Suivez les précautions ci-dessous pour éviter les accidents, les blessures ou les dysfonctionnements :



- Ne pas appliquer sur la même zone de façon continue. Toujours déplacer l'appareil sur la peau pendant le traitement.
- Appliquer le traitement en fonction du type et état de la peau.
- Éviter d'utiliser l'appareil sur un coup de soleil ou en conjonction avec un peeling, un masque facial ou un masque de boue.
- Toujours mettre l'appareil hors tension après utilisation.

Toujours commencer le traitement avec l'intensité réglée au niveau 1 pour permettre à la peau de s'adapter à la stimulation.



- Commencer à un niveau d'intensité trop élevé, peut blesser.

Cesser d'utiliser l'appareil en cas de gêne sur le visage ou le corps pendant l'utilisation. En cas de réaction cutanée anormale pendant ou après l'utilisation, arrêter l'utilisation et consulter un médecin.



Utilisation dans les pays étrangers



ATTENTION



N'utiliser que sur une alimentation AC100-240V afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.



Vérifier la forme de la fiche et la tension avant de l'utiliser. L'utilisation de cet appareil avec une fiche inappropriée ou à une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un dysfonctionnement.

REMARQUE : Ce produit peut être utilisé avec une tension de 100-240V. Si la fiche de l'adaptateur secteur fourni ne correspond pas à la fiche de votre emplacement, utilisez un adaptateur de fiche (non fourni).


- ◆ La configuration de la fiche et la tension varient en fonction de la région et du type de logement. Veillez toujours à vérifier la compatibilité avant d'utiliser l'appareil.
- ◆ Pour obtenir des informations sur les adaptateurs de prise, consultez une agence de voyage ou un détaillant en électronique grand public.

Caractéristiques

Ce produit est un appareil de beauté à usage domestique qui intègre le réchauffement profond par RF (radiofréquence) à la technologie de nettoyage ionique / ionophorèse, la vibration, la photo LED et l'EMS. Il peut être utilisé pour s'adapter à l'état de votre peau et atteindre votre objectif en combinant les modes de traitement disponibles suivants :


- **RF**
La RF réchauffe les tissus profonds* pour préparer la peau et renforcer les bienfaits du traitement qui suit. Contrairement aux appareils de chauffage classiques, ce mode peut chauffer instantanément les tissus profonds de la peau.
- **Ion Cleansing**
Le nettoyage ionique aide à nettoyer la peau en profondeur en attirant la saleté et le sébum tenaces qui ne peuvent être éliminés par un nettoyage normal.
- **Ion Moisture**
L'hydratation ionique hydrate la peau en améliorant la pénétration des produits de soin en profondeur.
- **EMS**
L'EMS stimule les muscles à l'aide d'un courant électrique doux.
- **Vibration**
La vibration traite la peau à l'aide de vibrations douces.
- **LED Photo**
Les LED rouges traite la peau à l'aide de la photothérapie LED (lumière).
- **COOL**
Le froid aide à raffermir la peau grâce à son action rafraîchissante. * *stratum corneum*

Description Produit

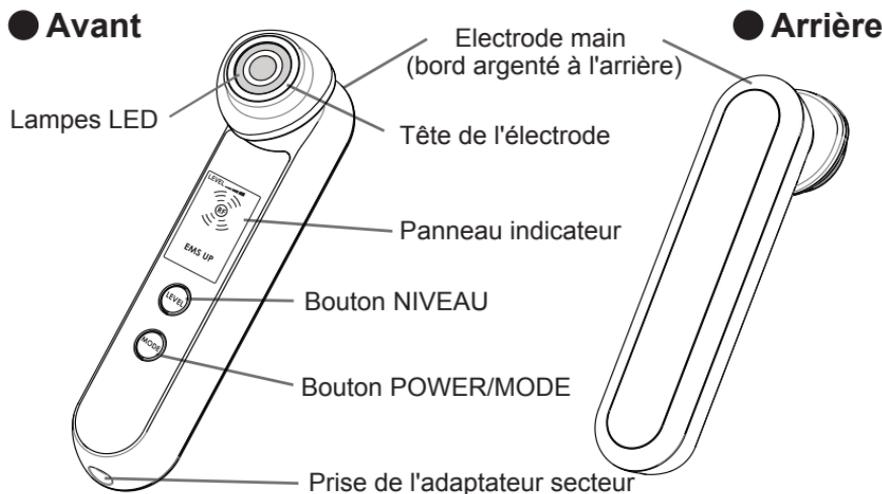

● Accroche coton (Anneau argenté)

- L'accroche coton est fixé à la tête de l'électrode lors de l'achat.
- Utiliser l'accroche coton pour fixer le coton sur la tête.

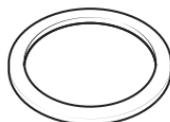


● Adaptateur AC

* La conception et les spécifications de l'unité principale et des accessoires peuvent être modifiées sans préavis.

Avant l'utilisation

Panneau indicateur

● Panneau / Boutons

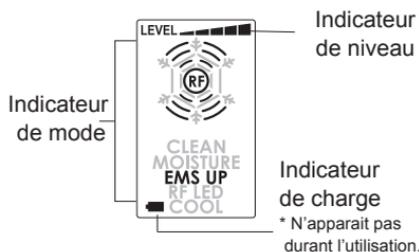

- Appuyez sur le bouton POWER/MODE et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil sous tension. Le traitement démarre automatiquement en mode Clean RF.
- Le mode de traitement peut être modifié en appuyant sur le bouton POWER/MODE à tout moment pendant le fonctionnement.
- Le niveau peut être sélectionné en utilisant les modes Clean RF, Moisture RF et EMS UP RF. Chaque mode comporte 5 niveaux d'intensité réglés à l'aide du bouton LEVEL.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton POWER/MODE pour mettre l'appareil hors tension.
- La température thermique RF ne peut pas être modifiée.

● Indicateur de MODE

Chaque fois que vous appuyez sur la touche POWER/MODE, le mode de traitement est sélectionné dans cet ordre : RF Cleansing → RF Moisture → RF EMS UP → RF LED → COOL → RF Cleansing (répétition).

Mode	RF Cleansing	RF Moisture	RF EMS UP	RF LED	Cool
Function	RF / Nettoyage Ionique	RF / Hydratation Ionique	RF / EMS	RF / LED	Cryo
Indicateur	 CLEAN	 MOISTURE	 EMS UP	 RF LED	 COOL

Le symbole  alterne pendant les modes  Cleansing,  Moisture et EMS. Le mode  est appliqué lorsque vous entendez un bip court et que le symbole  apparaît. Lorsque vous entendez deux bips courts, les modes Ion ou EMS sont appliqués et le symbole  n'apparaît pas.


● Indicateur de NIVEAU

En mode RF Cleansing ou RF Moisture, le niveau d'intensité du traitement ionique peut être réglé en appuyant sur le bouton LEVEL. En mode RF EMS UP, le niveau d'intensité de l'EMS peut être réglé en appuyant sur le bouton Level.

Il existe 5 niveaux de traitement. Choisissez un niveau que vous trouvez confortable. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton LEVEL, le niveau change dans cet ordre :

Niveau 1 → Niveau 2 → Niveau 3 → Niveau 4 → Niveau 5 → Niveau 1 (répétition).

- La température thermique du RF est fixe et ne peut être modifiée.
- Commencez toujours par le niveau 1 s'il s'agit de votre premier traitement ou jusqu'à ce que vous vous soyez habitué à l'opération et au traitement.

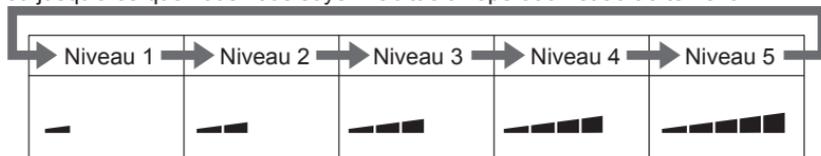


● Indicateur de charge

Le témoin de charge s'affiche sur le panneau d'affichage et clignote pendant la charge de l'appareil.

Lorsque la charge est terminée, le témoin de charge devient fixe.

* L'indicateur de charge n'apparaît pas pendant l'utilisation.

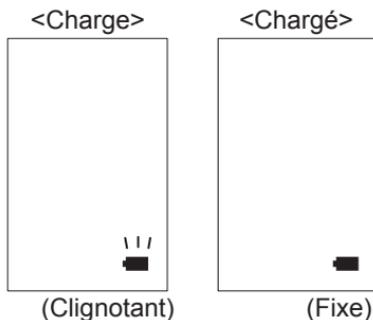

● Veille / Arrêt automatique (Automatic Power Off)

2 minutes après avoir terminé le mode 1, 2, 3 ou 4 le mode suivant clignote sur le panneau et le bouton POWER/MODE clignote, indiquant que l'appareil est en veille (ne traite pas).

Appuyer sur la touche POWER/MODE pour lancer le mode suivant qui est en attente.

L'alimentation s'éteint automatiquement après 2 minutes en veille.

L'alimentation s'éteint automatiquement dès que le mode COOL est terminé.

Chargement de la batterie

Le produit est rechargeable et peut être utilisé sans être connecté à l'adaptateur secteur. Veillez à utiliser l'appareil après l'avoir rechargé.

• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie et assurez-vous que l'indicateur de charge est passé du mode clignotant au mode fixe, indiquant une charge complète.

● Temps de charge

Temps de charge	Temps de fonctionnement
2.5 Heures	40 Minutes

- Température ambiante de 25°C.
- Le temps de fonctionnement est la durée pendant laquelle on peut l'utiliser immédiatement après une charge complète.
- La durée de fonctionnement peut varier en fonction du mode de fonctionnement, du niveau d'intensité et de l'environnement.
- Le temps de charge peut varier en fonction de la batterie restante et de l'environnement.

● Comment charger

1 Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur de l'unité principale.

2 Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, branchez-le directement dans la prise murale. N'utilisez pas de rallonge.
- Lorsque la charge a commencé, le témoin de charge clignote. Lorsque la charge est terminée, le témoin de charge devient fixe.

3 Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, puis retirez la fiche de l'adaptateur de l'unité principale.

A propos des modes de traitement

Mode	RF Cleansing [NETTOYER]	RF Moisture [HYDRATER]	RF EMS UP [EMS UP]	RF LED [RF LED]	Cool [COOL]
Actions	Rechauffe les tissus. Le nettoyage ionique attire les impuretés qui ne sont pas retirées par un double nettoyage classique.	Rechauffe les tissus. Facilite la pénétration des actifs de soin dans la peau *1 et hydrate *3	Rechauffe les tissus. L'EMS stimule les muscles pour une peau plus ferme. *2 . Peut aussi être utilisé sur la nuque et les épaules.	Rechauffe les tissus et traite la peau avec des LED rouge en même temps.	Améliore l'élasticité et la texture de la peau.
Fonctions	RF Ion Cleansing Vibration	RF Ion Moisture Vibration	RF EMS	RF LED	COOL
Coton	OUI	OUI	NON	OUI	NON
Soins	Lotion	Lotion	Masque	Lotion ou Gel	Lotion ou Gel
Temps	3 minutes	3 minutes	3 minutes	3 minutes	3 minutes
Niveau	Ion : 5	Ion : 5	EMS : 5	N/A	N/A
Fréquence	2 à 3 fois par semaine				Tous les jours


Toujours déplacer la tête de traitement sur la peau pendant le traitement, sauf en cas d'utilisation du mode COOL.

- N'utilisez que des produits de soins de la peau solubles dans l'eau. Les huiles, les gommages, les crèmes et les émulsions ne peuvent pas être utilisés.
- L'appareil peut devenir chaud après l'utilisation du mode COOL. Ne pas utiliser ce mode successivement. Laissez l'appareil se reposer (hors tension) au moins une demi-heure après utilisation.
- Le mode RF Moisture permet de délivrer les ingrédients de soins de la peau à la couche cornée.

Attacher le coton à la tête

1 Retirez l'accroche coton de la tête.

2 Installez le coton sur la tête de traitement circulaire et presser l'accroche coton dessus.

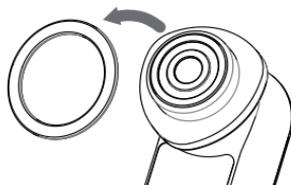

- Ne pas utiliser de coton en couches.
- Si l'accroche coton ne s'adapte pas correctement à la tête de traitement, utilisez un coton plus fin.
- Si le coton est trop épais, l'action thermique du traitement par radiofréquence peut être affectée et vous ressentirez moins de chaleur.

3 Faites pénétrer votre lotion ou gel hydratant préféré sur le coton fixé à la tête de traitement.

- Veillez à ce que la lotion ou le gel recouvre toute la surface de la tête de traitement.
- Si vous utilisez une lotion pour la peau à faible viscosité la sensation de chaleur peut diminuer. Lotion à viscosité élevée recommandée.
- Cet appareil n'est pas étanche, veuillez donc à bien essuyer toute trace de lotion ou de gel sur l'appareil avec un chiffon sec après chaque utilisation. Ne le lavez pas avec de l'eau ou d'autres liquides.

Mode d'emploi (instructions générales)

● Précautions à prendre lors de l'utilisation

- Toujours déplacer le dispositif sur la peau pendant l'utilisation. Ne le maintenez pas sur une zone fixe car cela pourrait provoquer des brûlures.
- La température des radiofréquences peut être différente selon l'état de votre peau.
- N'utilisez pas l'appareil sur les paupières sauf s'il est en mode COOL.
*La lumière LED en mode RF LED peut être utilisée sur les paupières (orbites). Fermez vos paupières et maintenez l'appareil (tête d'électrode) à au moins 5 cm de la peau.
- Ne regardez pas directement dans la lumière LED lorsque vous utilisez le mode LED RF.
- Tenez toujours l'appareil de manière à toucher l'électrode main située à l'arrière de l'appareil.
- La température ambiante recommandée est de 15°C à 30°C.

Comment appliquer le traitement

- 1 **Démaquillez-vous et nettoyez votre visage en douceur.**
 - Éliminez le sébum et la saleté de votre peau afin qu'elle soit propre avant le traitement.
 - Seul le mode COOL peut être utilisé sur le maquillage.
- 2 **Fixez le coton si nécessaire et appliquez la lotion sur le coton.**
- 3 **Pressez le bouton POWER/ MODE et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil sous tension.**
 - Choisissez un traitement en appuyant encore sur le bouton POWER/ MODE.
 - Choisissez un niveau d'intensité en appuyant sur le bouton LEVEL
 - REMARQUE : La température thermique des RF est fixe et ne peut être modifiée.
 - Commencez toujours par le niveau 1 s'il s'agit de votre premier traitement ou jusqu'à ce que vous soyez habitué au traitement.
- 4 **Tenez l'appareil de manière à toucher l'électrode main située à l'arrière de l'appareil.**
- 5 **Appliquez délicatement la tête de traitement sur votre peau et déplacez l'appareil la tête au-dessus de la zone à traiter.**
(Voir les pages 15-16)
 - Lorsque le mode est terminé, l'appareil se met en veille pendant 2 minutes. Après avoir utilisé le mode COOL, l'appareil s'éteint automatiquement.
 - Appuyez sur le bouton POWER/ MODE pour lancer le mode suivant ou maintenez le bouton POWER / MODE enfoncé pour éteindre l'appareil.
- 6 **Après le traitement, terminez votre routine de soin.**
 - Conditionnez votre peau en utilisant une lotion, un masque facial, un lait pour la peau, une crème pour la peau, etc.
- 7 **Retirez le coton de la tête de l'électrode et essuyez tout résidu de lotion ou de gel de soin restant sur la tête de l'électrode ou l'accroche coton.**
 - Cet appareil n'est pas étanche, veillez donc à bien essuyer toute trace de lotion ou de gel sur l'appareil avec un chiffon sec après chaque utilisation. Ne le lavez pas avec de l'eau ou d'autres liquides.


Comment appliquer le traitement

- Vitesse recommandée pour le déplacement de la tête sur la peau : 2 cm par seconde.
- Si la température est trop élevée, déplacez la tête plus rapidement.
- Veillez à ce que la totalité de la surface de la tête de traitement touche la peau pendant l'utilisation.
- Toujours déplacer le dispositif sur la peau pendant l'utilisation. Ne le maintenez pas sur une zone fixe, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- Ne pas placer la tête de l'électrode sur les paupières (orbites).

[RF Cleansing / RF Moisture / RF LED Mode]

Déplacez la tête de traitement sur la peau dans le sens des flèches indiquées ci-dessous.

La lumière LED en mode LED RF peut être irradiée sur les paupières . Retirez le coton. Fermez les yeux et tenez la tête de l'électrode à 5 cm de vos yeux. Puis irradiez la LED lumière.

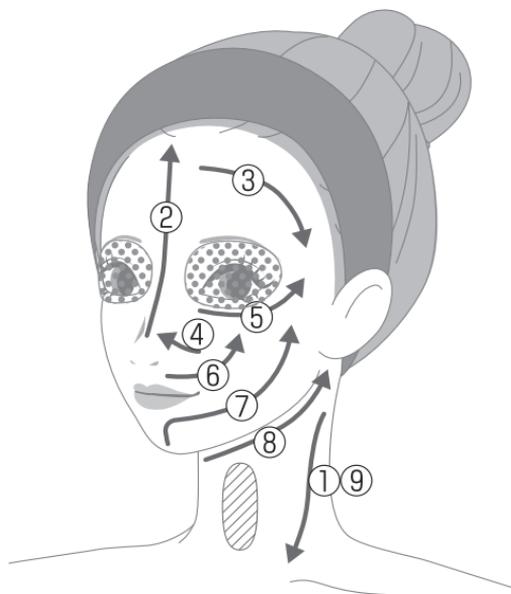


Zones qui ne peuvent être traitées qu'avec la lumière LED du mode LED. * Fermez les yeux et tenez la tête de l'électrode à 5 cm de vos yeux.



Zones que vous ne devez PAS traiter.

[RF EMS UP Mode]

Déplacez la tête de traitement sur la peau dans le sens des flèches indiquées ci-dessous.

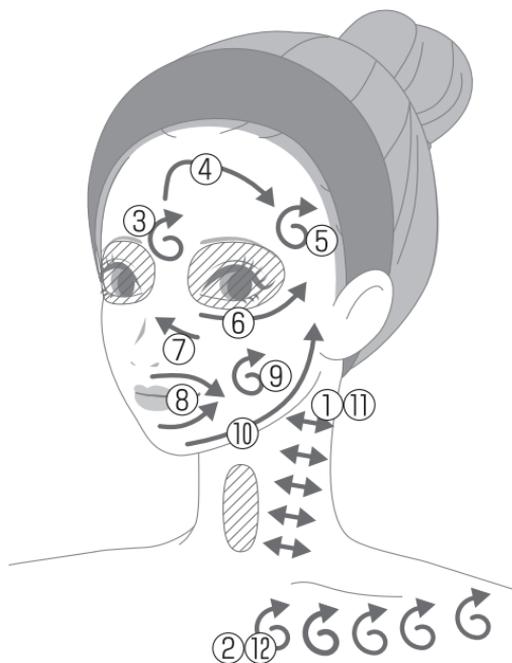

 Pressez et déplacez la tête de traitement dans un mouvement circulaire de massage, comme indiqué par les flèches.

 Zones que vous ne devez PAS traiter.

- Veillez à ce que la totalité de la surface de la tête de traitement touche la peau durant l'utilisation.
- Toujours déplacer le dispositif sur la peau pendant l'utilisation. Ne le maintenez pas sur une zone fixe, car cela pourrait provoquer des brûlures.
- Ne pas utiliser sur les paupières ou autour des yeux.

[Mode COOL]

Appliquez le dispositif comme si vous " tamponnez " votre peau : Appuyez et maintenez → Soulevez et repositionnez → Appuyez et maintenez (répétez).

* Le mode COOL peut également être utilisé sur les paupières.

Après le Traitement

Pour des raisons sanitaires, nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

● Entretien et stockage après l' utilisation

1 Assurez-vous que l'appareil est hors tension et débranchez l'adaptateur secteur de l'unité principale.

2 Essuyez toute saleté sur la surface de la tête de traitement ou sur l'accroche coton avec une serviette bien essorée.

- Retirez l'accroche coton de la tête lors du nettoyage.
- N'utilisez jamais de détergents, d'alcool ou de solvants tels que du diluant.
- Ne rangez pas et ne laissez pas l'appareil si une lotion ou un gel adhère à l'unité principale.

3 Essuyez toute saleté sur les zones autres que la tête et l'accroche coton avec un chiffon sec.

4 Laissez l'appareil sécher dans un endroit bien ventilé, puis rangez-le.

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez-le hors tension, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité principale et de la prise murale, puis rangez-le dans un endroit propre et sec.
- Ne placez jamais l'appareil près d'un feu ou d'une flamme, sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits humides comme la salle de bain. Ne le rangez que dans un endroit propre et bien ventilé.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Service après-vente

● À propos de la batterie rechargeable

- La batterie rechargeable est un élément consommable (non couvert par la garantie). Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.
- Si la batterie n'alimente l'appareil que pendant une période extrêmement courte après le chargement, elle peut être en fin de vie. Dans le cadre d'une utilisation normale, la batterie peut être chargée environ 300 fois.
- Si vous avez besoin de remplacer la batterie, contactez votre distributeur local. La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

● À propos de la mise au rebut

- Suivez les règles de votre gouvernement local pour une mise au rebut correcte de ce produit.
- Ce produit utilise une batterie au lithium-ion.

Liste de contrôle des problèmes possibles

Symptômes	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	→ Vous n'avez pas appuyé et maintenu le bouton d'alimentation	→ Appuyez sur le bouton POWER/MODE et maintenez-le enfoncé
	→ L'adaptateur secteur est branché	→ Après avoir débranché l'adaptateur secteur, Appuyez sur le bouton Power/Mode pendant environ 3 secondes
	→ La batterie n'est pas chargée	→ Chargez complètement la batterie
L'appareil ne fonctionne que pendant quelques minutes même après la charge	→ Charge insuffisante	→ Chargez complètement la batterie
	→ La batterie est épuisée (La batterie peut être chargée environ 300 fois)	→ Contactez l'agent local. (N'essayez pas de la remplacer vous-même)
	→ Vous avez peut-être appuyé par erreur sur le mauvais bouton	→ Appuyez sur le bouton POWER/MODE et maintenez-le enfoncé
	→ L'appareil est en veille ou en arrêt automatique	→ Appuyez sur le bouton POWER/MODE (p.10)
L'appareil ne commence pas à se charger (l'indicateur de charge ne clignote pas)	→ L'adaptateur secteur n'est pas branché dans la prise murale ou une rallonge	→ Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale sans rallonge
	→ L'adaptateur n'est pas branché sur l'unité principale	→ Branchez l'adaptateur dans l'unité principale
	→	→ Réinitialisez en appuyant simultanément sur les boutons POWER/MODE et LEVEL
L'unité principale est chaude	→ Mode COOL utilisé de façon consécutive	→ Eteignez l'appareil et attendez au moins 1 heure

● Garantie

Si vous avez acheté sur www.global.ya-man.com, Garantie :
Veuillez enregistrer votre appareil à l'adresse <https://global.ya-man.com/apps/warranty/registrants/new> Contact :
demandes de renseignements à contactus@ya-man.com.
Si vous avez acheté auprès d'un distributeur local, Garantie :
Veuillez contacter votre distributeur local

● Manuel d'utilisation en anglais (digital)

Le manuel d'utilisation est aussi disponible en anglais sur site internet.

<https://www.ya-man.co.jp/en/support/documents/>

● Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



● Élément additionnel

 unité d'alimentation détachable

