



Intermittierende pneumatische Kompression

Bedienungsanleitung



MODEL: Recharge Maxi FO 3002

•





Inhalt

Sicherheitshinweise:	3
Anwendungsbedingungen:	4
Inbetriebnahme des RecoFlow®	4
Anwendungsgebiete:	4 u. 5
Nicht angewendet werden darf der RecoFlow® bei:	6
RecoFlow®: Technische Eigenschaften:	6
Manschettenmaterial:	7
Reinigung der Beinmanschetten des RecoFlow®:	7
Lagerbedingung:	7
Garantie:	7
Hergestellt von:	8
Vertrieb:	8
CE -Konformitätserklärung:	8



Sicherheitshinweise:

Lesen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie sie zur späteren Wiederverwendung auf. Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen für dieses Gerät.

Die Anwendung des RecoFlow® liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.

- Dieses Handbuch muss vollständig gelesen und verstanden werden, bevor RecoFlow® angewendet wird.
- RecoFlow® und sein Zubehör dürfen nicht in der Nähe von brennbaren Gemischen mit Luft oder mit Sauerstoff oder Lachgas verwendet werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung die Manschetten ab. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf den RecoFlow®.
- Stellen Sie Ihren RecoFlow® vor dem Betrieb immer auf eine ebene, stabile Oberfläche. RecoFlow® funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn er schräg oder schief steht.
- Decken Sie den RecoFlow® während des Betriebs nicht ab.
- Verwenden Sie nur den Typ der Stromquelle, der auf dem hinteren Etikett des RecoFlow® angegeben ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder ausgefranztes Netzkabel.

In folgenden Fällen muss der RecoFlow® abgeklemmt und eine Wartung durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden:

- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeit in die Pumpen gelangt ist.
- Wenn das äußere Gehäuse aus Kunststoff beschädigt ist.
- Wenn die Pumpe nicht normal läuft, Dauerbetrieb, lauter Lauf oder geringe Leistung.

Schalten Sie die Pumpe immer aus, bevor Sie die Stecker abziehen.

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starker, elektromagnetischer Strahlung, und halten Sie bei der Anwendung mindestens 40 cm Abstand von Herzschrittmachern.

Dies ist eine Warnung, in der auf Gefahren hingewiesen wird, die sich aus unautorisierter Modifikation von Geräten ergeben können, anhand folgender Beispiele:

- Es sind keine Änderungen an diesem Gerät erlaubt
- Verändern Sie RecoFlow® nicht ohne Genehmigung des Herstellers
- Wenn RecoFlow® modifiziert wird, müssen geeignete Inspektionen und Tests durchgeführt werden, um den sicheren Gebrauch des Geräts zu gewährleisten.



Inbetriebnahme des RecoFlow®


- Schließen Sie das Netzkabel an die IEC-Steckdose an. Hierfür einfach den Netzstecker des Kabels in eine normale 220 V Steckdose stecken.
- Montieren Sie die Luftzufuhrschläuche an die Luftauslässe. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zur Pumpe und zur Beinmanschette sicher sitzen und alles gut dicht ist.
- Legen Sie die Beinmanschetten an.
- Schalten Sie das Gerät ein. Die optische Netzanzeige leuchtet auf.
- Wählen Sie den erforderlichen Druck mit dem Druckregler.
- Stellen Sie die Aufblas- und Ablasszeiten wie gewünscht ein.
- Nach der Beendigung der Behandlungszeit schaltet der RecoFlow® ab.
- Legen Sie die Beinmanschetten NICHT ab, wenn der RecoFlow® in Betrieb ist. Dies kann Schäden am Kleidungsstück verursachen und ist keine Garantieleistung. Schalten Sie den RecoFlow® immer vorher aus, bevor Sie die Beinmanschetten ablegen.
- Zusätzlicher Komfort kann durch das Anlegen einer Bandage unter den Beinmanschetten erzielt werden.

Erklärungen für die Anwendungsbereiche und deren Bedieneinstellungen:





- Bei Kompressionsanwendungen können bestimmte Körperteile, gemäß den spezifischen Anforderungen, übersprungen werden, also z. B. das Knie in der Behandlung auslassen.
- Power an/aus
- Druckbereich
- Behandlungsdauer 10, 20 oder 30 Minuten
- Start/Stop
- Fünf Behandlungsmodi:

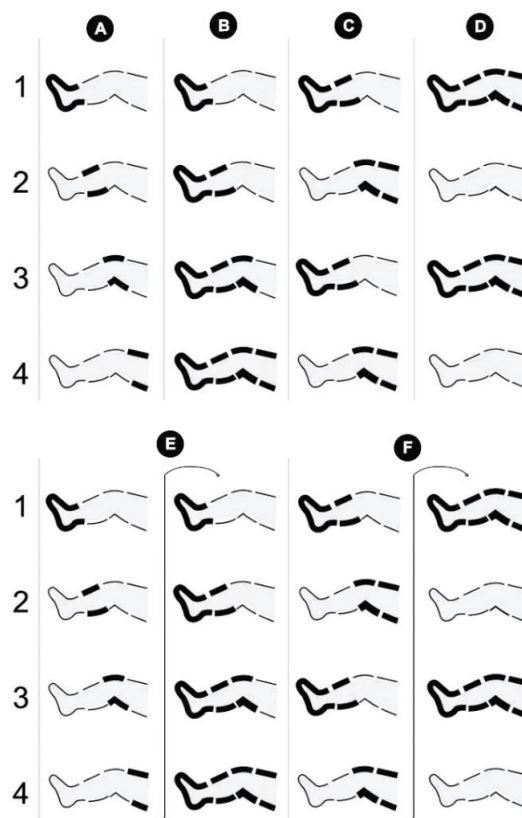

- **Behandlungszeit:**
Sie können selbst zwischen 10, 20, 30, 40 und 60 Minuten als Behandlungszeit wählen.
- **Behandlungszeit:**
Sie können selbst zwischen 10, 20, 30, 40 und 60 Minuten als Behandlungszeit wählen.
- **Power ON / OFF:**
Drücken Sie diese Taste einmal, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten drei Sekunden drücken.
- **Start / Pause:**
Drücken Sie diese Taste, um die Behandlung zu starten oder zu beenden.



- **Druckbereich:**
"+/-" zum Einstellen des Drucks. Beim Drücken von "+" wird der Druck erhöht, beim Drücken von "-" wird der Druck verringert.
- **Sechs Kompressionsbereiche:**
1.2.3.4.5.6 Wenn das Licht in dieser Kammer auf dem Display leuchtet, wird diese mit Luft gefüllt. Kann durch Drücken deaktiviert werden.

Anwendungsgebiete:

- Linderung von Muskelschmerzen
- Entspannung und Stressabbau
- Regeneration nach intensiver körperlicher Aktivität

Nicht angewendet werden darf der RecoFlow® bei:

- Schmerzen und/oder Taubheitsgefühl, das nicht von einem Arzt untersucht wurde
- Ischämische Gefäßkrankheit, einschließlich Schmerz im Ruhezustand und bei Wundbrand
- Unkontrollierte Herzinsuffizienz oder instabile Herzerkrankung
- Bei bekannter oder bei Verdacht auf tiefe Venenthrombose
- Bei entzündeter Haut oder einer entzündeten offenen Wunden
- Arterielle Erkrankung oder Arteriosklerose

RecoFlow®: Technische Eigenschaften:

- Maße: 240x200x110mm (L x W x H)
- Gewicht: 2.5 kg
- Leistungsaufnahme: 30W
- Eingangsspannung: 220V, 50Hz / 110V, 60Hz
- Druckbereich: 20-250mmHg
- Behandlungszeit: 10, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten
- Stromquelle 220V / 110V AC
- Frequenz 50Hz / 60Hz
- Interne Sicherung T2A



Manschettenmaterial:

- Angenehmes, medizinisches Markenmaterial aus TPU
- Hohe Schweißabsorption, für ein frisches Hautgefühl
- Sanft zur Haut
- Sichere Befestigung, um den Körper vor Verletzungen zu schützen

Reinigung der Beinmanschetten des RecoFlow®:

- Die Beinmanschetten können mit einem Reinigungsmittel oder Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt werden. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Nicht in den Trockner geben.

Lagerbedingung:

- Umgebungstemperatur: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Relative Luftfeuchtigkeit: $10\% \sim 95\%$
- Atmosphärischer Druck: $86\text{KPa} \sim 106\text{KPa}$

Garantie:

- Die Art of Beauty GmbH & Co. KG garantiert, dass das RecoFlow®-Gerät und die Beinmanschetten frei von Materialdefekten und Herstellungsfehlern sind.
- Diese Garantie gilt wie folgt:

Gerät: für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum.

Manschette: für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie umfasst oder deckt keine Fehlfunktionen aufgrund von unangemessenem Gebrauch, Nichteinhaltung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen oder Schäden ab, die durch nicht autorisierte oder nicht qualifizierte Reparaturen entstanden sind.

Wiederaufladbare Batterie:

Lithium-Ionen-Akku INR18650-1P3S, 10.8 V 2.6 Ah 28.08 Wh



CE -Konformitätserklärung:

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/35 / EU für elektrische Geräte, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen ausgelegt sind, und der Richtlinie 2014/30 / EU für elektromagnetische Verträglichkeit Stelle: auf Gerät und Etikett der Manschette

Hergestellt von:

Foshan HongFen Co., Ltd

Vertrieb:

RecoFlow® by Art of Beauty GmbH & Co. KG

Bräugasse 2 Rehlingen

D – 91799 Langenaltheim

Telefon: 09142 9688-0

Telefax: 09142 9688-88

www.recoflow.de