








安全注意事项
<ul style="list-style-type: none">使用前请仔细阅读「安全注意事项」所有指示内容，以确保能正确地使用。 请按照使用手册的指示使用。 如发生异常情况时，请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。 请绝对不要在故障状态下使用，可能对身体造成坏影响及发生危险。

- 本手册所列注意事项对阁下的安全非常重要，请务必遵守。
- 注意事项分为「危险」、「警告」及「注意」，并清楚列明危险程度，以及错误操作可能造成的伤害。

●关于注意事项
 危险 不当使用本产品会引起造成严重伤亡的危险。
 警告 不当使用本产品可能引致严重伤亡事故。
 注意 不当使用本产品可能令个人受伤，并引致财物※损失。
<small>※财物损失所示范围包括对房屋、财产、宠物等损害。</small>
●关于符号
 此符号表示禁止进行的事项。
 此符号表示 必须遵守 的事项。
 此符号表示 小心注意 的事项。

 危险 关于使用及保管
--


- 以下人士**请勿使用**。



 - 可能会影响电子医疗设备运作。
 - 使用电子医疗设备的人士
 - 心脏起搏器等植于体内用的仪器、氧合器等维持生命用辅助仪器、心电图机等精密装置


 警告 关于使用及保管
--

- 以下人士**请勿使用**。



 - 否则可能造成事故或发生问题。
 - 正接受治疗人士、发育中人士、急性疾病、结核性疾病、正在发热人士、高血压
 - 传染性疾病、恶性肿瘤、患有血液疾病、患有内脏疾病、患有皮肤病、过敏体质、过敏性皮肤病
 - 皮肤有问题人士、皮肤敏感的人士、物理刺激产生病理色素
 - 极度疲劳、身体不适人士、怀孕期间、经期期间或授乳期间人士
 - 服用催眠药人士
 - 因长期使用美国醇荷尔蒙药物引起骨质疏松症中的人士、牙齿上有填充物的人士可能会感到牙齿不适。请在使用前降低强度并调节使用部位。

- 除指定部位外，请勿使用于以下部位。



 - 否则可能造成事故或发生问题。
 - 伤口、曾接受整形手术之部位、口腔内、粘膜等、皮肤过度晒伤和发炎的人士
 - 痤疮、皮肤发炎的部位、皮肤痕痒和泛红部位、隆起的痣
 - 过敏性疾、疱疹、眼疾、眼脸
 - ※若无办法自行判断，请使用前先征询医生意见。

- 连续使用时，建议至少间隔5小时。

- 否则可能导致人身伤害或发热。


- 对于商业用途等，请勿过度使用。

- 否则可能造成人身伤害或故障。

- 不要将控制器放入水中。

- 否则可能会造成人身伤害或故障。

- 请勿让不能表达自己意愿的人使用。此外，避免让身体残疾的人士单独使用。



 - 否则可能导致事故或受伤。

- 请存放儿童无法触及的地方，切勿让其使用。

- 否则可能导致事故或受伤。

- 避免使用于儿童或身体残疾的儿童。

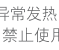
- 未成年人应获得父母同意并在监护人监督下使用。
 - 否则可能导致事故或受伤。

- 请勿作根据使用手册以外的其他用途使用。



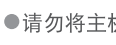
 - 否则可能导致受伤或机件故障。

●若出现异味或异常发热，请停止使用。
 出现异味异常发热时禁止使用

●请勿拆解、维修及改装。
 禁止拆卸

●请勿将主机放在不稳定的地方。此外，避免主机摔跌或受重力撞击。
 禁止跌落

●不要强烈震动，例如在使用过程中将重物放在主机上或掉落。
 禁止撞击

 注意 关于使用及保管
--

- 除面部以外，请勿使用。

- 否则可能导受伤。

- 请勿用于宠物身上。

- 否则可能导受伤。

- 使用前请检查电极是否裂开、变形和破损、如果电极断裂或失效，请勿使用。**
- 否则可能会导致皮肤损伤等问题和症状恶化。

- 请勿使用酒精、稀释剂、汽油、除光液等溶剂擦拭主机。**
- 否则可能会损坏主机表面。

- 请勿将本机放置于浴室等潮湿环境、水中。请勿带入桑拿浴或岩盘浴。**
- 否则可能导致事故或受伤。

- 请勿在户外使用。**
- 否则可能导致机件故障。

 户外禁止

- 如果您在护理过程中感到不适或皮肤出现异常，请停止使用。**
- 如果翌日后皮肤持续异常，请咨询医生。

- 在首次使用或习惯之前，请务必将EMS强度设定为1级（最低）。**
- 否则可能会导致意外和伤害。使用时请观察皮肤状况。

- 如果皮肤表面感到刺激疼痛，请降低EMS强度。**
- 如果继续使用，会对皮肤造成伤害。

- 每次使用后，请参阅「使用后」，以去除附在本机上的精华液等。**
- 否则可能会导致机件故障或皮肤问题。


- 请务必遵守以下事项。**

- 意外和伤害可能导致本机故障。
 - 避免使用超过设定的时间。
 - 避免使用超过设定的时间。
 - 如果您的皮肤出现皮肤皮疹、炎症、瘙痒或任何其他异常情况，请勿使用。
 - 请勿晒伤后立即使用去果酸、除角质等产品混合使用。

- 保持皮肤和电极之间的水分，如乳液、精华液、凝胶等。**
- 当您的皮膚乾燥後，關閉電源，取下矽膠面罩並加上。
- 如果水分低，会降低EMS的传送效率，和引发皮肤问题。

 警告 关于电源

- 请勿对USB电线过度施力、撕裂或弯曲，否则可能会导致充电器充电底座破损，引致触电或起火。**

 禁止不当使用

- 拉起USB充电线，切勿移动或抬起控制器。**
- 否则会导致触电、短路、起火或断裂。

- 请勿使用已损坏的充电底座、USB电线或松动的充电插头。**
- 否则会导致触电、短路、故障及起火。
- 如需维修，请联系当地经销商。

- 请勿让水沾湿USB电线。请勿沾水或用水清洗。**
- 否则会导致触电、短路、故障及起火。

- 不使用电时，务必在清洁时关闭电源。**
- 不使用电时，请由控制器和插座开始拔下USB充电线。此外，请勿用湿手触摸。
- 否则会导致触电、短路或起火。

- 从插座拔下USB线时请手握前端（确保不要触摸金属部件）。**
- 请勿在湿手状态下拔除插头。
- 否则会导致触电、短路或起火。

- 必须使用100～240伏交流电。**
- 請確保充電插頭及USB線完全插入。在海外使用時，請務必在使用前檢查插頭的形狀和電壓。
- 否则可能会引致起火、触电或故障。

- 万一发生异常情况时，请立即关掉电源。**
- 若出现故障、冒烟、异常噪音或异味等状况，切勿继续使用。

- 务必使用专用的USB电线进行充电，切勿连接电拖板。**
- 否则会导致触电、短路、起火或故障。
- ※随附的USB电线仅用于充电。

- 充电前，确保精华液或水滴没有沾湿充电端子**和**USB端子。**
- 否则会导致触电、短路或起火。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

- 充电前，确保精华液或水滴没有沾湿充电端子和USB端子。**
- 否则会导致触电、短路或起火。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

- 切勿在火灾或炎热的天气、湿热的地方、如浴室、放置可燃气或易燃材料的周边地方。**
- 此外，请勿在火灾、高温加热、加热中充电或使用。远离加热装置。
- 本机内置可充电电池。它可导致发热、起火、破裂或故障。

重要通知

储存方法

- 请把本机放置于儿童无法触及并通风的清凉地方。
- 长时间闲置本机时，请关掉将本机充电插头及USB线拔除，妥善收存起来。
- 请勿存放于等高温潮湿地方（如火源附近、炽热阳光下或浴室内等）。

保养及检查

- 经长时间闲置后，请于再使用前先检查其操作是否正常及安全。
- 本机操作发生异常时，可先参照「排除故障」进行检查，如仍无法解决，请速向购买相关资料向产品销售商查询。
- 如有故障或受损，请向产品销售商查询。

疑似故障	使用过程中感到异常，安排维修前请先对照以下项目进行检查。
状况	可能的成因及解决方法
无法开机	→  (电源) /MODE请长按开关约1秒。
	→ 电池没电，请充电。
充电后只能运作数分钟	→ 设定模式约10分钟后，电源自动关闭。
	→ 电量不足，请充电。
	→ 电池寿命完结，请联系当地销售商。
无法充电	→ 请将充电器插头插入机体的电源插座。
	→ 请正确地将USB端口连接到本机。
EMS电流太强 麻痺、刺痛	→ 请用“-”按钮降低EMS的强度。
	→ 皮肤干燥。请涂抹乳液、精华液、凝胶等滋润肌肤。
EMS电流太弱 没有感觉	→ 请用“+”按钮提高EMS的强度。
	→ 电极没有正确地贴于皮肤上。 → 请正确戴矽胶面罩。
	→ 皮肤干燥。请涂抹乳液、精华液、凝胶等滋润肌肤。

常见问题

Q 有建议使用频率及使用时间？	A 请使用1次约10分钟为标准。 <p>※设定模式约10分钟后，电源自动关闭。</p> <p>※以上只是一个标准，请在检查皮肤状况时使用。</p> <p>※如果您感觉皮肤有任何异常，请立即停止使用。</p>
------------------------	--

Q 乳液、精华液等每次应使用多少？	A 本产品的特点，让您可以透过使用更多的水、乳液、精华液能感到更多EMS的敏感度。如果水分不足，可能会感觉刺痛。
--------------------------	---

Q 是否可于浴场中使用？	A 本产品非防水产品，请勿于浴场中使用。
---------------------	-----------------------------

Q 是否可于睡觉时使用？	A 请勿于睡觉时使用。
---------------------	--------------------

Q 是否可连续使用？	A 建议本产品每日使用1次，每次10分钟，建议间隔超过5小时后再使用。
-------------------	--

Q 面部左侧和右侧的刺激是不同的	A 由于面部是不对称的，因此面部的左侧和右侧的刺激可能不同。请调节左右EMS的强度。
-------------------------	---

Q 皮肤上有皮疹、发炎和瘙痒	A 由于EMS的刺激，如果翌日皮肤持续异常，请咨询医生。
-----------------------	-------------------------------------

Q 感到不适和疲倦	A 由于EMS的刺激，请暂时避免使用，直至面上没有任何不适。
------------------	---------------------------------------

Q 牙痛	A 在治疗牙齿或补牙时，牙齿可能会受到伤害，如果感到不适，请咨询您的医生。
-------------	--

Q 是否可以在怀孕期间使用？	A 请勿在怀孕期间或分娩后不久使用。请咨询您的家庭医生。
-----------------------	-------------------------------------

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

Q 是否可以在晒伤后或剃须后使用？	A 可能会导致炎症。如果您的皮肤有问题，请立即停止使用并咨询医生。
--------------------------	--

电 压	DC5V 0.5A
耗 电 量	最大约1.5W（充电时）
使 用 电 池	锂离子电池
充 电 时 间	约1.5小时 ※因充电环境影响充电时间。
操 作 时 间	约5小时（充满电状态开始计算） <p>※因使用环境及EMS强度影响操作时间。</p>
外 形 尺 寸	矽胶面罩：约W600×H180（mm） <p>控制器：约W50×H50×D15（mm）</p>
产 品 重 量	矽胶面罩：约112g <p>控制器：约17g（1个）</p>
材 质	矽胶面罩：矽胶 <p>控制器：PC树脂</p>
生 产 地	矽胶面罩：中国制 <p>控制器：日本制</p>
配 件	充电用USB电线（Micro USB） ……1条 <p>使用手册</p>
建议使用室温	10℃～40℃

售后服务

关于充电池

- 充电池是消耗品（不在保修范围内）。
- 充电后使用时间仍是极短的话，可能是电池已寿命完结（充电次数约为300次）。

关于废弃

- 请遵照当地政府规定弃置产品。
- 本产品使用锂离子电池。

查询事项

如有故障或受损，请向产品销售商查询。

