


移动方式

如下图所示,请在提示音(每隔约10秒)响起后,移动至下一个要进行护理的部位。使用时请务必EM斯电极紧紧地贴在肌肤上。


1

将凝胶、保湿霜等涂抹在颈部及锁骨部位

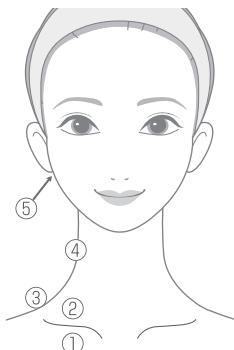


2

将凝胶、保湿霜等涂抹在整个面部

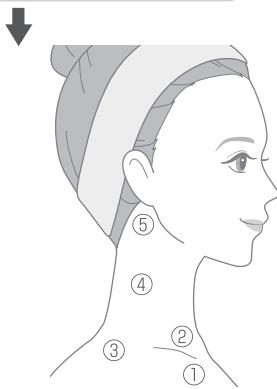

请按照右侧→左侧的顺序进行

像盖印章一样在各个部位间进行移动。

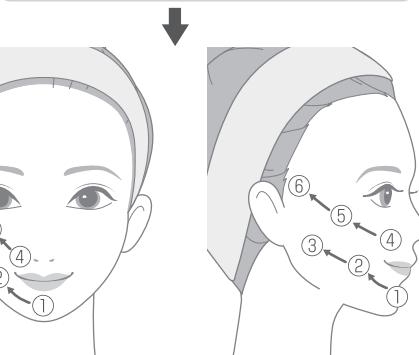


请按照右侧→左侧的顺序进行

在每个部位将肌肤向上提拉,并在各个部位间进行移动。

注意

- 请勿将凝胶、保湿霜等涂抹至肌肤吸收,请足量涂抹。
- 请将沾在手上的凝胶、保湿霜等擦拭干净后,再使用本产品。

3

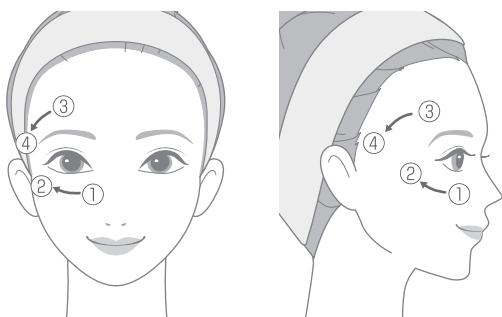

请按照右侧→左侧的顺序进行

- 使用过程中如果感觉滑动不畅,请补充凝胶、保湿霜等护肤品。
- 如果感觉EM斯刺激感过强,请将使用位置稍微向脸颊部位下移。

4

将残留的凝胶、保湿霜涂抹至肌肤吸收,
最后顺着颈部曲线向下滑动涂抹



在颈部滑动涂抹3次左右

使用完毕后

保养方法

为保持机器清洁,请于每次使用后进行清洁保养。

⚠ 警告

- 保养时,务必切断电源,将USB线从机身上拔除。
否则可能会导致触电、短路或起火。
- 请勿水洗。
本产品并非防水产品。
否则可能会导致机器故障。



1

用拧干水分的软布等擦拭污渍。

- EMS电极间请用棉签等进行擦拭。
- 如污渍比较顽固不易掉落,请用布蘸一点稀释过的中性洗涤剂并轻轻擦拭。

注意

- 请勿在残留凝胶、保湿霜等的状态下闲置本机。
- 请勿使用碱性洁剂、酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂等清洁。



观看视频

也可使用手机等观看视频查看使用方法。

https://corporate.ya-man.com/product-info/manuals/how-to-movie/?movie_id=ep30

