

使用说明书

家用美容仪 Medi Lift Eye EPE-10

- 请务必阅读背面的“安全注意事项”以确保安全使用。
- 保修卡在本使用说明书末页。

©2019 YAMAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

EPE10-2-001C

前言

- 感谢您购买雅萌产品。
- 为确保正确、安全使用，请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后，请务必保管在能够随时取阅的地方。
- 将本产品转让给他人使用时，请务必附上本使用说明书。

配件


- 电源适配器
- USB充电线（磁吸式充电器）*
- 使用说明书

*请勿用于本产品以外用途。
为提升产品品质，主机及配件的设计、规格发生变更时，恕不另行通知。

各部位的名称和功能

控制器

● 正面

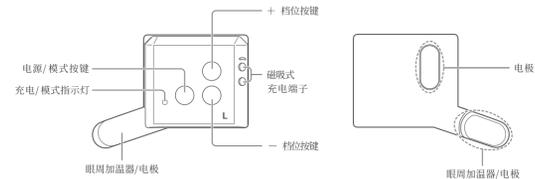

● 背面




面罩

● 正面



● 背面

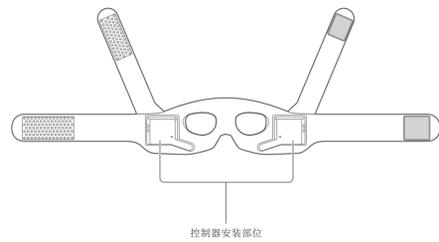

功能说明

自动关机功能

开机后约10分钟，会自动关机
使用过程中如切换模式，自动关机的时间从切换模式后开始计算

EMS

通过电流刺激肌肉。

加温功能

通过加温功能，使眼周温热。

微电流


通过微电流护理肌肤。

使用前

充电

控制器的拆除方式

- 一般拉伸控制器两边的硅胶眼罩，一边将控制器推出。
- 拉伸时，请勿过度用力。否则可能会造成眼罩或电极部分破损。

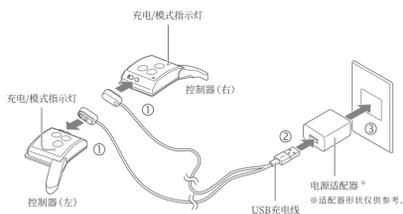

- 控制器如上图方式连接后，开始充电。充电过程中，充电/模式指示灯闪烁红光。
- 充电完毕后，充电/模式指示灯长亮红光1分钟后熄灭。此时，请拔掉USB充电线。
- 室温约25℃时，需充电约2.5小时；单次充满电后，约可使用3小时。但因残余电量、使用环境、使用档位和闲置时间的不同，充电时间以及使用时间可能会有差异。

注意

- 控制器和磁吸式充电端子沾水时，请擦干水滴。沾有水渍的状态下充电，可能会引起控制器故障。
- 请按正确的方向安装磁吸式充电端子。如安装方向不正确，则无法开始充电。
- 购买后初次充电时，请务必确保充满电后再使用。
- 初次使用或长时间未使用时，可能存在即使显示满电状态，也只能使用较短时间的情况。此时，请再次充电后再使用。
- 请使用标配的USB充电线及电源适配器。

肌肤适应性确认

初次使用时，请务必先进行产品与肌肤的适应性确认。

⚠ 注意

- 为预防使用本产品后，肌肤出现异常问题，请务必先进行适应性确认。
- 测试部位出现发疹、泛红、发痒、刺痛等异常情况时，请立即停止测试并清洗干净。
- 肌肤感觉异常时请勿使用。

- 1 用肥皂等产品清洁手臂内侧，然后用毛巾等擦拭干净。
- 2 将眼部精华等适量涂抹在清洁过的手臂部位。
- 3 调节成提拉模式，设置成1档后，将两个电极头按压手臂上使用约3分钟。

- 请在控制器安装在眼罩上的状态下测试。确保左右两个电极均与肌肤紧密贴合。
- 电源启动时，提拉模式的EMS初始档位是0档（最小）。
- 有关使用方法，请参阅“护理方式”。

- 4 将多余的眼部精华等擦掉、确认肌肤是否有异常。
如果24小时内肌肤没有泛红或发痒等异常情况，可以使用本产品。

使用方法

视频使用教学

使用方法可以通过视频观看。

请扫描右侧二维码



<https://bit.ly/2YuRNXXO>

眼罩的安装方式

将控制器（2个）安装到眼罩

请注意控制器的装置方向。

- 1 背面
左 右
检查确认控制器眼周加温器的朝向。
- 2 将控制器对准眼罩的凹槽，并将其轻轻嵌入。
- 3 将控制器向下按压，使其完全贴合在眼罩上。另一个控制器也用同样的方式安装。
- 4 确认控制器的眼周加温器是否有微微凸起。

注意

- 安装时，请勿过度用力拉扯硅胶。否则可能会造成眼罩破损。
- 安装时，请注意不要误按控制器的按键。
- 请在关机状态下安装控制器。

眼罩的佩戴方式

卸妆清洁完脸部后，请用基础的护肤品对肌肤进行保湿后再使用。推荐使用Medi Lift专用眼部精华。
肌肤表面水分不足时，可能无法感受到EMS体感；因此，请务必确认肌肤与电极接触的地方保持水润。

注意

- 请勿使用化妆品等含油成分的化妆品。可能会缩短眼罩的使用寿命。
- 如带妆佩戴本产品，可能会使眼罩及控制器发生变色。请务必卸妆清洁后再佩戴。

- 1 将刘海向后上方整理，避免眼罩夹到头发。
- 2 使用前，先将眼部护肤品（眼霜、眼部精华）涂抹于眼周后，再佩戴使用。
· 如觉得体感不明显，可将眼部护肤品直接涂抹电极处。
- 3 将眼罩调整到符合眼睛轮廓的舒适位置。
· 安装控制器中的眼周加温器时，请勿超出露出眼罩的位置。
· 调整好鼻子位置，并确保眼罩正面的“YAMAN”标志未反转后正确佩戴。
- 4 固定绑带[1][2]向斜上方提起，然后用魔术贴固定。
· 因每个人头部的大小差异，请按照实际情况将绑带固定在不容易滑落的位置。
· 如出现绑带滑落的情况，可通过绑起头发进行固定。
- 5 固定绑带[3][4]向头顶方向提起，然后用魔术贴固定。
· 请将固定绑带[3][4]调整到合适的位置。
· 即使不贴紧固定绑带[3][4]也可正常使用。
- 6 可照镜子，确认眼罩是否正确佩戴。
· 由于脸部轮廓的差异，可能存在眼罩不贴合或者凸起的情况；但是，只要左右4处电极完全贴合肌肤，即可进行护理。

- 5 固定绑带[3][4]向头顶方向提起，然后用魔术贴固定。
· 请将固定绑带[3][4]调整到合适的位置。
· 即使不贴紧固定绑带[3][4]也可正常使用。
 - 6 可照镜子，确认眼罩是否正确佩戴。
· 由于脸部轮廓的差异，可能存在眼罩不贴合或者凸起的情况；但是，只要左右4处电极完全贴合肌肤，即可进行护理。
- 没有EMS体感？
左右两边EMS体感存在差异？

 - 肌肤含水量不足
请用眼霜、眼部精华等充分滋润肌肤。推荐使用Medi Lift专用眼部精华。
如需加强EMS体感，请在控制器的4处电极上充分护肤品。推荐使用Medi Lift专用凝胶。
如左右两边的含水量有差异，体感可能会不一样。另外，如控制器内测电极无法贴合肌肤，也会影响到护理体感。

注意

- 佩戴前务必确认控制器已完好安装在眼罩上。
- 请在关机状态下安装控制器。
- 建议将头发扎起来后再佩戴眼罩。
- 佩戴时，请注意避免魔术贴粘到头发。
- 请务必确认眼罩内的电极（左右共4处）充分贴合肌肤。如电极面未贴合，可能无法正常发挥护理功效。
如头发上涂抹了免洗的油性护理液，请待头发干透后再使用本产品。
- 请确保肌肤和电极间的湿润状态。如肌肤湿润度不足，则会影响EMS的体感效果，从而可能会减弱护理效果或产生肌肤问题。

护理要点

操作使用熟练前，请先对着镜子使用，确认操作正确。

- 1 开机
同时按下左右两个控制器的电源/模式按键1秒以上。
响起“哔—”的蜂鸣声后，充电/模式指示灯亮起紫灯。
· 请务必确认控制器已完好安装在眼罩上，再启动电源。
· 启动电源时，请设置为EMS档位（强度）为0档（最小）的“提拉模式”。
- 充电/模式指示灯

设置模式后约10分钟，会自动关机。

如中途需停止使用，请同时按下左右两端电源/模式按键1秒以上即可关机。


- 2 根据个人需求选择护理模式
同时按下左右两个控制器的电源/模式按键。
每响起一声“哔”的蜂鸣声，模式切换。
- 提拉模式（紫色）
如敲打般的电流刺激。

放松模式（蓝色）
如抓肉般的电流刺激。

- 3 根据个人需求选择EMS档位（强度）
同时按下左右两端控制器+/-按键
- 各模式EMS可调节的档位（强度）共有5档。
· 0档位用于加温护理。
· 加温模式不可调节档位。模式切换后需花费约1分钟才会感觉温热。
· 如下图所示，发出的蜂鸣声因设置档位的不同而有所差异。

0档	哔—
1档	哔
2档	哔哔
3档	哔哔哔
4档	哔哔哔哔
在0档状态下按“-”按键*	哔—
在4档状态下按“+”按键*	哔—

*在0档状态下按“-”按键，以及在4档状态下按“+”按键时，均会发出“哔—”的上下短响声。

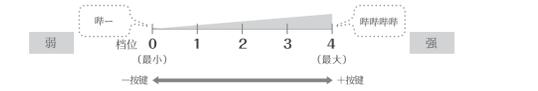

注意

- 初次使用或操作熟练前，请务必将档位设定在1档（最小）使用。
- 如感觉肌肤干燥，可在使用过程中补充水分。操作时，请先关电再戴上眼罩。
- 请勿将EMS档位（强度）调节到感觉疼痛的程度。

- 4 护理后
设置护理模式后约10分钟，会自动关机。
关机时，会响起“哔—哔—”的蜂鸣声。
按摩肌肤上残余的护肤品直至吸收。
- 如中途需停止使用，请同时按下左右两端电源/模式按键1秒以上即可关机。

- 建议使用频率为每日1次。（最多1日可使用2次）
· 设置护理模式后约10分钟，会自动关机。
· 以上使用频率仅供参考。请根据自身肌肤状态使用。
· 如肌肤出现异常情况，请立即停止使用。
· 如需连续使用，建议间隔5小时以上再使用。

使用后

保养方法（控制器）

使用后，为保持控制器清洁，每次使用后请进行清洁保养。
清洁前，请先拆下控制器。

⚠ 警告

- 清洁时，务必确保处于关机状态。
否则可能会导致触电、短路、或起火。
- 请勿用水冲洗。
本产品非防水产品。
否则可能会导致产品故障。



- 1 用拧干的湿毛巾擦拭残留污渍。
顽固污渍难以清除时，请用布沾上稀释过的中性清洗液轻轻擦拭干净。

⚠ 注意

- 请勿在沾有化妆品、美容液或凝胶等护肤品的状态下放置。
- 请勿使用碱性清洗液、酒精、稀释剂、汽油、卸甲等液体擦拭本机。
- 由于产品特性，在强力摩擦时，电极可能会出现掉色情况。清洁时，请使用可以弄脏的布。



保养方法（眼罩）

使用后，为保持眼罩清洁，每次使用后请进行清洁保养。
清洁前，请先拆下控制器。

- 1 拆下控制器后，用温水清洗眼罩。
顽固污渍难以清除时，请用布沾上稀释过的中性清洗液轻轻擦拭干净。
- 2 用干燥的毛巾擦干。
避免水滴及凝胶等残留在电极上，请充分擦干。
- 3 放置在通风干净的场所晾干。
如残留有污渍、水的状态下放置，可能会导致发霉、变色或产生异味的问题。



⚠ 注意

- 请勿在沾有化妆品、美容液或凝胶等护肤品的状态下放置。
- 请勿使用热水清洗。
- 请勿使用碱性清洗液、酒精、稀释剂、汽油、卸甲等液体擦拭本机。



安全注意事项

- 使用前，请仔细阅读“安全事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时，请立即停止使用。
- 如果在故障状态下使用，可能会对身体健康产生不良影响，请务必注意。
- 此处的注意事项标明了与安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 未表明危害及损害的大小和紧迫程度，将设想因误操作而发生的情况分为“危险”、“警告”、“注意”三个事项。

●关于注意事项
⚠ 危险 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。
⚠ 警告 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。
⚠ 注意 不正当使用本产品可能会导致人身伤害或引起财产损失。
<small>※所明财务受损，是赔偿及房屋、家具以及家具、宠物的损害。</small>
●关于标识符号
 表示禁止的事项。
 表示 必须遵守 的事项。
 表示 务必注意 的事项。

⚠ 危险（使用和保管相关事项）

- 以下人员谨慎使用。
 - 可能会影响医用电子仪器的正常工作。
 - 正在使用以下医用电子仪器。
 - 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
 - 人造心脏等维持生命的医用电子仪器
 - 心电图等携带式装置

⚠ 警告（使用和保管相关事项）

- 以下人员谨慎使用。
 - 否则可能会引发事故或主机故障。
 - 正在接受治疗者、身体正在发育者、急性病患者、结核病患者、发烧患者、高血压和传染病患者、恶性肿瘤和血液病患者；
 - 内科疾病患者、患有皮肤病、过敏性体质、遗传性皮炎、肌肤敏感或脆弱的人；
 - 确诊无法感知温度的患者；
 - 患有眼部疾病的人（白内障、绿内障、视网膜脱落、眼底出血、飞蚊症等）；
 - 患有深度近视的人（600度以上）、曾接受过眼部或脸部手术的人、正在接受眼部或脸部治疗的人、过分疲劳、身体不适者；
 - 处于怀孕、怀孕、经期、哺乳期，以及正在服用安眠药物的人；
 - 因长期使用类固醇类激素药物或肝功能障碍而引起毛细血管扩张的人。

- 请勿用于指定以外的部分以及下列部位的护理。
 - 可能会引发事故或主机故障。
 - 切伤、进行过整形等手术的部位、口腔内、黏膜等。
 - 皮肤因过度日晒而刺痛发炎的人；
 - 皮肤过敏或有严重炎症的人；
 - 凸起的黑痣、病毒性疣、痤疮、眼结、眼泡。
 - ※自己无法判断时，使用前请咨询医师
- 请勿用于商业等连续使用用途。
 - 可能会引发事故或主机故障。
- 请勿将控制器泡于水中。
 - 可能会引发事故或主机故障。
- 请勿在易燃性物品（酒精、稀释剂、汽油、卸甲液等）附近使用。
 - 可能会引发爆炸或火灾。
- 请勿在通电状态下持续放置。
 - 可能会引发火灾或事故。

- 请勿让无法表达自己意愿的人士使用。避免让残障人士使用。未成年人需先得到监护人同意，并在监护人的陪同下使用。
 - 可能会引发事故或人体受伤。
- 请勿于儿童接触不到的场所，勿让儿童使用。
 - 可能会引发事故或人体受伤。

- 请勿用于使用说明书中注明的其他用途。
 - 可能会引发人体受伤或主机故障。

- 散发异味及异常发热时停止使用。
 - 可能会引起损坏或起火。

- 请勿拆卸、维修和改造。
 - 可能会引发火灾、触电或人体受伤。
 - 维修事宜请咨询经销商。

- 请勿放在不平稳的场所。请勿掉落或碰撞主机。
 - 可能会引发人体受伤、组件故障、触电或起火。

- 请勿在主机上放置重物。
 - 可能会引发人体受伤或组件故障。

- 使用中，如感觉眼球或眼周积热，请勿强忍，应立即停止使用。
 - 可能会引发低温烫伤。

⚠ 注意（关于使用和保管）

- 请勿用于脸部以外部位。
 - 可能会引起受伤。

- 请勿用于宠物护理。
 - 可能会引起受伤。

- 请留意肌肤是否出现异常。如出现不适请停止使用。

- 使用前**务必确认**电极**是否有裂痕、变形、破损等**。如出现**破损、故障问题**，**请勿使用**。可能会引起肌肤受伤等问题或症状恶化。

- 请勿用酒精、稀释剂、汽油、卸甲水等液体擦拭。
 - 可能会损伤主机表面。

- 请勿在浴室等高温环境或水中放置。请勿将产品带入桑拿或岩盘浴等高温场所。
 - 可能会引起受伤或组件故障。

- 请勿浴室内或装有水的容器附近充电使用。
 - 可能会引起触电、短路、起火或组件故障。

- 请勿与其他电子仪器（美容仪等）同时并用。
 - 可能会引起肌肤问题或产品错误运行。
 - 可以与MediSpa系列的某些产品一起使用。
 - 请确认产品说明书。

- 请勿用于户外场所。
 - 可能会引起故障。

- 连续使用时，请间隔5小时以上。
 - 可能会引起人体受伤或肌身发烫。

- 使用过程中如感觉身体不适或肌肤出现异常，请停止使用。
 - 如隔日后仍感觉不适，请向专业医师咨询。

- 初次使用或在熟悉使用前，请务必将档位设定在1档（最小）使用。即使EMS体感不强，也切勿随意将档位提高。容易引起肌肤受伤。请务必视自身肌肤状态使用。

- 如感觉肌肤刺痛，请调低EMS档位（强度）。如坚持使用，可能会引起肌肤疼痛。

- 使用后，请参阅“使用后”，每次清洁本产品上残留的美容液等。
 - 可能会引起组件故障或肌肤问题。

- 务必遵守以下项目。
 - 可能会引起事故、人体受伤或组件故障。
 - 请避免超出设定时间使用。
 - 要根据肌肤状态使用。
 - 如肌肤出现红肿、炎症、瘙痒等症状，请停止使用。
 - 过度日晒后，肌肤处于脆弱敏感状态时，请尽量避免使用本产品。

- 肌肤和电极间需保持充足的化妆品、美容液或凝胶等补水成分。当感觉肌肤干燥时，请关闭电源并摘下眼镜后再进行补水。在肌肤缺水状态下，EMS的传导会减弱，容易引起使用效果下降或肌肤问题。

- 请务必卸妆清洁脸部后使用。
 - 如卸妆使用，粉底可能会让肌肤颜色加深。

- 请确认肌肤无出现异常状况后再使用。
 - 如肌肤出现异常，请停止使用。

- 长时间不使用时，再使用前请务必确认本产品处于正常、可安全使用的状态。
 - 可能会引发事故或组件故障。

- 使用时请先卸下身上的金属产品（手表、项链、戒指、耳环）。可能会引发肌肤问题。

- 如感觉地震或打雷时，请停止使用并切断电源。
 - 如正在充电中，请拔下电源适配器。

- 使用过程中，如感觉隐形眼镜的摩擦感，请停止使用或将隐形眼镜摘下后再使用。

⚠ 警告（电源相关）

- 请勿损坏、弄破、加工、任意弯折、拉扯、扭拧、捆扎电源适配器及USB充电线。另外，如果承载重物或者被夹会引起电源适配器及USB充电线短路、火灾和触电。

- 请勿将导线在一起的线直接收纳。可能会引起断线、触电。

- 请勿通过拉动电源适配器或USB充电线来移动或抬起控制器。可能会引起触电、短路、起火及断线。

- 电源适配器及USB充电线或者插头松动时，请勿使用。
 - 可能会引起触电、短路、起火。
 - 维修事宜请咨询经销商。

- 请勿沾湿、淋湿、冲洗电源适配器及USB充电线。
 - 可能会引起触电、短路、起火及故障。

- 不使用或清洁时请务必先关机。不使用时，请从插座中拔出电源适配器及USB充电线。另外，请勿用沾湿的双手插拔插头。
 - 可能会引起触电、短路、起火。

- 从主机或插座按下电源适配器及USB充电线时，务必手持前端的插头拔出（避免触碰到金属部分）。另外，请勿用沾湿的双手插拔插头。
 - 可能会引起触电、短路、起火。

- 使用100～240V的交流电压。
 - 请确认电源适配器及USB充电线是否插好。请务必确认插头形状以及电压后使用。
 - 可能会引起火灾、触电及故障。

- 万一发生异常情况，请立即切断电源。
 - 如出现运行异常、冒烟、异响或异味时，请停止使用。

- 本产品请务必使用专用的电源适配器及USB充电线。另外，电源适配器直接插入端上的插座，不要使用排插。
 - 可能会引起触电、短路、起火及故障。
 - ※本产品附赠的USB线为专用充电线。

- 充电时，**请确认**充电端口**有没有沾上水渍以及残留护肤品**。
 - 可能会引起触电、短路、起火。

- 不使用或清洁保养时，请务必关闭电源。
 - 充电完毕后，请从插座上将电源适配器拔下。

- 请勿放在靠近火源、烈日下、浴室等高温高湿的场所，请勿放置在可燃性气体或易燃性物品附近，请远离加热设备。
 - 本产品内置充电式电池，可能会引起发热、起火、破裂及故障不良。

- 请勿放在靠近火源、烈日下、浴室等高温高湿的场所，请勿放置在可燃性气体或易燃性物品附近，请远离加热设备。
 - 本产品内置充电式电池，可能会引起发热、起火、破裂及故障不良。

- 请勿放在靠近火源、烈日下、浴室等高温高湿的场所，请勿放置在可燃性气体或易燃性物品附近，请远离加热设备。
 - 本产品内置充电式电池，可能会引起发热、起火、破裂及故障不良。

- 请勿放在靠近火源、烈日下、浴室等高温高湿的场所，请勿放置在可燃性气体或易燃性物品附近，请远离加热设备。
 - 本产品内置充电式电池，可能会引起发热、起火、破裂及故障不良。

- 请勿放在靠近火源、烈日下、浴室等高温高湿的场所，请勿放置在可燃性气体或易燃性物品附近，请远离加热设备。
 - 本产品内置充电式电池，可能会引起发热、起火、破裂及故障不良。

须知

保管方法

- 请保管在儿童接触不到、通风干净的地方。
- 长时间不使用时，请从主机和插座中拔掉电源适配器和USB充电线。
- 请勿放置在高温高湿的场所（火源旁、烈日下、浴室等）

保养与检查

- 长时间未使用时，使用前请务必确认本产品处于正常、可安全使用的状态。
- 本产品操作异常时，请咨询经销商，参照“疑似故障时”的内容，确认故障。故障仍未能排除时，请咨询经销商或联系中国官方总代理。
- 如本产品发生故障或有破损，可联系当地经销商或联系中国官方总代理。

保养与检查	使用本产品的过程中如果感觉异常，请在送交维修前确认以下事项。
下列症状	可能原因和处理方法
无法开机	→ 请长按电源/模式键约1秒钟。
→	→ 电池余电不足-请充电。
即使充电池只能使用几分钟	→ 本产品具有自动断电功能,开机10分钟后会自动关机
→	→ 电池余量减少,请及时充电。
无法充电	→ 电池寿命问题,请联系经销商或客户服务中心。
→	→ 请将电源适配器插入插座。
→	→ 确认磁吸式充电器是否朝正确方向连接。
EMS过强 (刺痛/疼痛)	→ 请按下“ - ”按键调低EMS档位。
→	→ 肌肤干燥,请适量补充眼部美容液等,保持肌肤湿润。
EMS过弱 (无感觉)	→ 请按下“ + ”按键调低EMS档位。
→	→ 电极未完好贴合肌肤,请重新正确佩戴眼镜。
→	→ 肌肤干燥,请适量补充眼部美容液等,保持肌肤湿润。
加温弱 无温感 (温感弱)	→ 请静候加温约1分钟。
→	→ 电池余量减少,请及时充电。

常见问题

Q 使用时间、使用频率的标准是什么？	A 建议每次使用约10分钟。 <ul style="list-style-type: none">※模式设定后约10分钟后，会自动关闭电源。 ※可根据自身的肌肤状态，可适当增加或减少使用次数。 ※肌肤感觉异常时，请立即停止使用。
--------------------	--

Q 能连续使用护理吗？	A 建议本产品1天使用1次，每次使用10分钟。如需连续使用，请至少间隔5小时以上。
-------------	---

Q 眼部美容液等每次使用多少量为合适？	A 针对本产品特性，眼部美容液充分使用时，所获得的EMS体感明显。如少量使用护肤品时，可能会感觉到刺痛。
---------------------	--

Q 能在浴室使用吗？	A 本产品不具备防水功能，请避免在浴室使用。
------------	------------------------

Q 能在睡眠时使用吗？	A 请勿在睡眠期间使用本产品。
-------------	-----------------

Q 为什么左右脸体感有差异？	A 因左右脸为非对称结构，可能导致左右脸的体感差异。此时可适当调节左右两边的EMS档位。
----------------	--

Q 为什么耳边会听到“滋滋”的声音？	A 此为电流流动的声音，本非产品故障。
--------------------	---------------------

Q 使用后肌肤出现红肿、炎症、瘙痒的症状。	A 对EMS的使用反应存在个体差异。如次日症状未有改善，请咨询专业医师。
-----------------------	--------------------------------------

Q 使用后感到不适及疲劳。	A 对EMS的使用反应存在个体差异。在不适感缓解前，请暂时控制使用频率。
---------------	--------------------------------------

Q 牙齿感到疼痛。	A 正在接受牙科治疗或口腔内嵌有金属牙时，感受较明显。针对具体不适的部位，请咨询专业医生。
-----------	---

Q 孕妇可以使用吗？	A 请勿在怀孕期间及产后未恢复前使用本产品。具体请咨询您的主治医生。
------------	------------------------------------

Q 可以在日晒后、剃毛后立即使用吗？	A 可能会引起肌肤发炎。如肌肤出现异常，请立即停止使用，并咨询专业医师。
--------------------	--------------------------------------

Q 肌肤泛红了。	A 由于加温器和硅胶施加的压力，可能会造成短暂的肌肤泛红现象。如隔日肌肤依然泛红，请咨询专业医师。
----------	---

Q 肌肤上留下了眼罩的印痕。	A 由于眼罩是由具有弹性的硅胶材质制成，硅胶带向上提拉所形成的物理作用，会对脸部施加一定的压力。根据每个人的不同肤质，可能会留下不同深浅程度的印痕，但是经过一段时间后，会自动消退。
----------------	--

Q 绑带太短了，让脸很难受。	A 雅萌有另售延长绑带。如有需要请另行购买。
----------------	------------------------

产品规格

额定电源	DC5V 0.5A
功率	最大约3.0W(充电时)
使用电池	锂电池
充电时间	约2.5小时 ※因充电环境不同，充电时间也稍有不同。
使用时间	约3小时（充满电的状态下） <ul style="list-style-type: none">※因使用环境及EMS档位不同，可使用的时间会有差异。
外形尺寸	眼罩：约W620 x H230(mm)（平方时，含固定绑带） <p>控制器：约W78 x H54 x D15（mm）（含电极部分）</p>
产品重量	眼罩：约98g <p>控制器：约32g/个</p>
材质	眼罩：硅胶 <p>控制器：ABS树脂</p>
制造国家	眼罩：中国 <p>控制器：日本</p>
配件	电源适配器 …………… 1个 <p>USB充电线（磁吸式） …… 1根</p> <p>使用说明书</p>
推荐环境温度	10℃～40℃

售后服务

- 充电电池
- 充电电池为消耗品。(不在质保范围内)
- 充电后使用时间极短时,可考虑电池寿命的问题

关于废弃

- 废弃本产品时,请依照当地的规定进行废弃。
- 本产品使用锂电池。

LiPion

- 日本以外国家有关保修咨询窗口
- 日本以外国家和地区,有关保修受理请查询购入店铺,或者通过雅萌YA-MAN全球官网 (https://www.ya-man.com/en/) 进行查询。