

使用手册

家庭用美容器 CAVISPA360 HDS-100B

目录

前言	1	护理后事项	22
安全注意事项	1	其他注意事项	24
在国外使用上注意事项	8	● 排除故障	24
产品说明	9	● 常见问题	26
使用前	11	● 产品规格	27
护理方法	14	售后服务	28



前言

衷心感谢阁下选购 YA-MAN 的產品。

- 为阁下安全着想，使用产品前请先仔细阅读本使用手册。
- 阅读后请放置于可经常查阅的地方。
- 将本产品转让他人时请务必同时附上使用手册。

安全注意事项

- 使用前请仔细阅读「安全注意事项」所有指示内容，以确保能正确地使用。
- 请按照操作手册的指示使用。
- 如发生异常情况时，请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 请绝对不要在故障状态下使用，可能对身体造成坏影响及发生危险。
- 本手册所列注意事项对阁下的安全非常重要，请务必遵守。
- 注意事项分为「危险」、「警告」及「注意」，并清楚列明危险程度，以及错误操作可能造成的伤害。

●关于注意事项

 **危险** 不正当使用本产品会引起造成严重伤亡的危险。

 **警告** 不正当使用本产品可能引致严重伤亡事故。

 **注意** 不正当使用本产品可能令个人受伤，并引致财物[※]损失。

※财物损失所示范围包括对房屋、财产、宠物等损害。

●关于符号

 此符号表示禁止进行的事项

 此符号表示务必遵守的事项。

 此符号表示该小心注意的事项。

危险 (关于使用及保管)

● 以下人士请勿使用。

可能会影响电子医疗仪器运作。

◆ 使用电子医疗仪器的人士

• 心脏起搏器等植于体内用的仪器 · 氧合器等维持生命用辅助仪器 · 心电计等携带式装置。



禁 止

警告 (关于使用及保管)

● 以下人士请勿使用。

否则可能造成事故或发生问题。

• 正接受治疗人士 · 发育中人士 · 急性疾病 · 结核性疾病 · 正在发热人士 · 高血压 · 传染病疾病 · 恶性肿瘤
• 患有血液疾病 · 患有内脏疾病 · 患有皮肤病 · 过敏体质 · 过敏性皮肤炎或皮肤有问题人士 · 皮肤敏感的人
• 物理刺激产生病理性色素 · 因晒伤引起皮肤发炎人士
• 极度疲劳 · 身体抱恙人士 · 饮酒后 · 怀孕期间、经期期间或授乳期间人士 · 服用催眠药人士
• 因长期使用类固醇荷尔蒙药物引致毛细管扩张或肝功能紊乱 · 正在牙齿治疗的人



禁 止

● 除指定部位外，请勿使用于以下部位，

否则可能造成事故或发生问题。

• 伤口 · 曾接受整形手术之部位 · 口腔内、阴部或粘膜等 · 喉核 · 人工植牙 · 隆起的痣 · 过滤性疣 · 暗疮
• 皮肤发炎的部位 · 皮肤痕痒和泛红部位 · 头部 · 心脏正上方(围绕太阳神经丛)
• 手指、手腕、脚踝等面位置较细的部位(整个电极不接触的部分) · 面部(运动模式/细胞模式使用时)
• 耳 · 鼻 · 唇 · 眼球 · 眼睑及眼部周围 · 手肘、膝盖、锁骨、前额等皮肤较薄的部位(骨头上方)

*若无法自行判断, 请使用前先征求医生意见。

● 切勿长时间连续使用。(用于商业用途等)

否则可能导致受伤及发热等。

● 切勿在头上使用。

否则可能导致受伤。

警告 (关于使用及保管)

● 切勿带到桑拿浴室或岩盘浴室内使用。

否则会导致主机可能会发热、导致受伤或损坏产品。



禁止

● 切勿放置于浴室或水中。

否则可能会导致触电、短路、起火或故障。

● 请勿使用易燃物品（酒精、稀释剂、汽油、去除剂、喷雾剂等）。

否则可能会导致火灾、短路或受伤。

● 若出现异味或异常发热，请停止使用。

否则可能会造成损坏或引致起火。



出现异味
异常发热时
禁止使用

● 请勿在使用过程中将重物放在主机上、让主机跌下或受强烈撞击。

否则可能导致受伤或机件故障。



禁止撞击

● 请勿放置不平稳的地方。请勿让主机跌下或受撞击。

否则可能会造成本机故障。另外，坠落脚上会造成受伤。



禁止坠落

● 请勿让无法表达意愿或对皮肤感觉较弱的人士使用。

否则可能会导致意外或受伤。



使用者的
限制

● 避免与儿童或残疾人士使用。未成年之人士须要在监护人的监督下及同意方可使用。

否则可能导致受伤。

● 除美容用途以外，请勿使用。

否则可能会导致受伤或损坏本机。



禁止
其他用途

● 请勿以本使用手册以外的其他用途使用。

否则可能导致受伤或机件故障。

● 请勿浸入或冲洗充电器。

否则可能会导致触电、短路、起火或故障。



禁止沾水

● 请勿拆解、维修及改装。

否则可能会引致起火、触电或身体受伤。

如要维修，请联络当地经销商。



禁止分拆

警告 (关于使用及保管)

- 首次使用前请务必进行预先皮肤测试。

否则可可能导致事故或伤害。

- 请勿强行按压。

否则可可能导致事故或伤害。



务必遵守

- 请勿将其置于火源、火焰、浴室等高温潮湿的地方，或靠近易燃气体或易燃物品的地方。

此外，请勿在高温下充电或使用。远离加热电器。

本产品内置可充锂电池。它可能导致过热、火灾、破裂或故障。



起火注意

- 切勿放入微波炉或高压容器中。

否则可能导致发烧、火灾或爆炸。



破裂注意

注意 (关于使用及保管)

- 除了水之外，请勿使用其他护肤品。

(不适合使用护肤品)

- 油性 · 磨沙产品 · 刺激性强爽肤水 · 肥皂 · 温感效果的爽肤水、按摩凝胶
- 含有脂肪燃烧成分的乳液、按摩凝胶等。



禁 止

注意（关于使用及保管）

- 请勿将电极头与金属接触。
否则可能导致过热、火灾、故障或损坏。
- 使用前，请确保电极头没有裂缝、变形或破损，如果破损或破损则切勿使用。
否则可能会导致皮肤问题和故障。
- 切勿使用酒精、稀释剂、汽油或溶液等溶剂擦拭主机。
否则可能会对身体表面造成伤害。
- 请勿在温泉或加入入浴剂的热水中使用。
否则可能会造成故障。
- 请勿使用于宠物。
否则会导致损伤。
- 切勿将电源开启后放在地板或家具上。另外，使用后请关闭电源。
否则可能会导致家具或伤害等损坏。
- 开启电源时，请勿与其他美容产品或电器接触。请勿同时使用其他电子产品（电热毯、床上用品、被炉等）。
可能会导致主机受伤或损坏。
- 请勿穿着衣服使用。



禁 止

- 请勿在室外使用。
否则可能导致主机故障或故障。



禁 止
室外使用

注意 (关于使用及保管)

- 使用前请除下首饰（如项链和耳环）。

否则可能导致意外或伤害。

- 请在使用或首次使用之前，请选择强度1。

否则可能导致意外或伤害。

- 在面上使用时，务必要卸妆。

用于化妆时，粉底可能会使你的皮肤变黑。

- 如果你在沐浴时未被水覆盖的部位下使用，请务必使用较低的强度。

当在水中使用时，感觉EMS刺激比在水外使用时更弱。此外，在调节到你选择的强度后，如果在同一水位以外使用本产品，您可能会感受到EMS的强烈刺激。

- 在进行护理途中补充在电极表面和皮肤之间化妆品的护肤品、水等。

如果护肤品和水的量低，EMS（肌肉刺激）和超声波震动（冲击波）的输出将会变差及效果将会降低，并且可能发生皮肤问题。

- 如果感到不适或皮肤出现问题，请停止使用。

如果你的皮肤有任何问题，请小心使用。如果你的皮肤不适合，请停止使用。

- 请勿长时间使用，并使用一次10分钟作为标准。

过度使用可能会损伤你的皮肤。以上只用作做用标准，请在观察皮肤状况时使用。

- 护理后，请参阅“护理后事项”（第22页），除去粘附在产品上的凝胶和其他物质。

否则可能会导致皮肤问题和故障。

- 请务必遵守以下事项。

意外或受伤可能导致本机损坏。

- 避免在同一个地方使用超过一定的时间。（参阅第11页）
- 根据你的皮肤状况使用。
- 如果患有皮疹、炎症或瘙痒等皮肤问题，请勿使用。
- 晒伤后，切勿立即同时使用去除角质产品及面膜。
- 护理后务必关闭电源。



务必遵守

警告 (关于电源)

- 请勿损害、加工及或捆扎充电器。

将电线放置于重物下或被夹紧可能导致电线破损、触电或起火。



禁止
不适当处理

- 移除充电器时，请勿移动或抬起产品。

否则可能会导致触电、短路、起火或断线。



禁止移动
电源线

- 请勿使用已损坏的充电器或松动的插座。

否则可能会导致触电、短路或起火。
如要维修请联系经销商。



禁止使用
延长插座

- 拔下充电器时，请务必握住电源插头并将其拔出（不要触摸金属部件）。此外，请勿在手沾湿状态下拔除或插入插头。

否则可能会导致触电、短路或起火。



拔除插头

- 拔下充电器时，请务必关闭电源，并在闲置时从电源插座上拔下充电器。

请勿在手沾湿状态下拔除或插入插头。

否则可能会导致触电、短路或起火。

- 务必使用100~240V。将充电器牢固地插入。

否则可能导致火灾、触电或故障。



务必遵守

- 务必使用专用的充电器。

将充电器直接插入墙壁插座，切勿连接延长插座。

否则可能导致火灾、触电或故障。

- 充电前确保水滴不会沾附在充电端子上。

否则可能会导致触电、短路或起火。

- 万一发生异常情况时，请立即关闭电源。

若出现运作异常、冒烟、发出怪声或有异味时，切勿继续使用。

- 使用后务必关闭电源。

- 如果你感到地震或闪电时，请停止使用并关闭电源。如果正在充电，请从电源插座上拔下充电器。

在国外使用上注意事项

⚠ 警告

- 请务必连接100~240伏交流电使用。

否则可能引致起火或触电。



务必遵守

- 务必确认插头形状及电压后才使用。

否则可能会导致机身发热、起火或故障。



起火注意


- 插头形状及电压可能会按区域有所不同，请先行确认后才使用。

- 关于充电器插头的转换，请向旅行社或电器销售店查询。


产品说明

主机

●正面

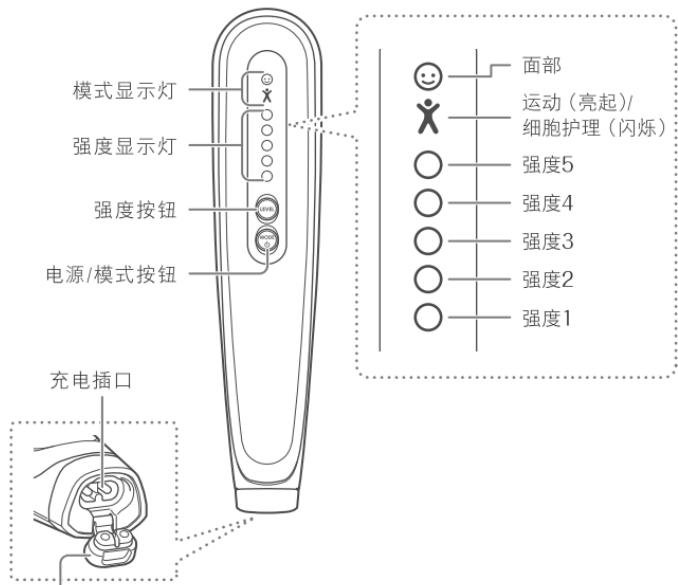

●背面

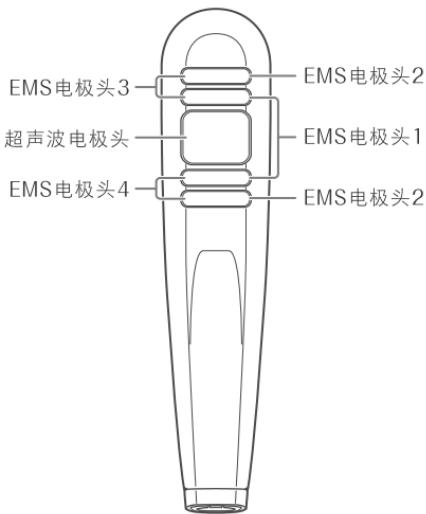

充电插口盖子*
※除充电外,请保持电池关闭状态。

配件

- 座台



充电或不使用产品时
请将本机放在座台上。

- 充电器



- 使用手册

功能

- 超声波（冲击波）**

以超声波震动皮肤。

- EMS**

以电流刺激肌肉。

- 防水规格**

机身是采用IPX7防水规格。可以在浴室、水边等地方使用。

※充电器不设防水功能。

- 自动关机功能**

开启电源大约10分钟后，会发出声「哔哔」声，电源将自动关闭。

※在面部模式的情况下，10分钟后，会发出「哔」声，直到大约10分钟才会关闭电源（整个面部的使用时间为标准）。

使用前

使用注意事项

使用本产品前请仔细阅读以下内容并正确使用。

- 当您第一次使用本产品时，请务必进行皮肤测试（第13页）。
- 使用本产品时，请用水、乳液或保湿凝胶滋润皮肤，然后将电极头贴在皮肤上。
- 务必除下首饰（如项链和耳环）。
- 在面上使用时务必要卸妆。
- 请遵照以下使用时间和使用频率作为标准。

1个部位10分钟、一星期2~3次

全身30分钟内一次

（左臂和右臂、大腿、小腿等共10分钟）

如果想再次在同一站部位上使用EMS，请相隔24小时或更长的时间后使用。


※以上只是参考。请在观察皮肤状况时使用。

- 务必使用专用的充电器进行充电。

请勿在浴室或洗手间等炎热潮湿的地方充电。

请在10至35℃的环境温度范围内为电池充电。

充电

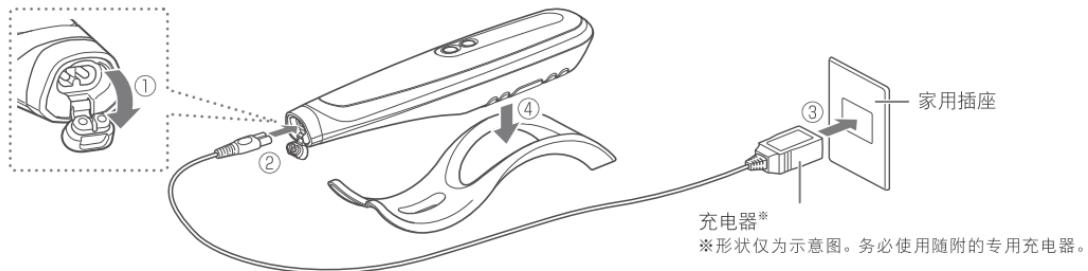

- 充电插口盖子打开，连接充器开始充电。充电中面部模式显示灯（ / ）交替闪烁。
 - 充电完成时，面部模式显示灯（ / ）会亮起约1分钟后熄灭。
 - 当室温约为25℃时，约在3小时内充满电并可以运行约1.5小时。充电和操作时间因电池电量和充电环境而有异。
- ※约10秒后仍未开始充电时，请检查充电器是否松动。

注意

- 如主机及充电端子沾湿时，请将水分彻底擦干。留有水分状态下充电可能会导致触电、短路、起火或机件故障。
- 请将充电器直接插入墙壁上的插座上。如连接延长插座，可能会导致难于充电。
- 购买后首次充电时，请在充满电后才使用。
- 首次使用或长时间闲置时，即使显示完全充电可能仍只能操作短时间。请再度充电后才使用。
- 如充电线破损，请更换充电器。

皮肤测试

初次使用产品时请务必进行事前皮肤测试。

⚠ 注意

- 为确认皮肤是否适应本产品，请务必事先进行测试。
- 进行部位如出现红疹、发红、痕痒或受刺激等异常情况，请立即中止测试并用清水冲洗。
- 如皮肤感到异常请停止使用。


1 用肥皂清洗手腕内侧
并用毛巾擦拭



2 用水、乳霜或保湿啫哩等涂抹
于手腕内侧，开启电源并以运动模式使用约3分钟。
(第14及15页)

请务必调节至强度1进行。

手握的方法

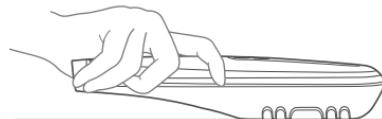

请按上图所示的方法紧握机身，以电极头贴于皮肤上沿着箭咀的方向缓缓移动。

3 确认皮肤是否有异常

如24小时内皮肤没有出现泛红或发热，便可以使用。



皮肤

使用方法

基本的使用方法

1

使用水、乳液、保湿凝胶等充分润湿皮肤。

皮肤干燥的状态下使用，会较难感觉效果，或导致皮肤出现问题。

※于浸浴、淋浴使用时，请以水充分沾湿皮肤后才使用。

注意

请勿同时使用以下的护肤品。

- 油性产品
- 磨砂产品
- 刺激性爽肤水
- 肥皂
- 温感效果的乳液或按摩凝胶
- 含脂肪燃烧成分的乳液或按摩凝胶

2

启动电源

长按电源 / 模式显示灯约3秒。

本机发出「哗」一声蜂鸣声，模式显示灯（）及强度1显示灯会亮起。（第9页）



长按电源 / 模式按钮
约3秒。

注意


- 使用时请拔除充电器。
本机使用时不能同时充电。

3

选择模式

同时按下电源 / 模式按钮，会发出「哔」一声蜂鸣声，以切换模式。

模式显示灯 (✗/☺) 确认所选模式。

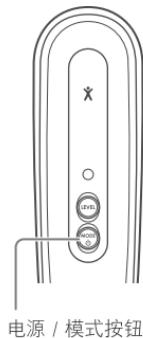

●面部护理时务必使用面部模式。


否则可能导致皮肤问题。

4

选择强度


每次按强度按钮，都会发出「哔」一声，EMS强度会切换（0到5级）。

强度显示灯会亮起确认强度。

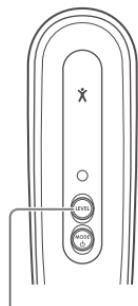

强度按钮

EMS
强度

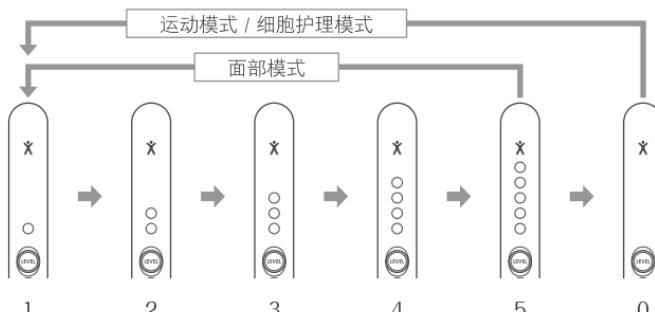

※强度等级0，不会输出EMS。

※面部模式，没有强度0的设定。

※超声波的强度不会变更。

注意

- 首次使用时请选择强度1开始。
- 请选择合适的强度。

5

贴于皮肤上

运动模式/细胞护理模式

将整个电极板贴在皮肤上，然后慢慢滑动（约2cm/1秒）。



面部模式

将EMS电极板贴在皮肤上并缓慢滑动
(约2~5cm/1秒)。

请勿不要太用力按压皮肤。

※如果难以滑动，请立即补充水分、乳液、
保湿凝胶等。

有关各部位的护理方法，请参阅下一页。

注意

- 请勿将电极头固定并保持在一个部位。否则可能会导致皮肤问题。
- 如果你的皮肤有任何问题，请小心使用。
如果你的皮肤不适合，请停止使用。

6

关掉电源

按住电源/模式按钮（约3秒）。

将发出「哔哔」的蜂鸣声并且显示灯将熄灭。

在浴缸中使用要点

- 用水彻底擦拭皮肤。
- 请勿不要太用力按压皮肤。否则会难于滑动。
- 在水中下难以滑动。

如何在每个部位上使用

正确使用电极头（第15页）。根据不同的部位，使用单手在身体上护理能达致最佳效果。

用于身体（运动模式/细胞护理模式）

→ 移动方向 (○) 易于感受EMS的部位

※请使用EMS电极头1或2中的任何一个或两个紧贴于在皮肤上。

※以单手握着本机贴着部位时，显示灯将会显示。请勿不当地按下按钮。


※请勿强行按压皮肤。

●上臂（左臂5分钟/右臂5分钟）




- 将手掌朝上，将电极头推向上臂，并将其从肘部移到侧面。
- 适用于上臂内外。
- (○) 的部位为标准、以电极头按压。

●腹部（腰部）10分钟


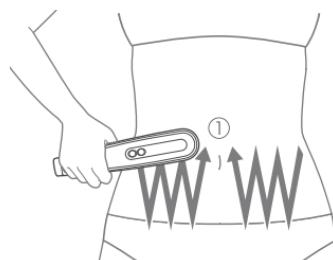


- ① 将锯齿形从侧面移动到肚脐。
- ② 以单手按着本机，将电极头放在腰部，然后沿着骨盆朝向脚底移动。

(○) 的部位为标准、以电极头按压。

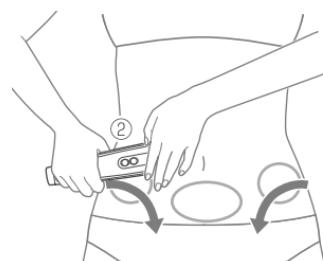

●大腿(左腿5分钟/右腿5分钟)

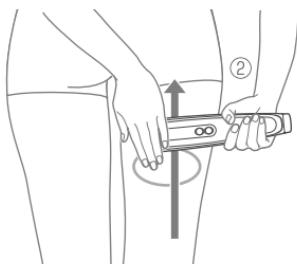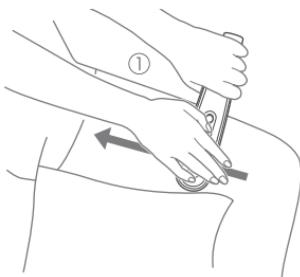

单手握着本机，将电极头紧贴及按压于皮肤上。

①将大腿内侧部分从膝盖移向脚底。

②将大腿后部从膝盖移向脚底。

○的部位为标准、以电极头按压。


●小腿(左腿5分钟/右腿5分钟)



· 单手握着本机，将电极头紧贴及按压于在小腿上，然后将其从脚踝移到膝盖后面。

○的部位为标准、以电极头按压。

●背部（10分钟）

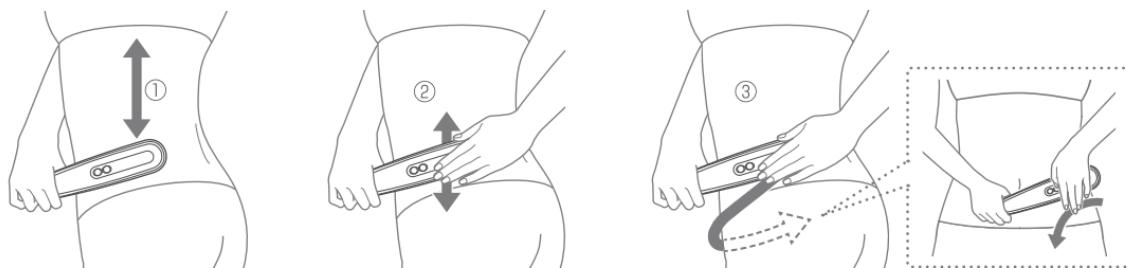

①手握本机及将手转到腰部另一方，将其放在背上，并上下移动到下侧。

※稍稍扭动身体会易于移动。

②将电极板紧贴在靠近臀部的背部，以单手按着本机并上下移动。

③围绕脚底移动大约一次10次。

④如果护理另一侧，请将本机握住另一只手并重复①～③。

背部上方的
部位为标准、以
电极板按压。

※小心不要掉落主机。



面部护理（面部模式: 10分钟）

※请将EMS电极头3或4的任何一个或两个紧贴于皮肤上。



● 在面上护理时，请务必使用面部模式。

否则可能会导致皮肤问题。

将电极头轻轻按下，请按以下步骤顺序滑动。

- ①沿着颈部从上到下
- ②从下巴到耳朵下方
- ③从鼻子的一侧到耳朵的一侧
- ④从眼睛下方到太阳穴
- ⑤沿着颈部从上到下



注意


- ・进行面部护理时，EMS可能会刺激牙齿的神经。请勿强行按压，并透过滑动进行护理。
尤其是曾接受补牙的人士请注意。
- ・请注意，护理颈部时可能会感受到强烈的EMS刺激。

● 护理前请卸妆。

● 护理前请除去下首饰（项链、耳环等）。

禁止使用部位

请勿于眼睑、眼睛周围、喉核、鼻子、耳朵、嘴唇、前额（下图中//部分）使用。

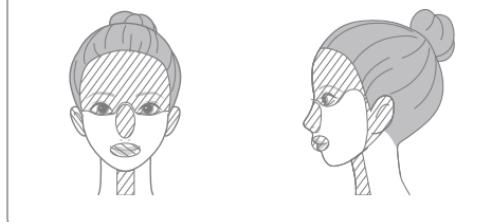

使用后

清洁方法

为保持主机清洁，请于每次使用后进行清洁保养。



警告

- 请清洁时务必关闭电源。
否则会导致触电、短路、故障及起火。

1 用湿布擦去表面污垢

如果污渍较严重，请用沾有中性洗涤剂的海绵或布擦拭。

2 请以毛巾等将机身抹干

- 请用干布擦拭，以防止水分留在充电插口和电极头上。
- 请用棉棒等擦拭充电插口。

3 请放于通风之处风干

如在沾湿状态下闲置会造成故障。

注意

- 请勿暴露在直射阳光下。
- 请勿使用除污剂、酒精、稀释液、汽油或卸甲水等清洁。



本机可以用水清洁。

清洁后后，请勿于本机上残留水滴，请用干布或棉棒擦干。

※请勿使用热水。

※请不要浸入水中。

※充电器并非防水。

储存方法

- 如长时间闲置本机，请在存放前进行清洁。
- 如长时间闲置本机，请关闭主机的电源并将其放在附随的座台上并存放。
- 请关掉电源并将充电插头从插座中拔除后妥善储存起来。
- 请勿放置于火源附近，炽烈阳光下或浴室等潮湿的地方，应将其存放于通风的清洁地方。
- 请把本机放置于儿童无法触及的地方。

保养及检查

- 长时间闲置后，请于使用前先检查其操作是否正常及安全。
- 本机操作发生异常时，可先参照「排除故障」（第24页）部分进行检查，如仍无法解决，请向产品销售商查询。
- 如有故障或受损，请向所购买的产品销售商查询。

其他注意事项

排除故障

如使用过程中感到异常，请委托维修前对照以下项目进行检查。

状况	可能的成因及解决方法
无法开机	→ 请长按电源/模式按钮约3秒。
	→ 电池没电。请充电（第12页）。
	→ 充电中。请拔除充电器。
充电后只能运作数分钟	→ 电量不足。请充电约2小时。
	→ 自动响闹功能启动（第10页）。
无法充电或 充电指示灯没有闪烁	→ 将充电器牢固地插入充电器插口和本机座台。
	→ 已经完全充电。充电完成后 / 模式指示灯熄灭。
超声波电极头发热	→ 电极头透过超声波震动加热。 如果太热，请关闭电源并等待10分钟再重新开启。
超声波震动 感觉不到(冲击波)	→ 超声波震动（冲击波）由于轻微的震动，所以没有明显感觉。 (面部模式不设超声波输出)
无法变更超声波的强度	→ 超声波的强度不能调节。
使用时发出「吱」声音	→ 超声波震动的声音。没有问题

状况

可能的成因及解决方法

感觉不到 EMS
(肌肉刺激)

→ 如果皮肤干燥,请在用水、乳液或保湿凝胶润湿后使用。

→ 如果强度太低,请选择强度按钮调高EMS强度。

→ 如果护理部位难以感觉电流刺激,请转换其他部位(第18-21页)。

→ 感觉因人而异。

→ EMS电极头没有接触皮肤。
模式/细胞护理模式下选择EMS电极板1或2,
面部模式选择EMS电极板3或4。

→ 如果强度太高,请按强度按钮降低EMS的强度。

EMS(肌肉刺激)应到疼痛

本机发热

→ 请关闭电源并闲置10分钟后再使用。

常见问题

Q 是否可于入浴时使用?

A 本机具有防水功能，可于漫浴或淋浴时使用，但请勿将本机放置水中。
如无法畅顺运作，请轻轻的贴于皮肤上使用。
※避免于温泉或加入入浴剂后使用。

Q 是否有建议使用方法?

A 建议在身体温暖时使用，例如在沐浴期间或之后使用。

Q 桑拿浴或岩盘浴时是否可使用?

A 因机身在高温情况下，可能有烫伤皮肤的危险，故请勿在进行桑拿浴或岩盘浴时使用。

Q 即使皮肤干燥也可以使用吗?

A 皮肤在干燥状态下会减低对EMS电流的敏感度。如EMS电流感觉太弱，请使用水、润肤乳液或保洁凝胶等润湿皮肤后再进行护理。

Q 敏感皮肤是否都可以使用?

A 开始时请儿进行“预先测试皮肤”（第13页）并检查皮肤的状况。
如皮肤没有出现异常，便可放心使用。
如发现使用后皮肤出现异常状况，请立即停止使用。如果难以自行判断，请咨询你的医生。

Q 那种类型的化妆品适合滋润皮肤?

A 你可以使用现有的爽肤水、乳液和保湿啫喱。
但是，请勿使用以下护肤品，否则可能会导致皮肤问题并损坏本产品。
(不适合使用的护肤品)
·油性·磨沙·肥皂
·刺激性爽肤水
·温感效果的爽肤水、按摩凝胶
·含有脂肪燃烧成分的乳液、按摩凝胶等。

产品规格

电 压	DC9V 1.0A
耗 电 量	约6.5W
使 用 电 池	锂离子电池
充 电 时 间	约3小时 ※会因充电环境影响充电时间。
防 水 规 格	IPX7
外 形 尺 寸	主机: 约W52×D242×H50(mm)
产 品 重 量	主机: 约280g
材 质	主机: ABS树脂、聚碳酸酯 电极头: ABS树脂(镀铬)、铝
生 产 地	日本
配 件	充电器 1个 座台 1个 使用手册

售后服务

充电池

- 充电电池是消耗品。（不在保修范围内）
- 即使充电使用时间仍极短，可能是因为电池寿命完结（充电时间原则为300次）。
- 如果需要更换电池，请咨询您的经销商。

废弃

- 请遵照当地政府规定弃置产品。
- 本产品使用的锂离子电池。



Memo

关于保养

- 如果在正常使用过程中发生故障，我们保证自购买之日起保养一年（不包括消耗品和配件）。
此外，超过保养期可能会另取运费。
- 我们将在保修期后以实际成本修复本产品的故障问题。
- 请仔细阅读免费维修政策的说明，因为即使在保修期内也可能需要付费维修。

