

雅萌

使用说明书

家用美容仪

Photo PLUS EX eye pro

HRF-20-EYE



目录

安全注意事项 ······	1
海外使用注意事项 ······	6
特点 ······	7
各部位的名称 ······	7
使用前 ······	8
使用方法 ······	13
使用完毕后 ······	17
排除故障 ······	18
售后服务 ······	21

衷心感谢阁下选购YA-MAN的产品。

- 为阁下安全着想, 使用产品前请先仔细阅读本使用手册。
- 请妥善保存本使用手册, 以便日后参考。
- 如将本产品转让他人, 请务必同时附上使用手册。

HRF20EYE-3-001SC

安全注意事项

- 请仔细阅读所有指示内容,以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请按照操作手册的指示操作。
- 如发生异常情况时,请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 于故障状态下使用,会对身体造成不良影响及构成危险,请立即停止使用。
- 本手册所列注意事项对阁下的安全非常重要,请务必遵守。
- 注意事项分为“危险”、“警告”及“注意”三类,及清楚列明危险程度,以及错误操作能造成的伤害。

●关于三类注意事项



不正当使用本产品会引起严重伤亡事故。



不正当使用本产品可能引致严重伤亡事故。



不正当使用本产品可能令个人及他人受伤,并引致财物损失。
※财物损失所示范围包括对房屋、财产及宠物等损害。

●关于三类标示符号



此符号表示禁止进行的事项。



此符号表示务必遵守的事项。



此符号表示该小心注意的事项。



危 险

切勿在以下情况下使用,



否则可能会导致医疗仪器发生故障

◆ 使用医疗仪器的人士。

- 氧合器等植于体内使用辅助仪器。
- 心脏起搏器等植于体内使用的仪器。
- 心电计等携带式装置。



警 告

请勿于以下情况下使用,

否则可能对皮肤或身体造成损伤。

· 正接受治疗之人士 · 成长或青春期 · 急性疾患 · 结核性疾病

· 发烧 · 高血压 · 传染病 · 癌症 · 血液疾病

· 内脏疾病 · 皮肤病 · 过敏性体质 · 过敏性皮炎

· 皮肤敏感 · 过度疲劳

· 皮肤敏感或脆弱 · 身体抱恙

· 受酒精影响之人士 · 怀孕期间、经期期间或授乳期

· 正服用安眠药之人士

· 皮肤上有发痒或病理性色素

· 皮肤因过度日晒而刺痛发炎的人

· 因长期使用类固醇荷尔蒙药物引致毛细血管扩张或肝功能紊乱之人士

· 眼部或面部曾做过手术 · 眼部或面部有疾病或正在治疗中

· 高度近视 (-6D以上)



禁止

对于以下身体部位,或存在以下状况,切勿使用,

否则可能对皮肤或身体造成损伤。

· 割伤 · 手术(含整形手术)部位 · 口腔内、阴部周围或粘膜 · 暗疮

· 皮肤溃烂化脓 · 皮肤上有发痒或病理性色素

· 过滤性疣或黑皮病 · 病毒感染性疣 · 喉核 · 眼球

· 眼睑(冷敷模式使用时除外)、

眼窝(眼部护理及冷敷模式使用时除外)

※RF LED模式的光可以照射于眼睑或眼的周围。

请闭上眼睛,将电极板放离开肌肤5cm或以上。

请勿直视LED光。

若不能确定自己是否有上述状况,请事先征求医生意见。



禁止

请勿长时间贴于同一位置上使用,并请于皮肤上移动位置。请勿用于机器护理头部无法触及的部位。

否则可能会引致灼伤或低温灼伤。



禁止

请勿于火中、加热装置或高温地方充电、使用或放置,因本产品使用内置充电式电池,可能会导致过热、起火、破裂而造成损坏。



限制
使用对象

请放置于儿童无法触及的地方,不可让儿童使用。

否则可能引致故障或身体受伤。



用途以外
禁止

请勿作使用手册以外的其他用途使用。
否则可能导致身体受伤,或机件故障。



警 告



请勿在易燃物质(如酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂或定型喷雾等)的附近使用。否则可能会引起起火、触电或身体受伤。



本产品必须使用专用电源插头。电源插头必须直接插入电源插座,请勿使用延长线。否则会导致触电、短路或起火。



请勿让无法表达其意愿的人士使用及避免让残障人士使用。否则可能引致故障或身体受伤。



若出现异味或异常发热,请停止使用。否则可能会造成损坏引致起火。



请确保充电时电源插头没有沾水。否则会导致触电、短路或起火。



警 告



只可连接100~240伏特交流电使用。请确认AC电源插头完全插入插座中。

务必遵守

否则可能造成起火、触电或意外。



拔除插头

拔除电源插头时,请手握插头前端拔出。

请勿以沾湿的双手拔除或插入电源插头。

否则会导致触电、短路或起火。



**拔除
电源插头**

闲置时请将插头从插座中拔除。

请勿以沾湿的双手拔除或插入电源插头。

否则会导致触电、短路或起火。



当心火灾

请勿放置于靠近火源、炽热阳光下、浴室等高温潮湿地方。

请勿置于热能电器附近。

否则可能会导致过热、起火、破裂而造成损坏。



**拔除
电源插头**

万一发生异常情况时,请立即拔除电源插头。

若出现运作异常、冒烟、发出怪声或有异味时,切勿继续使用。



注 意



如有以下症状请勿使用,

否则可能会造成意外、损伤或机件受损。

- 皮肤出现红疹、发炎、痕痒等异常情况下请勿使用。
- 因机身摔下、碰撞造成损坏时请勿使用。
- 请勿作商业上使用或长时间连续使用。



使用RF LED模式时请勿直视LED光。

在眼部周围或眼睑处使用LED光进行护理时,请闭上眼睛,并将电极板放离开肌肤5cm或以上。

否则可能会引起眼部或皮肤受伤。

在国外使用时注意事项

在国外使用时注意事项



注意

安全注意事项



请勿以酒精、稀释液、汽油、指甲油卸除剂等涂抹机身。
否则可能会造成机身表面受损。



请勿用电极板触碰金属表面。
否则可能会引致故障或受伤。



请不要连续使用冷敷模式。
当连续使用,皮肤对冰冷温度的感觉会变弱。
请待30分钟或以上再次使用。



务必遵守

请正接受牙齿治疗,或有进行补牙的人士将强度降低,或调节所使用的位置。

正接受牙齿治疗,或有进行补牙人士,于进行离子及EMS刺激时,可能会感到不适。使用时,请降低离子及EMS的强度,并调整使用部位。



务必遵守

请务必遵守以下事项。

否则可能会造成意外、损伤或机件受损。

- 请勿长时间使用于同一位置上。
- 请根据个人皮肤状态使用。
- 请避免进行日光浴后,去角质护理或涂抹式面膜一并使用。
- 使用后请将电源关掉。



务必遵守

使用时若感到身体不适,请停止使用。

使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。

如发现本产品不适合您的皮肤,请立即停止使用。



务必遵守

首次使用或尚未调节时,请务必使用强度1。

否则可能会引致意外、受伤。



警告



务必遵守

请务必使用100~240伏特交流电。(免费修理仅在日本国内对应)
否则可能会引起起火、触电或意外。



当心火灾

请务必确认插头形状及电压后才使用。
否则可能会导致机身发热、起火或故障。

- 插头形状及电压可能会按区域、住宿地有所不同,请先行确认后才使用。
- 关于电源插头及插头的转换,请向旅行社或电器销售店查询。

特点


本产品通过RF射频深层温热功能(以下简称为RF)进行皮肤温热,是具有离子洁面,离子保湿,EMS,振动,光美容,冷敷功能的面部美容仪。使用者可按个人皮肤状况及需要,选择各模式组合进行护理程序。

- RF…温热达至深层皮肤※1让皮肤可于合适状态下进行护理。
- 离子洁面…一般洗面难以去除的污垢可透过离子导出功能吸出面部。
- 离子保湿…离子功能可让爽肤水更易渗透^{※1}至皮肤。
- 微电流…以微弱的电流针对眼部进行护理。
- EMS…以微电流刺激肌肉。
- 振动…配合以微细震频进行护理。
- 照射…以LED光照射肌肤进行护理。
- 冰感…以冰冷温度贴于皮肤表面,让皮肤更紧致。

※1深至角质层

产品说明


●主机

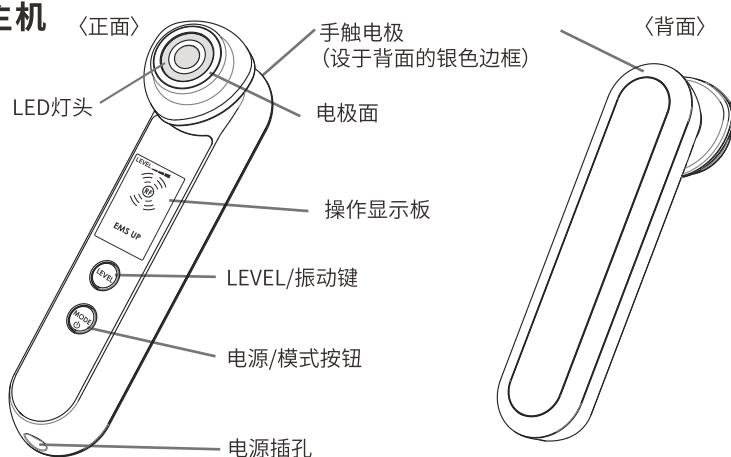


●化妆棉固定扣

(银圈)

※购买产品时已装置于主机的电极面上。
※将化妆棉固定扣于电极面之上。

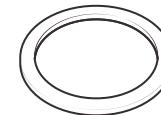

●电源插头

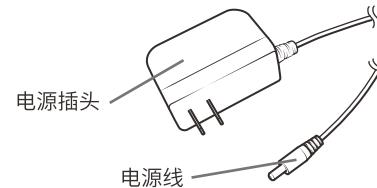


※为提升主机、配件、电源插头、电源线的设计及规格的质量,如有更改将不作另行通知。

使用前

操作显示板


●操作显示板及按钮

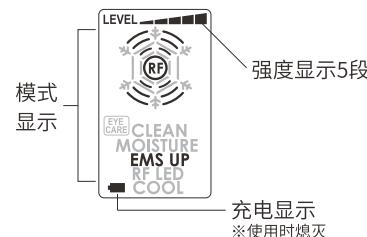

- 长按电源/模式按钮约3秒开启电源。(自动进入清洁模式。)
- 各模式进行时可按电源/模式按钮切换至其他模式。
- 使用清洁·保湿模式时可调节离子强度。EMS UP模式时可调节EMS强度。强度分为5级,可按强度按钮选择合适强度。
- 使用清洁模式、保湿模式时,长按LEVEL/振动键3秒以上可以选择开启或关闭振动功能。
- 长按电源/模式按钮约可关闭电源。
- ※眼部护理模式、EMS UP模式以及RF LED模式COOL模式时无振动。
- ※眼部护理模式、RF LED模式以及冷敷模式时无法选择强度。
- ※RF的温度不能调节。

●模式显示


每次按下电源/模式按钮,将以清洁模式→保湿模式→眼部护理模式→EMS UP模式→RF LED→冷敷模式→清洁模式<重覆>.....的次序切换模式。

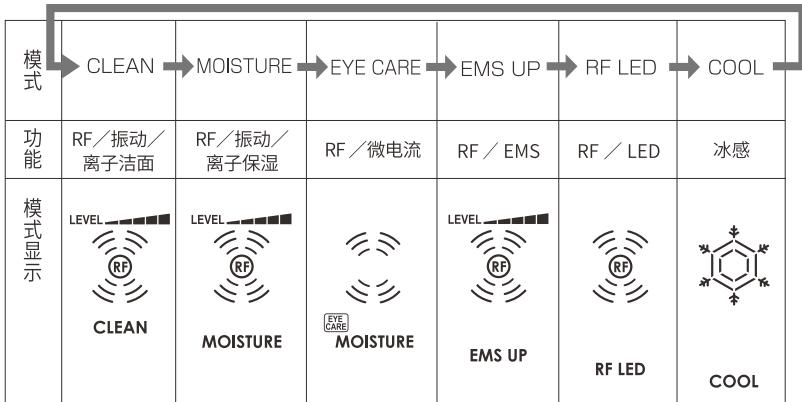

※进行清洁模式、保湿模式及 EMS UP 模式护理时,模式显示板上的(RF)会显示或隐藏。

当发出一声蜂鸣声,表示 RF 已启动操作(以模式显示的(RF)表示)。

当发出两声蜂鸣声,表示离子或 EMS 已启动操作(模式显示的(RF)会隐藏)。

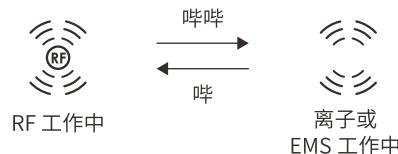

●强度显示

- 按压LEVEL/振动键,可以调节离子导出及导入的离子强度以及EMS的强度。
- 强度分为5级,请选择个人合适强度。



※清洁模式,保湿模式下可调节离子强度。

※EMS UP模式下可调节EMS的轻度。

※首次使用或尚未适应时,请务必使用强度1。

※眼部护理模式、RF LED模式以及冷敷模式时无法选择强度。

※RF的温度不能调节。

●充电显示

充电时,充电显示灯会闪烁。

充电完毕后充电显示灯会亮起。

※可在使用电源插头充电时使用本机。


※使用时不会亮起。

〈充电时〉



(闪烁)

〈充电完毕〉

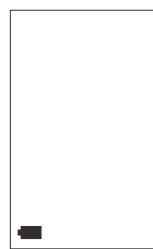

(亮起)

使用前

●待机显示及Auto off(自动关闭电源)

清洁模式,保湿模式,眼部护理模式,EMS UP模式,RF LED模式完毕后约两分钟,会显示下一个模式及电源/模式按钮会闪烁,此时将进入待机状态(非操作中的状态)。

按下电源/模式按钮可启动闪烁显示的模式。

如停止操作约两分钟,蜂鸣声会响起,电源会自动关闭(Auto off)。

只有冷敷模式完毕后,不会切换至待机模式,而且会自动关闭电源(Auto off)。(发出蜂鸣声,自动关闭电源。)

●振动功能

- 使用清洁模式,保湿模式时,长按LEVEL/振动键可以选择开启或关闭振动功能。
※振动的频率因模式而已。
- 眼部护理模式、EMS UP 模式以及 RF LED 模式 COOL 模式时无振动。

预先进行肌肤测试

※第一次使用本产品及护肤品时,请务必预先测试产品与肌肤的适应性。

1 清洁肌肤。

- 用肥皂清洗手臂内侧,用毛巾等擦拭。

2 将护肤品(保湿霜或爽肤水)或清水涂抹再手腕内侧,并在保湿模式下使用本产品3分钟。

- 请勿擦拭或用水打湿肌肤测试处的皮肤。

如果24小时内肌肤没有出现异常情况(泛红或发烫),则可以使用本产品。



注意

- 为防止发生肌肤问题,请务必事先测试。
- 实施部位出现发疹、泛红、发痒、刺激等异常情况时,请立即停止测试。
- 使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。如发现本产品不适合您的皮肤,请立即停止使用。

充电方法

本产品可用充电池或连接着电源插头使用。

如使用充电池,请务必先进行充电。

- 开始使用时(购买后或长时间闲置)请务必先进行充电,并确认充电显示灯由闪烁变为点亮后才使用。

●建议充电时间

充电时间	操作时间
约2.5小时	约40分钟

※充电环境请保持于约室温25°C。
※此为充满电池后立即使用的操作时间。
※操作时间会因使用模式、使用强度及使用环境而有异。
※充电及操作时间的方法因应环境、电池量而有变。

●充电方法

1 将电源插头的电源线插入主机的电源插口中。

2 将电源插头连接到插座。

- 本产品必须使用专用电源插头。
- 电源插头必须直接插入插座,请勿使用延长线。
- 充电开始时充电显示灯会闪烁。充电完毕后充电显示灯会点亮。

3 充电完毕后,将电源插头从插座中拔出,并把电源线从主机中拔除。

模式

模式	特点	功能	建议使用方法	时间	强度	使用频率(建议)
CLEAN	将一般洗脸难以去除的污垢吸出,让皮肤更清透及干净。	·RF ·离子清洁 ·振动(OFF可)	RF Booster Pad Pore Refining Deep Cleansing ^{※3} (或自备的化妆棉+爽肤水 ^{※2})	约3分钟	离子:5级	每周2~3次
MOISTURE	让护肤品更易渗透至角质层,让皮肤更加水润。	·RF ·离子保湿 ·振动(OFF可)	RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer ^{※3} (当水分不足时,请将残留在包装袋内的爽肤水添加后继续使用。)	约3分钟	离子:5级	
EYE CARE	微电流通过对眼部的刺激进行护理。	·RF ·微电流	约2分钟	无	每周5次	
EMS UP	刺激肌肉,让皮肤更富弹性。 ※可使用于肩颈部位。	·RF ·EMS	约3分钟	EMS:5级	每周2~3次	
RF LED	温感直达肌肤底层 ^{※1} ,以光照射肌肤进行护理。	·RF ·LED	约3分钟	无		
COOL	冷敷功能可收紧皮肤细纹回复弹性。	·冷却	直接使用于皮肤。	约3分钟	无	每日


- 使用时须于皮肤上滑动进行。(眼部护理及冷敷模式除外)
- 除清洁模式和冰敷模式以外,可根据个人感受选择使用或不使用化妆棉。
- ※使用冷敷模式后主机会发热。请勿连续使用。
使用后请将电源关闭,并待主机休息最少30分钟。
- ※1 深至角质层
- ※2 使用自备的护肤品时,必须使用水溶性产品。请勿使用油性、脸部磨砂膏。否则可能引起产品故障或对肌肤造成伤害。
- ※3 请参考P21。

护理方法

化妆棉的装置方法

●关于RF Booster Pad的使用方法,请参考其他资料。

1 从主机拔出化妆棉固定扣。

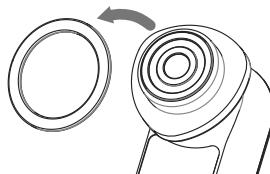

2 将1张化妆棉放于电极面上,再将化装棉固定扣推入装上。

※如化妆棉固定扣无法将化妆棉稳定扣上,请使用质料较薄的化妆棉。

※如化妆棉过厚会令皮肤对RF的温热感觉变弱。

3 以爽肤水或保湿霜沾于化妆棉上。

※爽肤水及保湿霜须完全沾满电极面。

※使用较清爽的爽肤水可能会令温热感觉减弱。

建议的保湿产品: RF Booster Pad, 较粘稠的爽肤水。

※本产品非防水设计, 使用后请将残留于电极面上的爽肤水及保湿霜彻底擦拭去除。请勿用水清洗。

基本使用方法

●使用上注意事项

●使用时须于皮肤上滑动进行。如持续贴于同一部位上可能会造成灼伤。

●使用RF时会因护肤品的种类和皮肤的状态而感觉温度有异。

●请勿用于眼睑及眼部周围(眼部护理及冷敷模式除外)。

※RF LED模式的光可以照射于眼睑或眼的周围。请闭上眼睛, 将电极板放离开肌肤5cm或以上。

●使用RF LED模式时请勿直视LED光。

●手握主机时请务必确保能接触到手触电极。

●建议使用环境温度为15°C~30°C

●护理方法

1 请先清洗脸上的化妆品。

· 去除脸上油分及污垢, 确保肌肤于洁净的状态。

※冷敷模式可于化妆后使用。

2 必要时可装上化妆棉并加上爽肤水。

3 长按电源/模式按钮(约3秒)开启电源。选择模式、强度。

· 按电源/模式按钮选择模式。

· 按LEVEL/振动键选择强度。

· 长按LEVEL/振动键约3秒, 选择开启或关闭振动功能。
(使用清洁模式, 保湿模式时)

※眼部护理模式、EMS UP 模式以及 RF LED 模式, 冷敷模式时无振动。

※眼部护理模式、RF LED模式以及冷敷模式时无法选择强度。

※RF的温度不能调节。

※首次使用或尚未适应时, 请务必使用强度1。

4 手握主机时请确保接触到背面的手触电极(背面银色边框)。

5 将电极面贴于皮肤上滑动。(使用方法请参阅P.15~16)

· 模式结束后约两分钟会进入待机模式(冷敷模式结束后电源会自动关闭)。
按电源/模式按钮下一个模式, 或长按电源/模式按钮(约3秒)关闭电源。

※使用时请务必把电极面紧紧的贴在面部上。

6 长按电源/模式按钮(约3秒)关闭电源。

· 冷敷模式结束后电源会自动关闭。

7 护理后进一步修护肌肤。

· 请涂上适量的保湿乳作修护。

8 拆除化妆棉、擦拭除去残留于电极面或化妆棉固定扣上的污垢及爽肤水等护肤品。

※本产品非防水设计, 使用后请将残留于电极面上的爽肤水及保湿霜彻底擦拭去除。请勿用水清洗。

护理方法

RF模式的使用方法

建议移动主机的速度: 每秒移动2cm
※如感到灼热时可稍微加快移动的速度。


- 请将整个电极板表面贴于肌肤上使用。
- 使用时须于皮肤上滑动进行。因长时间使用于同一位置上可能会造成肌肤的灼伤或低温灼伤。
- 请勿将电极板贴于眼睑或眼的周围使用。

<清洁模式・保湿模式・RF LED模式>

请按箭咀指示的方向于皮肤上滑动使用。

RF LED模式的LED光也可以使用于眼睑或眼的周围。

请拆下RF Booster Pad或化妆棉，并闭上眼睛，将电极板放离开肌肤5cm或以上。

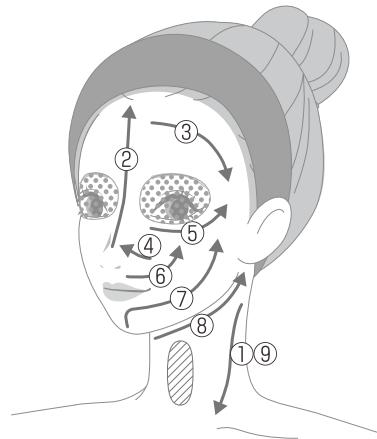


不能使用部位

RF LED模式只限LED光使用于可使用部位。
※请闭上眼睛，将电极板放离开肌肤5cm或以上

<EMS UP模式>

请按箭咀指示的方向于皮肤上滑动使用。

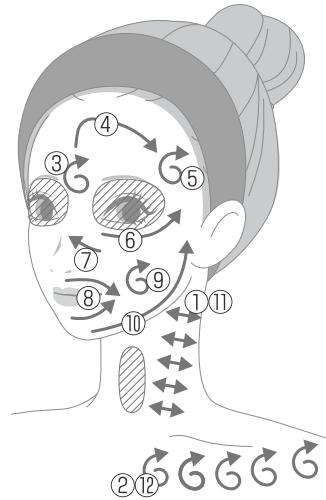

⑥ 如箭咀指示的方式打圈移动

⑩ 不能使用部位


<眼部护理模式>

按照从眼头到眼尾的方向，以「贴近→离开→移动」的步骤重覆按压使用。请不要在上眼睑使用。贴近时间大约在3秒左右。

※可在眼角(下眼睑及眼尾)使用。

※请勿连续贴近3秒以上。

※贴近时，请勿移动电极板。

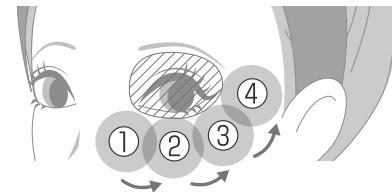

使用经过1分钟后会有提示音通知(提示音：“哔哔”)。

此时请换另一边进行眼部护理。

⑩ 不能使用部位

如特别在意眼周护理，推荐单侧使用约2分钟，共计约4分钟。

<冷敷模式>

用于面部时，以「贴近→离开→移动」的步骤重覆按压使用。

※眼睑及眼部周围均可使用。

为保持本产品清洁,请于每次使用后进行清理。

● 清洁及保管方法

- 1 关闭电源并将电源插头拔除。
- 2 请用水沾湿毛巾并卷起,将电极面上的污垢擦拭去除。妆棉固定扣则使用清水进行清洗。
 - 清洁化妆棉固定扣时,请先从主机上拆除,并在洗后擦干。
 - 请勿使用水溶性清洁剂、酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂等清洁。
 - 请勿在残留爽肤水或保湿霜的状态下闲置本机。
- 3 电极面及化妆棉固定扣以外的污垢,请用干布擦拭去除。

保管方法

- 长时间闲置本机时,将主机清洁后再保存起来。
- 不使用时,请关闭电源并将电源插头拔掉,妥善保管。
- 请勿存放于焗炉或暖炉附近、浴室等高温潮湿地方、炽热阳光下及不稳定的地方。
- 请把本机放置于儿童无法触及的地方。

保养及检查

- 经长时间闲置后,请于再使用前先检查其操作是否正常及安全。
- 本机操作发生异常时,可先参照(P.18~P.19)「排除故障」进行检查。如仍无法解决,请连同购买相关资料向产品销售商查询。
- 如有故障或受损,请向产品销售商查询。

检查项目

状况	可能的成因	解决方法
无法开机	<ul style="list-style-type: none"> → 没有长按电源/模式按钮 	长按电源/模式按钮
未有充电	<ul style="list-style-type: none"> → 	<ul style="list-style-type: none"> → 请充电或接上电源插头使用
充电后仍只能操作数分钟	<ul style="list-style-type: none"> → 电池寿命完结(充电次数约300次) 	<ul style="list-style-type: none"> → 请联络当地销售商(P.21) ※请勿尝试自行更换电池,否则可能会造成故障
	<ul style="list-style-type: none"> → 按下错误的按钮 	请长按电源/模式按钮
	<ul style="list-style-type: none"> → 待机状态/自动关机 	请按下电源/模式按钮(P.10)
无法充电 (充电显示没有闪烁)	<ul style="list-style-type: none"> → 电源插头没有插到插座 → 电源插头没有连接到主机 	<ul style="list-style-type: none"> → 请将电源插头插入插座 → 请将电源插头的电源线插入主机中 → 请同时按下LEVEL/振动键及电源模式按钮重新启动电源,主机会自动开始充电
主机发热	<ul style="list-style-type: none"> → 连续使用 	请关掉电源,并让本机休息最少1小时

状况

可能的成因

解决方法

冷敷模式没有冰冻感觉

→ 连续使用冷敷模式
→ 于建议环境温度范围外使用

→ 请关掉电源,并让本机休息最少30分钟
→ 请于15°C~30°C的环境下使用

离子及EMS强度太高(感到灼热或痛楚)

→ 设定的强度过高
→ 电极面没有完全贴于皮肤上

→ 请按LEVEL/振动键调低强度
→ 使用时请将电极面完全贴于皮肤上

离子及EMS强度太低(没有感觉)

→ 设定的强度过低
→ 皮肤的水分不足或太过干燥

→ 请按LEVEL/振动键调高强度
→ 请用爽肤水或保湿霜湿润皮肤后再使用,同时请轻轻沾湿双手

感觉不到EMS

→ 没有按于肌肉上
→ 电极面长时间贴于皮肤上

→ 使用时请将电极面贴于肌肉上(P.16)
→ 请勿将电极面持续贴于同部位上

RF温度太热

→ 移动速度太慢
→ 每个人感受到的温度有所不同

→ 请加快移动速度
→ 请减少使用时间

感觉不到RF的温热

→ 皮肤的水分不足或太过干燥
→ 移动速度太快

→ 请用爽肤水或保湿霜调节皮肤的湿度后再使用
→ 请减慢移动速度

RF的强度不变

→ RF的强度(温度)不能调节(仅离子及EMS有强度显示功能)

没有振动

→ 长按LEVEL/振动键约3秒,选择开启或关闭振动功能。(使用清洁模式,保湿模式时)

常见问题

Q

A

每次应使用多少爽肤水或保湿霜?

以本产品特点来说,使用较多爽肤水及保湿霜的效果较佳。
建议使用化妆棉时,将爽肤水及保湿霜完全沾满电极面。
如感觉爽肤水及保湿霜不足,建议可补充份量。

是否可于入浴时使用?

本产品并无防水功能,请勿于入浴时使用。

使用后皮肤发红

因RF的温热所产生现象。
可使用冷敷模式或保冷冰袋为皮肤降温。

面部及手部感到刺痛

这是受到离子清洁模式、离子保湿模式及EMS的微电流刺激所致。
可按LEVEL/振动键调节强度,请使用个人合适的强度。
首次使用或尚未适应时,请务必使用强度1。

使用RF清洁模式、RF保湿模式、RF EMSUP、RF LED模式时感觉不到RF电极面的温热

请减慢移动电极面时速度,或尝试加强按于皮肤上的力度。
可能因化妆棉的水的湿度不足引致,请补充适量的爽肤水或保湿霜。
RF会重复启动及关闭。显示屏以RF表示时,RF为启动状态。

眼部护理时微电流无体感

几乎感受不到微电流的刺激。
当爽肤水或保湿霜不足时,贴近皮肤的时间过短时,或者化妆棉太厚时,均有可能较难体验到温热的感觉。

化妆棉上没有沾上污垢

眼睛不容易看见的污垢也会被导出。
污垢被导出方式及黏附状况亦会因人而异。

RF电极面没有热力

RF并非由电极面发热,而是透过电流温热皮肤。

● 充电池

- 充电池属耗用品。(不属于保用范围内)
- 如完全充电后操作时间仍非常短,表示电池寿命可能已完结。(电池一般可充电约300次)
- 如要更换电池,请向当地经销商查询。

● 弃置产品

- 请遵照当地政府规定弃置产品。
- 本机采用锂电池。



推荐的化妆品



RF Booster Pad Pore Refining Deep Cleansing

商品名称：RF Booster Pad Pore Refining Deep Cleansing
容 量：15片/盒(可使用1.5~2个月)
编 号：YRF0003
单品价格：3,000日元(不含消费税)



RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer

商品名称：RF Booster Pad Clear Deep Moisturizer
容 量：15片/盒(可使用1.5~2个月)
编 号：YRF0004
单品价格：3,000日元(不含消费税)

商品详细情况咨询及购买请咨询YA-MAN客服中心(P.21)。

官方网站：www.ya-man.com

※可能不经通知而停止销售。

