

## 使用说明书

家用美容器	BRIGHT LIFT	HRF-40S
-------	-------------	---------

### 目录

前言.....	1	护理完毕後.....	26
安全注意事项.....	1	须知.....	28
在海外使用时注意事项.....	9	● 排除故障.....	28
各部件的名称及功能.....	10	● 常见问题.....	30
使用前.....	12	● 产品规格.....	31
护理方法.....	18	售后服务.....	32



## 前言


非常感谢您选购YA-MAN的产品。


- 为确保正确及安全使用,请先仔细阅读使用说明书。
- 阅读後,请务必保管能够随时取阅的地方。
- 将本产品转让他人时,请务必附上使用说明书。


## 安全注意事项

- 使用前,请仔细阅读「安全注意事项」。
- 请按照使用说明书的指示使用。
- 发生异常情况时,请立即停止使用。
- 如果在故障状态下使用,可能对身体造成不良影响,请立即停止使用。
- 本使用说明书的注意事项列明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 注意事项分为「危险」、「警告」及「注意」,并清楚列明危险程度,以及错误操作可能造成的伤害。

### ● 关于注意事项的区分


 **危险** 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。


 **警告** 不正当使用本产品会导致严重受伤。

 **注意** 不正当使用本产品可能导致个人受伤或引致财务损失※。

※财务损失所示范围包括对房屋、财产、宠物等损害。

### ● 关于标示符号

 表示禁止的事项。

 表示务必遵守的事项。

 表示务必注意的事项。

## 危险 (关于使用及保管)

- 切勿在以下情况下使用。

否则可能会导致医疗仪器发生故障。

◆ 使用医疗仪器的人士。

• 起搏器等植於体内使用辅助仪器 • 人工心肺机等植於体内使用的仪器 • 心电图等携带式装置



禁止

## 警告 (关于使用及保管)

- 以下人士请勿使用。

否则可能造成事故或对身体造成损伤。

• 怀疑或患有心脏病,疾病人士 • 丧失温度感觉的人士 • 正在接受治疗的人士 • 被医生禁止运动的人士  
• 正在发育者 • 急性疾病 • 结核性疾病 • 发热中人士 • 高血压 • 传染病患者 • 恶性肿瘤 • 血液病患者 • 有血栓的人士  
• 热性疾病 • 内脏疾病患者 • 皮肤病 • 过敏体质 • 异位性皮肤炎皮肤 • 有皮肤问题的人士 • 敏感性肌肤或肌肤较脆弱的人  
• 物理性刺激导致病变斑 • 因过度日晒导致皮肤刺痛及发炎 • 过度疲劳人士  
• 健康状况不好的人 • 饮酒後 • 深近视的人士(600度以上) • 曾进行眼睛或面部手术的人  
• 患有或正在治疗眼睛或面部疾病的人士 • 怀孕、经期、哺乳期  
• 因长期使用类固醇荷尔蒙药物引致毛细血管扩张或肝功能紊乱 • 正服用安眠药的人士



禁止

- 除指定部位以外,请勿使用於以下部位。

否则可能造成事故或引起皮肤问题。

• 伤口 • 曾接受手术(包括整形手术)的部位 • 口腔内、阴部周围或粘膜 • 暗疮 • 皮肤溃烂化脓发炎部位  
• 发癢或泛红部位 • 隆起的痣、过滤性疣 • 喉核 • 眼球  
• 眼睑及眼部周围(使用冰感模式时除外)

※ LED的光可以照射於眼皮或眼部周围。照射於眼皮或眼部周围时,请闭上眼睛,并将电极头置於距离肌肤5cm以上的位置进行使用。请勿直视LED光。

※ 若不能确定自己是否有上述状况,请事先徵求医生意见。

- 请勿长时间连续使用。(商业用途等)

否则会造成受伤或发热。

## 警告 (关于使用及保管)

- 请勿过度使用机器。  
请按照说明书上的使用时间和使用频度的指示使用本仪器。否则可能对身体造成损伤。
  - 请勿在肌肤较薄的部位、骨骼上方长时间使用。  
否则可能会造成肌肤以及身体的损伤。
  - 请勿使用在面部以外的地方。  
否则可能会引起受伤。
  - 除了使用冰感模式时,其他时候请勿在同一部位停留。必须在肌肤上保持移动。请不要用在机头整体不能覆盖的地方使用。  
否则会造成烧伤或冻伤。
  - 请勿放置於火中,加热或高温使用。  
会导致机身发热、起火、破裂。
  - 请勿在易燃物质(如酒精、稀释剂、汽油、洗甲水或喷雾等)附近使用。  
否则可能会引致起火、触电或身体受伤。
- 
- 如出现异味或异常发热时,请停止使用。  
否则可能会造成损坏或引致起火。



禁止



出现异味、  
异常发热时  
禁止使用

- 请勿在主机上放置重的物件或使用时跌下等的强烈撞击。  
否则可能会造成故障。



禁止撞击

- 请勿放置不平稳的地方以及请勿把仪器跌下或受到冲击。  
否则会造成故障。或仪器跌到脚上会造成受伤。



禁止坠落

- 请勿让无法表达自己意志人士及肌肤感知能力低的人士使用。  
否则可能导致事故或受伤。



使用者限制

- 请避免让儿童或残疾人士单独使用。未成年人请在监护者的同意并陪同下使用。  
否则会引起事故和受伤。

- 请勿在说明书记载以外的其他用途使用。  
否则可能会造成受伤或机件故障。



禁止其他用途

## 警告 (关于使用及保管)

- 请勿在浴室、浴缸、淋浴、洗面盆或装满水的容器附近使用或充电。  
会引致触电、短路、起火或故障。
- 请勿湿水或清洗本机。  
会引致触电、短路、起火或故障。



禁止淋水

- 
- 请勿拆解、维修和改装。  
否则可能会引致起火、触电或受伤。  
如需维修，请联络经销商。



禁止分解

- 
- 初次使用时请务必进行事前测试後使用。  
否则会造成事故或受伤。
  - 正进行牙齿治疗、或补过牙的人士刺激感过强时，请调低强度、调整使用部位。  
EMS对脸颊、下巴有较强烈的刺激，如若感到不适请立即停止使用并咨询医生。
  - 如有水或异物等进入本机时，请立即停止使用并要求检查。  
否则会引起火灾、触电、意外、故障和跌倒。
  - 请勿在下列情况下使用或保管机器。
    - 浴室等湿气较重的场所 · 灰尘较多的场所 · 阳光直射的场所 · 容易沾水的场所 · 容易倾斜、震动、被撞击的场所
    - 室外 · 有强烈电波或磁场的地方 · 儿童能触碰的场所 · 有油烟、水蒸气的场所
    - 发热器具(炉子等)附近的高温场所 · 温差较大的场所(空调、暖气等旁边)否则会引起火灾、触电、意外、故障和跌倒。



务必遵守

## 警告 (关于使用及保管)

- 请勿放置於靠近火源, 炽热阳光下, 浴室等高温潮湿地方, 易燃气体, 易燃物件旁。请勿投入火中, 加热, 高温地方充电或使用。请勿置於热能电器附近。否则会导致发热, 起火, 破裂, 故障。本产品内藏充电式电池。



起火注意

- 请勿放入微波炉或高压容器。否则会造成发热, 起火, 破裂。



破裂注意

## 注意 (关于使用及保管)

- 禁止以下事项。  
否则可能会造成事故受伤及机件故障。
  - 如皮肤有出疹, 发热或痕癢等异常时请勿使用。
  - 如因坠落或碰撞造成损伤时请勿使用。
  - 请勿用於商业用途等长时间连续使用。
- 请勿强力按压及持续在同一部位使用。否则会让肌肤受损。
- 请勿将电极头贴住金属物件上。否则会造成发热, 起火, 故障, 破损。
- 请於使用前先确认电极头没有损坏, 变形, 破裂, 如有破损故障, 请不要使用。否则会引起肌肤问题及机器故障。
- 请勿在极热或极冷的地方使用。  
推荐使用环境温度为 $15^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 。
- 请勿在不平稳或容易跌倒的地方使用。否则会引起受伤及机器故障。



禁止

## 注意 (关于使用及保管)

---

- 请勿使用碱性洗剂、酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等液体擦拭主机及充电器。  
否则可能会造成机器表面损伤。
- 请勿用于宠物身上。  
否则可能造成受伤。
- 请勿打开电源后放在地上或傢俬上。以及使用后请关掉电源。  
否则可能令傢俬破损。
- 请勿打开电源后接触其他电器(电热垫等)。亦请勿同时使用。  
否则可能受伤或故障。
- 请勿直视LED光源。如需使用LED光在眼皮,眼周进行疗程时,请闭上眼睛,并将电极头置于距离肌肤5cm以上的位置进行使用。请勿直视LED光。  
否则可能会令眼睛或肌肤受损。
- 请勿连续使用冰感模式。  
如果连续使用,肌肤对冰冷温度的感觉会变弱。  
请隔30分钟以上后再次使用。



禁止

- 
- 请勿在室外使用。  
否则可能会导致本机故障。



室外使用禁止

- 
- 请把饰物(颈链、腰带、戒指、耳环等)脱掉后使用。  
否则可能会引起事故或受伤。
  - 首次使用或适应前请务必从EMS强度1使用。  
否则可能会造成事故或受伤。



务必遵守

## 注意 (关于使用及保管)

- 电极头与肌肤之间请保持足够的化妆品及水份,并随时补充。  
化妆品及水份不足的话会令效果下降及造成肌肤问题。
- 如果使用时肌肤感觉到刺痛感的话请将强度降低,或换部位使用。或补充化妆品、水份,凝胶令肌肤湿润後再使用。  
否则可能会引起肌肤疼痛。
- 接触肌肤的机器部份,请每次进行清理并在清洁的状态使用。  
否则可能会引起肌肤问题。
- 使用过程中如身体感到不适或肌肤感到异常请停止使用。  
使用时如肌肤出现异常或与肌肤不合,请停止使用。
- 如使用过程中感到疼痛请停止使用。  
否则可能引致肌肤问题及事故。
- 请勿使用超过以下列出的时间。  
清洁模式:3分钟以上 保湿模式:5分钟以上 冰感模式:3分钟以上  
否则可能会引起肌肤问题。
- 请避免在同一部位连续使用。  
如果在同一部位再次使用时,需要相隔二十四小时以上。过度使用会造成肌肤损伤。请根据肌肤状态使用。
- 使用後关掉电源,请参照「使用後」(P.26),清除机器上的污垢。  
否则会引起肌肤问题及机件故障。
- 请务必遵守以下项目。  
否则会引起事故,受伤及机件故障。
  - 请勿持续在同一部位使用。
  - 请根据肌肤状态使用。
  - 请避免日晒活动或与去角质护理或涂抹式面膜一併使用。



务必遵守



## 警告 (关于电源)

- 请勿强行破损,加工或捆扎充电器及USB线。

将电线放置于重物下或被夹紧可能会导致充电器及USB线破损触电或起火。



禁止不适当  
使用

- 请勿拉扯充电器及USB线去移动或抬起本机。

否则可能会触电,短路,起火或断线。



禁止拉扯电线  
移动本机

- 请勿使用已损坏的充电器及USB线或松动的插座。

否则可能会导致触电短路或起火。

如需维修请联络经销商。



禁止使用  
已损坏插头

- 拔除充电插头及USB线时必须手握插头前端拔出(切勿接触金属部份)。请勿在手沾湿状态下拔除插头。

否则可能引起触电,短路或起火。



拔除插头

- 清洁时必须关掉电源。不使用时,请拔除主机,充电插头及USB线。请勿在手沾湿状态下拔除插头。

否则可能引起触电,短路或起火。

- 请勿让充电插头及USB线沾水,洒水及水洗。

否则可能会引致触电,短路,起火或机件故障。



禁止洒水

- 必须使用100~240伏交流电,请确保充电插头及USB线完全插入。

否则可能会引起火灾,触电或故障。



务必遵守

- 必须使用专用充电USB线。以及充电插头必须插入墙身插座。请勿使用拖板。否则可能会引致触电,短路,起火或故障。

- 请确保充电口没有被水沾湿后进行充电。否则可能会引致触电,短路或起火。

- 万一发生异常情况时请立即关掉电源。若出现运作异常,冒烟,发出怪声或异味时,切勿继续使用。

- 地震或打雷时请停止使用并关掉电源。如在充电的话,请立即拔除充电插头及USB线。

- 如充电器沾上凝胶或水(液体)时,切勿把充电插头插进插座。(请勿充电)。

## 在国外使用上注意事项

### 警告

- 必须使用100~240伏交流电。  
否则可能会引致起火、触电或故障。



务必遵守

- 
- 务必确认插头形状及电压後才使用。  
否则可能会导致机身发热、起火或故障。




注意起火

- 
- 因应地区和住宿地点, 插头形状和电压可能有异, 请使用前务必先检查。
  - 关于转换插头请向旅行社、电器店等查询。


# 各部件的名称及功能

## 主机

### ● 正面

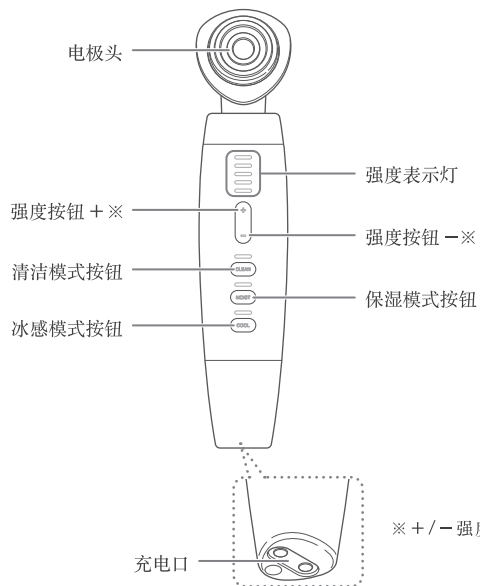

### ● 侧面

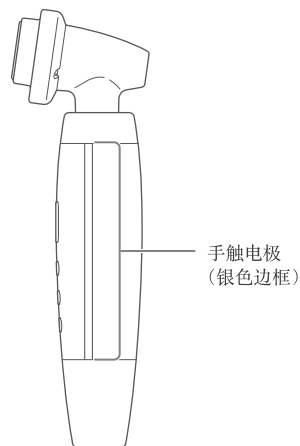


## 配件

---

- 充电器



- 化妆棉固定扣  
(购买产品时已安装於机器的电极头上)

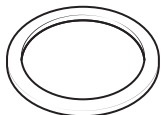

能将化妆棉固定於电极头之上 (P.19)。

- 充电用USB线  
(USB Type-C™)\*

- 充电插头

- 使用说明书

※本产品专用。请勿使用随机配件以外的配件。

※主机以及配件的设计和规格的更改,以提升品质为前提,将不作另行通知。

## 功能


---

- RF射频... 温热达至肌肤深层,使肌肤处於更适合护理的状态。
- 离子洁面... 一般洗面难以去除的污垢可透过离子导出功能吸出面部。
- 离子水份... 透过独特波型离子导入令爽肤水可以渗透到皮肤。

- EMS... 电子肌肉训练。
- PHOTO... 以LED光照射肌肤进行护理。
- 冷敷... 让肌肤温度下降,可以收紧肌肤。

# 使用前

## 充电

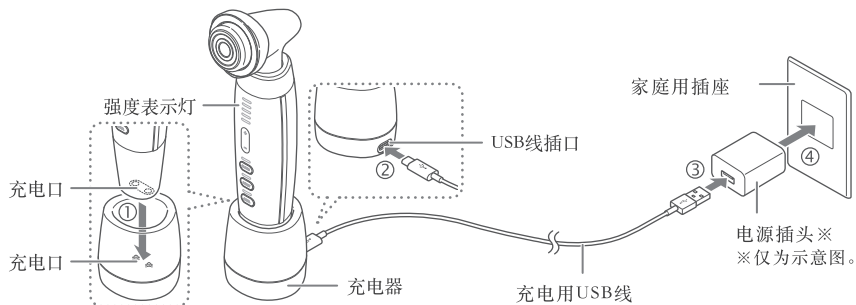

如图中把充电USB线连到充电器,便会开始充电。

※如果经过10秒后还未开始充电,请确认一下主机和充电器的充电口方向是否正确(充电器的USB线插口向着主机的背面)。请检查USB线或电源插头是否松动。


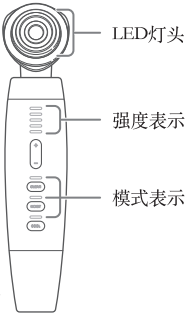

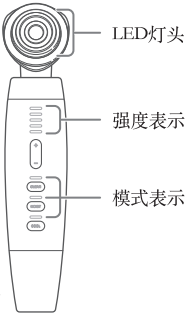

充电中	强度表示灯顺序呈白色闪烁状态。
完成充电时	强度表示灯会熄灭。请拔除USB线。
充电时间	约3小时(室温约25℃)充电时间会因电量剩余量及充电环境而有所不同。
操作时间	约40分钟 操作时间会因使用模式,使用强度,使用环境而有所不同。




---

## 注意

- 使用充电插头时,请勿使用拖板,必须插入墙身插座。
- 请先检查充电器没有沾上水或凝胶等液体後,进行充电。如充电器沾上水或凝胶等液体可能会造成故障。
- 购买後首次充电时,请完全充电後再使用。
- 首次使用或长时间閒置时,即使显示完全充电可能仍只能操作短时间。请再度充电後再使用。
- 请务必使用原装配的充电插头及充电用USB线。
- 请勿在浴室等湿度高的地方充电。

## 模式

模式	按钮表示					
STAND-BY (各模式完结後, 机能停止的状态)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 必须在肌肤上一边移动一边使用 (使用冰感模式时除外)</li> <li>• 使用保湿模式时, 可以以个人喜好选择是否使用化妆棉。</li> <li>• 使用冰感模式後, 主机和电极头会变热, 请不要连续使用。 使用後请关掉电源让主机休息至少30分钟。</li> </ul>			
			转换下一个模式时显示灯 闪烁(请参照P.16)	※1 如果使用手上持有的化妆品时, 必须使用水溶性化妆品。请勿使用油类或磨砂 类型产品。否则可能会造成机件故障或皮肤问题。		
清洁模式 CLEAN			功能	机能	操作时间	使用频率 (建议)
			吸走洗脸时留下的污垢, 令肌肤变得洁净。	• RF 射频 • 离子清洁 (+震动) • 蓝光 LED	约3分钟 (1分30秒时会发出「哔」 声, 这声响为半边面完成 的提示音。)	一星期2~3次
			LED灯头	强度表示	强度	建议使用的产品
			蓝光 LED 亮起		离子: 5级	RF BOOSTER PAD CLEAN (化妆棉+爽肤水※1)
	清洁模式 表示灯亮起			亮起1~5的灯		

模式	按钮表示	功能	机能	操作时间	使用频率 (建议)
保湿模式 MOIST	 <p>保湿模式 表示亮起</p>	让护肤品渗透到角质层， 令肌肤充满水份	<ul style="list-style-type: none"> <li>•RF 射频</li> <li>•离子导入 (+震动)</li> <li>•EMS (低周波)</li> </ul>	约5分钟 (2分30秒时 会发出「哔」声，这声 响为半边面完成的蜂鸣 提示音。)	一星期2~3次
		LED灯头	强度表示	强度	建议使用的产品
		没有	 <p>亮起1~5的灯</p>	离子 + : 5级 EMS	RF BOOSTER PAD MOISTURE (如果水份不足时,请加 入包装内的精华液。)
冰感模式 COOL	 <p>冰感模式 表示亮起</p> <p>※只有中间的 电极头会冷冻</p>	冷冻和蓝光 LED 会令 肌肤紧致和平滑。	<ul style="list-style-type: none"> <li>•冷冻</li> <li>•蓝光 LED</li> </ul>	约3分钟 (1分30秒时会发出「哔」 声，这声响为半边面完成 的蜂鸣提示音。)	每日
		LED灯头	强度表示	强度	建议使用的产品
		蓝光 LED 亮起	没有	没有	请直接使用於皮肤。 (使用前先用乳液等产品 滋润皮肤,可以进一步增 强保湿效果。)



## TIMER 机能

---

操作时间过了一半後,会发出「哔」声作提示。

各模式的操作时间,请参照P.14~15。

## STAND-BY MODE

---

各模式操作完後会发出「哔哔哔」,机器会进入STAND-BY MODE(所有机能进入停止状态)。

各模式的操作时间,请参照P.14~15。

再一次短按模式按钮後,选择的模式将会开始。

清洁模式完成後,冰感模式表示灯会闪烁。

## AUTO-OFF机能

---

STAND-BY表示过了5分钟不操作的话会发出「哔哔哔」,电源会自动关掉。

冰感模式结束後,电源会自动关掉。

## 预先进行肌肤测试

首次使用时,请务必预先测试产品与肌肤的适应性。

### ⚠ 注意

- 为防止出现肌肤问题,请务必先进行测试。
- 如测试部位出疹,泛红,痕癢,刺激及异常情况时请立即停止测试。
- 请小心使用,不要令肌肤出现问题。如肌肤感觉异常请勿使用。

1

先用肥皂等产品清洁手臂内侧然後用毛巾擦拭乾淨  
请擦拭直至完全乾燥。

2

将护肤品(保湿霜或爽肤水)或清水塗抹在手腕  
内侧,并在保湿模式下使用本产品3分钟。  
(P.18~22)

3

确认肌肤有没有异常  
如果24小时内肌肤没有出现泛红或发烫等异常情况,即可使用本产品。



## 护理方法

### 使用时注意事项

使用前请务必阅读以下内容并正确使用。

- 使用本产品前必须进行事前测试 (P.17)。
- 使用时必须於皮肤上保持滑动。如持续於同一部位上使用可能会造成灼伤。(使用冰感模式时除外)
- 使用RF射频时,会因护肤品的种类或皮肤的状态而感觉温差不同。
- 请勿用於眼部周围。(使用冰感模式时除外)。  
※LED光可以照射於眼皮或眼部周围。请闭上眼睛,并将电极头置於距离肌肤5cm以上的位置进行使用。
- 请勿直视LED光。
- 手握机器时,请确保能接触到手触电极。
- 推荐使用环境温度为15℃~30℃

观看视频

可以从视频确认使用方法。请读取右边的QR CODE


<https://ymn.cm/2Uak2n7>



## 化妆棉的装置方法

---

### 1 从主机拔出化妆棉固定扣

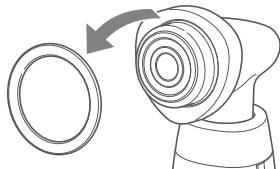

### 2 将1张化妆棉放在电极头上,再将化妆棉固定扣扣好

- 如化妆棉固定扣无法将化妆棉稳定扣上,请使用较大且较薄的化妆棉。如较厚的化妆棉会比较困难固定起来,请撕开一半使用。
- 化妆棉过厚会令皮肤对RF射线的温感变弱。

### 3 将持有的爽肤水或凝胶沾上化妆棉。

- 爽肤水或凝胶需完全沾满在电极头上。

---

### 注意

- 使用较清爽的爽肤水可能会令温热感觉减弱。  
建议的保湿产品: RF BOOSTER PAD、较滋润的爽肤水。
- 请随时补充护肤品到化妆棉。乾的化妆棉会容易脱下。

## 基本使用方法

1

### 卸妆及洁面

• 去除脸上油分和污垢, 确保肌肤处于洁净的状态。

※ 冰感模式可在化妆状态上使用。

2

如果需要涂上爽肤水或凝胶到肌肤, 请沾上化妆棉后扣到电极头

化妆棉的装置方法请参照P.19。

3


### 开电源

长按(3秒以上)想使用的模式的按钮(清洁、保湿或冰感模式按钮)。

「哔哔」声响后, 模式按钮上的LED灯(模式表示)会亮起。

※ 如中途想结束, 请长按模式按钮。

可以在使用途中按下模式按钮切换到想使用的模式。

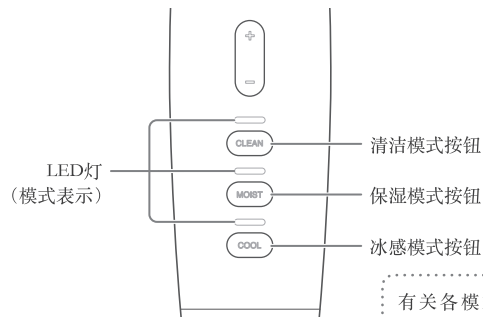


有关各模式详情,  
请参考「模式」(P.14)。

## 4

(只适合清洁·保湿模式)

### 选择喜爱的离子/EMS强度

- 每按强度+/-按钮时会发出「哔」的提示音,代表离子/EMS的强度改变。
- 离子/EMS强度分为1~5。强度到达5(最强)或1(最弱)时会发出「哔哔」声响。
- 清洁模式只能调校离子强度。

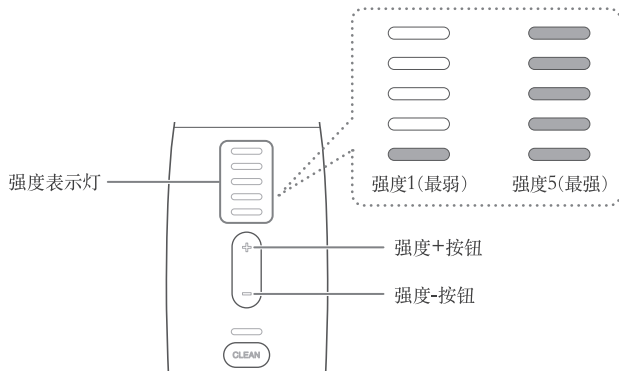

#### 注意

- 初使用时,必须由强度1开始使用。
- 请勿使用不合适的强度。

5

### 手握机器时请确保接触到手触电极 (银色边框)

- 如果没有接触到手触电极, 离子机能将无法使用。

6

### 将电极面贴於皮肤上滑动

- 各模式结束后进入待机状态(冰感模式除外)、按下喜爱的模式按钮后会开始下个模式。
- 如使用中途想停止时, 请长按模式按钮。

请参照在皮肤上的使用方法(P.23~25)。

注意

- 使用时请务必把电极头完全贴在皮肤上。

7

### 使用本仪器后请护理肌肤

- 使用本仪器后请推均匀脸上的爽肤水、凝胶, 再涂上日常使用的护肤品。

注意

- 每次使用后请清洁保养本机(P.26)

## 在皮肤上的使用方法


- 建议移动主机的速度: 1秒钟4cm
- ※ 如果感到灼热请加速移动。
- 操作时间过了半分钟後会发出「哔」声响, 提示换另一半脸。


### 注意


- 电极头整体必须接触肌肤
- 使用时於肌肤上持续移动(使用冰感模式除外)。持续在同一地方使用时有可能会引致灼伤或冻伤肌肤。
- 请勿将电极头接触眼皮和眼周。

### 清洁模式

请按照箭嘴的方向移动使用。  
眼皮或眼周可以照射LED光。

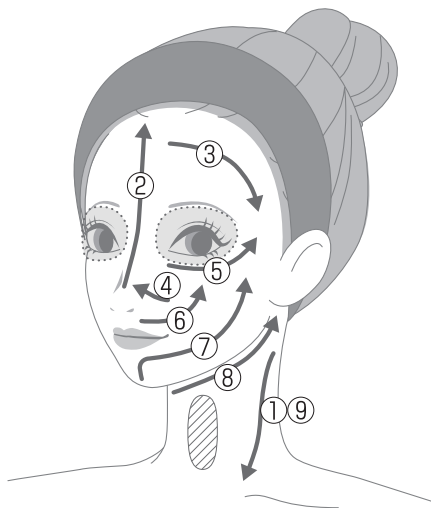

 不能够使用的部位

 只可使用LED光的位置  
请闭上眼睛并将电极头置於距离肌肤5cm以上。



## 保湿模式

半边脸大约使用2分30秒(整个面部大约使用5分钟)。

### ● 半边脸(大约使用2分30秒)

导入波形大约1分30秒,会输出肌肉训练波形大约1分钟。请如下图使用。

请根据肌肉的感觉切换肌肉训练波形。


导入波形 (1分30秒)

肌肉训练波形 (1分钟)

(当肌肉受到刺激时)

重复①~⑨的动作4次。

在图中所示的位置停止约15秒使用。

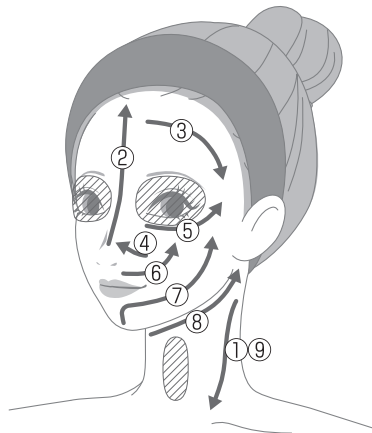

不能使用的部位



- ① 太阳穴
- ② 鼻旁
- ③ 脸颊
- ④ 耳旁

另一边脸同样  
方法使用。

---

### 冰感模式

在面部上像盖印章一样使用,重複「压下→拿开→移动」步骤。

※眼睛周围也能使用。

※照射於眼皮或眼周,请闭上眼睛,并将电极头置於距离肌肤5cm以上的位置进行使用。请勿直视LED光。

## 护理完毕後

### 保养方法

为保持本机清洁,每次使用後请进行清洁保养。

#### 警告

- 清洁保养时请勿充电。请确认电源是否关上。

- 1 清洁主机,电极头的污垢时,请用微湿布擦拭。清洁化妆棉固定扣时,请从机身拆除後水洗。
- 2 请用乾布擦拭去除水份,然後保管。

#### 注意

- 主机及充电器请勿湿水或冲洗。
- 注意充电口不要留下水份。
- 请不要在沾上爽肤水或凝胶的状态下放置。
- 请勿使用碱性洗剂、酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等。



## 保养方法

---

- 长时间閒置本机时,请保养後妥善保管。
- 不使用时,请从牆身插座拔掉并将电源插头和充电USB线拔掉。
- 请勿存放於焗炉或加热器附近、浴室等潮湿地方、炽热阳光下及不稳固的地方。
- 请将本机放置於儿童无法触及的地方。

## 保养及检查

---

- 经长时间閒置後,请於再使用前先检查其操作是否正常及安全。
- 本机操作发异常时,可先参照「排除故障」(P.28)进行检查。
- 如有故障或异常,请向产品销售商咨询。

# 须知

## 疑似故障时

使用本产品时如感到异常,提交维修前请先确认以下项目。

状况	可能的原因和处理方法
无法开机	→ 请长按模式按钮(清洁,保湿或冰感按钮)3秒以上(P.20)。
	→ 电量不足(强度表示灯的顶部闪烁3次後,电源会关掉)(P.12)。
	→ 使用冰感模式後,主机过热时会因安全机能,不能开机。 (强度表示灯的底部闪烁3次後,电源会关掉)。请让机器休息30分钟以上。
无法充电	→ 请正确插入充电插头或充电用USB线(P.12)。
	→ 请确认主机和充电器的充电口方向是否正确(P.12)。
	→ 请确认主机和充电器的连接是否正确(P.12)。
机身发热	→ 连续使用。请关掉电源并让机器休息最少1小时。
无法改变强度	→ 强度改变只限於清洁模式的离子和保湿模式的离子/EMS。
冰感模式没有冷感	→ 连续使用冰感模式。请关掉电源并让机器休息最少30分钟。
	→ 於推荐环境温度範圍外使用。请於15°C ~ 30°C的环境下使用。
冰感模式时外侧的电极头没有冷感	→ 冷感的电极头在内侧

状况	可能的原因和处理方法
EMS过强(刺痛·疼痛)	→ 请按强度-按钮调低EMS强度。
	→ 没有完全把电极头接触到肌肤。请使用镜子确认,然後使用。
	→ 请调整使用部位。
EMS过弱(感觉不到)	→ 请按强度+按钮调高EMS强度。
	→ 皮肤的水份不足或太过乾燥。请用爽肤水或凝胶调整皮肤的湿度後再使用。
灼热(使用冰感模式除外)	→ 电极头持续在同一地方使用。使用冰感模式时,必须保持在皮肤上持续移动。
	→ 移动速度可能太慢。请加快移动速度。
无法感到温感	→ 待机状态/自动关上(P.16)。请按各模式按钮来启动本机(P.20)。
	→ 皮肤的水份不足或太过乾燥。请用爽肤水或凝胶调整皮肤的湿度後再使用。
	→ 移动速度太快会影响温感感觉。请减低移动速度。 移动速度太慢,安全机能会启动,温感机能被控制。请将移动速度加快。

## 常见问题

---

Q 建议使用频度及建议使用时间?

A 建议使用频度: 清洁、保湿 1星期2~3次。冰感可以每天使用。  
建议使用时间: 清洁模式(3分钟)保湿模式(5分钟)冰感模式(3分钟)  
请勿一日使用同一模式两次以上。过度使用有可能会引致肌肤受伤。以上仅是建议, 请根据皮肤状态使用本机。

---

Q 一次应该使用多少份量的爽肤水或凝胶?

A 本产品的特色是使用越多的爽肤水或凝胶时温热感效果更佳。建议使用化妆棉时, 将爽肤水完全沾湿电极头。  
凝胶的份量为约2粒珍珠。建议如果爽肤水或凝胶不足时请补充份量。

---

Q 使用清洁, 保湿模式时感受不到RF的热力

A 请慢慢移动电极头或加强按压力度。亦有可能是爽肤水或化妆棉的水份不足。  
请补充爽肤水或凝胶的份量。

---

Q 化妆棉上没有沾上污垢

A 即使肉眼无法看出, 但污垢会导出。以及污垢沾上化妆棉的情况因人而异。

---

Q RF电极头没有热力

A RF射频并不是以电极头发热, 而是透过电流温热皮肤。

---

Q 能够关掉震动功能吗?

A 震动功能是不能关掉的。

---

## 产品规格

电 力	DC5V Over1.0A
电 力 消 耗	约 4.5 W
使 用 电 池	锂蓄电池
充 电 时 间	约3小时 ※充电环境不同,充电时间亦稍有不同。
操 作 时 间	约40分钟(满电量状态开始) ※使用模式,使用强度,使用环境会影响操作时间。
外 形 尺 寸	主机(连化妆棉固定扣): 约W45×D66×H211(mm)                      充电器: 约W55×D54×H56(mm)
产 品 重 量	主机(连化妆棉固定扣): 约 230 g
材 质	主机: ABS树脂、聚碳酸酯树脂 电极头: 聚碳酸酯树脂/不锈钢 手握电极: ABS树脂(镀铬)
产 地	日本
配 件	充电器.....1个 充电用USB线(USB Type-C™).....1条 电源插座.....1个 化妆棉固定扣.....1个(购买时已安装在主机的电极头上) 使用说明书
建议使用环境	15℃~30℃



## 售後服务

### 關於充电池

---

- 充电池是消耗品(保养範圍以外)。
- 如果充电後使用时间变短,可能是电池寿命完结(建议充电次数为约300次)。
- 如果希望更换充电池请联络经销商。

### 關於废弃

---

- 弃置本产品时,请遵照当地政府规定进行弃置。
- 本产品使用锂离子充电池。









