

No. \_\_\_\_\_

## 保修卡

凭卡保修

品名	家用美容仪	型号	M30
名称	多功能射频美容仪		
免费维修	对象：主机	期限：自购买本产品当日起1年内	
※ 经销商	门店名称/地址/联系电话		
	请将购买当日的详细资料贴于此处或与保修卡一并保管		

请经销商将带※的必填栏填写相关的信息，然后交回客户保管。  
 免费维修时，仅对本说明书中所记载的指定对象部件进行免费维修。  
 上述【免费保修期】内如发生故障时，请您携带本产品及保修卡前往购买本产品的经销店进行维修。  
 ●如果本卡的空白栏中没有按规定填上购买日期，或没有购买明细，则此保修卡无效。  
 ●本保修卡不接受补办，请妥善保管。

## 〈免费维修的相关规定〉

- 根据使用说明书及本产品上所贴的标签上的相关内容进行。使用时所出现的故障，可携带保修卡前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 保修期间，产品发生故障并需接受免费维修时，请携带本产品及其保修卡前往购买本产品的经销商接受免费维修。
- 住址搬迁时，请提前与购买本产品的经销商联系。
- 如将本产品送作他人使用而导致本产品无法享受本书中所记载经销商的免费维修时，请联系雅萌客户服务热线中心。
- 保修期间，以下情况不属无偿维修的对象范围。
  - (1) 使用不当或不当的维修及改造所造成的故障及损伤。
  - (2) 购买后，因使用过程中致使本品倾倒、跌落等所造成的故障及损伤。
  - (3) 因火灾、地震、水灾及其他自然灾害、公害或电压异常等造成的故障及损伤。
  - (4) 因与本品连接的其他电气设备的异常所造成的故障及损伤。
  - (5) 电池及消耗品等零部件更换时。
  - (6) 非一般家用情况（例如：需长时间使用的商用情况）使用时造成的故障及损伤。
  - (7) 装载在车辆或船舶等使用时造成的故障及损伤。
  - (8) 购买后，因运输、移动及跌落等所造成的故障及损伤。
  - (9) 本保修卡中所规定的范围之外的情况。
  - (10) 本保修卡的必填栏中未填写购买年月日、客户姓名、经销商等信息或没有经销商盖章，以及填写信息有被改动时。

※ 本保修卡对免费维修的时间及条件进行了一定的约束，但并非是对客户在法律上应享有的权利进行限制。如对过了保修期的修理尚有不明之处，可向购买本产品的经销商咨询。  
 ※ 因自然使用所导致的本品性能劣化、消耗及消耗品的更换属于无偿维修对象范围外。

“雅萌”是ヤーマン株式会社の注册商标。

ヤーマン株式会社  
 日本东京都江东区古石场 1-4-4  
 〒135-0045  
 日本官网：<https://www.ya-man.com/>

M30-1-001CML


YAMAN  
 TOKYO JAPAN

保管用  
 附保修卡

## 使用说明书

家用美容仪  
 Photo PLUS Prestige Pro

M30

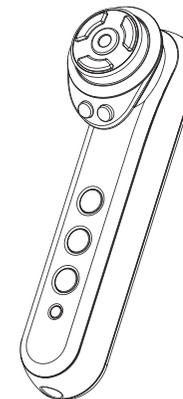

## 目录

安全注意事项	1
使用注意事项	6
产品说明	7
使用前	8
使用方法	13
使用后	17
故障排除	18
售后服务	21
●关于保修	21
●产品规格	22
●关于有害物质或元素的说明	22
保修卡	

衷心感谢您选购YA-MAN的产品。

- 为确保正确、安全使用，请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后，请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将该产品转让给他人时，请务必附带使用说明书。

# 安全注意事项

安全  
注意  
事项

- 请仔细阅读所有指示内容,以确保能安全及正确地使用本产品。
- 请务必按照使用说明书的指示进行操作。
- 如发生异常情况,请立即停止使用并联络当地经销商进行维修。
- 如果在机器故障的状态下进行使用,会有对身体造成不良影响的危险,请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度,将因错误操作而可能发生的状况分为“危险”、“警告”和“注意”。

## ●关于注意事项的区分



### 危险

如进行错误的操作,会有导致严重伤亡事故的危险性。



### 警告

如进行错误的操作,可能会导致严重伤亡事故。



### 注意

如进行错误的操作,有可能会导导致人身伤害或财产损失。

※所谓财产损失,是指波及房屋、家具以及家畜、宠物的损害。

## ●关于标示符号



此符号表示禁止进行的事项。



此符号表示务必遵守的事项。



此符号表示需小心注意的事项。



## 危险



禁止

处于以下情况的人士,请勿使用。

否则可能会导致医用电子仪器发生故障。

- ◆正在使用医用电子仪器的人士。
  - 心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器
  - 人工心肺器等维持生命用医用电子仪器
  - 心电图等穿戴式医用电子仪器



## 警告

安全  
注意  
事项

具有以下情况人群,请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的患者、自身免疫性疾病患者
- 酒后人群、无法表达自己意识的人群、无法感知温度以及刺激的人群

以下部位请勿使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 体内接受过金属植入等外科手术的部位、骨折部位、皮肤出现受损、皮疹、炎症、瘙痒等异常的部位
- 口腔内、阴部、粘膜处、眼球、眼皮(眼窝)、喉咙、凸起的痣、病毒性疣



禁止

以下人群请慎重,使用前请咨询专业医生后再使用。

否则容易引起事故或导致皮肤、乃至身体问题。

- 高血压患者、急性病患者、传染病患者、恶性肿瘤和血液病患者、糖尿病等高度末梢循环功能障碍导致的知觉障碍、神经障碍者
- 皮肤病患者、遗传性皮炎患者、易过敏体质人群、发热或体温异常者、住院且服药人群、孕期以及哺乳期人群、高度近视者(-6D以上)
- 接受过整形外科或美容外科手术的人群、接受整形外科、美容外科手术仍在恢复期的部位(如出血、肿胀、结痂等)

※若自身无法判断是否可以使用时,请先征询专业医生的意见。



禁止

除冰敷模式外,请勿长时间用于同一位置上。使用时须于皮肤上滑动进行。请勿用于护理头无法完全贴合的部位。否则可能会导致烫伤或低温烫伤。



禁止

请勿将产品于火中放置或加热,请勿在高温地方使用或放置。否则可能会导致发热、起火或破裂。



限制  
使用对象

请放置于儿童无法触及的地方,不可让儿童使用。否则可能会导致事故或受伤。



用途以外  
禁止

请勿将机器用于使用说明书中所记载的用途以外的其他用途。否则可能会导致身体受伤或产品故障。

## 警告



禁止

请勿在易燃物质(如酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂或定型喷雾等)的附近使用。否则可能会导致火灾、触电或身体受伤。



禁止使用  
延长线

本产品必须使用专用的电源适配器。此外,电源适配器必须直接插入墙壁上的电源插座,请勿使用延长线。否则会导致触电、短路或起火。



限制  
使用对象

请勿让神志不清者使用。此外,请避免残障人士单独进行使用。否则可能会导致事故或意外。



出现异味或  
异常发热时  
禁止使用

若出现异味或异常发热,请停止使用。否则可能会导致损坏或起火。



务必遵守

请在事先确认好电源适配器没有沾水的情况下,再进行充电。否则会导致触电、短路或起火。



禁止  
不当处理

请勿损害、加工、用力弯曲、拉扯、扭曲及捆扎电源适配器。将电源适配器放置于重物下或被夹紧,可能会导致电源适配器破损,并导致触电或起火。



禁止使用  
已损坏插座

请勿使用已损坏的电源适配器或已松动的插座。否则会导致触电、短路或起火。如需维修,请联络当地经销商。



禁止淋水

请勿在浴室内或有水的地方使用电源适配器。请勿让机身或电源适配器沾水,或用水清洗。否则会导致触电、短路或起火。



禁止拆解

请勿自行拆解维修或改装。否则可能会导致起火、触电或身体受伤。如需维修,请联络当地经销商。



务必遵守

闲置及进行清洁时,请务必关闭电源。否则会导致触电、短路或起火。

## 警告



务必遵守

只可连接100-240V交流电使用。插入电源适配器时,必须确认完全插入。否则可能会导致火灾、触电或事故。



拔除  
电源适配器

闲置时请将插头从插座中拔除。此外,请勿用湿手拔插电源。否则会导致触电、短路或起火。



拔除插头

拔除电源适配器时,请手握插头前端拔出。此外,请勿用湿手拔插电源。否则会导致触电、短路或起火。



当心火灾

请勿放置于靠近火源、炽热阳光下、浴室等高温潮湿地方。请勿置于热能电器附近。否则可能会导致发热、起火或破裂。



拔除  
电源适配器

如发生异常情况,请立即拔除电源适配器。若出现运作异常、冒烟、发出怪声或有异味时,切勿继续使用。

## 注意



禁止

请勿在禁止使用部位进行使用(P.2)。正接受牙齿治疗或曾进行补牙人士,在进行离子、EMS、超脉冲刺激时,可能会感到不适。使用时,请降低强度并调整使用部位。



禁止

禁止以下事项。  
否则可能会导致事故、受伤或机器故障。  
· 皮肤出现红疹、发炎、瘙痒等异常情况下请勿使用。  
· 因机器掉落、碰撞造成损坏时请勿使用。  
· 请勿作商业上使用或长时间连续使用。

## 注意



禁止

请勿以碱性洗涤剂、酒精、稀释液、汽油、指甲油卸除剂等擦拭机身。否则可能会导致机器表面受损。



禁止

请勿用来护理宠物。否则可能会导致受伤。



禁止

请勿用电极头触碰金属表面。否则可能会导致故障或受伤。



禁止摔跌

请勿放置于不平稳的地方，切勿使机器掉落或进行碰撞。否则可能会导致机器故障。此外，若机器摔落在脚上可能会导致受伤。



禁止

请勿直视LED光。否则可能会引起眼部或皮肤受伤。



禁止

请不要连续使用冰敷模式。连续使用时，皮肤对冰冷温度的感觉会变弱。请等待至少30分钟之后再次使用。



务必遵守

请务必遵守以下事项。否则可能会导致事故、受伤或机器故障。

- 请勿长时间使用于同一位置上。
- 请根据个人皮肤状态进行使用。
- 请避免在暴晒后立即使用本仪器，更不可搭配去角质的产品一并使用。
- 使用后必须切断电源。



务必遵守

使用时若感到身体不适，请停止使用。使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。如发现本产品不适合您的皮肤，请立即停止使用。



务必遵守

首次使用或尚未调节时，请务必使用强度1。否则可能会导致事故或受伤。

## 使用注意事项



## 警告



务必遵守

请务必使用100~240伏特交流电。否则可能会导致起火、触电或故障。



当心火灾


请务必确认插头形状及电压后再进行使用。否则可能会导致机器发热、起火或故障。

- 插头形状、电压可能会因地区及住宿地而有所不同。使用前请先进行确认。
- 关于电源适配器及插头的转换，请向当地经销商或电器销售店查询。
- 如电源软线损坏，请联系当地经销商。

## 各部位的名称

## 使用前

各部位的名称/配件

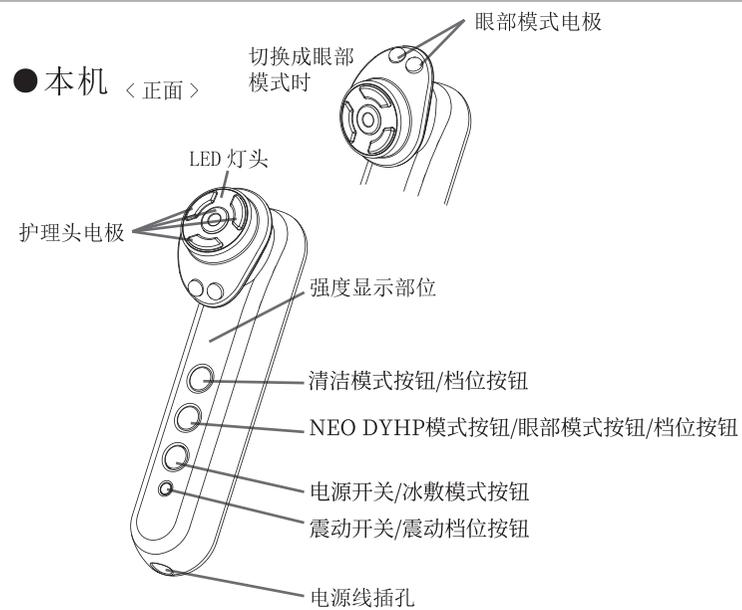

### 【配件】

#### ● 化妆棉固定扣 (金属环扣)

※购买产品时已装置于机器的电极头上。  
※能将化妆棉固定于电极头之上。




#### ● 电源适配器、电源线

※为提升机器及配件的设计与规格的质量,如有更改将不作另行通知。

## 操作方法·显示部位的查看方法

### ● 操作显示部位及按钮

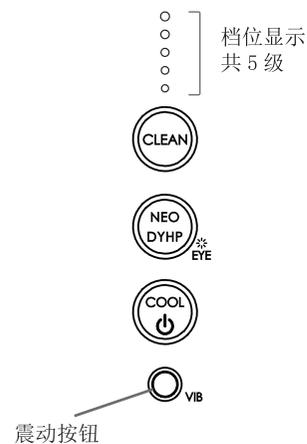


- 使用电源适配器连接机器上的电源线插孔或墙壁上的电源插座后, 长按电源键进入待机状态
- 短按各个模式的按钮即可启动该模式。
- 清洁及NEO DYHP模式有5种强度可供选择。
- 眼部模式有3种强度可供选择。
- 冰敷模式的强度不能调节。
- 可通过震动(VIB)按钮来选择开启震动, 关闭震动, 以及不同的震动方式。  
震动方式一共有3种。  
请选择个人喜欢的震动方式。  
震动1⇒震动2⇒震动3⇒关闭震动⇒震动1…

使用前

# 模式

使用前

使用前

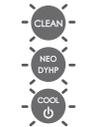模式	按钮显示	档位显示	LED 灯头	技术	推荐使用的护肤品*1	操作时间	强度	使用频率 (建议)
待机	 3按钮闪烁							
眼部模式待机 将眼部模式电极 旋转180度时	 NEO DYHP 按钮闪烁							
眼部模式 将眼部模式电极 旋转180度时	 NEO DYHP 按钮快速闪烁	 1~3个灯亮	无	•RF •微电流 •震动 (可关闭)	自备的眼部美容液	约3分钟	3级	每周5次
清洁模式	 清洁按钮亮	 1~5个灯亮	红色LED灯亮	•RF •EMS •离子导出 •LED (红) •震动 (可关闭)	化妆棉+爽肤水	约3分钟	5级	每周2~3次
NEO DYHP 模式	 NEO DYHP 按钮亮	 1~5个灯亮	黄色及红色LED灯亮	•RF •EMS •离子导入 •NEO DYHP超渗透技术 •LED (黄·红) •震动 (可关闭)	精华或面膜	约5分钟	5级	每周2~3次
冰敷模式 ※只有中央的电极头冷却	 冰敷按钮亮	无	蓝色LED灯亮	•冰敷 •LED (蓝) •震动 (可关闭)	使用完乳液或面霜后再使用	约3分钟	无	每日

• 使用时须于皮肤上滑动进行。(冰敷模式时除外)。  
 • NEO DYHP模式时可根据个人喜好选择使用或不使用化妆棉。  
 • 冰敷模式结束后, 机身及电极头会发热。请勿连续使用。使用后请将电源关闭, 并保证机器至少休息30分钟。


※1 使用自备的护肤品时, 请务必使用水溶性产品。请勿使用油性产品或磨砂膏类产品。否则可能导致产品故障或对肌肤造成伤害。请勿与易燃化妆品使用。

## ● 强度显示

清洁模式及NEO DYHP模式强度有5档，眼部模式强度有3档可供选择。每次按下清洁按钮及NEO DYHP按钮，都将如下图所示进行切换。

※冰敷模式的强度不能调节。

※首次使用或尚未适应时，请务必使用强度1。

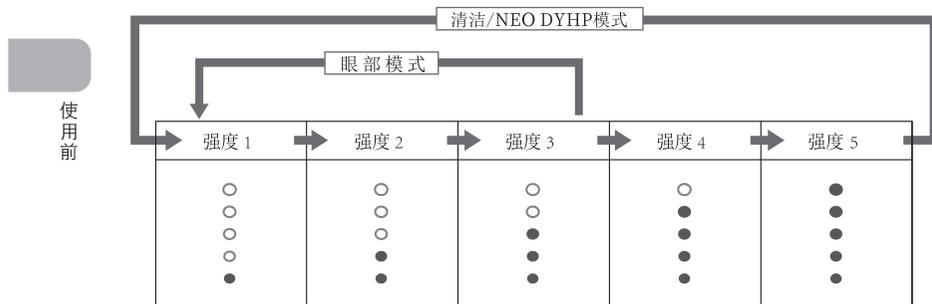

## ● 切换到眼部模式

- 使用眼部模式电极来护理眼部肌肤的模式。
- 将眼部模式电极逆时针旋转180度，即可在眼部模式⇌待机模式中进行切换。只能按右图所示方向进行旋转。
- 只有将眼部模式电极旋转180度后，才能使用眼部模式。此外，将眼部模式电极进行旋转后，无法使用其他模式。



## ● 提醒功能

操作时间进行到一半的时候，会发出“哔”的蜂鸣声。

有关各个模式的操作时间，请参阅P. 9~10。

## ● 待机模式

各模式操作时间结束后，会发出“哔哔”的蜂鸣声，并进入待机模式。

有关各个模式的操作时间，请参阅P. 9~10。

再次短按模式按钮，即可启动选定的模式。

## 肌肤适应性测试

※第一次使用本产品或护肤品时，请务必预先测试产品与肌肤的适应性。

### 1 清洁肌肤。

- 用肥皂清洗手臂内侧，用毛巾等擦拭。

### 2 将护肤品(爽肤水或精华)或清水涂抹在手腕内侧，并在NEO DYHP模式的强度1下使用本产品3分钟。

- 请勿擦拭或用水打湿肌肤测试处的皮肤。

如果24小时内肌肤没有出现异常情况(泛红或发烫)，则可以使用本产品。




注意

- 为防止发生肌肤问题，请务必事先测试。
- 实施部位出现发疹、泛红、发痒、刺激等异常情况时，请立即停止测试。
- 使用时需留意查看身体皮肤是否出现异常情况。如发现本产品不适合您的皮肤，请立即停止使用。

## 使用方法

### 化妆棉的装置方法

1 将化妆棉固定扣从机器上拆除。

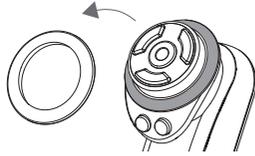

2 将1张化妆棉放于电极面上，  
再将化装棉固定扣推入装上。

- ※如化妆棉固定扣无法将化妆棉稳定扣上，请使用较大且质料较薄的化妆棉。
- 因较厚的化妆棉固定起来比较困难，请对半撕开使用。
- ※如化妆棉过厚，会使皮肤对RF的温热感觉变弱。

3 将爽肤水沾于化妆棉上。

- ※爽肤水须完全沾满护理头电极面。
- ※使用较清爽的爽肤水可能会令温热感觉减弱。
- 推荐使用的保湿产品：质地较粘稠的爽肤水。
- ※如化妆棉变得干燥，请补充护肤品。

### 基本使用方法

#### ●使用时的注意事项

- 使用时须于皮肤上滑动进行。如长时间贴于同一部位上，可能会导致低温烫伤（使用冰敷模式时除外）。
- 使用RF时会因护肤品的种类或皮肤的状态而感觉温度有异。
- 请勿用于眼部周围（眼部模式及冰敷模式时除外）。
- 请勿直视LED光。
- 推荐环境温度15℃~30℃
- 请卸妆后使用，带妆使用会导致粉底变色或妆面脏污（冰敷模式除外）。
- 使用时请摘掉金属类饰品（手表·项链·戒指·耳饰），否则会造成事故或受伤。
- 请保持肌肤湿润，使用途中按需补充化妆水等护肤品。  
电极和肌肤之间水分不足，会导致刺激感减弱，易产生肌肤问题。
- 请每次使用后都清洁机器，尤其是接触肌肤的部分。否则易产生肌肤问题。
- 肌肤表面感觉刺痛时，请降低档位，或者更换使用部位。另外可以补充水·化妆水·凝胶等滋润肌肤。否则易增加疼痛感。

#### ●使用方法

1 卸妆，清洗脸部。

- 去除脸上油分及污垢，确保肌肤于洁净的状态。
- ※ 冰敷模式也可在化妆后使用。

2 使用清洁模式前，请在护理头上装置化妆棉，  
倒上爽肤水。

- ※ CLEAN模式时，请先装置上化妆棉。

3 连接电源适配器并长按电源键进入待机模式。  
短按模式按钮选择模式及强度。

- 短按想要使用的模式按钮启动该模式后，短按该模式按钮即可选择强度。
- 使用眼部模式时需要先将眼部模式电极进行旋转。
- ※ 冰敷模式的强度不能调节。
- ※ 首次使用或尚未适应时，请务必使用强度1。

4 将护理头贴于皮肤上滑动。（使用方法请参阅P. 15~16）

- 各模式结束后将进入待机模式，短按模式按钮可开始下个模式。
- ※ 使用时请务必把护理头完全贴于皮肤上。
- ※ 如想中途停止模式，请长按电源键。

5 长按电源键，再将电源适配器的两头从机器和插座中拔出。

6 请进行仪器的清洁与保养。


- 使用完后可按照个人需求决定是否再进行肌肤护理。
- ※ 请每次使用后都对机身进行保养。（参阅P.17）

## 使用方法

- 建议移动机器的速度：每秒移动约2cm。  
※感到灼热时可稍微加快移动的速度。
- 操作时间进行到一半的时候会发出蜂鸣声进行提示(“哔”) 此时请对另一侧面部进行护理。
- 请将整个护理头表面贴于肌肤上使用。
- 使用时需在皮肤上滑动进行(冰敷模式时除外)。  
如长时间使用于同一部位上，可能会导致低温烫伤。
- 请勿将护理头贴于眼睑或眼部周围使用。  
眼部模式电极可以用于眼部周围。

### <清洁模式>

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。

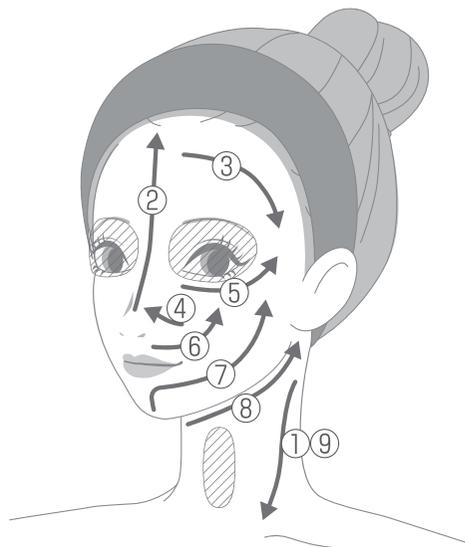


不能使用部位

### < NEO DYHP 模式 >

请按箭头指示的方向于皮肤上滑动使用。

如箭头指示的方式  
打圈移动

不能使用部位

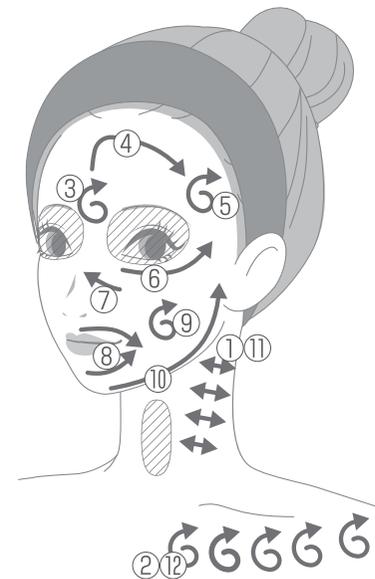

### <眼部模式>


将眼部模式电极逆时针旋转180度，使眼部模式电极位于上方。  
在2个电极都接触皮肤的状态下，沿从眼头到眼尾的方向，以「点按→离开→移动」的步骤重复进行护理。  
贴肤时间大约在3秒以内。  
※请勿将护理头贴于眼睑上使用。  
※请勿连续贴肤3秒以上。

眼部模式电极



请边照镜子  
边使用

不能使用部位：  
上眼睑，眼眶骨内肌肤。  
可适用于眼周(下眼睑，眼尾)

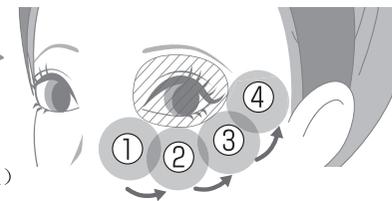

### <冰敷模式>

用于面部时，以「点按→离开→移动」的步骤重复按压使用。  
※可用于眼下外部肌肤。

## 保养方法

为保持本产品清洁,请于每次使用后进行清理。

- 1 关闭电源,拔出电源适配器。
- 2 拧干沾湿了的毛巾,将机身及护理头上的污渍擦拭去除。用水清洗固定扣时,请先将其从机身上拆除。
  - 请勿使用水溶性清洁剂、酒精、稀释剂、汽油、指甲油卸除剂等清洁。
  - 请勿在残留爽肤水或保湿霜的状态下闲置本机。
- 3 用干布擦除所有部件上的水分后妥善保管。

## 保管方法

- 长时间不使用时,请在保养后进行妥善保管。
- 不使用时,请先将电源适配器拔出,并妥善保管。
- 请勿存放于火炉或加热器附近、浴室等高温潮湿地方、炽热阳光下及不稳固的地方。
- 请将本机放置于儿童无法触及的地方。

## 保养与检查

- 经长时间闲置后,请在使用前先检查其操作是否正常及处于安全状态。
- 本机操作发生异常时,可先参照「排除故障」(P.18~P.19)进行检查。如仍无法解决,请准备好购买凭证向当地经销商咨询。

## 检查项目

症状	推测原因	解决方法
无法开机	未将电源适配器插入墙壁上的电源插座中。	连接电源适配器后即开启电源
	电源适配器没有完好连接到机器	请将电源适配器的电源线插入机器中
机身发热	连续使用	请关闭电源,并让机器休息最少1小时以上
RF、LED、冰敷、微电流无法选择强度		可以选择强度的是EMS及离子功能
眼部模式没有反应	护理头没有旋转到正确的位置上	将眼部模式电极旋转180度,否则无法使用眼部模式。请将护理头旋至正确位置(参阅P.11)
	没有将眼部模式的电极贴于皮肤上	请将2个眼部模式的电极贴于皮肤上(参阅P.16)
没有震动	震动功能处于关闭状态	请按下震动(VIB)按钮开启震动功能

症状	推测原因	解决方法
冰敷模式没有冰感	连续使用冰敷模式	请关闭电源,并让机器休息最少30分钟以上
	在推荐环境温度范围外使用	请于15℃~30℃的环境温度下使用
EMS过强(刺激、疼痛)	设定的强度过高	请按该模式按钮调低档位
	护理头没有全部接触肌肤	请在镜子中确认护理头完全接触肌肤后再使用
EMS强度太低/感觉不到	设定的强度过低	请按该模式按钮调高档位
	皮肤的水分不足或太过干燥	请用爽肤水或精华调节皮肤的湿度后再使用,请将手稍微沾湿
	没有按照指定手法使用	请将护理头贴肤并按照指定手法使用(P.16)
灼热(冰敷模式使用时除外)	没有边移动护理头边进行使用	除眼部模式及冰敷模式外,请务必使护理头于皮肤上滑动来进行使用。
	移动速度太慢	请加快移动速度
感觉不到RF的温热	待机状态/自动关闭(P.11)	按下各个模式的按钮来启动该模式。
	皮肤的水分不足或太过干燥	请用爽肤水或精华调节皮肤的湿度后再使用
	移动速度太快	请减慢移动速度

## 常见问题

Q	A
每次应使用多少爽肤水或精华?	以本产品特点来说,使用较多爽肤水及精华的效果较佳。 建议搭配化妆棉使用时,将爽肤水完全沾湿化妆棉。精华请使用约为珍珠2粒大小的量。 如感觉爽肤水及保湿霜不足,建议及时补充。
是否可于入浴时使用?	本产品并非防水产品,请勿在浴室中进行使用。此外,也请不要在有水的地方进行使用。
使用后肌肤发烫。	因RF的温热所产生现象。 可使用冰敷模式或冰袋为皮肤降温。
面部及手部感到刺痛	这是受到离子清洁、离子保湿、EMS、NEO DYHP超渗透技术的微电流刺激所致。 可按模式按钮调节强度,请选择个人合适的强度。首次使用或尚未适应时,请先从强度1开始使用。
使用清洁模式、NEO DYHP模式及眼部模式时感觉不到RF的温热感	请减慢移动护理头时速度,或尝试加强按压在皮肤上的力度。 此外,也可能因爽肤水或化妆棉中的含水量不足所导致。请补充适量的爽肤水或精华。
化妆棉上没有沾上污垢	眼睛不容易看见的污垢也会被导出。污垢被导出方式及附着状况亦会因人而异。
RF电极头没有热力	RF并非由护理头发热,而是透过射频温热皮肤。

# 售后服务

## ●关于废置产品

- 丢弃本产品时,请按照地方政府相关规定丢弃。

## ●服务热线

与本产品有关的不明之处,可咨询客户服务热线。

售后服务

## ●关于保修

- 正常使用过程中如出现故障,以购买当天起1年内保修(耗材除外)。  
另外,超过保修期后,寄送产品的运输费用由客户自行承担。
- 超过保修期后发生的故障,按实际维修费用收取。
- 保修期内的维修也有可能产生费用,请仔细阅读免费维修规定的说明。
- 万一发生故障,请与经销商取得联系。

## ●产品规格

额定输入	DC12V 5.0A (本体)
功率	约20W
外形尺寸	机身(含化妆棉固定扣): 约W50×D65×H185 (mm)
产品重量	机身(含化妆棉固定扣): 约230g
材质	本体: ABS树脂 面板: 聚碳酸酯 护理头: PET树脂/不锈钢
生产国	日本
配件	化妆棉固定扣、电源适配器 (CGSW65-120-5000II)
推荐环境	15°C~30°C

### 关于有害物质或元素的说明

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
PCB	×	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是上述打“×”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)。



#### 环保使用期限

此标识指期限(十年),电子产品中含有的有毒有害物质或元素在正常的条件下不会发生外漏或突变,用户使用该电子产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。