

使用说明书

家用美容仪

Bloom Red

S10

目录

前言	1	使用后	16
安全注意事项	1	须知	18
海外使用注意事项	6	● 疑似故障	18
各部位的名称及功能	7	● 常见问题	19
使用前	9	● 产品规格	20
使用方法	11	售后服务	21



前言


非常感谢您购买雅萌产品。

- 为确保正确、安全使用,请仔细阅读使用说明书。
- 阅读后,请务必保管在能够随时取阅的场所。
- 将本产品转让给他人时,请务必附带使用说明书。


安全注意事项

- 使用前,请仔细阅读“安全注意事项”。
- 请按照规定步骤合理使用。
- 发生异常时,请立即停止使用。
- 如果在故障状态下使用,可能会对身体产生不良影响,请务必注意。
- 此处的注意事项写明了与安全有关的重要内容,请务必遵守。
- 为表明危害及损害的大小和紧迫程度,将设想因误操作而发生的状况分为“危险”、“警告”和“注意”。

●关于注意事项


 **危险** 不正当使用本产品会导致严重伤亡事故。


 **警告** 不正当使用本产品可能会导致严重伤亡事故。

 **注意** 不正当使用本产品可能导致人身伤害或引起财物损失。

※所谓财物受损,是指波及房屋、家具以及家禽、宠物的损害。

●关于标识符号

 表示禁止的事项。

 表示务必遵守的事项。

 表示务必注意的事项。

危险 (关于使用和保管)

- 以下人员请勿使用。

可能会导致医用电子仪器误动作。

- ◆ 正在使用以下医用电子仪器

心脏起搏器等体内植入式医用电子仪器 人造心肺机等维持生命用医用电子仪器 心电图描写器等穿戴型医用电子仪器



禁止

警告 (关于使用和保管)

- 以下人员谨慎使用。

会引起事故和故障。

- 正在接受治疗者、身体正在发育者、急性病患者、结核病患者、发烧患者、高血压和传染病患者、恶性肿瘤和血液病患者
- 内脏疾病患者、患有皮肤病、过敏体质、遗传性皮炎、肌肤敏感或脆弱的人
- 患有因物理性刺激等导致的病变斑、皮肤因过度日晒而刺痛发炎的人
- 醉酒、怀孕、经期及哺乳期的人、服用安眠药物的人
- 因长期使用类固醇类激素药物或者肝功能障碍而引发毛细血管扩张的人
- 有过眼部、面部手术史、或现在眼部、面部患病以及治疗中的人
- 高度近视的人 (0.1以下)

- 请勿用于指定以外的部位以及下列部位。

会引起事故和故障。

- 切伤、进行过整形手术的部位、口腔内、外阴部、粘膜等、粉刺、皮肤化脓发炎的部位、发痒泛红的部位
- 凸起的黑痣、病毒性疣、喉结、眼球、眼皮

※自己无法判断时,使用前请咨询医师、经销商或雅萌中国总代理客户服务热线(P.21)。

- 请勿持续贴在同一个人部位。务必一边在肌肤上移动一边使用。请勿用于机器护理头部无法触及的部位。

会引起灼伤和低温灼伤。



禁止

警告 (关于使用、保管)

- 尽量避免主机、AC适配器及USB线沾水。(请勿浸水或水洗)

另外,请尽量避免在饮水处、浴室内以及洗澡时使用。

主机沾水后,可能会引起触电、短路和着火。



禁止用水处
使用

- 请勿用于操作说明书中注明的以外用途。
会引起受伤、产品故障等。



禁止用于其他
用途

- 请勿投入火中以及在加热、高温状态下充电、使用和放置。

本产品内含充电电池。

会引起发热、着火和断裂。

- 请勿在靠近易燃物(酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、喷雾器等)的场所使用。

会引起火灾、触电和受伤。



禁止

- 请勿拆卸、维修和改造。

会引起火灾、触电和受伤。

维修事宜请咨询经销商或雅萌中国总代理
客户服务热线(P.21)。



禁止拆卸

- 散发异味及异常发热时停止使用。

会引起损坏和着火。



散发异味及
异常发热时
禁止使用。

- 请置于儿童接触不到的场所,勿让儿童使用。

会引起事故和受伤。

- 请勿让无法表达自己意愿的人士使用。

另外避免残疾人士单独使用。

会引起事故和受伤。



使用者的
限制

- 请勿放置在火旁、烈日下、浴室等高温多湿的场所。
另外,请勿靠近发热器具。

会引起发热、着火和断裂。



着火警告

注意（关于使用和保管）

- 全脸使用时，建议每次护理不超6分钟。
长时间使用，可能会引起肌肤问题。
- 禁止以下事项。
会引起事故、受伤及机件故障。
 - 肌肤出现出疹、发炎、发痒等异常情况时请勿使用。
 - 因掉落、碰撞导致损坏时请勿使用。
 - 请勿用于商用等过度连续使用的环境。
- 请勿用酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等溶剂擦拭。
会损坏主机表面。
- 请勿将电极头碰触金属。
会引起故障和受伤。
- 请勿用于宠物身上。
会导致受伤。



禁止

- 请勿放在不平稳的场所。请勿掉落或碰撞主机。
会引起机件故障。



禁止掉落

- 务必遵守以下项目。
会引起事故、受伤和机件故障。
 - 请勿持续在同一个部位使用。
 - 要根据肌肤状态使用。
 - 过度日晒后，肌肤处于脆弱敏感状态时，请尽量避免使用本产品。
 - 使用后务必切断电源。
- 使用过程中身体感觉不舒服时请停止使用。
使用过程中及使用后肌肤出现异常时，请停止使用。
- 第一次使用时以及适应之前，务必从1档开始使用。
会引起事故和受伤。



务必遵守

警告 (关于电源)

- 本产品一定要使用专用的AC适配器及USB线。另外, AC适配器直接插入墙上的插座, 不要使用排插。可能会引起触电、短路和着火。



禁止
使用排插

- 从主机或插座拔下AC适配器及USB线时, 务必手持前端的插头拔出。另外, 请勿湿手插拔。会引起触电、短路和着火。



拔下插头

- 请勿损坏、弄破、加工、任意弯折、拉扯、扭拧、捆扎AC适配器及USB线。另外, 如果承载重物或者被夹会引起AC适配器及USB线破损、火灾和触电。



禁止
粗暴使用

- 不使用时请从插座中拔出AC适配器及USB线。另外, 请勿湿手插拔。会引起触电、短路和着火。



拔下AC适配器

- AC适配器及USB线受损或者插头松动时, 请勿使用。会引起触电、短路和起火。维修事宜请咨询经销商或雅萌中国总代理客户服务热线(P.21)。



禁止
使用损坏的
电线插头

- 一旦发生异常, 立即拔掉AC适配器及USB线。请勿在冒烟、发出异响及散发异味等异常状态下使用。

警告 (关于电源)

- 确认充电端口和USB线未沾水之后再充电。
会引起触电、短路和着火。
- 不使用时、保养主机时,务必切断电源,从主机拔掉USB线。
会引起触电、短路和着火。
- 使用100~240V交流电。
AC适配器及USB线要切实插入。
会引起火灾、触电和事故。



务必遵守

海外使用注意事项

警告

- 务必使用100~240V交流电。
会引起火灾、触电和故障。
- 务必确认插头形状和电压后再使用。
会引起发热、着火和故障。



务必遵守




着火警告

- 使用与原装适配器插头形状不同的插头时,请使用插头转换器(非原装配件)。
- 有时因地区、住宿地不同,插头形状、电压也稍有不同。请务必确认后再使用。
- 关于插头转换器请咨询经销商。


各部位的名称和功能

主机

● 正面

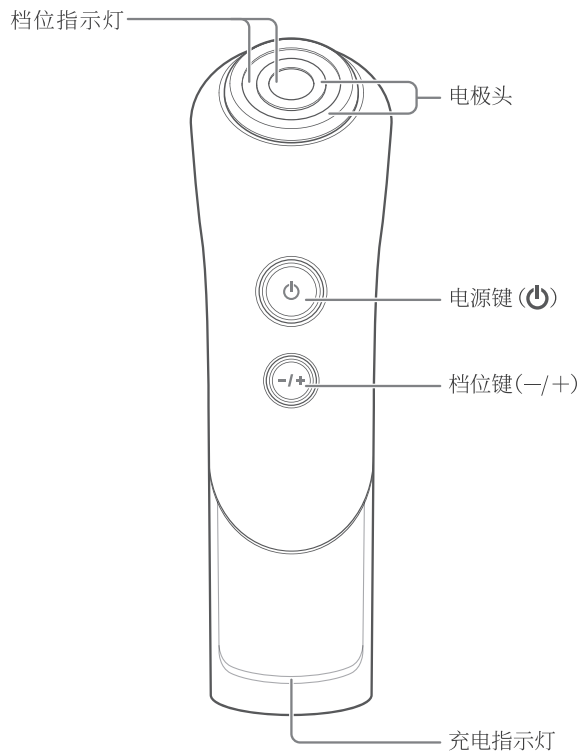

● 背面

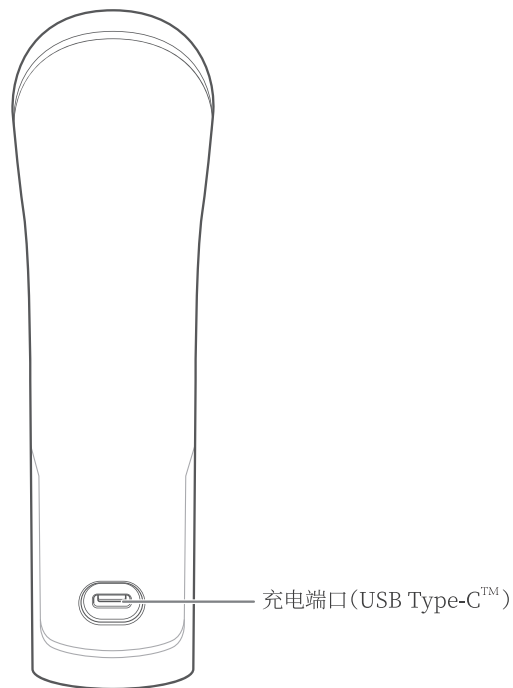

配件

● AC适配器

● USB线 (Type-C™)

● 凝胶

● 操作说明书

为提升产品品质,主机及配件的设计、规格发生变更时,恕不另行通知。

USB Type-C和USB-C是USB Implementers Forum 的商标。

功能

安全功能

● 温度传感器

当检测到肌肤或电极头的温度较高时,为安全起见,主机会自动降低输出功率。

温度过高时,为安全起见,电源将自动关闭(档位灯闪烁并有5声提示音)。

此时,请停止使用机器30分钟左右。

● 动作传感器

检测主机的动作。当发现电极头持续长时间接触同一个部位时,为安全起见,机器将自动停止运行。

主机移动的速度过慢时,可能会触发动作传感器而自动降低输出功率,温热感减弱。

自动断电功能

开机后约6分钟,会自动切断电源。

换脸使用提示声

本机设置了3分钟换脸使用提示声。开机使用3分钟后,会响起“哔哔”的换脸使用提示声。

低电量充电提醒


开机后,当剩余电量可能不够支撑一次护理时,机器会响起“哔哔哔哔哔”的提示音,同时档位指示灯闪烁。

一次使用6分钟后建议进行充电。如果不是充满电或者没有充电40分钟以上的情况下,下次再开机时会有请充电的提示。


使用前

充电

使用家用插座

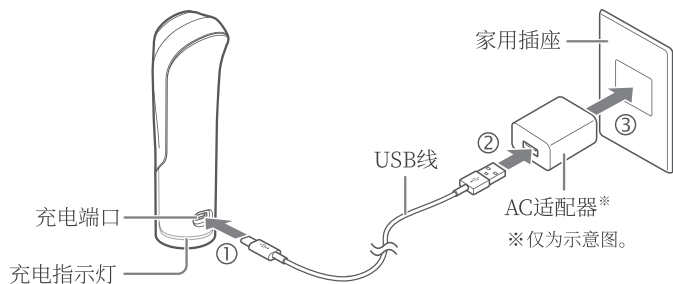

使用电脑

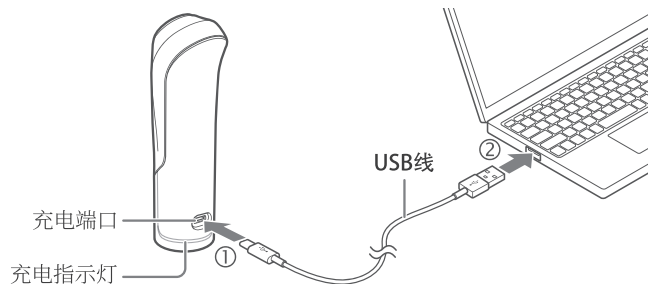

- 充电过程中主机底部的充电指示灯闪烁。
 - 充电完毕后，主机底部的充电指示灯将闪烁5秒后灭灯，请拔下AC适配器及USB线。
 - 室温约25°C时，约3小时电量充满，约可使用20分钟。因剩余电量及充电环境不同，充电时间和可使用时间稍有不同。
- ※经过10秒后充电仍未开始时，请确认USB线的插口是否松动。

注意

- 主机和充电端口沾水时，请彻底擦干水分。如果在残留水分的情况下充电，会引起故障。
 - 购买后第一次充电时，请完全充满后再使用。
 - 第一次使用时或长时间未使用时，有时即使显示满电量也只能使用较短时间。此时请再次充电后再使用。
 - 请使用原装的USB线及AC适配器。
- ※如果使用市面其它型号的USB线或AC适配器可能无法正常充电。

肌肤适应性测试

第一次使用时,请务必预先测试产品与肌肤的适应性。

⚠ 注意

- 为防止发生肌肤问题,请务必事先测试。
- 测试部位出现发疹、泛红、发痒、刺激等异常情况时,请立即停止测试。
- 肌肤感觉异常时请勿使用。

1

用肥皂等产品清洁手臂内侧,然后用毛巾等擦拭干净。



2


将适量凝胶直接挤到电极头中央部位,贴在洗过的手臂部位,开机使用3分钟(P.11)。
请务必在1档进行测试。

3

将多余的凝胶按摩直至吸收,然后确认肌肤是否有异常。

如果24小时内肌肤没有泛红或发烫等异常情况,即可使用本产品。

握法以及电极头与肌肤贴合的角度

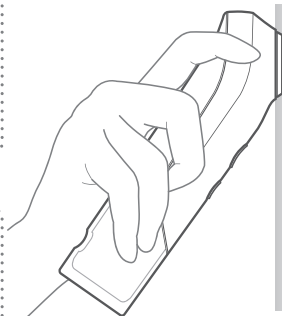

如图所示,请手握主机,将电极头完全贴合于肌肤慢慢移动。

· 请务必将电极头完全贴合于肌肤上,一边移动一边使用。

使用方法

基本使用方法


请务必在卸妆、洁面后使用。

1

开机

档位指示灯 1 档灯亮。

※开机后,为安全起见,档位设定在1档。

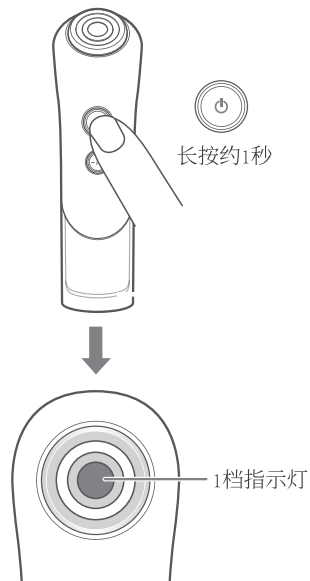


2

选择档位


按档位键(-/+)时切换档位。

可通过档位灯确认档位。

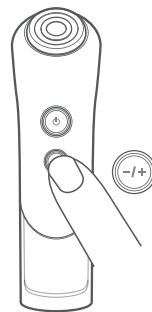

注意

第一次使用时或熟悉使用方法之前,请务必使用1档。

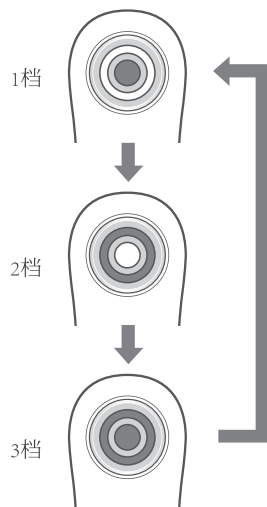


3

将凝胶直接挤在电极头中央,电极头贴在肌肤上移动

主要分6个部位进行护理(P.13~14)。

请依据使用时的体感,适合增加凝胶用量。

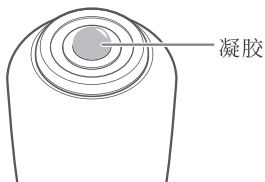

移动方式请参照“移动方式”
(P.13~14)。

注意

- 请避免用手涂抹凝胶,以保持凝胶的洁净或避免因手滑而引起主机滑落。
- 请勿用于喉结、眼睑和眼球部位护理。
- 使用过程中如果感觉滑动不畅,请适量补充凝胶。
- 使用时请将电极头完整接触到肌肤。
- 请务必一边在肌肤上移动一边使用。
- 感觉热时请稍微加快移动或者调低档位。

4

使用后保养肌肤


本凝胶是免洗凝胶,护理后可依据个人的使用习惯及皮肤状态,选择是否清洗。一般使用建议,护理后用清水清洗干净后,再进行日常的肌肤护理保养。



移动方式

如下图所示,请按照①~⑧的顺序朝箭头方向移动。每个箭头动作重复3次。

①

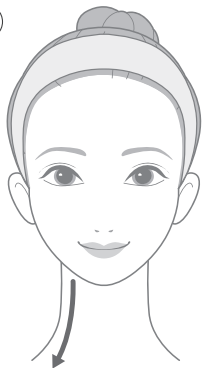

沿着脖颈从上
而下移动

②




从眉心向着太阳穴
曲线移动

③



从嘴角向耳旁
移动

④

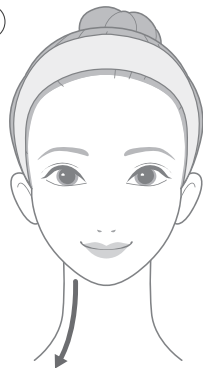


沿着脖颈从上
而下移动

左半边 约3分钟

- 移动主机的速度参考: 1秒钟 4cm
- 使用时间参考: 建议全脸每次使用6分钟。
- 3分钟后响起“哔哔哔”的蜂鸣提示音,为使用时间的换脸提醒功能。
- 中途停止时,请按电源键(⏻)1秒以上,切断电源。



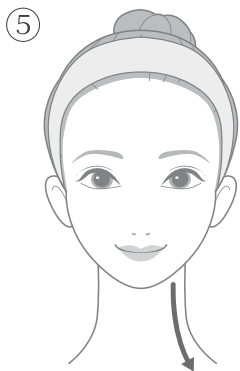


⑤ 沿着脖颈从上而下移动



⑥ 从眉心向着太阳穴曲线移动



⑦ 从嘴角向耳旁移动

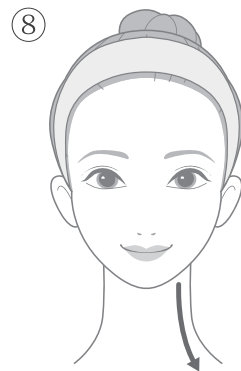

⑧ 沿着脖颈从上而下移动

右半边 约3分钟

自动断电



注意

- 全脸使用时，建议护理时间不超6分钟。可能会引起肌肤问题。




接通电源约6分钟后，电源自动切断。

护理要点

嘴角


如下图所示,请朝箭头的方向移动3次。

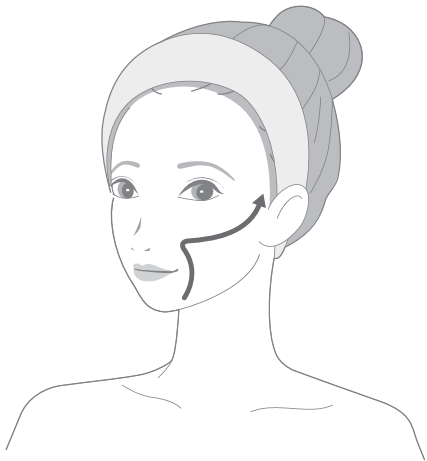

沿着法令纹从下往上滑动,然后再沿着太阳穴方向滑动。

脸部轮廓线

如下图所示,请按照①~③的顺序朝箭头方向各移动3次。

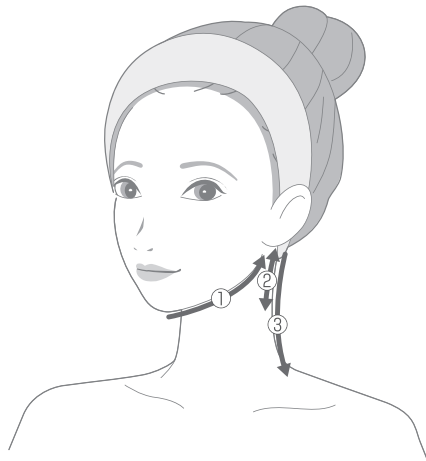

- ①下巴往耳垂方向移动
- ②耳垂下方来回移动
- ③沿着脖颈从上往下移动

使用后


保养方法

使用后,为保持本体清洁,每次使用后请进行清洁保养。



警告

- 保养时,务必切断电源,从主机拔出USB线。
- 请勿用水冲洗。
本产品非防水产品。

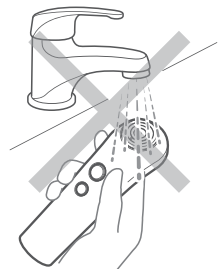

1

用拧干水分的软布等擦拭 污渍

- 顽固污渍难以清洁时,请用布蘸一点稀释过的中性洗涤剂轻轻擦拭。

注意

- 请避免在沾有凝胶的状态下放置。
- 请勿使用碱性洗涤剂、酒精、稀释剂、汽油、洗甲水等。



保管方法

- 请保管在儿童接触不到、通风干净的场所。
- 长时间不使用时, 请从主机和插座中拔掉AC适配器和USB线后保管好。
- 请勿放置在高温多湿的场所(火旁、烈日下、浴室等)。

保养与检查

- 长时间未使用时, 使用前请务必确认本产品处于正常、可安全操作的状态后再使用。
- 本产品操作异常时, 请在送交维修前参照“疑似故障时”(P. 18)的内容, 确认故障。
- 如本产品发生故障或有破损, 可联系当地经销商。

须知

疑似故障时

使用本产品的过程中如果感觉异常,请在送交维修前确认以下事项。

下列症状	可能原因和处理方法
无法开机	→ 请长按电源键(⏻)约1秒钟。
	→ 电池没有电。请充电(P.9)。
即使充电也只能使用几分钟	→ 本机具有自动断电功能,开机6分钟后会自动关闭电源。
	→ 电池电量减少。请充电(P.9)。
	→ 电池寿命问题。请联系经销商或中国总代理客户服务热线中心。
不充电	→ 请将原装的USB线插入主机(P.9)。请确认是否松动。
	→ 请将AC适配器插入插座(P.9)。
	→ 请接通电脑的电源(P.9)。
	→ 请同时按下电源键(⏻)和档位键(-/+)重新设置。有时会开始充电。
射频(RF)过热	→ 在同一部位时间较长。请务必一边贴在肌肤上一边移动。
	→ 移动速度过慢或长时间贴于同一部位使用。请稍微加快移动。
	→ 请调低档位。第一次使用时请务必使用1档。
感觉不到射频(RF)的热量	→ 肌肤干燥。请适量增加凝胶保持肌肤的湿润。
	→ 请调高档位。

常见问题

Q 使用时间、使用频率的标准是什么？

A

每周使用5天，效果更佳（每天一次，每次不超过6分钟）。
※可根据您的肌肤状态，可适当增加或减少使用次数。
※肌肤感觉异常时，请立即停止使用。

Q 能连续使用吗？

A

建议本产品1天使用1次，1次使用6分钟。

Q 凝胶 1次使用多少合适？

A

请参考P.12的用量示意图。
如果感觉凝胶少，可随时适量补充。

Q 能在浴室使用吗？

A

本产品不是防水产品。请避免在浴室使用。

Q 使用后肌肤发烫。

A

这是射频(RF)温热效果而引起的。

Q 电极头不热。

A

射频(RF)不会加热电极头，而是实现肌肤的深层温热。

Q 档位不同，效果有差异吗？

A

调高档位，会更快提升温感，而且温感更强。

产品规格

额定电源	DC5V 2.0A
功率	约4.5W(充电时)
使用电池	锂电电池
充电时间	约3小时 ※因充电环境不同,充电时间也稍有不同。
使用时间	约20分钟(满电量状态开始) ※因使用环境和档位不同,可使用的时间也稍有不同。
外形尺寸	约W47×D45×H154(mm)
产品重量	约175g
材质	本体: ABS树脂、聚碳酸酯 电极头: 不锈钢
制造国家	日本
配件	AC适配器 1个 USB线(Type-C TM) 1根 凝胶 1个 操作说明书
推荐环境温度	10°C~40°C

售后服务

充电电池

- 充电电池为消耗品。(不在质保范围内)
- 充电后使用时间极短时,可考虑电池寿命的问题(充电次数大概是300次)。
- 需要更换充电电池时,请咨询经销商或中国总代理客户服务热线。

关于废弃

- 废弃本产品时,请依照当地的规定进行废弃。
- 本产品使用锂电池。



日本以外地区有关咨询窗口

请详询购入店铺, 或者通过雅萌YA-MAN全球官网(<https://www.ya-man.com/en/>)进行查询。

搭配使用凝胶

Flawless Gel

内 容 量: 80g
型 号: CS17006
单 品 价 格: JPY3,500
(Excluding tax)

内 容 量: 200g
型 号: CS18002
单 品 价 格: JPY6,000
(Excluding tax)

※停止销售恕不另行通知。

