

# glo



USER MANUAL  
MANUAL DE USO  
MANUALE D'USO

BENUTZERHANDBUCH  
MANUAL DO UTILIZADOR  
MANUEL DE L'UTILISATEUR

Español

1-16

English

17-32

Français

33-48

Deutsch

49-64

Italiano

65-80

Português


81-96



# Glo910



# Glo910+

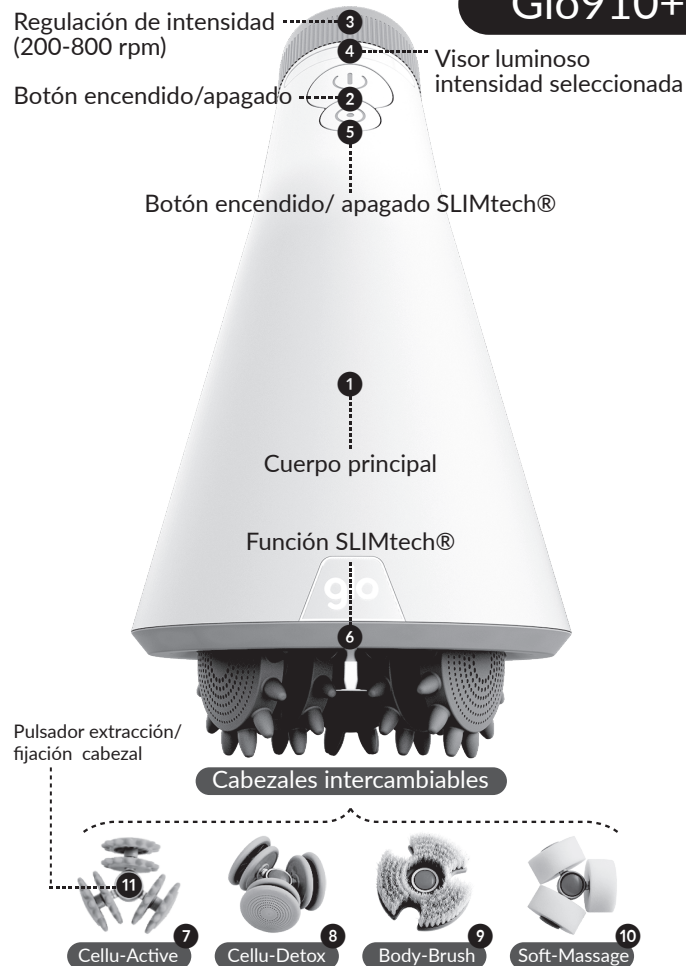

Glo910 puede completarse adquiriendo los cabezales que se desee por separado. Todos son compatibles con ambos modelos.



2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

**2.USO DEL DISPOSITIVO**

2.USO DEL DISPOSITIVO

- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Coloque el cabezal seleccionado para el tratamiento
- Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado **2**
- Si lo desea, encienda la tecnología SLIMtech® (solo en mod.Glo910+) pulsando el botón **5**
- Sujetar firmemente el aparato, evitando que de vueltas sobre si mismo, ya que podría acabar dañando el cable.
- Seleccione la velocidad (200 rpm a 800 rpm) usando el regulador **3**. Comience con una velocidad suave, y aumentar en función de la sensibilidad al masaje.
- Páselo despacio realizando movimientos circulares, evitando presionarlo contra la piel con excesiva presión.
- Para Drenar, utilice el cabezal Cellu-Detox **8**, deslicelo con movimientos ascendente desde el tobillo hasta la ingle, evitando tocar los huesos.
- Para cambiar el cabezal, apague siempre el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado **2**




## Colocación y extracción del cabezal

- Para colocar el cabezal, introduzca el eje del cabezal seleccionado en el eje ubicado en la base del aparato, y fíjelo pulsando el botón central del cabezal **11**. No es necesario presionar, ni forzar el sistema de anclaje.
- Para extraer el cabezal, presione el botón central **11**. Notará que se suelta. Una vez suelto, tire de él hacia afuera con suavidad.



## Duración del tratamiento

- El masaje dura unos 15-20 minutos
- Se recomienda dedicar unos 5 min por zona a tratar. En caso de las piernas, dedicar unos 10 minutos a cada pierna (muslo + glúteo).
- Si se desea tratar varias zonas del cuerpo, aconsejamos repartir la sesión en dos zonas, zona superior y zona inferior para dedicar el tiempo suficiente a cada zona, y alternar los días de tratamiento.

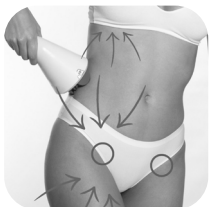

## Sentido del masaje

El masaje debe hacerse en sentido de la circulación de la sangre (desde las extremidades hacia el corazón), para favorecer la eliminación de toxinas a través del sistema linfático.



### Auto-apagado de seguridad

- El aparato tiene un sistema de seguridad para controlar el tiempo del tratamiento, que se activa alrededor de los 20 minutos de uso.
- Este sensor no se activa solo por tiempo, si no en función de la presión ejercida sobre la piel, la intensidad del tratamiento, la grasa y dureza del tejido a masajear y el tiempo del masaje.
- Si se usa demasiado intensamente, el sistema de seguridad puede activarse antes de los 20 minutos.
- Recuerde, es importante, **NO APRETAR EL APARATO CON EXCESIVA PRESIÓN SOBRE LA PIEL.**

### Recomendaciones

- Es importante ser **CONSTANTE**, recomendamos usar a diario durante al menos el primer mes de tratamiento. Según se alcancen los objetivos, se puede espaciar el tratamiento de 3 a 2 días a la semana. No dejar el mantenimiento, porque el cuerpo tiende a volver a su estado anterior si no se cuida. Una de las grandes ventajas de tener el dispositivo Glo es que puedes tratarte con la constancia necesaria y mantener los resultados.
- Es importante **BEBER AGUA** para ayudar al cuerpo a drenar (al menos 1,5 litros/día)
- **NO APLICAR LOS CABEZALES CELLU-ACTIVE 7 Y CELLU-DETOX 8 SOBRE LOS HUESOS.**
- **EVITAR APLICAR EL MASAJE SOBRE LA COLUMNA VERTEBRAL.**
- En zonas delicadas, como escote y cuello, utilizar el cabezal **SOFT-MASSAGE 10** con intensidad de masaje baja.
- El cabezal exfoliante **BODY-BRUSH 9** está diseñado para el cuerpo, no usar en cara, cuello y escote.

- **AL REALIZAR MASAJE EN ESCOTE, CUELLO O TRAPÉCIOS, RECOGER BIEN EL PELO PARA EVITAR QUE SE PUEDA ENGANCHAR ACCIDENTALMENTE CON UN CABEZAL.**
- **NO APRETAR EL APARATO CON EXCESIVA PRESIÓN SOBRE LA PIEL.** El motor llega hasta 800 rpm, tiene fuerza suficiente para realizar el masaje adecuadamente.
- Al comienzo del tratamiento, puede darse la circunstancia de que al usar el cabezal Cellu-Active 7 aparezcan hematomas, ya que puede haber gran cantidad de acumulación de células enquistadas; esto es normal e irá progresivamente mejorando con el tratamiento.
- La tecnología SLIMtech® no emite calor, no tiene contraindicaciones, puede usarse en todo el cuerpo y con todos los cabezales.
- Es recomendable cambiar el cabezal de tratamiento Cellu-Active 7 cuando se aprecie que las puntas están redondeadas por el desgaste, para no perder efectividad.
- Complete el tratamiento con cosméticos y nutricosméticos Glo para potenciar el resultado. Puede consultar la gama disponible en [www.glo910.com](http://www.glo910.com)

### Finalización del tratamiento

- Una vez finalizado el masaje, apague el dispositivo presionando el botón de encendido/ apagado 2
- El aparato se parará y dejará de girar el cabezal.
- A continuación, desconéctelo de la red eléctrica.
- Límpielo y guárdelo en su neceser.
- Es conveniente aplicar una crema o aceite tras el masaje para hidratar la piel.





3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

**3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN**

3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Una vez desenchufado el aparato:
  - Utilice un paño seco para limpiar el exterior.
  - Extraiga el cabezal para limpiar los restos de células muertas que pueden quedar entre las juntas. Utilice el cepillito que viene en los accesorios para limpiarlo.
  - Limpie con el paño seco el interior de la base del dispositivo.
- No utilice disolventes, detergentes, ni productos abrasivos.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato, guárdelo en el neceser.



### Limpieza de Cabezales

- Se recomienda limpiar los cabezales de masaje con un pequeño cepillo o un paño seco.
- Limpieza cabezal Soft-Massage 10: Las esponjas puede extraerse y limpiarse con jabón neutro y agua tibia. Extraiga primero con delicadeza la goma que sujeta la esponja, y a continuación la esponja. Esperar a que se sequen completamente antes de volver a colocarlas en los ejes del cabezal. Colocar primero la esponja y a continuación la goma.



### Mantenimiento

- Cuando no utilices el dispositivo, guárdalo en la bolsa.
- No retuerza el cable, ni tire de él, ni lo enrolle alrededor del aparato, para evitar que se dañe. Utilice el velcro que viene con el dispositivo para guardarlo adecuadamente. Si está dañado, sustitúyalo de inmediato por personal cualificado o contacte con servicio atención al cliente.



Estas instrucciones también están disponibles en nuestro sitio web, [www.glo910.com](http://www.glo910.com), además de videos y más detalles para que sacar el máximo partido al dispositivo Glo910. Síguenos en Instagram @glo910\_ para estar al día de toda la información.



Fotos no contractuales: el producto puede diferir de la foto.

A Revolutionary Solution to Body Care  
Designed by Women for Women

[www.glo910.com](http://www.glo910.com)

   @glo910\_