

# DermaWand<sup>®</sup> Pro

GUIDE DE BEAUTÉ



Française



ATTENTION : Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit. Le non-respect des instructions et des précautions de sécurité contenues dans ce manuel peut entraîner des blessures graves. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future.

# Contenu

Apprendre à connaître le DermaWand® Pro	
Introduction.....	3
Mesures de protection importantes.....	4
Contre-indications.....	6
Comprendre votre DermaWand® Pro.....	8
Le cadran de tonification.....	8
Comment utiliser votre DermaWand® Pro	
Préparez votre peau avant utilisation.....	9
Avant d'utiliser le DermaWand® Pro.....	10
Mode d'emploi : Balayages général.....	11
Exercices quotidiens.....	12
Exercices ciblés.....	12
Après avoir utilisé le DermaWand® Pro.....	16
Guide de dépannage.....	16
Nettoyage, entretien et entreposage.....	17
Description technique.....	19
Service à la clientèle.....	22
Politique et procédures de retour.....	22
Garantie limitée.....	23

# DermaWand® Pro

## Introduction

Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec le DermaWand® Pro, ses fonctions, ses spécifications, son fonctionnement et son entretien de routine.

Nous vous recommandons de lire l'intégralité de ce manuel, en particulier les sections sur les mesures de protection importantes et les contre-indications, avant d'utiliser ou d'effectuer toute maintenance sur l'appareil.

N'essayez pas d'effectuer une procédure avant d'avoir lu attentivement toutes les instructions. Suivez toujours l'étiquetage des produits et les recommandations de ce manuel.



# Mesures de protection importantes

Ce manuel utilise des mots indicateurs et des symboles pour attirer votre attention sur des situations dangereuses :

**DANGER** indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des dommages graves.

**AVERTISSEMENT** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages graves.

**ATTENTION** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Le mot peut également être utilisé pour alerter contre les pratiques dangereuses.

**NOTICE** est utilisé pour attirer l'attention sur des informations notables qui doivent être suivies lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien de cet appareil.

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :



## DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours le DermaWand® Pro immédiatement après l'avoir utilisé. Ne pas toucher le DermaWand® Pro immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne placez pas le DermaWand® Pro près de l'eau et ne le laisser pas tomber dans l'eau ou un autre liquide.
- Cet équipement ne doit être raccordé à un secteur d'alimentation qu'avec une terre de protection.
- Ne placez pas ou ne rangez pas le DermaWand® Pro à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro pendant le bain.
- Ne touchez pas un DermaWand® Pro qui est tombé dans l'eau : Débranchez immédiatement
- Le DermaWand® Pro est une unité scellée. N'essayez pas d'ouvrir l'étui



## WARNING - Pour réduire le risque de brûlures, de chocs électriques, d'incendie ou de blessures aux personnes :

- Le DermaWand® Pro ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque le DermaWand® Pro est utilisé à proximité d'enfants ou d'invalides.
- Utilisez le DermaWand® Pro uniquement pour l'utilisation prévue, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro à proximité de liquides ou de substances inflammables.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro si vous êtes enceinte, prévoyez de le devenir, si vous avez des capillaires cassés, des brûlures ou toute autre affection ou maladie de la peau.
- Pour éviter tout risque d'étranglement avec le cordon d'alimentation, ou pour éviter d'inhaler, d'avalier ou d'étouffer de petites pièces qui pourraient se détacher d'un appareil endommagé, tenir hors de la portée des enfants.
- N'essayez jamais d'entretenir ou d'entretenir le DermaWand® Pro pendant son utilisation.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais le DermaWand® Pro pendant votre sommeil.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture du DermaWand® Pro.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro à l'extérieur et ne l'utilisez pas là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré. Utilisation à l'intérieur seulement.
- N'utilisez pas le DermaWand® Pro dans ou près des muqueuses (yeux, oreilles, nez, bouche). N'utilisez pas DermaWand® Pro en interne et n'insérez pas l'appareil dans une cavité ou une ouverture corporelle.
- Prenez soin de ranger le DermaWand® Pro dans un endroit sûr. Gardez l'ampoule recouverte du capuchon de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- N'utilisez jamais DermaWand® Pro s'il a un câble endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Prenez des dispositions pour retourner DermaWand® Pro à un centre de service pour examen et réparation en appelant le service clientèle.
- Séchez-vous complètement les mains avant d'utiliser le DermaWand® Pro.
- Ne tenez pas DermaWand® Pro à la pointe ou par l'ampoule. Gardez votre main derrière la bride (collier).
- Si vous remarquez un changement dans les performances de l'appareil, débranchez-le immédiatement et cessez de l'utiliser.
- Connectez le DermaWand® Pro à une prise correctement mise à la terre uniquement. La fiche de type A est une fiche polarisée où une lame est plus large que l'autre. En tant que caractéristique de sécurité, la fiche ne s'insère que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. S'il ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.

## ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

### Contre-indications



**WARNING - N'utilisez pas cet appareil si vous présentez l'une des conditions suivantes :**

- Antécédents positifs pour l'atopie ou l'hypersensibilité de la peau.
- Antécédents d'allergie ou de sensibilité aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux médicaments solaires et / ou topiques.
- Ne pas utiliser sur une peau infectée, brûlée ou coupée. N'utilisez DermaWand Pro que sur une peau saine, normale et intacte.
- Ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans. Le DermaWand® Pro est destiné à un usage adulte uniquement..

# DermaWand® Pro


Le DermaWand® Pro est un appareil cosmétique électrostatique portatif. L'appareil est destiné à un usage domestique (à domicile) en vente libre.

Pendant le fonctionnement, le DermaWand® Pro applique des impulsions électrostatiques continues sur la peau tant que l'ampoule touche la surface de la peau. Le cadran d'expiration (bouton) à l'arrière de l'appareil contrôle l'énergie appliquée à la surface de la peau.

Certains exercices peuvent être effectués avec l'appareil, où l'ampoule est placée contre la peau, balayée sur la surface de la peau dans une zone particulière, puis maintenue pendant une brève période de temps avant de soulever l'ampoule.

Comprendre votre

# DermaWand<sup>®</sup> Pro

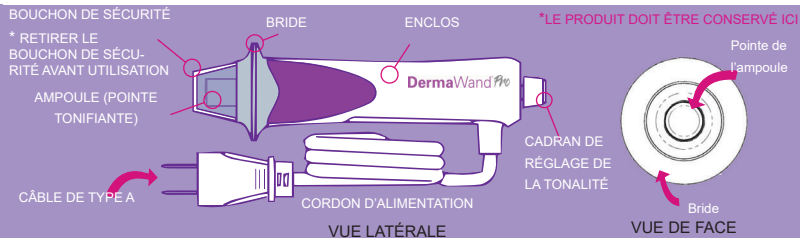

## La molette de tonalité (bouton de commande)



- La quantité d'énergie émise à l'ampoule est contrôlée par un cadran de tonification à l'arrière de l'appareil. Le pointeur sur le bouton, combiné à l'échelle sur le cadran, fournit une indication du niveau de puissance de l'ampoule.
- Le niveau de puissance le plus bas est indiqué par le numéro un (1) sur le cadran. Le niveau de puissance le plus élevé est indiqué par le chiffre douze (12). Les niveaux d'énergie augmenteront ou diminueront en douceur entre les réglages les plus bas et les plus élevés.
- Pour augmenter le niveau d'énergie au niveau de l'ampoule, faites pivoter le cadran de tonalité de gauche à droite, vers le numéro 12 sur le cadran.
- Pour réduire le niveau d'énergie au niveau de l'ampoule, faites pivoter le cadran de tonification de droite à gauche, vers le chiffre 1 sur le cadran.



## Préparer votre peau pour le traitement

- Avant de commencer, nettoyez votre visage avec un nettoyant pour le visage et rincez à l'eau tiède.
- Sécher complètement votre visage après le nettoyage et le rinçage.
- Après avoir nettoyé votre peau, appliquez une crème hydratante sur le bout des doigts propres et superposez-la doucement sur tout votre visage.
- Accordez une attention particulière à la zone délicate des yeux en utilisant une crème pour les yeux de qualité avant d'utiliser DermaWand® Pro dans cette zone.
- Assurez-vous de vous sécher les mains avant d'utiliser l'appareil.

## Préparez-vous à faire bouger vos sens !

Lorsque vous utilisez votre DermaWand® Pro, l'expérience vous entoure. **TOUCHER/TOUCHER** - Lorsque vous utilisez votre DermaWand® Pro, vous ressentez une sensation de picotement qui augmentera à mesure que vous augmenterez le cadran tonifiant. Suivez attentivement les instructions de ce guide pour vous assurer d'augmenter l'intensité en toute sécurité.

**SON** - Lors de l'utilisation de votre DermaWand® Pro, vous entendrez un bourdonnement faible, comme un bruit blanc.

**VUE** - Lorsque vous utilisez votre DermaWand® Pro, l'embout brillera au fur et à mesure que la technologie se mettra au travail !

Les **RÉSULTATS** varient d'une personne à l'autre, en fonction de l'âge, de la durée de votre utilisation et de la fréquence ; Cependant, si vous êtes patient, vous pouvez voir des résultats en aussi peu qu'une semaine ! Et avec une utilisation continue, vous serez étonné.

Vous pouvez également ressentir des rougeurs cutanées très légères, ce qui est normal. Il est très **IMPORTANT** que vous appliquiez une bonne crème topique **AVANT** d'utiliser votre DermaWand® Pro. Si vous ressentez une rougeur modérée, arrêtez d'utiliser votre DermaWand® Pro pendant quelques jours jusqu'à ce que la rougeur disparaisse. Recommencez avec un réglage inférieur, en vous assurant d'appliquer une bonne crème hydratante avant et après le traitement. Nous mettons également en garde contre l'utilisation de concentrations élevées d'AHA, d'acide glycolique ou d'autres produits abrasifs. Note : Si vous ressentez une rougeur ou un gonflement excessif, cessez l'utilisation.

## Avant d'utiliser votre DermaWand® Pro

- AVANT de brancher votre DermaWand® Pro, RETIREZ le capuchon de protection de l'embout et inspectez l'ampoule en verre pour détecter toute fissure ou tout dommage.
- Réglez la molette de tonification sur le réglage de contrôle de puissance le plus bas. Nous vous recommandons de commencer avec le réglage le plus bas pendant les premiers jours jusqu'à ce que vous vous habituez à la sensation. Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, essayez-le sur le dos de votre main pour vous habituer à la sensation.
- Branchez le DermaWand® Pro dans une prise de courant appropriée et laissez l'appareil chauffer pendant une minute avant utilisation. Vous remarquerez peut-être une lueur orange dans l'ampoule.
- Assurez-vous de tenir votre appareil en plaçant vos doigts sur les poignées, en veillant à ce que vos doigts ne saisissent pas ou ne touchent pas devant la bride.
- Après votre traitement DermaWand® Pro, DÉBRANCHEZ l'appareil AVANT de remettre le capuchon en place pour le stockage.



## Commencer

Il est recommandé d'utiliser votre DermaWand® Pro en deux phases.

La PHASE 1 est le balayage de 3 minutes. Cette phase implique des balayages généraux sur tout votre visage et il est recommandé de le compléter deux fois par jour au minimum.

PHASE 2 sont les routines d'exercices faciaux. Ces routines d'exercice ciblent des zones spécifiques de votre visage. Nous recommandons ces exercices à tous les utilisateurs de DermaWand® Pro.

Visitez [www.HowToDermaWand.com](http://www.HowToDermaWand.com) pour des vidéos pédagogiques.

## PHASE 1:3 Traitements de balayage de 3 minutes

Suivez ces étapes deux fois par jour (matin et soir).

**ÉTAPE 1 :** Lorsque vous utilisez DermaWand® Pro pour la première fois, tournez le cadran sur le réglage 1. Assurez-vous d'enlever d'abord le bouchon de l'ampoule. Essayez-le d'abord sur le dos de votre main pour ressentir la sensation de picotement au niveau d'intensité choisi. Si votre DermaWand Pro n'a pas été utilisé auparavant, ou si le DermaWand® Pro n'a pas été utilisé depuis plusieurs jours, cela peut prendre jusqu'à 1 minute pour que l'ampoule s'allume.

**ÉTAPE 2 :** CETTE SENSATION UNIQUE ! Placez l'ampoule directement sur la peau de votre visage (n'oubliez pas de retirer le capuchon) pour ressentir la sensation DermaWand® Pro. Travaillez toujours sur le réglage le plus bas pendant les premiers jours jusqu'à ce que vous vous habituiez à la sensation. Lorsque vous ne ressentez plus la même intensité (une légère sensation de picotement) des stimuli, c'est le signal que votre peau est prête pour le prochain niveau. Continuez à augmenter l'intensité du cadran petit à petit jusqu'à ce que vous ayez atteint votre zone de confort maximale. Le DermaWand® Pro est efficace même au réglage le plus bas, et votre confort dépend de la sensibilité de votre peau.

**ÉTAPE 3 :** Maintenant, commencez à balayer le DermaWand® Pro sur tout votre visage et votre cou avec une légère pression dans un mouvement linéaire ou circulaire pendant trois minutes. Assurez-vous de déplacer le DermaWand® Pro continuellement autour de votre visage.

**ÉTAPE 4 :** Après avoir terminé vos balayages généraux, commencez maintenant certains ou tous les exercices faciaux présentés dans ce guide. Plus vous effectuez d'exercices chaque jour, plus vite vous verrez le nouveau vous.



Si vous ressentez des rougeurs sur votre peau, arrêtez d'utiliser votre DermaWand® Pro pendant quelques jours jusqu'à ce que la rougeur ait disparu. Recommencez avec un réglage inférieur et assurez-vous d'appliquer une crème hydratante avant d'utiliser votre appareil. Appliquez une crème hydratante ou des crèmes pour le visage après avoir fini d'utiliser le DermaWand® Pro.



**ATTENTION -** Si vous ressentez une rougeur ou un gonflement excessif, cessez immédiatement l'utilisation.

## PHASE 2 : Routines d'exercices faciaux

Effectuez les exercices suivants deux fois par jour afin d'obtenir un maximum de résultats.



**MENTON & MÂCHOIRE :** (IMAGE 1) Appliquez une crème hydratante sur le menton. Maintenant, commencez au milieu, juste sous le menton, et déplacez la baguette vers l'extérieur le long de la mâchoire jusqu'au lobe de l'oreille en petits mouvements circulaires proches de la taille d'un quart. Faites-le pendant 30 à 45 secondes de chaque côté. De plus, vous pouvez traiter cette zone avec un deuxième exercice qui commence au milieu du menton et glisse jusqu'au bas de l'oreille en maintenant pendant 3 secondes, puis en répétant 2-3 fois de chaque côté.



**ZONE AUTOUR DE LA BOUCHE :** (IMAGE 2) Appliquez une crème hydratante, puis d'un côté, commencez par le centre inférieur du menton et déplacez la baguette vers le haut au-dessus du coin de votre lèvre dans un mouvement en zigzag. Répétez cet exercice pendant 30 secondes, puis faites l'autre côté pendant 30 secondes.

**SILLONS NASOGÉNIENS :** (IMAGE 2) Appliquez une crème hydratante, puis effectuez un mouvement en zigzag avec la baguette, en commençant par le bas et en suivant le profil du pli vers le haut. Faites cet exercice pendant 0 à 40 secondes d'un côté du visage, puis répétez de l'autre côté.


## IMPORTANT

Appliquez toujours une bonne crème ou lotion sur votre peau avant d'utiliser votre DermaWand » Pro. Pour le visage et le front en général, utilisez une crème hydratante, et pour le contour des yeux, y compris les pattes d'oie, utilisez une crème pour les yeux.

**JOUES :** (IMAGE 3) Appliquez une crème hydratante et, dans un mouvement circulaire, déplacez la baguette du coin du nez jusqu'au coin de l'avant de l'oreille. Effectuez cet exercice pendant 30 secondes, puis répétez de l'autre côté du visage.




**SOUS LES YEUX :** (IMAGE 4) Appliquez une bonne crème pour les yeux avant cet exercice. Déplacez la baguette du coin interne de l'œil et, d'un seul mouvement, glissez vers le coin externe de l'œil tout en gardant la baguette sur la zone osseuse. Faites cet exercice pendant 30 à 40 secondes, puis répétez sur l'autre œil. N'UTILISEZ PAS LE CADRAN DE TONIFICATION AU-DESSUS DU NIVEAU 3 POUR CET EXERCICE.

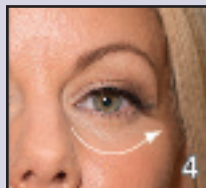

**COIN OCULAIRE EXTÉRIEUR :** (IMAGE 5) Appliquez une bonne crème pour les yeux avant cet exercice. Effectuez des mouvements circulaires sur cette zone. Faites-le pendant 30 à 45 secondes de chaque côté.




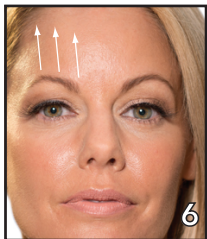

**ZONE DES SOURCILS :** (IMAGE 6) La crème hydratante va ensuite du bord interne du sourcil et glisse lentement la baguette jusqu'à la racine des cheveux et maintiens pendant trois secondes. Répétez ce mouvement du bord central du sourcil à la racine des cheveux, puis du bord externe du sourcil à la racine des cheveux. Répétez ce triple exercice 5-6 fois sur chaque œil. Vous remarquerez peut-être une légère rougeur les premières fois que vous effectuez cet exercice.



**FRONT :** (FIGURE 7) Appliquez une crème hydratante et appliquez une pression modérée avec le DermaWand® Pro, en tirant la peau du front vers la racine des cheveux avec un léger mouvement en zigzag. Une fois que vous arrivez à la racine des cheveux, maintenez la baguette sur la peau en gardant la peau tendue pendant 15 secondes. Faites cet exercice trois fois de chaque côté du visage en commençant par le bord interne du sourcil, puis le centre du sourcil, et enfin à partir du bord externe du sourcil.

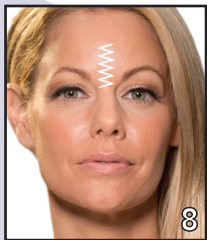

**ENTRE LES SOURCILS (IMAGE 8)** Appliquez une crème hydratante et utilisez la baguette pour effectuer un mouvement en zigzag de bas en haut. Répétez cet exercice pendant 45 secondes.

**LÈVRES :** (IMAGE 9) Appliquez une crème hydratante pour les lèvres. À un réglage plus bas car les lèvres sont une zone plus sensible, appliquez doucement le DermaWand® Pro directement sur les lèvres et glissez sur la zone dans un mouvement de type application de rouge à lèvres. Continuez pendant 60 secondes.

**AUTOUR DES LÈVRES :** (IMAGE 10) Appliquez une crème hydratante sur la zone et, en commençant par le bord supérieur de la lèvre, dans un mouvement ascendant, faites glisser le DermaWand® Pro jusqu'au bas de votre narine, en répétant 2 à 3 fois sur chaque ligne verticale.

**PAUPIÈRES :** (IMAGE 11) Appliquez une crème hydratante hydratante ou une crème pour les yeux, à un réglage bas, en utilisant votre os orbital comme guide, appliquez une légère pression en soulevant les sourcils en glissant vers votre front, puis maintenez-le pendant cinq secondes. Répétez sur tout le front et répétez sur l'autre œil.

**LE DEUXIÈME PASSAGE :** (IMAGE 11) Une fois que vous avez terminé les exercices ciblés, faites un deuxième passage d'une durée maximale de 4 minutes, en vous concentrant sur vos zones à problèmes.



Après avoir utilisé votre DermaWand® Pro, assurez-vous de remplacer le capuchon sur l'ampoule et de ranger votre appareil dans un endroit sûr et sec.

## Après avoir utilisé le DermaWand® Pro

- Débranchez l'appareil et tournez le bouton de commande d'alimentation sur le réglage le plus bas.
- Placez le capuchon de protection sur l'ampoule et rangez le DermaWand® Pro dans le sac de rangement.
- Enroulez le cordon d'alimentation dans un faisceau desserré lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter d'endommager ou d'effiloche le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas hermétiquement et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du DermaWand® Pro.
- Gardez l'ampoule en verre du DermaWand® Pro recouverte du capuchon de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'ampoule peut être endommagée ou cassée si la pointe DermaWand® Pro heurte une surface dure avec force, par exemple si elle tombe sur un sol carrelé. Si l'ampoule se casse, le DermaWand® Pro ne fonctionnera plus. Il s'agit d'un dispositif de sécurité d'isolation protectrice.
- Si vous laissez tomber le DermaWand® Pro et que l'appareil cesse de fonctionner correctement, débranchez-le et ne l'utilisez pas. Prenez des dispositions pour retourner le DermaWand® Pro à un centre de service pour examen et réparation en appelant le service clientèle.

## Guide de dépannage

Si le DermaWand® Pro ne parvient pas à s'allumer, débranchez l'appareil et effectuez les tests suivants :

1. Vérifiez la prise électrique et le circuit électrique pour vous assurer que le circuit est actif et que la prise fonctionne correctement.
2. Retirez le capuchon de protection pour découvrir l'ampoule DermaWand® Pro.
3. Branchez l'appareil et assurez-vous que la fiche est correctement connectée à la prise.
4. Attendez une minute sur deux pour que l'appareil se réchauffe.
5. Tournez le bouton de commande d'alimentation sur le réglage le plus bas. Placez le bout de votre doigt sur l'ampoule et recherchez la lueur orange caractéristique et / ou le flux statique. Si le DermaWand® Pro ne fonctionne pas, débranchez à nouveau l'appareil et appelez le service clientèle.



# Nettoyage, entretien et entreposage

## NETTOYAGE

- Pour nettoyer la surface de l'ampoule en verre, utilisez un chiffon propre et doux et sec pour éliminer l'accumulation de tout matériau de la surface de l'ampoule en verre. L'ampoule peut être nettoyée de cette manière aussi souvent que nécessaire ou souhaité. Utilisez un chiffon propre et doux et sec pour nettoyer la poussière ou les peluches de la surface du DermaWand® Pro. La surface peut être nettoyée de cette manière aussi souvent que souhaité.

## DÉSINFECTION

- Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique (à friction) lingettes à 70% pour désinfecter la surface de l'ampoule en verre aussi souvent que vous le souhaitez.
- Alternativement, un chiffon doux propre peut être légèrement humidifié avec de l'alcool isopropylique et utilisé pour désinfecter l'ampoule en verre.
- Le DermaWand® Pro n'est pas destiné à être partagé ou utilisé par plusieurs utilisateurs.



**DANGER** - Débranchez toujours le DermaWand9 Pro avant de nettoyer ou de désinfecter l'appareil. Ne placez pas le DermaWand® Pro près de l'eau, ni ne le laissez tomber dans l'eau ou un autre liquide.

## MAINTENANCE & STOCKAGE







- Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans le DermaWand® Pro.
- Aucun étalonnage de l'appareil n'est requis. Pour entretenir l'appareil :
- Gardez la surface extérieure de l'appareil propre, sèche et exempte d'huiles ou de graisses qui pourraient vous faire perdre l'adhérence de l'appareil.
- Nettoyez l'ampoule en verre de toute lotion, graisse, huile ou autre contaminant.
- Inspectez périodiquement l'appareil, en particulier l'ampoule en verre, pour détecter toute fissure ou tout dommage.
- Couvrez l'ampoule en verre avec le capuchon de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Rangez l'appareil avec précaution lorsqu'il n'est pas utilisé. Enroulez le cordon d'alimentation dans une bobine desserrée lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter d'endommager ou d'effiloche le cordon d'alimentation, ne l'enroulez pas hermétiquement et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du DermaWand® Pro.

# RECYCLAGE



Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères ou comme déchets ménagers. Ce produit est conçu pour la collecte séparée des appareils électroniques à un point de collecte approprié. L'élimination de cet appareil doit être conforme aux réglementations locales ou aux directives gouvernementales relatives au recyclage des appareils électroniques. Pour plus d'informations, contactez le détaillant ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets, ou consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits électroniques.

## Symboles et définitions

Symbole	Explication
	Consultez le mode d'emploi
	Avertissement-Électricité Ce symbole est un marquage pour alerter de la présence potentielle de tensions dangereuses contenues à l'intérieur du boîtier lorsque l'appareil est connecté à la tension secteur
	Garder au sec
	Équipement de classe II Double isolant
	Type BF Partie appliquée (Interne alimenté, sol flottant. Peut être mis en contact avec l'utilisateur.)
	L'élimination de cet appareil doit être conforme aux réglementations locales ou aux directives gouvernementales relatives au recyclage des produits électroniques.

Terme	Explication
Partie appliquée	La partie de l'appareil qui entre en contact avec l'utilisateur, représentée sur les schémas comme l'ampoule ou la pointe
Bulbe	La lampe en verre à l'extrémité avant de l'appareil. Il s'agit de la partie appliquée
Col	Le bord protecteur dépassant de la carrosserie
Appareil	Le DermaWand Pro
Enclos	Le corps ou la coque de l'appareil
Bride	Le bord protecteur dépassant de la carrosserie
Situations dangereuses	Circonstances dans lesquelles des personnes, des biens ou l'environnement sont exposés à un ou plusieurs dangers
Blessures	Blessures corporelles et/ou dommages à la santé ou aux biens
Fréquence secteur	La fréquence nominale du courant alternatif (AC) du secteur.
Branchements	Dispositif qui permet de brancher de l'équipement électrique à l'alimentation CA principale d'un bâtiment
Tension	La tension nominale d'alimentation du réseau électrique (secteur) disponible à une prise électrique
Opérateur	La personne qui manipule et fait fonctionner l'appareil
Patient	Personne à qui l'appareil est appliqué ou utilisé. Le Patient peut également être l'Opérateur ou l'Utilisateur
Pourboire	La lampe en verre à l'extrémité avant de l'appareil. Il s'agit de la partie appliquée
Utilisateur	La personne qui manipule et fait fonctionner l'appareil

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Poids : 179 g

Dimensions physiques : 170 mm x 145 mm x 46 mm (6,7 x 5,7 x 1,8  
pouces)

Tension : 100-120 VCA

Alimentation : 3 VA

## Conditions de fonctionnement

Le DermaWand® Pro est conforme à ses spécifications lorsqu'il est utilisé en intérieur normal dans les conditions d'exploitation environnementales suivantes :



Température : -5°C (23°F) à 35°C (95°F)



Humidité : 0 à 93 % HR, sans condensation



Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa

Altitude : Jusqu'à 5000 m

## Conditions de stockage et de transport

Le DermaWand® Pro doit rester opérationnel en utilisation normale dans les limites de ses spécifications après le transport ou le stockage (après avoir été retiré de son emballage protecteur et par la suite entre les utilisations) dans la plage de température ambiante suivante :



Température : -25°C (-13°F) à 70°C (158°F)



Humidité : 0 à 93 % HR, sans condensation



Pression atmosphérique : 500 - 1060hPa

## Modèle

DermaWand® Pro

## Durée de vie

La durée de vie prévue du DermaWand® Pro est d'au moins cinq (5) ans d'utilisation normale et est soumise aux conditions intérieures typiques décrites dans ce manuel.

## Conformité électromagnétique

Ce périphérique a été testé et conforme aux normes CEM suivantes : IEC 60601-1-2, éd. 4

## Conformité à la sécurité électrique

Cet appareil a été testé et conforme aux normes de sécurité suivantes : CEI 60601-1 éd. 3.1

## Fabricant

Brand Street Market, LLC  
53 Old Turnpike Road  
Oldwick, NJ 08858  
908-800-0470

## Représentant de l'UE

ICTV Brands UK, Limited  
Landmark House  
Station Road  
Cheadle Hulme  
Cheshire, SK8 7BS  
Téléphone: 0044 (0) 161 486 5085  
service@brandstreetmarket.com

DermaWand® est une marque déposée de Brand Street Market, LLC

## Conformité réglementaire électromagnétique

L'exploitation est soumise à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence pouvant causer une opération indésirable. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la norme CEI 60601-1-2, Ed. 4. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

## Immunité électromagnétique

Le DermaWand® Pro est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du DermaWand® Pro doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	CEI 60601-1-2 Niveau de test	Conformité	Guide de l'environnement électromagnétique
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15±  Décharge d'air Décharge de contact ±8kV	±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15±  Décharge d'air Décharge de contact ±8kV	Les planchers doivent être en bois, en béton ou en céramique, si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30%
Transitoire/rafale électrique rapide CEI 61000-4-4	±2 kV pour les lignes d'alimentation électrique  Ports d'E/S ±1 kV	±2 kV pour les lignes d'alimentation secteur CA	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier ou clinique typique.
Immunité aux surtensions CEI 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV Ligne vers terre  ±0,5 kV, ±1 kV Ligne à ligne	N/A  ±0,5 kV, ±1 kV Ligne à ligne	
Creux de tension, interruptions courtes et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation IEC 61000-4-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%UT ,0,5 cycle</li> <li>• 0%UT ,1 cycle</li> <li>• 70% UT ; 30 cycles</li> <li>• 0% UT ; 300 cycles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%UT ,0,5 cycle</li> <li>• 0%UT ,1 cycle</li> <li>• 70% UT ; 30 cycles</li> <li>• 0% UT ; 300 cycles</li> </ul>	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier ou clinique typique. N'utilisez pas le DermaWand® Pro pendant les coupures de courant.
Fréquence de puissance (50/60Hz) champ magnétique CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques de fréquence de puissance doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier ou clinique typique.
NOTE – UT est la tension secteur CA avant l'application du niveau d'essai.			

## Politique et procédures de retour

- Votre DermaWand® Pro est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait et souhaitez retourner votre produit dans les 30 premiers jours suivant sa réception, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au (800) 390-9584 pour obtenir une autorisation de retour entre 10 h 00 et 19 h 00, heure normale de l'Est (HNE), du lundi au vendredi.
- Votre période d'essai de 30 jours commence à la réception de votre DermaWand® Pro, comme le confirme votre numéro de suivi associé à votre envoi.
- Les demandes de retour doivent être autorisées par un représentant du service à la clientèle afin de valider votre autorisation de retour et d'émettre une étiquette de retour.
- Les remboursements pour les retours admissibles seront émis dans les 30 jours suivant la réception de votre DermaWand® Pro et seront appliqués au mode de paiement original utilisé.
- Reportez-vous à votre bordereau d'expédition pour plus de détails sur la politique de retour.

## Service à la clientèle

Vous êtes autorisé à effectuer uniquement les services de maintenance répertoriés dans ce manuel de l'utilisateur. Brand Street Market, LLC est responsable des effets sur la sécurité, la fiabilité et les performances de l'équipement uniquement si les réparations sont effectuées par le personnel autorisé de Brand Street Market, LLC.

**Modèle:**  
DermaWand® Pro

**Fabricant :**  
Brand Street Market, LLC  
53 Old Turnpike Road  
Oldwick, NJ 08858  
Soutien à la clientèle: (800) 390-9584

## Garantie limitée

Cette garantie limitée couvre le produit DermaWand® Pro. La garantie prévoit la réparation ou le remplacement de l'appareil ou de ses composants, gratuitement, pendant la période de garantie. Cette garantie limitée est régie par les lois de l'État du New Jersey, indépendamment de tout conflit de dispositions légales ; Tout litige au titre de cette garantie sera tranché avec les tribunaux d'État situés dans le pays où le fabricant est situé. La période de garantie est valable un (1) an, [deux (2) ans dans l'Union européenne. Dans certaines circonstances, une garantie prolongée peut être disponible aux États-Unis.] Lorsque vous faites une demande de garantie, vous devez fournir les informations suivantes : numéro de série du produit, date d'achat, nom du garant, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le reçu de vente ou la facture originale. Toute altération ou modification des documents d'achat, y compris le reçu de vente ou la facture, ou le défaut de présenter les documents d'achat au moment de la réclamation de garantie, invalidera cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou la détérioration :

1. Engagé ou déclaré plus d'un (1) an, ou [deux (2) ans dans l'Union européenne ou plus lorsqu'une extension de garantie est achetée par des clients aux États-Unis] après la date d'achat.
2. Encouru en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
3. En raison de la modification ou de la réparation de l'appareil par un tiers non autorisé.
4. En raison de dommages ou de défauts survenus pendant le transport ou d'une mauvaise manipulation qui n'ont pas été signalés au moment de la réception du produit.
5. En raison de l'humidité ou de tout liquide ou corps étranger placé à l'intérieur de l'appareil.
6. En raison de l'utilisation d'accessoires ou d'accessoires non approuvés avec l'appareil.
7. En raison d'une utilisation contradictoire avec les procédures indiquées dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
8. En raison de catastrophes naturelles, d'événements naturels (inondations, incendie, foudre, etc.), de force majeure ou de dommages accidentels ou délibérés.
9. En raison de l'exposition de l'appareil à des environnements très poussiéreux ou à une humidité ou des températures excessives.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DÉCLINE ET EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE EN DROIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CET APPAREIL. CETTE GARANTIE NÉ S'ÉTEND PAS AUX ACHATS EFFECTUÉS AUPRÈS D'UNE PERSONNE AUTRE QU'UN REVENDEUR AUTORISÉ DE L'APPAREIL DERMAWAND® PRO.

## Garantie

Une garantie d'un (1) an à compter de la date d'achat couvre le matériel et la fabrication de DermaWand® Pro. Pour un appareil cassé (à l'exclusion des ampoules cassées) et pour bénéficier d'un service de réparation sous garantie, communiquez avec : [service@brandstreetmarket.com](mailto:service@brandstreetmarket.com)

## Ampoule cassée ?

L'ampoule en verre n'est pas couverte par la garantie du produit DermaWand® Pro. Remplacez toujours le bouchon de sécurité au-dessus de l'ampoule lorsqu'elle n'est pas utilisée. Veillez à ne pas laisser tomber votre DermaWand® Pro pendant l'utilisation car l'ampoule pourrait se casser. En cas d'ampoule cassée, contactez le service clientèle au (800) 390-9584 pour obtenir de l'aide. Veuillez vous référer à la section Politique et procédures de retour de ce manuel pour plus de détails.

## Questions ? Préoccupations ?

Consultez [www.HowtoDermaWand.com](http://www.HowtoDermaWand.com) pour des vidéos d'instruction et des conseils.

Ou envoyez-nous un courriel à [service@brandstreetmarket.com](mailto:service@brandstreetmarket.com) si vous avez des questions. Nous vous enverrons des conseils utiles pour vous assurer d'obtenir un maximum de résultats de votre DermaWand® Pro comme des millions de femmes à travers le monde.

Vous voulez toujours retourner votre DermaWand® Pro ?

Contactez notre équipe du service à la clientèle au [service@brandstreetmarket.com](mailto:service@brandstreetmarket.com) ou au (800) 390-9584 pour obtenir des instructions / autorisations de retour.

## Nous aimerions avoir des nouvelles de nos fans de DermaWand® Pro!

Si vous aimez votre DermaWand® Pro, partagez votre histoire avec nous à [DermaWand@brandstreetmarket.com](mailto:DermaWand@brandstreetmarket.com) et obtenez des offres spéciales sur d'autres excellents produits, et obtenez le dernier buzz.

DermaWand® Pro a été testé selon les normes suivantes :

SÉCURITÉ :

IEC 60601-1 Édition 3.1

ANSI/AAMI ES 60601-1

IEC 60601-11:2015

EMC:

IEC 60601-1-2 Édition 4


REMARQUES : DermaWand® ne prétend pas diagnostiquer, atténuer, traiter ou corriger des troubles ou des maladies cutanées spécifiques. DermaWand® est destiné à la relaxation ou à un usage cosmétique uniquement.

[www.DermaWandPro.com](http://www.DermaWandPro.com)

©2023 Brand Street Market, LLC.

DermaWand® est une marque déposée de Brand Street Market, LLC.

Imprimé aux États-Unis

 Appareil de classe II

  
FABRIQUE EN CHINE



INSTCGPEN5  
Rev A00  
0123513