


ORTHOMECHANIK AKUPRESSUR-MATTE

BEDIENUNGSANLEITUNG



 **RoHS**

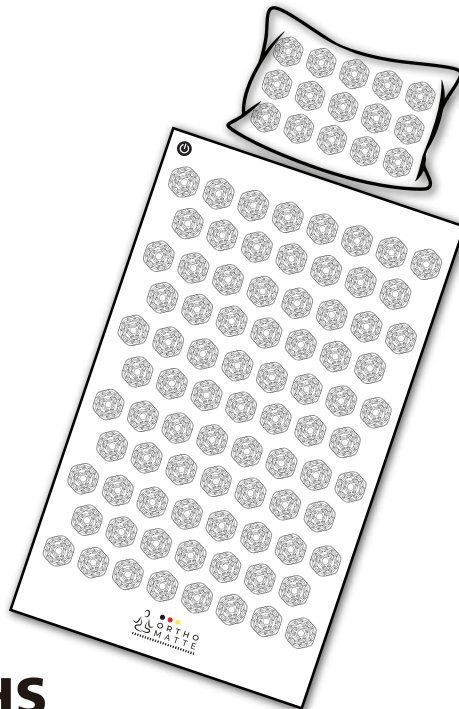

BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

INHALTE

Lieferumfang	— — — — — — — — — — — — — — —	3
Material der Akupressur-Matte	— — — — — — — — — — — — — — —	4
Anwendung	— — — — — — — — — — — — — — —	5
Pflege und Aufbewahrung	— — — — — — — — — — — — — — —	6
Warnhinweise	— — — — — — — — — — — — — — —	7
Technische Spezifikationen	— — — — — — — — — — — — — — —	9
Entsorgung	— — — — — — — — — — — — — — —	9
Garantie	— — — — — — — — — — — — — — —	10



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Akupressur-Matte von OrthoMechanik entschieden haben. Diese wird Ihnen helfen Verspannungen zu lösen, Stress abzubauen und so zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Bereits seit Tausenden von Jahren ist bekannt, dass Akupressur durch die Stimulierung von bestimmten Druckpunkten die natürliche Selbstheilung fördert. Die OrthoMechanik Akupressur-Matte basiert genau auf diesem Prinzip. Sie wirkt durch ihre 7425 Spitzen positiv auf den Körper ein, fördert die Durchblutung, setzt Endorphine frei und verbessert die Qualität des Schlafes.

Diese Akupressur-Funktion haben wir noch durch eine Vibration ergänzt. So wird nicht nur Stress abgebaut und dem Körper geholfen, sich selbst zu heilen, sondern auch Verspannungen und Schmerzen gezielt bekämpft und reduziert.

Bevor Sie jedoch loslegen und Ihrem Körper und Rücken etwas Gutes tun, lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung genau durch. Es ist wichtig, dass Sie unsere Akupressur-Matte wie beschrieben anwenden und unsere Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Hinweise zur Anwendung unserer Geräte finden Sie auf unserer Webseite www.orthomechanik.de

Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Mail an info@orthomechanik.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung mit Ihrer neuen OrthoMechanik Akupressur-Matte.

**Liebe Grüße,
Ihr OrthoTeam**

LIEFERUMFANG

1 x	Akupressur-Matte mit USB-C Netzteil für die Vibration
1 x	Kissen
1 x	Bedienungsanleitung
1 x	Tragetasche



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

MATERIAL DER AKUPRESSUR-MATTE

Akupressur-Matte:

55 % Leinen

45 % Baumwollgewebe

Füllung der Matte:

Schaumstoff

Kissen:

55 % Leinen

45 % Baumwollgewebe

Füllung des Kissens:

PP Schaumstoff

Tragetasche:

55 % Leinen

45 % Baumwollgewebe

Akupressur-Spitzen:

Plastik



BRAUCHEN SIE HILFE?

Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS

info@orthomechanik.de

ANWENDUNG

1. Platzieren Sie Ihre OrthoMatte, sowie bei Bedarf das Kissen, auf eine flache Oberfläche. Dabei zeigen die Akupressur-Spitzen nach oben.
2. Wenn Sie die Vibrationsfunktion nutzen möchten, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
3. Bei empfindlicher Haut oder um die ersten Anwendung zunächst weniger intensiv zu gestalten empfehlen wir Ihnen, Ihr T-Shirt anzulassen.
4. Legen Sie sich auf die Matte und genießen Sie die Akupressur.
5. Um die Wirkung noch zu verstärken, schalten Sie die Vibrationsfunktion mit dem (🔌) - Knopf an.
6. Durch wiederholtes Drücken des (🔌) - Knopfes, wählen Sie die Stufe der Vibration aus (Stufe 1 - niedrig, Stufe 2 - stark).
7. Wir empfehlen ca. 20 Minuten auf der Matte liegenzubleiben.
8. Für eine effektive Wirkung empfehlen wir Ihnen die Orthomatte regelmäßig zu benutzen.

VIBRATIONSFUNKTION

Durch die Vibration kann die Wirkung der Akupressur-Matte noch verstärkt werden.

1 x Drücken der (🔌)-Taste - Anschalten der Vibrationsfunktion.

Vibration startet in Stufe 1 (niedrig)

2x / wiederholtes Drücken der (🔌)- Taste

Wechsel zu Stufe 2 (stark)

3x / wiederholtes Drücken der (🔌)- Taste

Ausschalten der Vibrationsfunktion

ACHTUNG: Die Vibration ist eine zusätzliche Funktion. Ihre OrthoMatte ist auch effektiv und wirkungsvoll ohne Vibration.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Pflege

- Reinigen Sie den Bezug der Matte und des Kissens ausschließlich mit kaltem Wasser.
- Entfernen Sie vor der Reinigung die Füllungen der Matten und des Kissens.
- Reinigen Sie die Matte und das Kissen ausschließlich mit der Hand.

Reinigung der Matte:

- Stellen Sie sicher, dass die Matte von der Steckdose getrennt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Öffnen Sie den Reißverschluss an der Matte und entnehmen Sie die Schaumstoffmatte.
- Den Bezug / Hülle können Sie nun mit ausschließlich kaltem Wasser mit der Hand waschen.

Reinigung des Kissens

- Entfernen Sie die Füllung und waschen Sie den Kissenbezug ausschließlich in kaltem Wasser mit der Hand.

Aufbewahrung

- Wenn Sie Ihre OrthoMatte nicht benutzen, bewahren Sie diese in der Tragetasche an einem trockenen Ort auf.
- Verdrehen Sie nicht das Ladekabel.
- Hängen Sie das Produkt nicht am Ladekabel auf.
- Setzen Sie die Matte keiner Feuchtigkeit aus und bewahren sie sie nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

WARNHINWEISE

Wichtige allgemeine Warnhinweise

- Lesen Sie vor der Benutzung der Akupressur-Matte die Bedienungsanleitung genauestens durch und verwenden Sie die Matte ausschließlich wie darin beschrieben.
- Nach der Benutzung oder wenn Sie das Gerät reinigen möchten, stecken Sie es von der Stromquelle ab
- Kinder und Personen mit mentaler oder physischer Einschränkung sollten das Gerät nur unter Aufsicht und ohne Vibrationsfunktion verwenden.
- Wenn sich die Anwendung mit der Matte unangenehm anfühlt, brechen Sie die Behandlung sofort ab.
- Falls das Kabel oder die Tasten beschädigt wurden oder das Gerät defekt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich über info@orthomechanik.de an uns.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Dadurch verlieren Sie jeglichen Garantieanspruch.
- Beenden Sie die Vibrationsfunktionen und schalten Sie das Gerät mit der Aus-Taste aus, bevor Sie die Matte abstecken.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

PERSONEN, DIE DAS PRODUKT NICHT NUTZEN SOLLTEN

Das Gerät ist ausschließlich zur Privatanwendung und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben oder / und zu den folgenden Personengruppen gehören, sollten Sie vor der Nutzung der Akupressur-Matte mit Ihrem behandelnden Arzt oder Physiotherapeuten sprechen:

- Wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hämophilie leiden.
- Wenn Sie Antikoagulantien einnehmen.
- Kinder unter 5 Jahren.
- Schwangere.
- Menschen mit Diabetes oder Neuropathien.
- Menschen mit chronischen Krankheiten.
- Trägern von Herzschrittmachern.
- Menschen mit Bluthochdruck und Herzkrankheiten.
- Menschen mit zerebraler Arteriosklerose, zerebraler Thrombose und Osteoporose.
- Menschen mit Krebserkrankungen.
- Trägern von künstlichen Gelenken oder Metallplatten.
- Wenn Sie Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen haben.

Kinder unter 8 Jahren / Personen mit eingeschränkten physischen oder mentalen Fähigkeiten sollten das Gerät ausschließlich unter Aufsicht und ohne Vibrationsfunktion verwenden.

Wird ihre OrthoMatte von Kindern / älteren Menschen verwendet, empfehlen wir die Anwendung zu verkürzen und / oder die Intensität zu reduzieren!

ACHTUNG: Die Anwendung sollte sich zu keiner Zeit unangenehm anfühlen! Ist dies der Fall, brechen Sie die Behandlung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt!

ACHTUNG: Bitte beachten Sie diese Warnhinweise, um das Risiko einer Verletzung, eines Brandes oder Stromschlages auszuschließen.

WICHTIG: Versuchen Sie, die Matte bei Defekten NICHT selbst zu reparieren. Dadurch erlischt Ihr Garantieanspruch



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produktname	OM-OM-01
Wattzahl	5 W
Anliegende Netzspannung	100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Produktmaße	73 x 43 x 4 cm

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE ZUM ENTSORGEN VON ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Durch die 2018 verabschiedeten Regulationen zur Entsorgung von elektronischen Geräten (WEEE) unterliegen Sie folgenden Bestimmungen:

Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Entsorgungen über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne sind untersagt.

Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

Ihre Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Altgeräten können bei den durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten abgegeben werden. Damit kann eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt werden.

Unter dem folgenden Link besteht die Möglichkeit, sich ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen anzuzeigen zu lassen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Wir sind unter der Registrierungsnummer DE 35679811 bei der Stiftung Elektroaltgeräten, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de

GARANTIE

Für Ihre OrthoMatte erhalten Sie von der OrthoMechanik GmbH ab Kaufdatum eine **30-Tage-Geld-zurück-Garantie** sowie eine 2-jährige Garantie auf Teile und Verarbeitung.

Diese Garantieleistungen sind nicht übertragbar und gelten nur für den Käufer.

Die Orthomechanik GmbH ist berechtigt, Bilder, Videos oder andere Materialien, welche den Mangel aufzeigen, einzufordern.

Alle Garantieansprüche müssen sofort nach Auftreten des Mangels an info@orthomechanik.de angemeldet werden. Die E-Mail muss den vollständigen Namen, sowie die Bestell- bzw. Rechnungsnummer enthalten.

Für Ersatzteile und Austauschprodukte gilt die verbleibende ursprüngliche Garantiezeit oder ein Garantiezeitraum von dreißig (30) Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Garantieansprüche können NICHT geltend gemacht werden, wenn der Defekt durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde.

ACHTUNG: Wenn Sie Ladekabel, welche nicht der zugelassenen Leistung entsprechen, verwenden, kann dies das Gerät beschädigen und Sie verlieren jeglichen Garantieanspruch.

HINWEIS: Diese befristete Garantie berührt nicht die Ihnen zustehenden gesetzlichen Rechte im Rahmen der Gesetze über den Verkauf von Konsumgütern.

Orthomechanik GmbH
Rheinstraße 11
14513 Teltow
Germany
WEEE-REG-Nr. DE 35679811



BRAUCHEN SIE HILFE?
Besuchen Sie unsere Website für
Videos, Blogartikel und Q&A
www.orthomechanik.de



KONTAKTIEREN SIE UNS
info@orthomechanik.de