

JBV 80



(D)	BABYWAAGE Gebrauchsanweisung.....	(2 – 3)
(GB)	BABY SCALE Instruction manual	(4 – 5)
(F)	PÈSE-BÉBÉ Mode d'emploi.....	(6 – 7)
(E)	BÁSCULA PARA BEBÉS Manual de instrucciones.....	(8 – 9)
(I)	BILANCIA PESANEONATI Istruzioni per l'uso.....	(10 – 11)
(TR)	BEBEK TARTISIR Kullanım kılavuzu.....	(12 – 13)
(RUS)	ВЕСЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ Инструкция по применению	(14 – 16)
(PL)	WAGA DZIECIĘCA Instrukcja obsługi.....	(16 – 17)
(NL)	BABYWEEGSCHAAL Gebruikshandleiding	(18 – 19)
(P)	BALANÇA PARA BEBÉS Instruções de utilização	(20 – 21)
(GR)	ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΩΡΟΥ Οδηγίες χρήσης.....	(22 – 24)

2.3. Utylizacja

Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment).
Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.



NEDERLANDS

Geachte klant,

Het verheugt ons dat u hebt gekozen voor een product uit ons gamma. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, zachte therapie, bloeddruk/diagnose, gewicht, massage en lucht.

Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groeten,

Uw Beurer-team

Belangrijke aanwijzingen


1. Veilig gebruik

- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingselement).
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst van Beurer of door een erkende handelaar.
- Alle weegschalen zijn in overeenstemming met EG-richtlijn 2004/108, inclusief de aanvullingen op deze richtlijn. Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van Beurer.
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Bewaren: plaats geen voorwerpen op de weegschaal wanneer deze niet wordt gebruikt.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadelig worden beïnvloed.
- De weegschaal kan worden belast tot 20 kg (44 lb/704 oz). Het gemeten gewicht wordt weergegeven in stappen van 5 gram (0.02 lb/0.20 oz).
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Transportbeveiliging verwijderen.
- Plaats de weegschaal op een stevige, effen ondergrond; een stevige ondergrond is voorwaarde voor een correcte meting.

2. Gebruik

2.1 Batterij

Voor de weegschaal zijn 2 batterijen van het type 1,5 V Alkaline Micro AA nodig. Deze moeten voor ingebruikname van de babyweegschaal volgens de aangegeven polen in het batterijcompartiment aan de onderkant van de weegschaal worden geplaatst. Wanneer op het display “Lb” verschijnt, moeten de batterijen worden vervangen. Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevaarlijk afval), of geef ze af in een elektrozaak.

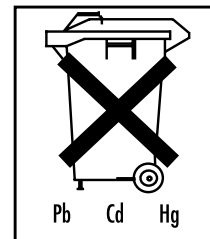

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:

Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.

2.2 Wegen

Het gewicht wordt in stappen van 5 g met een minimum gewicht van 50 g aangegeven.

Druk op de toets “” om de weegschaal in te schakelen.

Zodra “0.000 kg” op het display wordt weergegeven, is de weegschaal klaar voor gebruik.

Leg de baby vervolgens op het weegoppervlak. Ga hierbij voorzichtig te werk; laat de baby niet vallen en ondersteun het hoofdje van de baby.

Deze babyweegschaal bevat de functie “HOLD” (AUTO HOLD en MECHANICAL HOLD). De AUTO HOLD-functie bepaalt het gewicht van de baby, zodra deze stil genoeg ligt om een goede meting vast te houden. Wanneer de baby veel beweegt, kan er geen gewicht worden gemeten. Probeer daarom de baby te kalmeren, om het gewicht snel te kunnen meten. Pak de baby echter niet vast, want dit beïnvloedt de gewichtsmeting.

Zodra het gewicht van de baby is bepaald, wordt het woord “HOLD” knipperend weergegeven en wordt het gewicht gedurende 20 seconden weergegeven. Vervolgens schakelt de weegschaal automatisch uit.

Wanneer de baby veel beweegt, kunt u de functie MECHANICAL HOLD proberen door op de toets “HOLD” te drukken. Het woord “HOLD” zal vervolgens gedurende 3 seconden knipperen en het gewicht wordt gedurende 20 seconden weergegeven

Als u de baby niet direct op het weegoppervlak legt, bijvoorbeeld op een handdoek, moet u de handdoek VÓÓR het inschakelen van de weegschaal erop leggen. Als de handdoek en andere gewichten die u bij de weging weer af moet trekken meer dan 50 g weegt, kunt u ook de TARA-functie gebruiken. Wanneer u de toets TARA hebt ingedrukt, wordt het woord Tare in het display weergegeven. Als u de weegschaal opnieuw wilt instellen op 0.000 g, drukt u op de toets TARA als de melding ‘HOLD’ is gestopt met knipperen.

De fabrieksinstellingen van de weegschaal geven de eenheden in “kg” weer. Met de toets “kg/lb/oz” kunt u telkens wisselen tussen de eenheden kilogram “kg”, pond “lb” en ounce “oz”.

2.3 Verwijdering

Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties voor afvalverwijdering.

