

beurer

TL 41 Touch



NL Daglichtlamp
 Gebruiksaanwijzing 2

CE 0123



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoud

1. Kennismaking	2	9. Reiniging en onderhoud	7
2. Omvang van de levering.....	3	10. Opbergen.....	7
3. Verklaring van de symbolen	3	11. Verwijdering	7
4. Voorgescreven gebruik.....	3	12. Wat te doen bij problemen	7
5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen.....	4	13. Technische gegevens	8
6. Beschrijving van het apparaat.....	5	14. Netvoeding	9
7. Ingebruikname.....	5	15. Garantie/service	10
8. Bediening	6		

1. Kennismaking

Geachte klant,

We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage, beauty, baby en lucht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

Waarom een daglichtbehandeling?

Wanneer het aantal zonuren in de herfst merkbaar afneemt en mensen in de wintermaanden steeds vaker binnen zitten, kunnen er symptomen van lichttekort optreden. Deze symptomen worden vaak “winterdepressie” genoemd. De symptomen kunnen veel verschillende vormen aannemen:

- Stemmingwisselingen
- Neerslachtigheid
- Futloosheid
- Algemene onpasselijkheid
- Meer slaap nodig
- Gebrek aan eetlust
- Concentratieproblemen

Deze symptomen treden op omdat licht, met name zonlicht, van levensbelang is en het menselijk lichaam rechtstreeks beïnvloedt. Zonlicht regelt indirect de productie van melatonine, die alleen in het donker aan het bloed wordt afgegeven. Dit hormoon laat het lichaam weten dat het tijd is om te gaan slapen. In maanden met weinig zonuren wordt er meer melatonine geproduceerd. Hierdoor is het moeilijker om op te staan, omdat de lichaamsfuncties als het ware uitgeschakeld zijn. Als de daglichtlamp 's ochtends meteen na het wakker worden wordt gebruikt, dus zo vroeg mogelijk, kan de productie van melatonine worden beïndigd, zodat de stemming positief kan worden beïnvloed.

Bij lichttekort wordt bovendien de productie van het gelukshormoon serotonine belemmerd, dat een belangrijke invloed heeft op ons “welzijn”. Bij de lichtbehandeling gaat het dus om kwantitatieve veranderingen van hormonen en mediators in de hersenen, die ons inspanningsniveau, onze gevoelens en ons welzijn kunnen beïnvloeden. Daglichtlampen kunnen een goede vervanging zijn voor het natuurlijke zonlicht en werken de in de herfst en winter optredende hormonale disbalans tegen.

In de medische sector worden daglichtlampen tijdens lichttherapie gebruikt voor de bestrijding van symptomen van lichttekort. Daglichtlampen bootsen daglicht na met een verlichtingssterkte van 10.000 lux. Dit licht kan het menselijk lichaam beïnvloeden en preventief of als onderdeel van een behandeling worden ingezet. Normaal elektrisch licht is niet sterk genoeg om de hormoonhuishouding te kunnen beïnvloeden. Zelfs in een goed verlicht kantoor bedraagt de verlichtingssterkte bijvoorbeeld slechts 500 lux.

















2. Omvang van de levering

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

- Daglichtlamp
- Netvoeding
- Deze gebruiksaanwijzing

3. Verklaring van de symbolen

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

	Lees de gebruiksaanwijzing.	 Aanwijzing	Verwijzing naar belangrijke informatie.
 WAAR-SCHUWING	Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Fabrikant
 LET OP	Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.		Veiligheidsklasse II
	YYYYXWW / XXXXXX YYYYXWW = productiejaar, jaarcodes en productieweek XXXXXX = serienummer		Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
 0123	Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen.	IP21	Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en tegen verticaal vallende druppels.
Storage 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag	 20 PAP 	Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieueisen.
Operating 	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik		Gelijkstroom
	Alleen voor gebruik binnenshuis		OFF / ON

4. Voorgeschreven gebruik

De daglichtlamp is uitsluitend bestemd voor het beschijnen van het menselijk lichaam. Gebruik de daglichtlamp niet op dieren. Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik. Het apparaat is niet bestemd voor commercieel gebruik. De daglichtlamp is bedoeld om de gevolgen van gebrek aan licht, met name zonlicht, te compenseren en om verlichting te bieden bij seizoensgebonden affectieve stoornissen, stemmingsstoornissen en stoornissen in het slaap-waakritme.

5. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen



WAARSCHUWING

- De daglichtlamp is uitsluitend bestemd voor het beschijnen van het menselijk lichaam.
- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Zorg ervoor dat de daglichtlamp stevig en veilig staat.
- Sluit het apparaat alleen aan op de netspanning die op het typeplaatje wordt aangegeven.
- Dompel het apparaat niet onder in water en gebruik het niet in vochtige ruimten.
- Gebruik het apparaat niet bij personen die hulpeloos zijn, kinderen die jonger zijn dan 3 jaar of personen die ongevoelig zijn voor warmte (personen met ziektegerelateerde huidveranderingen) en niet na de inname van pijnstillers, alcohol of drugs.
- Onachtzame personen mogen het product niet gebruiken.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking!).
- Dek het apparaat niet af, verpak het niet en berg het niet op als het apparaat nog warm is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt.
- Het apparaat mag niet met natte of vochtige handen worden aangeraakt als het is aangesloten; er mag geen water op het apparaat terechtkomen. Gebruik het apparaat alleen als het volledig droog is.
- Let erop dat u het netsnoer en de stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steekt en er weer uittrekt. Raak de AAN/UIT-sensor ook alleen met droge handen aan.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warme voorwerpen en open vuur.
- Bescherm het apparaat tegen harde schokken.
- Trek de netvoeding niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert. Neem in deze gevallen contact op met de klantenservice.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het volledige apparaat worden weggedaan.
- De scheiding van het elektriciteitsnet is uitsluitend gewaarborgd als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare narcosegasverbindingen met lucht, zuurstof of stikstofoxide.
- Dit apparaat hoeft niet gekalibreerd en niet preventief gecontroleerd en onderhouden te worden.
- Het apparaat kan niet worden gerepareerd. Het bevat namelijk geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan zonder toestemming van de fabrikant.
- Als er wijzigingen aan het apparaat zijn aangebracht, moeten uitvoerige tests en controles worden uitgevoerd om de veiligheid van het apparaat te kunnen blijven garanderen.
- Houd het snoer buiten bereik van kleine kinderen om te voorkomen dat ze erin verstrengeld raken of dat ze stikken door strangulatie.
- Het is de bedoeling dat de patiënt het apparaat bedient. Gebruik het apparaat en de toebehoren zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Voorkom dat het product vanaf een hoger punt naar beneden valt.
- Eisen aan de plaatsing van het product:
 1. Klap eerst de voet helemaal uit en plaats het product horizontaal, om te voorkomen dat het product kan kantelen.
 2. Schud niet met het product als u het plaatst, om te voorkomen dat het product kan vallen.
 3. Raak bij het plaatsen van het product de voet niet aan, om te voorkomen dat het product kan vallen.
 4. Trek niet aan het snoer van de netvoeding, om te voorkomen dat het product kan vallen.

Algemene aanwijzingen



LET OP

- Raadpleeg voordat u de daglichtlamp gebruikt eerst een arts als u pijnstillers, bloeddrukverlagers of antidepressiva slikt.
- Bij mensen met netvliesaanandoeningen moet voor aanvang van de daglichtbehandeling net zoals bij diabetici een controle bij de oogarts worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet bij oogandoeningen zoals grauwe staar en groene staar, bij algemene aandoeningen van de oogzenuw of bij ontstekingen van het glasachtig lichaam.
- Mensen die zeer gevoelig zijn voor licht en zeer vatbaar zijn voor migraine moeten eerst hun arts raadplegen over het gebruik van de daglichtlamp.


- Raadpleeg bij elke twijfel met betrekking tot de gezondheid uw huisarts!
- Verwijder alvorens het apparaat te gebruiken al het verpakkingsmateriaal.
- Lampen vallen niet onder de garantie.
- Inschakelcontrole: controleer met name na het bereiken van de te verwachten gebruiksuren of er na het inschakelen van het product felle flitsen, donkere vlakken/schaduw en/of andere afwijkingen te zien zijn. Neem bij onregelmatigheden contact op met de klantenservice.
- De netvoeding maakt deel uit van de medische uitrusting.


Reparatie

LET OP

- U mag het apparaat in geen geval openen. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Neem voor reparaties contact op met de klantenservice of een erkend verkooppunt.

6. Beschrijving van het apparaat

1. AAN/UIT-sensor 
2. Achterzijde behuizing
3. Lichtscherm
4. Voet
5. Aansluiting netvoeding
6. Netvoeding

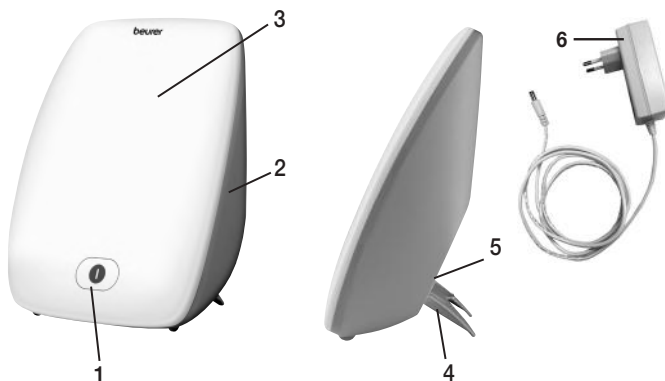

7. Ingebruikname

Haal het apparaat uit het plastic. Controleer het apparaat op beschadigingen en fouten. Gebruik het apparaat niet wanneer u beschadigingen of fouten aan het apparaat vaststelt. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of met de leverancier.

Plaatsen

Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de afstand tussen het apparaat en de gebruiker 20 cm tot 45 cm bedraagt. Op deze afstand werkt de daglichtlamp optimaal.

Aanwijzing:

Als het apparaat opgeborgen was of vervoerd is, bewaar het dan minstens twee uur op kamertemperatuur, voordat u het gebruikt.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Let op

Om mogelijke schade aan de daglichtlamp te voorkomen, mag de daglichtlamp alleen met de hier beschreven netvoeding worden gebruikt.

1. Steek de netvoeding in de daarvoor bestemde aansluiting aan de achterzijde van de daglichtlamp en het andere uiteinde in een geschikt stopcontact. De netvoeding mag alleen worden aangesloten op de netspanning die op het typeplaatje wordt vermeld.
2. Trek na het gebruik van de daglichtlamp eerst de stekker van de netvoeding uit het stopcontact en ontkoppel de netvoeding vervolgens van de daglichtlamp.

i Aanwijzing:

- Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is van de plek waar u het apparaat plaatst.
- Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.

8. Bediening

1	Netvoeding insteken ► Steek de netvoeding in de aansluiting.												
2	Daglichtlamp inschakelen ► Raak de AAN/UIT-sensor aan.												
3	Lichtbehandeling Ga zo dicht mogelijk bij de lamp zitten (20 cm tot 45 cm). Tijdens de behandeling kunt u gewone handelingen blijven verrichten. U kunt lezen, schrijven, telefoneren enz. <ul style="list-style-type: none">• Kijk geregeld kort direct in het licht, want de opname c.q. de werking vindt plaats via de ogen/het netvlies.• U kunt de daglichtlamp zo vaak gebruiken als u wilt. De behandeling is echter het effectiefst wanneer u de lichttherapie ten minste 7 dagen op rij op de aangegeven tijden uitvoert.• Het meest effectieve moment van de dag voor de behandeling is tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Er wordt geadviseerd een behandelingsduur van 2 uur per dag aan te houden.• Kijk echter niet gedurende de volledige behandeling direct in het licht. Hierdoor kan het netvlies namelijk geïrriteerd raken.• Start met een korte beschijning die u in de loop van een week verhoogt. Aanwijzing: Na de eerste behandelingen kunt u last krijgen van hoofdpijn en pijn aan uw ogen. Na meerdere behandelingen zult u hier geen last meer van hebben, omdat het zenuwstelsel dan aan de nieuwe prikkels gewend is geraakt.												
4	Waar moet u op letten Voor een behandeling bedraagt de aanbevolen afstand tussen het gezicht en de lamp 20 tot 45 cm. De duur van de behandeling is afhankelijk van de gehanteerde afstand: <table border="1" data-bbox="140 869 688 1013"><thead><tr><th>Lux</th><th>Afstand</th><th>Behandelingsduur</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.000</td><td>ca. 20 cm</td><td>0,5 uur</td></tr><tr><td>5.000</td><td>ca. 30 cm</td><td>1 uur</td></tr><tr><td>2.500</td><td>ca. 45 cm</td><td>2 uur</td></tr></tbody></table> In principe geldt: Hoe dichters u bij de lichtbron zit, des te korter de behandelingsduur.	Lux	Afstand	Behandelingsduur	10.000	ca. 20 cm	0,5 uur	5.000	ca. 30 cm	1 uur	2.500	ca. 45 cm	2 uur
Lux	Afstand	Behandelingsduur											
10.000	ca. 20 cm	0,5 uur											
5.000	ca. 30 cm	1 uur											
2.500	ca. 45 cm	2 uur											
5	Gedurende een langere periode van licht genieten Herhaal de behandeling in het lichtarme jaargetijde ten minste 7 dagen op rij, of afhankelijk van uw persoonlijke behoefte langer. Voer de behandeling indien mogelijk 's ochtends uit.												
6	Daglichtlamp uitschakelen ► Raak de AAN/UIT-sensor aan. De leds gaan uit. Trek de stekker uit het stopcontact. LET OP! De lamp is na het gebruik warm. Laat de lamp eerst voldoende afkoelen voordat u deze opruimt en/of verpakt!												

9. Reiniging en onderhoud

Het apparaat moet van tijd tot tijd worden schoongemaakt.

LET OP

- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt!
Voordat u het apparaat reinigt, moet het apparaat uitgeschakeld, van het elektriciteitsnet losgekoppeld en afgekoeld zijn.
- Reinig het apparaat niet in een vaatwasmachine!
Gebruik voor de reiniging een licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen en houd het apparaat nooit onder water.
- Het apparaat mag niet met natte of vochtige handen worden aangeraakt als het is aangesloten; er mag geen water op het apparaat terechtkomen. Gebruik het apparaat alleen als het volledig droog is.

10. Opbergen

Berg het apparaat wanneer u het langere tijd niet gebruikt op een droge plek en buiten bereik van kinderen op. Zorg er daarbij voor dat het apparaat niet meer op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Neem de in het hoofdstuk "Technische gegevens" genoemde omstandigheden bij opslag in acht.

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



12. Wat te doen bij problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat geeft geen licht.	Het apparaat is uitgeschakeld.	Raak de AAN/UIT-sensor aan om het apparaat in te schakelen.
	Geen stroom.	Steek de netvoeding in een geschikt stopcontact.
	Geen stroom.	De netvoeding is defect. Neem contact op met de klantenservice of het verkooppunt.
	De levensduur van de leds is overschreden. Leds defect.	Neem voor reparaties contact op met de klantenservice of een erkend verkooppunt.

13. Technische gegevens

Modelnr.	GCE502
Type	TL 41 Touch
Afmetingen (b x h x d)	207 x 76 x 270 mm
Gewicht	Ca. 420 g
Lamp	Leds
Grens korte golflengte	445 nm
Kleurtemperatuur van de leds	6500 kelvin
Maximaal lichtvermogen	23 W/m ²
Nominaal uitgangsvermogen	26 W ± 2 W
Verlichtingssterkte	10.000 lux (afstand: ca. 20 cm)
Straling	Stralingsvermogens buiten het zichtbare bereik (infrarood en uv) zijn zo gering dat ze niet schadelijk zijn voor de ogen en de huid.
Omstandigheden bij gebruik	0 °C tot +35 °C, 15 - 90% relatieve luchtvochtigheid, omgevingsdruk 700 - 1060 hPa
Omstandigheden bij transport/opslag	-20 °C tot +60 °C, 15 - 90% relatieve luchtvochtigheid, omgevingsdruk 700 - 1060 hPa
Gebruikshoogte	≤ 2000 m
Productclassificatie	Externe stroomvoorziening, IP21
Verwachte levensduur van het apparaat	10.000 uur

Maximaal stralingsvermogen van de TL 41 Touch

Stralingsvermogen	Risicogroep geclassificeerd conform IEC 60601-2-57:2011	Maximale waarde
EUVA: oog UV-A	Vrije groep	0 W·m ⁻²
ES: actinisch uv huid en ogen	Vrije groep	1,719e ⁻⁵ W·m ⁻²
EIR: infraroodstraling, grenzen voor blootstelling aan gevaar voor de ogen	Vrije groep	5,976e ⁻² W·m ⁻²
LIR: retinaal thermisch (zwakke visuele prikkel)	Vrije groep	6,688e ⁻² W·m ⁻² ·sr ⁻¹
LB: blauw licht	Vrije groep	1,655e W·m ⁻² ·sr ⁻¹
LR: retinaal thermisch	Vrije groep	2,023e ² W·m ⁻² ·sr ⁻¹

Technische wijzigingen voorbehouden.

Het serienummer staat op het apparaat.


Helderheid: 10.000 lux (deze vermelding met betrekking tot de verlichtingssterkte dient enkel ter informatie. Met betrekking tot de norm IEC 60601-2-57 is deze lichtbron geclassificeerd als vrije groep.)

Aanwijzingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen, aan de Duitse wet inzake medische hulpmiddelen en aan de Europese norm EN 60601-1-2 (overeenstemming met CISPR-11, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11) en is onderworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit.

- Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, waaronder de thuisomgeving.
- Het apparaat kan bij de aanwezigheid van elektromagnetische storingen onder omstandigheden mogelijk slechts beperkt worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen bijv. foutmeldingen ontstaan of kan het apparaat uitvallen.
- Het gebruik van dit apparaat direct naast andere apparaten of opgestapeld met andere apparaten moet worden vermeden, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan hebben. Als gebruik op de hiervoor beschreven wijze noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparaten in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze correct werken.
- Het gebruik van andere toebehoren dan de toebehoren die de fabrikant van dit apparaat vastgelegd of beschikbaar gesteld heeft, kan verhoogde elektromagnetische storingen of een verminderde bestandheid tegen storingen tot gevolg hebben, waardoor het apparaat mogelijk niet correct werkt.
- Als deze instructies niet in acht worden genomen, kan dit de prestatiekenmerken van het apparaat negatief beïnvloeden.

14. Netvoeding

Modelnr.	MP 45-240150-AG MP 45-240150-AB
Ingang	100–240 V ~ 50/60 Hz
Uitgang	24 V DC, 1,5 A, alleen in combinatie met GCE502
Beveiliging	Het apparaat is dubbel geïsoleerd.
	Polariteit van de gelijkspanningsaansluiting
Classificatie	IP21, veiligheidsklasse II
Fabrikant	Mitra Power Solutions Co., LTD
Gewicht	Ca. 170 g

15. Garantie/service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlenen in geen geval de garantieperiode.



Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road, European Industrial Zone,
Xiaolan Town, 528415, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R. China

Distributed by BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



Donawa Lifescience Consulting Srl, Piazza Albania, 10, 00153 Rome, Italy