

LANAFORM

Cell Roller



EN ENGLISH

SQUEEZE-ROLL MASSAGE

FR FRANÇAIS

MASSAGE PAR PALPER-ROULER

NL NEDERLANDS

PALPATIE-ROLMASSAGE



Voorstelling

Bedankt voor uw aankoop van het massagetoestel Cell Roller van LANAFORM.

Het anticellulitistoestel Cell Roller biedt u de mogelijkheid om massages uit te voeren die de bloedcirculatie bevorderen, met name op plaatsen die te lijden hebben van cellulitis, sinaasappel-huid en verslapping van het bindweefsel: de dijen, armen, buik en billen. Zijn krachtige motor garandeert een energieke palpatie-rolmassage.

Dankzij deze complexe beweging kan het onderhuidse bindweefsel worden gemasseerd, wat de bloed- en lymfecirculatie bevordert. Uw huid wordt gladder en steviger en cellulitis wordt minder zichtbaar.

Inhoudsopgave

- 01 Uitpakken
- 02 Veiligheidsmaatregelen
- 03 Beschrijving van het product
- 04 Gebruiksaanwijzing
- 05 Reiniging en onderhoud
- 06 Opbergen
- 07 Advies over afvalverwijdering
- 08 Beperkte garantie

Uitpakken

Open de verpakking voorzichtig voordat u het toestel in gebruik neemt. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of er onderdelen beschadigd zijn geraakt tijdens het transport. Volg de installatie- en gebruiksinstructies van deze

NL

35 · NEDERLANDS

handleiding. Neem contact op met de verkoper of rechtstreeks met Lanaform indien het toestel beschadigd is of slecht werkt. Hou het model en serienummer van het toestel, uw contactgegevens en

uw adres bij de hand ingeval u klachten hebt.

- 1× toestel Cell Roller
- 1× stroombron
- 1× deze gebruiksaanwijzing

Veiligheidsmaatregelen

⚠ Lees vóór het gebruik van uw elektrische waterkruik alle instructies, en in het bijzonder deze uiterst belangrijke veiligheidsinstructies.

📷 De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Het toestel is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor medische of commerciële doeleinden. **Dit toestel vervangt geen medische behandeling. Het**

NL

36 · NEDERLANDS

mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen met weinig kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of weten hoe zij het veilig kunnen gebruiken en dat ze de risico's begrijpen. **K**inderen mogen niet spelen met het toestel. **D**e reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. **B**ij beschadiging van het stroomsnoer moet het toestel weggegooid worden. **A**ls het niet afneembaar is, moet het toestel worden weggegooid. **U** mag het toestel in geen geval openen of herstellen; de goede werking ervan kan dan niet meer worden gegarandeerd. **D**e niet-naleving van deze instructie maakt de garantie ongeldig.

NL

37 · NEDERLANDS

⚠ Waarschuwing

Het gebruik van het
massagetoestel is verboden:

- voor dieren,
- niet gebruiken in geval van een pathologische verandering of letsel ter hoogte van het te masseren lichaamsdeel (bijv. discushernia, open wonde),
- voor massages van de hartstreek indien u een pacemaker draagt. Voor andere delen van het lichaam, raadpleeg eerst een arts,
- op huid en lichaamsdelen die gezwollen, verbrand, ontstoken of gekwetst zijn,
- bij open wonden, op haarvaatjes, op spataderen, bij acne, couperose,
- herpes of andere huidaandoeningen,

NL

38 · NEDERLANDS

- tijdens de zwangerschap,
- op het gezicht (ogen), het strottenhoofd of andere lichaamsdelen die bijzonder gevoelig zijn,
- gebruik het toestel niet voor een massage van de voeten,
- terwijl u slaapt,
- na inname van geneesmiddelen of alcohol (zintuiglijke perceptie beperkt),
- in een wagen.

NL

Vraag medisch advies alvorens dit massagetoestel te gebruiken:

- indien u een ernstige aandoening hebt of een operatie hebt ondergaan aan uw bovenlichaam,
- wanneer u een hartstimulator, implantaten of een ander hulpmiddel draagt,
- indien u pijn hebt gehad of hebt onder meer door een

39 · NEDERLANDS

trombose, diabetes of voor elke pijn van onbekende oorsprong.

Het toestel is uitsluitend bestemd voor het doel dat wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onjuist of onvoorzichtig gebruik.

⚠ Elektrocutie

Zoals elk elektrisch toestel moet dit massagetoestel voorzichtig en met zorg worden gebruikt, om elk risico op elektrocutie te vermijden. Gebruik het toestel dus:

- enkel met de meegeleverde stroombron en de netspanning die op het toestel is aangeduid,
- in geen geval als er schade zichtbaar is op het toestel of de accessoires,
- tijdens onweer.

NL

40 · NEDERLANDS

In geval van storingen of onderbrekingen moet u het toestel onmiddellijk stopzetten en uitschakelen. **Trek** niet aan het netsnoer van het toestel om de stekker uit het stopcontact te halen. **Neem** het toestel nooit vast of draag het nooit met zijn stroomsnoer. **Houd** kabels uit de buurt van warme oppervlakken. **Knijp**, buig of draai niet aan de kabel. **Steek** er geen naalden of andere scherpe voorwerpen in. **Vergewis** u ervan dat het massagetoestel, de schakelaar, de stroombron en de adapter niet in aanraking komen met water, stoom of andere vloeistoffen. **Gebruik** het toestel daarom alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in een badkamer of sauna). **Neem** nooit een toestel vast dat in het water valt. **Haal** onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. **Gebruik** het toestel of de accessoires niet als er zichtbare schade is. **Schud** het toestel niet en laat het niet vallen.

NL

41 · NEDERLANDS

⚠ Herstellingen

De herstelling van elektrische toestellen mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens. **H**erstellingen die niet correct zijn uitgevoerd, kunnen ernstige risico's inhouden voor de gebruiker. **W**end u voor elke herstelling tot de klantendienst of een erkende deपोthouder.

⚠ Brandgevaar

Als het toestel niet correct wordt gebruikt, of in strijd met deze gebruiksaanwijzing, bestaat er in sommige gevallen een risico op brand! **G**ebruik het massagetoestel dus:

- in geen geval onder een deken, kussen,
- in geen geval vlakbij brandstof of andere materialen die licht ontvlambaar zijn.

NL

42 · NEDERLANDS

⚠ Manipulatie

Schakel het toestel uit na elk gebruik en vóór elke reiniging en haal de stekker uit het stopcontact. **Stop** geen enkel voorwerp in de openingen of in de draaiende onderdelen. **Let** erop dat de beweeglijke onderdelen zich altijd zonder hinder kunnen verplaatsen. **Plaats** het toestel niet in de buurt van hoge temperaturen.

Beschrijving van het product **1**

- 01** Handvat
- 02** Schuifschakelaar met 3 standen
 - 0: stilstand
 - 1: lage snelheid
 - 2: hoge snelheid
- 03** Massagerollen
- 04** DC-poort
- 05** Connector van de massagerollen
- 06** Stroombron

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Cellulitis kan leiden tot de vorming van vetkussentjes op het huidoppervlak, vooral op de dijen, de armen en de billen. Bij veel cellulitis nemen de vetcellen in volume toe en oefenen zij dus een zekere opwaartse druk uit, wat de typische vorming van vetkussentjes op het

NL

43 · NEDERLANDS

huidoppervlak veroorzaakt. Om cellulitis te voorkomen of te verminderen, bestaan er tal van behandelingsmethoden die door de geneeskunde of de cosmetische wereld worden aangeboden, maar geen enkele daarvan biedt een volledig bevredigend resultaat.

Anderzijds kunnen massages die de bloedcirculatie bevorderen, in combinatie met regelmatige lichaamsbeweging en een evenwichtige voeding, het uitzicht van de huid verbeteren.

Het toestel Cell Roller biedt u de mogelijkheid om massages uit te voeren die de bloedcirculatie bevorderen, met name op plaatsen die te lijden hebben van cellulitis, sinaasappelhuid en verslapping van het bindweefsel:

de benen, de armen en de billen. De krachtige motor garandeert een energieke palpatie-rolmassage. Dankzij deze complexe beweging kan het onderhuidse bindweefsel worden gemasseerd, wat de bloed- en lymfecirculatie bevordert.

Dankzij deze palpatie-rolfunctie reproduceert het toestel de gebaren die tijdens een professionele massage worden uitgevoerd. Het ergonomische ontwerp van dit toestel maakt het comfortabel om thuis te gebruiken.

Ingebruikname

- Verwijder de verpakking.
- Kijk na of het toestel, de stroombron en het snoer geen schade vertonen.

- Steek de stekker in het oog van de massage-eenheid.
- Leg het snoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.

Gebruik

De druk die u met het massagetoestel uitoefent, moet licht zijn op het gebied dat u wilt masseren. Als de massage pijnlijk of onaangenaam is, stop er dan mee of verander de positie van het toestel.

Steek of duw geen lichaamsdelen, met name uw vingers, tussen de roterende massagerollers.

Zet het massagetoestel aan met de schuifschakelaar. De massagerollen beginnen te draaien. U kunt kiezen tussen lage en hoge massagesnelheid. Wij raden aan om te beginnen met de lage intensiteit. Om

het toestel uit te schakelen, zet u de schuifschakelaar in stand 0.


Gebruik op de buik en de taille

Zet u comfortabel met een rechte rug. Plaats de Cell Roller op uw buik en trek uw buik lichtjes samen. Maak langzame bewegingen over de hele buik, en laat het toestel op elk gebied werken. U kunt ook beginnen in het midden van uw buik en in een rechte lijn naar elke kant gaan. Om de bovenkant van de heupen te bewerken, beweeg heen en weer aan elke kant zoals aangegeven op het schema.

NL

45 · NEDERLANDS

Herhaal een van deze bewegingen verschillende keren. Na meerdere keren kunt u ook kiezen voor de hogere intensiteit voor meer resultaat in minder tijd, afhankelijk van uw huid en hoe u zich voelt bij het gebruik van de Cell Roller.

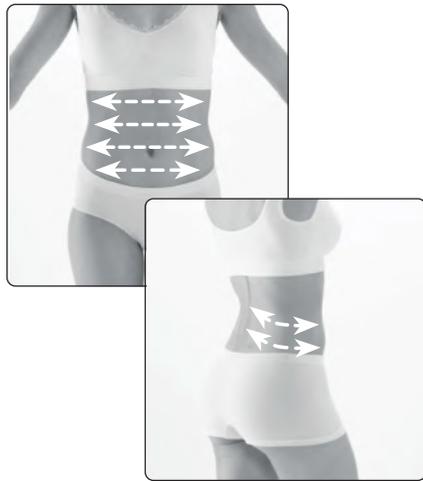


⚠ Waarschuwing

Indien u ongemak ondervindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Cell Roller en raadpleeg uw arts.

Gebruik op de benen

Voor een effectieve massage van de benen, leunt u lichtjes achterover en plaatst u de Cell Roller net boven de knieën. Maak langzame bewegingen op de voor- en achterkant van uw dijen tot u uw liezen en heupen bereikt. Wissel het ene been af en dan het andere. De massage mag niet langer dan 5 minuten per been duren.

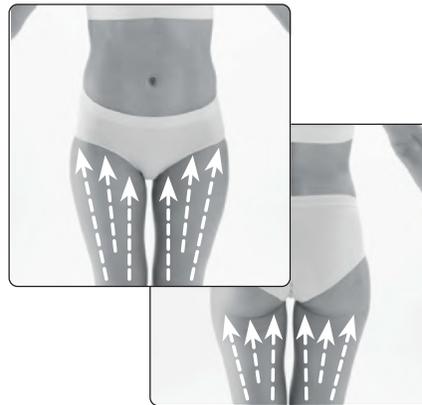

Gebruik op de heupen


Om meer specifiek aan de zijkant van uw dijen te werken, kunt u kleine horizontale en verticale bewegingen maken. Doe dit niet langer dan 5 minuten per gebied.



Gebruik op de billen

Om uw billen vorm te geven, gebruikt u de Cell Roller vanaf de onderkant van uw billen naar boven richting taille. Laat het toestel over het hele doelgebied bewegen. U kunt ook horizontale bewegingen maken van het midden naar buiten.

De aanbevolen duur is 5 minuten op elke bil.

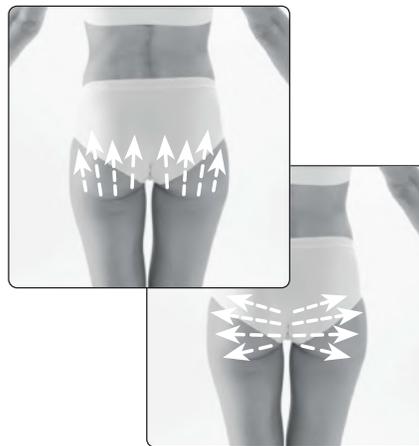

Gebruik op de armen

Om goed gevormde armen te krijgen, maakt u bewegingen van onder naar boven op de voor- en achterkant van uw armen.



NL

47 · NEDERLANDS

Reiniging en onderhoud

⚠ Waarschuwing

- Haal voor elke reiniging de stekker van het toestel uit het stopcontact.
- Maak het toestel alleen schoon volgens de aangeduide methode. In geen geval mag er vloeistof in het toestel of de accessoires komen.
- U kunt de massagerollen met een scherpe ruk verwijderen. De rollen kunnen gereinigd worden met een zachte borstel, stromend water en een beetje afwasmiddel.

- Het toestel kan worden gereinigd met een vochtige zachte doek.
- Wacht totdat het toestel helemaal droog is vooraleer u het opnieuw gebruikt.

Opbergen

- Als u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan om het in de originele verpakking op een droge plaats te bewaren en er geen voorwerpen op te plaatsen.

Advies over afvalver- wijdering

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingsfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclingcentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar

NL

49 · NEDERLANDS

LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.



LANAFORM

Cell Roller
LA110223 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com