

medisana.

NL Gebruiksaanwijzing
Cellulite massageapparaat AC 950



- 1 Handvat
- 2 Functietoets (aan/uit/intensiteit)
- 3 Draairichting selecteren
- 4 Functieleids
- 5 Massagerollers
- 6 Aansluiting voor laadkabel (achter beschermkap)

Legenda



BELANGRIJK!

Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.



ATTENTIE

Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.



TIP

Deze tips geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.



Beschermingsklasse II



LOT LOT-nummer **IPX4** Spatwaterdicht

Fabrikant

Leveringsomvang

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Neem het apparaat bij twijfel niet in gebruik en neem in dat geval contact op met uw verkoper of de Klantenservice. De leveringsomvang bevat:

- 1 medisana AC 950
- 1 USB-laadkabel en USB-laadadapter
- 1 gebruiksaanwijzing
- 3 massageopzetstukken

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.



WAARSCHUWING

Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen!
Kans op verstikking!

NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik in binnenruimten en niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent.
- Personen met een pacemaker, kunstgewrichten of elektronische implantaten dienen voor gebruik van dit apparaat eerst een arts te raadplegen.
- U mag dit apparaat niet gebruiken als u aan één of meer van de volgende aandoeningen lijdt: doorbloedingsstoornissen, spataderen, open wonden, diabetes, koorts, hartstoornissen, kneuzingen, kloven of andere huidverwondingen, aderontstekingen, tumoren, trombose, osteoporose, wervelfracturen of hernia.
- Gebruik het apparaat **nooit** op de volgende lichaamsdelen: hoofd, gezicht, hals, borst, buik, botten of gewrichten (bijv. ellebogen, knieën etc.), rondom de nieren of geslachtsdelen.
- Tijdens de massage een te hoge druk met het apparaat toepassen kan leiden tot letsel!
- Wees extra alert als het apparaat wordt gebruikt bij, door of in de buurt van kinderen of mensen die ziek of hulpbehoevend zijn.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart en overleg met uw arts.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen. Pak het apparaat nooit vast met natte of vochtige handen of wanneer u in het water staat. Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast.
- Bedek het product niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Dat zou kunnen leiden tot brand, een elektrische schok of verwondingen.
- Gebruik of bewaar het product nooit naast een fornuis of een andere warmtebron.
- Ga niet op het apparaat staan.
- Gebruik het apparaat niet in combinatie met andere apparaten.
- Gebruik het apparaat niet voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerende werking en kan het inslapen bemoeilijken.
- Val niet in slaap als u het massageapparaat gebruikt. Als u het apparaat te lang op dezelfde plaats gebruikt, kan dit pijnlijk zijn en tot brandwonden leiden.
- Repareer het product niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag het niet worden gebruikt!
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder dat er toezicht op wordt gehouden.

- Schakel het apparaat uit na elk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet direct na het eten of het nuttigen van alcohol of als u moe bent.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u een voertuig of machine bedient.
- Let op dat er niet over de kabel kan worden gestruikelend. Hij mag niet worden geknikt, afgeknelnd of in de knoop raken. Gebruik de kabel niet meer als hij defect is.
- We raden aan om het apparaat minimaal elke 3 maanden volledig op te laden om diepontlading of beschadiging van de accu te voorkomen.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.

Accu opladen

Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op. De oplaadtijd bedraagt 3,5 uur. Het apparaat kan ca. 3,5 tot 5 uur worden gebruikt met een volledig opgeladen accu. Om het apparaat op te laden verbindt u de meegeleverde USB-kabel met de aansluiting van het apparaat ⑥ en een geschikte stroombron (5 V gelijkstroom). Als het apparaat correct is aangesloten (laadstatus), knippert de led-ring ①. Als een groot deel van de led-ring brandt, is de accu ver opgeladen:

0-10% rode led knippert	11-25% led knip-pert	26-50% leds knip-pereen	51-75% leds knip-pereen	76-95% leds knip-pereen	100%





AANWIJZINGEN

- Het apparaat kan tijdens het oplaadproces niet worden gebruikt!
- Gebruik voor het opladen geen andere kabel dan de meegeleverde kabel! Neem contact op met de klantenservice voor vervangende onderdelen.

Gebruik

1. Kies één van de drie opzetstukken (multidirectionele massageroller, siliconen borstel met natuurlijk haar, siliconen borstel) en druk het opzetstuk stevig vast op het frame van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door op de functietoets ② te drukken. Het apparaat start met een lage intensiteit, dit wordt aangegeven door de halve led-ring. Druk nogmaals op de functietoets ②, het apparaat wordt ingesteld op een hogere intensiteit en de volledige led-ring licht op.
3. U kunt met het apparaat zelf of een ander behandelen. Leid het apparaat naar het lichaamsdeel dat u wilt masseren. Naargelang uw voorkeur kunt u geen of lichte druk uitoefenen. U kunt het apparaat langs verschillende lichaamsdelen rollen, zie „Toepassingsvoorbeelden“.
4. Druk op de toets ③ om de draairichting van de rollers te wijzigen.
5. Blijf tijdens de massage niet te lang dezelfde plaats behandelen (max. 1 minuut), maar verplaats het apparaat regelmatig.
6. U mag het apparaat niet langer dan 15 minuten achter elkaar gebruiken (na deze periode schakelt het apparaat automatisch uit). Gebruik het apparaat regelmatig voor het behalen van het optimale effect van de massages.
7. Wilt u het apparaat handmatig uitschakelen, druk dan nogmaals op de functietoets ② in de modus „hoge intensiteit“.

Toepassingsvoorbeelden

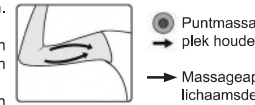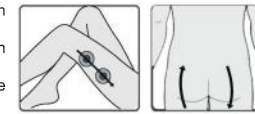

● Puntmassage (apparaat op één plek houden)

➔ Massageapparaat langs lichaamsdeel leiden



AANWIJZINGEN

- Indien direct gebruik op de huid onaangenaam voelt, kunt u tijdens het gebruik een handdoek tussen de huid en het apparaat leggen.
- Het gebruik na bijvoorbeeld het baden verhoogt het doorbloeding bevorderend massage-effect omdat het lichaam al warm is.

Problemen oplossen

Indien het apparaat niet inschakelt, moet u de laadtoestand van de accu controleren (houd de functietoets ② circa 3 seconden ingedrukt). Laad de accu indien nodig op. Indien het apparaat abnormaal gedrag vertoont, abnormaal ruikt of niet meer functioneert, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met de klantenservice.

Schoonmaken en onderhoud

- Controleer voor het reinigen of de oplaadkabel niet is aangesloten en laat het apparaat na gebruik minimaal 10 minuten afkoelen.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, licht vochtige doek, eventueel met een milde zeepoplossing.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, verduunners, benzine, harde borstels of vergelijkbare producten. Het oppervlak van het apparaat is kwetsbaar. De massagerollers ⑤ zijn afneembaar en kunnen afzonderlijk met bijvoorbeeld water worden gereinigd. Plaats de gereinigde massagerollers vervolgens terug.
- Gebruik het apparaat pas als deze volledig droog is en controleer of er geen vocht in het apparaat is gekomen!
- Berg het apparaat bij voorkeur op in de originele verpakking en bewaar hem op een schone en droge plaats zonder blootstelling aan zonlicht.

Verwijdering

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.



Technische gegevens

Naam en model: medisana cellulite massageapparaat AC 950

Voedingsspanning: 5 V==

Ingebouwde accu: Lithium-ion 2200 mAh

Gebruiksomstandigheden: 0°C tot +40°C, 20 tot 85% maximale relatieve luchtvochtigheid

Opslagvoorwaarden: -10°C tot +60°C, 20 tot 85% maximale relatieve luchtvochtigheid

Afmetingen ca.: 85 x 140 x 230 mm

Gewicht ca.: 381 g

Artikelnr.: 88544

EAN-nr.: 40 15588 88544 0

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden

Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Als u het apparaat moet opsturen, geef dan aan wat het defect is en stuur een kopie van de aankoopbon met.

Daarbij gelden de volgende garantievoorwaarden:

1. Op producten van medisana geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of bij het opsturen naar de servicedienst.
 - d. reserveonderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.