


**Apparaat en bediening**

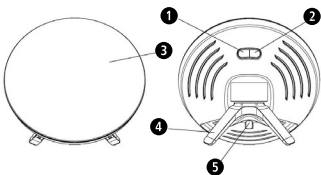

- 1 Aan-/uitknop
- 2 RGB-knop
- 3 Scherm
- 4 Standaard
- 5 Snoer

**Legenda**

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit apparaat. Er staat belangrijke informatie in over de ingebruikname en het verdere gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig door. Het niet-nakemen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.

**WAARSCHUWING**  
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.

**ATTENTIE**  
Deze aanwijzingen moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.

**AANWIJZINGEN**  
Deze aanwijzingen geven u nuttige extra informatie over de installatie of de werking.

**IP21** Aanduiding beschermingstype tegen voorwerpen van buiten en water

**Beschermingsklasse II**

**LOT LOT-nummer**

**Fabrikant**

**Productiedatum**

**Aan/uit**

**EC REP Gemachtigde EU-vertegenwoordiger**

**SN Serienummer van het apparaat**



**NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!**

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



**Veiligheidsinstructies**

- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving (bijv. in bad of in de buurt van een douche). Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.
  - Controleer voor gebruik of alle verpakkingsmaterialen zijn verwijderd en er geen beschadigingen te zien zijn aan het apparaat of onderdelen daarvan. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de vermelde klantenservice.
  - Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik bij het menselijk lichaam.
  - Goed toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of mensen met beperkte fysieke, sensorische of psychische capaciteiten.
  - Houd toezicht op kinderen en zorg dat ze niet met het apparaat spelen.
  - Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.
  - Houd het snoer weg van hete voorwerpen en open vuur.
  - Sluit het apparaat alleen aan op netspanning die overeenkomt met de informatie op het typeplaatje.
  - Trek de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voor u het aanraakt.
  - Raak het apparaat niet aan met natte handen als de stekker in het stopcontact zit en laat het apparaat niet vochtig worden. Alleen een volledig droog apparaat mag worden gebruikt.
  - Bescherm het apparaat tegen harde stoten.
  - Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact trekt, maar trek aan de stekker.
  - Neem contact op met de klantenservice of de verkoper als het apparaat beschadigd is, omdat er speciaal gereedschap nodig is om het te repareren. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.
  - Alleen als de stekker uit het stopcontact is, staat er gegarandeerd geen stroom meer op.
  - Dit apparaat is niet geschikt om te gebruiken in de buurt van brandbare anesthesiemengsels met lucht, zuurstof of lachgas.
  - Dit apparaat hoeft niet te worden gekalibreerd, preventief te worden gecontroleerd en te worden onderhouden.
  - Dit apparaat kan niet worden gerepareerd en heeft geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden.
  - De gebruiker mag het apparaat en de patiënt niet gelijktijdig aanraken.
  - Het apparaat is beschermd tegen ongeoorloofd gebruik. Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan zonder toestemming van de fabrikant.
  - Wanneer aan dit apparaat wijzigingen worden aangebracht, moeten daartoe geschikte inspecties en tests worden uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat weer veilig kan worden gebruikt.
  - Neem voor u dit apparaat gaat gebruiken contact op met uw arts wanneer u medicijnen gebruikt, zoals pijnstillers, bloeddrukverlagers of antidepressiva.
  - Mensen met netvliesaanandoeningen en diabetici moeten voor ze dit apparaat in gebruik nemen, worden onderzocht door een oogarts.
  - Niet gebruiken wanneer u lijdt aan een oogaanandoening, zoals staar, glaucoom, een oogzenuwaan-doening of ontsteking van het glasachtig lichaam.
  - Neem contact op met uw huisarts wanneer u twijfelt over uw gezondheid!
- Onderhoud en reparatie**
- Stel het scherm niet bloot aan direct zonlicht, een schijnwerper of een andere warmtebron.
  - Gebruik voor het schoonmaken van het scherm geen vloeistoffen op alcohol- of ammoniakbasis. Lees de schoonmaakinstructies in het hoofdstuk "Schoonmaken".
  - Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan zwaar letsel tot gevolg hebben. Wanneer deze voorschriften niet worden nageleefd, vervalt de garantie.
  - Wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is of niet goed werkt, mag het niet worden gebruikt. Probeer het probleem te verhelpen met behulp van de FAQ-tabel. Indien het probleem daarna nog niet is verholpen, neem dan contact op met de klantenservice of de verkoper, omdat er speciaal gereedschap nodig is voor de reparatie. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

**Gebruik volgens de voorschriften**

De MEDISANA daglichtlamp LT 500 is bedoeld om een lichtbad te bieden of als therapieplamp voor de behandeling van seizoensafhankelijke storingen (SAD), ook wel winter-blues genoemd. Het gebruik bevordert de energie en stabiliteit van het hartritme en kan u helpen zich vitaler te voelen. Het apparaat is alleen bedoeld voor de behandeling van mensen. Dit apparaat is bestemd voor gebruik thuis als preventieve gezondheidszorg. Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel of klinisch gebruik, maar voor individueel huishoudelijk gebruik.

**Hoe werkt de daglichtlamp LT 500?**

In de herfst en de winter, de jaargetijden met weinig zonuren en korte dagen, beïnvloedt het ontbrekende zonlicht de chemische processen in de hersenen. De werking van de hypothalamus wordt beperkt en men vermoedt dat de productie van het hormoon melatonine hierdoor wordt beïnvloed. Dit kan leiden tot ongewenste vermoeidheid. De MEDISANA daglichtlamp LT 500 geeft helder elektrisch licht om het ontbrekende zonlicht in de herfst en de winter na te bootsen. Dit licht bevat niet de schadelijke UV-straling van zonlicht. De lichttherapie helpt om de productie van het hormoon melatonine te reguleren en de symptomen van een winterdepressie (SAD) te verlichten.

**Contra-indicaties**

- Controleer voor gebruik met uw arts.
- Dat geldt in het bijzonder in geval van:
  - zware depressies;
  - oogoperaties of oogziekten waarbij fel licht moet worden vermeden;
  - gebruik van bepaalde medicijnen (bijv. pijnstillers, antidepressiva, psychofarmaca of malariaïemedicijnen);
  - hoge bloeddruk/glasvochtbloedingen;
  - overgevoeligheid voor licht, zoals bijv. bij systemische lupus erythematoses (rode wolf).

**Bijwerkingen**

- De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- hoofdpijn
  - pijn aan de ogen
  - slaapproblemen
  - misselijkheid
- Zo kunt u bijwerkingen verlichten of voorkomen:
- vergroot tijdens de behandeling de afstand tot de lamp en kijk niet direct in het licht;
  - gebruik de lamp niet 's avonds laat of voor u gaat slapen.

**Levering en verpakking**

Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Gebruik het product bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 MEDISANA daglichtlamp LT 500

- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

**WAARSCHUWING**  
Houd verpakkingsfolie uit handen van kinderen. Gevaar voor verstikking!

**Gebruik**

1. Klap de standaard uit. Plaats de lamp op een vlakke en stevige ondergrond, bijv. een tafel. Plaats het apparaat opzij van uw lichaam, zodat u niet direct in het licht kijkt.
2. De ideale afstand tot het apparaat is 12 - 45 cm. Tenzij u geniet van het weldadige licht van de lamp, kunt u lezen, bellen of rustig verder werken.
3. Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat aan met de aan-/uitknop. De lamp brandt nu met een hoge intensiteit. Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de intensiteit van de lamp te verlagen - lage intensiteit.

**Aanbevelingen voor de gebruiksduur:**

Gebruiksduur	Afstand (hoge intensiteit)	Afstand (lage intensiteit)
30 min	18 cm	12 cm
1 uur	30 cm	20 cm
2 uur	45 cm	35 cm

hoe dichterbij de lamp zit, des te korter duurt het om het gewenste effect te bereiken.

**AANWIJZINGEN**

- Steek de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact.
- Controleer of er in de buurt van de plaats waar het apparaat staat een stopcontact is.
- Leg het snoer zo neer dat niemand erover kan struikelen.
- Controleer of de stekker goed bereikbaar is.
- Kijk niet langdurig direct in het licht! Pijn aan de ogen of lichte hoofdpijn kunnen optreden tijdens de eerste sessie, maar zouden over moeten gaan. Verkort in geval van twijfel uw behandelingsduur tot u zich weer goed voelt.
- Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het gedurende 4 uur continu is gebr-

4. Gebruik het apparaat in de donkere jaargetijden dagelijks om het gewenste resultaat te bereiken. Doorgaans is 30 minuten per dag voldoende, afhankelijk van lichtintensiteit en afstand tot het apparaat. U kunt het apparaat gedurende langere tijd gebruiken, maar gebruik het niet 's avonds laat, binnen 3 uur voor u gaat slapen, omdat het de slaap kan verstoren.
5. Druk de aan-/uitknop gedurende 2 seconden in om het apparaat helemaal uit te zetten.

**Sfeerlicht**

Behalve een normaal daglicht heeft het apparaat ook een sfeerlicht met kleurwissel: Druk op de RGB-knop om te wisselen naar gekleurd sfeerlicht. Druk nogmaals op de RGB-knop om een andere lichtkleur te selecteren. Druk op de aan-/uitknop om weer om te wisselen naar wit therapielicht. Houd de RGB-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat helemaal uit te schakelen. Tip: Het sfeerlicht dient geen medisch doel.



Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument moet alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, inleveren bij het plaatselijke afvalschiedingsstation of bij een winkel, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

**In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.**

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Schoonmaken en onderhoud**

- Controleer voor u het apparaat gaat schoonmaken of het uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak het afgekoelde apparaat schoon met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels, oplosmiddelen of alcohol, omdat die de buitenkant van het apparaat kunnen beschadigen.
- Dompel het apparaat tijdens het schoonmaken nooit onder in het water en zorg dat er geen water in het apparaat komt.
- Waacht tot het apparaat helemaal droog is voor u het opnieuw gaat gebruiken.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- Bewaar het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking op een schone en droge plaats.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen licht	Apparaat niet ingeschakeld.	Apparaat inschakelen met de aan-/uitknop
	Geen stroomtoevoer	Controleer de stekker en de verbinding tussen het snoer en het apparaat.
	Geen stroomtoevoer	Het snoer is defect. Neem contact op met de verkoper of de klantenservice.
Lamp brandt niet of zwak	Ledlampen hebben hun maximale levensduur bereikt	Neem contact op met de verkoper of de klantenservice.
	Ledlampen zijn kapot	Neem contact op met de verkoper of de klantenservice.

**Technische gegevens**

<b>Naam</b>	<b>MEDISANA daglichtlamp LT 500</b>
<b>Voeding</b>	220-240 V~ 50 Hz, 0,2 A
<b>Model</b>	ELE018921V2
<b>Lichtbron</b>	Led
<b>Lichtintensiteit (afstand)</b>	> 10.000 lux (12 cm);
<b>Afmetingen</b>	25 x 25 x 8 cm
<b>Gewicht</b>	600 g
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	0 °C tot 40 °C, 30 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, 700-1060 hPa atmosferische druk

**Opslag- en transportvoorwaarden**

- 10 °C tot + 60 °C, 30 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, 700-1060 hPa atmosferische druk

<b>Behandelingsoppervlak</b>	600 cm²
<b>Risicogroep van de lichtbronapparatuur</b>	Groep 1 in blauw licht, geïnclassificeerd conform IEC 60601-2-57:2011
<b>Locatie van de emissieopening</b>	Scherm
<b>Maximale lengte van het snoer</b>	1800 mm
<b>Levensduur</b>	Het apparaat is ontworpen voor een gebruiksduur van 5 jaar.
<b>Artikelnummer</b>	45226
<b>EAN-nummer</b>	40 15588 45226 0

**Maximale optische straling**

Stralingsvermogen	Risicogroep conform IEC-classificatie 60601-2-57:2011	Max. waarde
EUVA: oog UV-A	Vrijgestelde groep	1.5x10-4W-m-2
ES: actinische UV huid & oog	Vrijgestelde groep	1.5x10-4W-m-2
EIR: gevaar door infraroodstraling grenswaarden voor de belasting van de ogen	Vrijgestelde groep	6x10-4 W-m-2
EH: thermisch gevaar voor de huid	Vrijgestelde groep	3.5x101 W-m-2
LB: blauw licht	risicogroep 1	10x102 W-m-2 sr-1
LR: netvlieswarmte	Vrijgestelde groep	2x102 W-m-2 sr-1

**Garantie- en reparatievoorwaarden**

Neem voor de garantie contact op met uw specialzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe wanneer u het apparaat moet opsturen. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:  
 1. Op producten van MEDISANA geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van productie kunnen worden aangegeven of factuur.  
 2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.  
 3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.  
 4. Van garantie zijn uitgesloten:  
 a. alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakemen van de gebruiksaanwijzing;  
 b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde;  
 c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst;  
 d. onderdelen die normale slijtage vertonen.  
 5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

**Zero-Plus International Limited**  
 Room 1004, 10/F., Join-In Hang Sing Centre, 71-75 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong  
[sales@zeroplus.hk](mailto:sales@zeroplus.hk)  
**EC REP**  
 geïmporteerd & gedistribueerd door  
 MEDISANA GmbH  
 Jagenerstraße 19  
 41468 NEUSS  
 DUITSLAND

Globalmind Consumer Electronics GmbH  
 Ernst-Mantius-Str.11,  
 21029 Hamburg,  
 Duitsland