

LANAFORM


Neck Warmer



| | |
|----------------------|------------------------------------|
| EN ENGLISH | NECK HEATING PAD |
| FR FRANÇAIS | COUSSIN CHAUFFANT POUR LA NUQUE |
| NL NEDERLANDS | ELEKTRISCHE KUSSEN VOOR DE NEK |
| DE DEUTSCH | HEIZKISSENS FÜR DEN NACKEN |
| ES ESPAÑOL | ALMOHADILLA TÉRMICA PARA EL CUELLO |
| IT ITALIANO | CUSCINO TERMICO PER LA NUCA |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| PL POLSKI | PODUSZKI GRZEWCZEJ NA KARK |
| CS ČEŠTINA | VYHŘÍVANÝ POLŠTÁŘ PRO ŠÍJI |
| SK SLOVENČINA | OHRIEVAČ KRKU |
| SL SLOVENŠČINA | GRELNO BLAZINO ZA TILNIK |
| HR HRVATSKI | GRIJAĆI JASTUK ZA VRAT |
| SV SVENSKA | VÄRMEKUDDEN FÖR NACKEN |



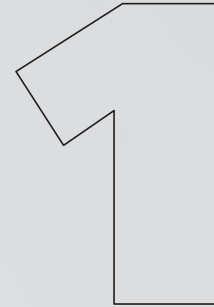

| | | | | | |
|------------|----|----|-------------|----|----|
| ENGLISH | EN | 4 | POLSKI | PL | 35 |
| FRANÇAIS | FR | 9 | ČEŠTINA | CS | 40 |
| NEDERLANDS | NL | 14 | SLOVENČINA | SK | 45 |
| DEUTSCH | DE | 19 | SLOVENŠČINA | SL | 50 |
| ESPAÑOL | ES | 25 | HRVATSKI | HR | 54 |
| ITALIANO | IT | 30 | SVENSKA | SV | 58 |

Voorzorgsverklaring

⚠ Lees vóór het gebruik van uw elektrische waterkruik alle instructies, en in het bijzonder deze uiterst belangrijke veiligheidsinstructies.

Gebruik dit apparaat alleen volgens de gebruikswijze die in deze handleiding wordt beschreven. **C**ontroleer of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat. **D**it apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen. **K**inderen mogen niet met het apparaat spelen. **R**einiging en gebruiker-sonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. **G**ebruik geen accessoires die niet door LANAFORM worden aanbevolen of die niet bij dit apparaat worden geleverd. **D**e elektrische kruik moet

worden gebruikt in combinatie met de lader die wordt meegeleverd in deze verpakking. **S**teek de stekker niet in het stopcontact of verwijder hem niet met natte handen. **A**ls het snoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door een speciaal of gelijkaardig snoer dat verkrijgbaar is bij de leverancier of bijbehorende klantendienst. **C**ontroleer de elektrische kruik regelmatig op beschadigingen. **G**ebruik het apparaat niet als de voedingsingang beschadigd is, als het niet correct werkt, als het op de grond is gevallen, beschadigd is of in water is terechtgekomen. **L**aat het apparaat in dergelijke gevallen nazien en repareren door de leverancier of zijn dienst-na-verkoop. **A**ls het apparaat in water valt, trek dan meteen de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt. **C**ontroleer vóór elk gebruik of de elektrische kruik nog waterdicht is. **G**ebruik de elektrische kruik niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. **D**e kruik

moet worden geladen op een vlak oppervlak, en nooit verticaal of schuin worden geplaatst. **G**ebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. **O**vermatige hitte kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel. **N**eem alle nodige voorzorgsmaatregelen om brandwonden te voorkomen. **G**ebruik de elektrische kruik voorzichtig. **D**e binnentemperatuur kan na het verwarmen aan de oppervlakte immers 75°C en 60°C bereiken. **I**ndien nodig kunt u even wachten tot de temperatuur daalt alvorens de elektrische kruik te gebruiken. **S**telt u bij de elektrische kruik een lek, een vreemd geluid of een vreemde geur vast, verwijder dan de lader en stop met het gebruik van de elektrische kruik. **O**m de warmte goed te verdelen is het aanbevolen om de elektrische kruik tijdens het laden, na 5 à 6 minuten, voorzichtig heen en weer te bewegen. **L**aat een elektrisch apparaat nooit onbewaakt aangesloten op het stroomnet. **T**rek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. **H**oud de stroomkabel uit de buurt van

warme oppervlakken. **H**aal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik van het apparaat of voordat u het schoonmaakt. **S**teek geen voorwerpen in de elektrische kruik. **D**it zou zijn goede werking kunnen schaden. **K**lop nooit op het oppervlak van de kruik. **S**nijd nooit in de kruik. **D**ruk tijdens het gebruik nooit te hard op de elektrische kruik, dat kan een lek veroorzaken of het apparaat beschadigen. **N**eem de lader uit het stopcontact indien de elektrische kruik abnormaal warm wordt. **S**topt het laden van de elektrische kruik niet automatisch na 15 minuten (het controlelampje blijft branden), neem dan de lader uit het stopcontact. **D**raag of verplaats de elektrische kruik nooit met het snoer van de lader. **B**erg de elektrische kruik pas op nadat deze is afgekoeld. **P**laats na het opbergen geen voorwerpen op de elektrische kruik, om deze niet te pletten. **D**e elektrische kruik is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. **G**ebruik deze niet in een ziekenhuisomgeving of voor een medische behandeling. **D**e elektrische

NL

15 - NEDERLANDS

kruik is niet bestemd voor gebruik door kinderen. **Gebruik** de elektrische kruik niet voor zieken, baby's of mensen die geen warmte ervaren. **Gebruik** de elektrische kruik niet om uw voeten te verwarmen. **Stap** nooit op de elektrische kruik, plet deze niet en oefen geen druk uit. **Verwarm** de elektrische kruik nooit in een magnetron of traditionele oven. **Gebruik** de elektrische kruik nooit rechtstreeks tegen de huid. **Vertoont** de huid abnormale roodheid bij het gebruik van de elektrische kruik, of ervaart u hinder of pijn, stop het gebruik ervan dan gedurende minstens één uur. Indien het fenomeen blijft aanhouden, stel het gebruik van de kruik dan even uit en raadpleeg indien nodig uw arts. **Gebruik** dit apparaat nooit in ruimten waar producten uit spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

☒ De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van het elektrische kussen voor de nek Neck Warmer. Dit handige en gebruiksvriendelijke kussen houdt u urenlang heerlijk warm na slechts enkele minuten laden. Dankzij haar superieure beveiliging kunt u ze in alle veiligheid gebruiken.

Tot slot bestaat de hoes van deze warmtekruik voor 45% uit materiaal waarvan de vezels afkomstig zijn van gerecycleerd PET-materiaal, op basis van plastic flessen.

Kenmerken ☒ 1

De buitenkant van de elektrische kruik is soepel en voelt heel aangenaam aan.

De wanden bestaan uit 2 dunne thermo-gecomprimeerde lagen die de stevigheid en veiligheid versterken.

Dankzij haar technologie heeft de elektrische kruik een sneller verwarmingssysteem en blijft ze langer warm.

Gebruiksaanwijzing

Neem het product uit de verpakking en controleer of zowel de kruik als de accessoires intact zijn. Wacht bij twijfel met het gebruik ervan en neem contactop met de verkoper. Gebruik het product niet bij tekenen van een defect, breng het in dat geval terug naar uw verkoper.

Opladen van het elektrische kussen ☒ 1

Leg het elektrische kussen plat op een tafel.

Stop de lader in de connector van het kussen zoals aangeduid in het schema. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. Het controlelampje brandt en het elektrische kussen wordt warm.

Zodra het elektrische kussen klaar is, dooft het controlelampje en kunt u de lader losmaken. Nu kunt u genieten van een heerlijk warm gevoel in uw nek.

- ① **Om een goede spreiding van de warmte te verzekeren, is het aanbevolen om het elektrische kussen tijdens het laden voorzichtig heen en weer te bewegen.**

De laadtijd van de elektrische kruik bedraagt ongeveer 15 minuten (afhankelijk van de kamertemperatuur). Na die tijd heeft het oppervlak van de elektrische kruik een goede temperatuur bereikt.

Onderhoud

Onderhoud

- Wilt u dat de elektrische kruik langer warm blijft, kneed deze dan tijdens het laden, zodat het water zich mengt. Dit zorgt voor een gelijkmatige temperatuur van het water in de kruik en een langere gebruiksduur.
- Nadat de kruik een paar keer is gebruikt, is het mogelijk dat u een uitzetting vaststelt waardoor de kruik niet normaal meer geladen wordt. Dat is een normaal fysisch verschijnsel, te wijten aan de temperatuurschommelingen en de druk binnen de hoes, waardoor een ophoping van lucht ontstaat.

Om dit te verhelpen, volstaat het om de lucht uit de hoes te duwen. Verwijder daarvoor eerst de kap van de connector met een kruisvormige schroevendraaier en verwijder daarna de siliconen stop, indien nodig met behulp van een tang. Verwijder zoveel mogelijk lucht en plaats de stop en de kap van de connector terug.

Opberging

Leg de elektrische kruik in de doos of op een droge plaats.

Vermijd contact met scherpe randen en andere puntige voorwerpen die het oppervlak of de stof kunnen beschadigen.

Rol het snoer niet op om schade aan het snoer te voorkomen.

Controleer of de elektrische kruik goed droog is voor u ze opbergt.

Reiniging

Maak de elektrische kruik los van de lader en wacht enkele minuten voordat u de kruik gaat schoonmaken.

Maak schoon met een zacht en licht vochtig sponsje.

Dompel ze nooit onder in vloeistof om ze schoon te maken.

Gebruik nooit schurende schoonmaakproducten, borstels of een verdunner om ze schoon te maken.

Technische gegevens

- Spanning: 220-240V~
- Frequentie: 50/60Hz
- Vermogen: 440W
- Samenstelling van de buitenwand: 45% gerecycled polyester, 55% katoen
- Samenstelling van de binnenwand: 100% polypropyleen

Storingen en oplossingen

De warmtekruik blaast niet correct op en verwarmt niet correct.

- De schommelingen van atmosferische druk kunnen een ophoping van lucht doen ontstaan in de warmtekruik.
- Verdrijf de overtollige lucht in de warmtekruik voorzichtig door eerst de kap van de connector te verwijderen met behulp van een kruisvormige schroevendraaier. Verwijder daarna de siliconen stop, indien nodig met behulp van een tang. Verwijder zoveel mogelijk lucht en plaats de siliconen stop en de kap van de connector terug.



Advies over afvalverwijdering

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

Beperkte garantie

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopsbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

NL



LANAFORM

Neck Warmer Go
LA180206 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com