

# Jadual Kandungan

- 1 ----- SELAMAT DATANG KE MINIFACE
  - TENTANG MINIFACE
  - APAKAH MICROCURRENT?
- 2 ----- PENGGUNA SESUAI
  - KANDUNGAN
  - MARI KENALI MINIFACE ANDA
  - BAGAIMANA MINIFACE BERFUNGSI?
- 3 ----- REGENERATE AGE DEFYING HYDROBLAST GEL MINIFACE
  - SPESIFIKASI MINIFACE
  - SEBELUM MENGGUNAKAN PERANTI ANDA
  - LANGKAH PENGGUNAAN
- 4 ----- KONTRAINDIKASI UNTUK PENGGUNA
  - APA LAGI YANG PERLU SAYA KETAHUI TENTANG MINIFACE SAYA?
  - LANGKAH RAWATAN OPTIMUM
  - KAWASAN RAWATAN DAN URUT
- 5 ----- RAWATAN GESENAN ASAS (5 MINIT)
- 6 ----- RAWATAN LANJU
  - KEKERAPAN RAWATAN
- 7 ----- APAKAH HASIL YANG BOLEH SAYA JANGKAKAN?
  - MENJAGA PERANTI ANDA
  - JAMINAN

# PERANTI RAWATAN MUKA MICROCURRENT MINIATUR MINIFACE

## SELAMAT DATANG KE MINIFACE

Tahniah kerana anda telah membuat pilihan yang tepat untuk kulit yang cantik! Dengan pembelian Miniface anda, kini anda pemegang kunci untuk rahsia kulit awet muda dan lembut melalui cara saintifik unik kami untuk peremajaan kulit.

Kami telah menggabungkan teknologi dermatologi terkini dengan penyelidikan kosmetik moden untuk menghasilkan Miniface, alat yang anda perlukan untuk mencapai kulit yang dicemburui tanpa mengira warna kulit anda.

Kami tahu anda amat teruja untuk memulakan perjalanan rawatan kulit anda, tetapi sebelum itu, sila baca manual pengguna kami untuk keterangan lanjut.

Sekali lagi, selamat datang ke dunia kulit yang lebih sihat dan menawan.

## TENTANG MINIFACE

Pernahkah anda terfikir betapa indahnya kehidupan anda dengan adanya alat simulasi kulit yang mudah alih, mudah dan senang digunakan? Dengan peranti rawatan muka microcurrent Miniatur Miniface, anda kini boleh mencantikkan wajah dengan masa hanya 5 minit. Bagaimana ia berfungsi? Mudah saja. Miniface menghasilkan impuls mikro tahap rendah ke titik strategik pada wajah anda. Ini merangkumi garis rahang, tulang pipi, dahi dan leher - semua tempat penting yang menjadikan penampilan lebih muda jika disimulasikan dengan betul.

## APAKAH MICROCURRENT?

Microcurrent adalah teknik canggih yang mampu menegangkan kulit dan mencantikkan wajah seperti facelift yang semula jadi. Ini adalah kaedah yang tidak menyakitkan, selamat dan tidak invasif yang membantu menghilangkan garis-garis halus dan kedut pada kulit. Faedah-faedah lain termasuk:

- **Muka bentuk V:** anda boleh mencapai wajah bentuk V yang diinginkan untuk penampilan yang lebih muda;
- **Menambah kandungan kolagen:** Teknologi mikro berfungsi pada tahap sel untuk meningkatkan kolagen untuk kulit yang lebih mudah dan menarik;
- **Otot muka yang bertona akan menghasilkan kulit yang kelihatan lebih tegang;**
- **Kontur kulit:** Microcurrent membantu menghasilkan kulit yang berkонтur untuk penampilan yang lebih segar dan sihat;
- **Penegangan muka:** Mengelakkan kedutan kulit dan penuaan pramatang;
- **Kurangkan kedutan dan garis halus:** Mikrocurrent membantu mencegah penuaan pramatang dan simptom seperti kedutan dan garis halus;
- **Kurangkan wajah Bengka:** Microcurrent kelembapan berlebihan pada kulit anda dapat dihilangkan;
- **Menggalakkan saliran limfa semula jadi dan peredaran darah untuk kulit yang kelihatan lebih lembut.**

## PENGGUNA SESUAI

Sesiapa sahaja juga boleh guna peranti Miniface. Ini adalah alat mudah alih yang sesuai untuk mereka yang ingin mencapai simulasi wajah dan leher lengkap pada bila-bila masa, di mana sahaja.

## KANDUNGAN

Dengan set Miniface ini, anda mendapat:

- 1 Peranti Rawatan Muka Microcurrent Miniature Miniface
- 1 Regenerate Age Defying Hydroblast Gel 50ml
- 1 Kabel Pengecasan USB
- 1 Kantong Serut
- Panduan Pengguna

## MARI KENALI MINIFACE ANDA

Miniface telah dirancang sedemikian rupa sehingga sentuhan optimum dengan wajah dari semua bentuk dan ukuran dapat dicapai setiap saat. Kami sentiasa selangkah hadapan pesaing kami, dengan itu, Miniface menawarkan lima tahap microcurrent untuk keselesaan dan pilihan semua orang.

Berbeza dari alat microcurrent lain, alat Miniface mempunyai lima tahap intensiti yang berlainan. Ini membolehkan anda mengubah tahap intensiti mengikut keselesaan dan pilihan anda sendiri.

- Minimum
- Minimum hingga sederhana
- Sederhana
- Sederhana hingga maksimum
- Maksimum

Uji dan pilih tahap intensiti yang sesuai untuk anda ketika menggunakan alat Miniface.

## BAGAIMANA MINIFACE BERFUNGSI?

1. Butang ON untuk menghidupkan atau mematikan dan kawalan intensiti
  2. Petunjuk tahap intensiti
  3. Sfera
  4. Kabel pengecasan USB
  5. Speaker
- Bunyi bip menaik apabila alat dihidupkan
  - Bunyi bip menurun apabila dalam proses mematikan
  - Bunyi bip ketika tahap intensiti disesuaikan
  - Bunyi bip dwi-nada yang menunjukkan pergerakan ke bahagian kulit yang baru
  - Bunyi bip berganda apabila alat mati, menunjukkan bateri memerlukan pengecasan



## **REGENERATE AGE DEFYING HYDROBLAST GEL MINIFACE**

Gel Hydroblast Miniface adalah teman terbaik anda. Gel penghidratan dan penegangan ini mempunyai sifat facelift semulajadi yang membantu mengukir dan mengkontur wajah anda dengan peranti Miniface. Dos Hyaluronic Acid yang dihidrolisis dan Acefylline Methylsilanol Mannuronate yang mantap membantu meningkatkan kelembapan kulit dan ketegangan wajah anda.

Revivyl adalah ramuan yang diformulasikan untuk memberikan manfaat pelembapan kulit dalam masa dua minggu, sekaligus menunjukkan peningkatan pembezaan permukaan kulit dan pengurangan kedutan.

Retinol membantu meningkatkan pengeluaran kolagen, yang seterusnya mengurangkan garis-garis halus dan kedutan pada kulit. Manfaat tambahan termasuk memudarkan bintik-bintik usia dan melembutkan tompok-tompok kasar pada kulit.



**Cara menggunakan Gel Hidroblast:** Sapukan gel ke wajah yang telah dibersihkan. Gunakan dengan alat Miniface untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

## **SPESIFIKASI MINIFACE**

Nama produk: Peranti Rawatan Muka Microcurrent Miniatur Miniface

Ukuran Peranti: 106mm X 65 mm X 38mm

Kapasiti Bateri: 600mAh\*2

Arus Keluaran: 350-700 µA

Frekuensi: 0.15W

Voltan Operasi: 2.4V

Berat Bersih: 128G

## **SEBELUM MENGGUNAKAN PERANTI ANDA**

1. Buka kotak Miniface dan kabel pengecasan USB anda.
2. Sambungkan kabel ke peranti Miniface anda dan cas sekurang-kurangnya 16 jam sebelum menghidupkannya untuk kali pertama.
3. Pastikan alat Miniface anda diletakkan di permukaan rata dan jauh dari sumber air untuk mengelakkan kerosakan.
4. Semasa mengecas, lampu biru menyala untuk menunjukkan proses pengecasannya.
5. Sebelum menghidupkan Miniface anda, ingatlah untuk mengambil gambar wajah anda yang telah dibersihkan untuk mendokumentasikan hasil anda. Adalah disyorkan agar gambar lain diambil setelah 8 minggu. Ini akan sangat membantu dalam mengesan kemajuan anda semasa perjalanan Miniface anda. Perbandingan hasil dapat dilakukan dengan mudah untuk melihat peningkatan dan pencapaian.

## **LANGKAH PENGGUNAAN**

Peranti Miniface ini hanya digunakan untuk simulasi kulit sahaja.

## **KONTRAINKASI UNTUK PENGGUNA**

Miniface TIDAK boleh digunakan oleh individu yang:

- Mempunyai sejarah epilepsi atau sawan
- Pernah menjalani pembedahan muka - sebagai alternatif, dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan peranti Miniface
- Mempunyai alat implan elektronik seperti monitor ECG, alat pacu jantung atau alat perubatan yang lain. Sebagai alternatif, dapatkan nasihat doktor anda sebelum menggunakan peranti Miniface
- Mengalami kanser aktif - sila berjumpa dengan doktor anda untuk pengesahan
- Ibu mengandung
- Kanak-kanak di bawah umur iaitu kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

## **APA LAGI YANG PERLU SAYA KETAHUI TENTANG MINIFACE SAYA?**

- Hanya gunakan pada kulit yang tidak mengalami radang, Bengkak atau penjangkitan.
- Cukur bulu muka jika ada untuk meningkatkan kekonduksian mikro.
- Reaksi terhadap alat ini boleh menyebabkan kerengsaan atau kemerahan pada kulit - jika ia berlaku, sila berjumpa doktor.
- Hanya untuk kegunaan orang dewasa, jauhkan dari kanak-kanak.
- Elakkan menggunakan alat di dada kerana boleh menyebabkan gangguan irama pada fungsi jantung anda, yang berpotensi membawa maut.

## **LANGKAH RAWATAN OPTIMUM**

1. Sebelum memulakan rawatan, baca manual ini dan serap maklumat yang terdapat dalam panduan ini.
2. Bersihkan kulit anda dengan teliti sebelum memulakan rawatan microcurrent.
3. Cari butang ON / OFF pada alat anda untuk menghidupkannya.
4. Bip dan kehadiran cahaya akan menunjukkan bahawa unit telah dihidupkan.
5. Alat Miniface anda dilengkapi dengan lima (5) tahap intensiti. Sesuaikan dengan keselesaan dan pilihan anda dengan menekan butang atas (+) atau bawah (-). Elak dari menggunakan intensiti tinggi semasa rawatan pertama anda
6. Letakkan alat pada bahagian kulit yang anda inginkan. Anda akan mengalami arus microcurrent yang lembut, menenangkan dan ringan.
7. Apabila anda mendengar bunyi bip setiap lima (5) saat, ini menunjukkan bahawa sudah waktunya untuk berpindah ke kawasan lain di wajah anda.
8. Apabila dua bunyi bip didengar, ini bermakna sudah tiba masanya untuk mengecas alat anda.
9. Tekan butang selama lebih dari 3 saat untuk mematikan alat Miniface.
10. Untuk keselamatan, matikan alat Miniface anda selepas setiap rawatan.

## **KAWASAN RAWATAN DAN URUT**

### **Memperbaiki penampilan wajah dalam 5 minit**

- Alat Miniface anda telah direka untuk meningkatkan penampilan wajah anda dalam masa lima (5) minit saja! Dengan alat mudah alih ini, wajah dan leher, rahang, tulang pipi dan dahi anda dapat disimulasikan arus microcurrent tanpa rasa sakit
- Mengawal otot muka dengan cepat dan cekap
- Cegah tanda-tanda umum proses penuaan seperti kedutan, garis halus dan kulit kendur daripada terbentuk

- Menjimatkan masa dan tenaga dengan spa microcurrent anda sendiri bila-bila masa, di mana sahaja

## RAWATAN GESERAN ASAS (5 MINIT)

**Sebelum anda memulakan rawatan:** Untuk hasil yang optima, ulangi setiap geseran tiga kali. Gel tidak perlu dibasuh kerana boleh diurut pada kulit untuk hasil yang terbaik. Gel lebihan boleh dilap dengan tuala lembap.

### LEHER

**Langkah 1 - Leher Atas:** Letakkan sfera pada bahagian leher atas anda sambil mengelakkan garis tengah. Geserkan ke belakang sehingga anda mendengar bunyi bip.

**Langkah 2 - Leher Tengah:** Letakkan sfera pada bahagian tengah leher anda sambil mengelakkan garis tengah. Geserkan ke belakang sehingga anda mendengar bunyi bip.

**Langkah 3 - Leher Bawah:** Letakkan sfera pada bahagian leher bawah anda sambil mengelakkan garis tengah. Geserkan ke belakang sehingga anda mendengar bunyi bip.

Sila ulangi Langkah 1 hingga 3 sebanyak tiga kali.



### MUKA

**Langkah 1 - Jelingan + Rahang:** Letakkan sfera di bawah satu sudut mulut anda kemudian geser perlahan dari awal tulang pipi ke telinga bawah sehingga anda mendengar alat itu berbunyi.

**Langkah 2 - Pipi Bawah:** Letakkan sfera di tepi mulut anda kemudian perlahan-lahan menggeser ke kawasan garis rambut di sebelah tengah telinga sehingga anda mendengar alat itu berbunyi.

**Langkah 3 - Pipi Atas:** Letakkan sfera di bawah satu sudut hidung anda kemudian perlahan-lahan meluncur ke kawasan garis rambut di sebelah atas telinga sehingga anda mendengar alat itu berbunyi. PENTING: Jangan geser di kawasan mata.

Untuk hasil yang optima, ulangi Langkah 1 hingga 3 sebanyak tiga kali.




### DAHI

**Langkah 1 - Bahagian Alis Tebal:** Letakkan sfera secara mendatar di atas alis paling tebal anda kemudian perlahan-lahan menggeser ke atas arah garis rambut anda.

**Langkah 2 - Lengkung Alis:** Letakkan sfera secara mendatar di atas lengkung alis anda kemudian perlahan-lahan menggeser ke atas arah garis rambut anda.

**Langkah 3 - Bahagian Alis Nipis:** Letakkan sfera secara mendatar di atas bahagian kening paling nipis anda kemudian perlahan-lahan menggeser ke atas arah garis rambut anda.

Untuk hasil yang optima, ulangi Langkah 1 hingga 3 sebanyak tiga kali.

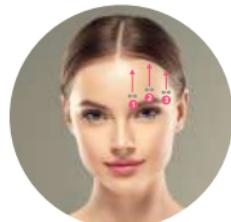

## RAWATAN LANJUTAN

Selesaikan rawatan asas kemudian teruskan dengan langkah-langkah berikut di bawah:

### LEHER

**Langkah 1** - Mulakan dari tengah leher (Kedudukan 1), geserkan sfera ke atas dan pepenjuru perlahan ke arah belakang leher.

**Langkah 2** - Mulakan jauh sedikit dari tengah leher (Kedudukan 2), geserkan sfera ke atas dan menyerong perlahan ke arah belakang leher.

**Langkah 3** - Mulakan lebih dekat ke sisi leher anda (Kedudukan 3), geserkan sfera ke atas dan pepenjuru perlahan ke arah belakang leher. Untuk hasil yang optima, ulangi Langkah 1 hingga 3 sebanyak tiga kali.



### MUKA

**Langkah 1** - Mulakan dari tepi garis rahang anda yang paling dekat dengan dagu di bawah bibir anda (Kedudukan 1), geserkan sfera ke atas dan menyerong perlahan ke puncak tulang pipi anda.

**Langkah 2** - Mulakan lebih jauh dari pinggir garis rahang anda (Kedudukan 2), geserkan sfera ke atas dan menyerong perlahan ke arah puncak tulang pipi anda.


**Langkah 3** - Mulakan paling jauh dari pinggir garis rahang anda (Kedudukan 3), geserkan sfera ke atas dan menyerong perlahan ke arah puncak tulang pipi anda. Untuk hasil yang optima, ulangi Langkah 1 hingga 3 sebanyak tiga kali.



### DAHI

**Langkah 1** - Letakkan sfera pada (Kedudukan 1), geserkan secara perlahan ke (Kedudukan 2).

**Langkah 2** - Geserkan secara perlahan ke (Kedudukan 3) dan akhirnya berakhir pada (Kedudukan 4). Lakukan ini sekali sahaja untuk menyelesaikan sesi Rawatan Lanjutan.

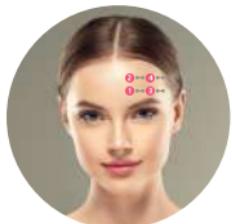

## KEKERAPAN RAWATAN

Sebaiknya gunakan alat Miniface anda hanya 5 minit sehari untuk hasil yang lebih jelas pada wajah anda. Kekerapan penggunaan yang disyorkan adalah 5 kali seminggu untuk 2 bulan pertama diikuti dengan 2-3 kali seminggu mengikut keperluan selepas itu.

## **APAKAH HASIL YANG BOLEH SAYA JANGKAKAN?**

Dengan alat Miniface mudah alih anda, anda dapat memperoleh hasil berdasarkan jenis dan keadaan kulit anda. Sesetengah pengguna memperoleh hasil yang dapat dilihat dengan segera sementara yang lain memerlukan masa yang lebih lama dengan penggunaan kerap. Ingat, jumpa doktor jika anda mengalami simptom hasil penggunaan peranti Miniface.

## **MENJAGA PERANTI ANDA**

- Pembersihan alat: Gunakan kain lembap untuk membersihkan alat dan aksesori. Berhati-hati agar kain tidak terlalu basah supaya tidak merosakkan alat Miniface.
- Mengecas: Cas peranti Miniface pada permukaan yang bersih dan rata.
- AMARAN: Jangan gunakan alat Miniface Miniature anda di kawasan berikut:
- Garisan tengah leher (tulang leher)
- Kawasan mata (otot bulat di dalam rim orbital)
- Kawasan payudara
- Kawasan pangkal peha

## **JAMINAN**

Syarikat kita menjamin bahawa peranti Miniface Miniature anda bebas dari kecacatan bahan dan pembuatan selama satu (1) tahun dari tarikh pembelian. Namun:

- Kerosakan hasil daripada penggunaan jangka panjang tidak dilindungi oleh jaminan kami
- Jaminan hanya untuk penggunaan pengguna peribadi di luar sektor komersial

Kami berusaha untuk memberikan khidmat terbaik kepada pelanggan kami dengan menawarkan alat lain untuk menggantikan alat yang rosak dalam masa satu tahun dari tarikh pembelian.