


Areti.

Electric Toothbrush
MIGAKI II t2036WH
取扱説明書 兼 保証書

●故障の時も安心!メーカーサポートなら最短2営業日で交換保証
詳しくは「アフターサポート」ページをご確認ください。

▲使用前にすべての注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

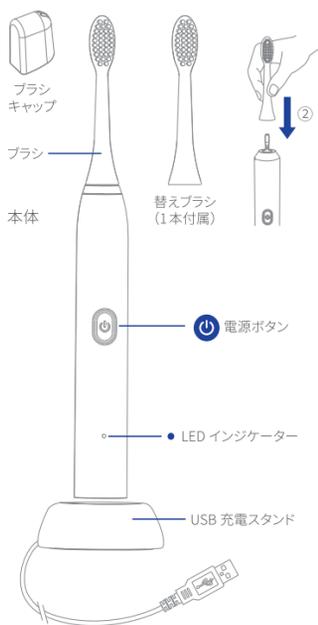

使い方

- ①製品の検品と保護のため、初めてお使いになる際は少し充電が残っています。電池残量を使い切ってから、約5時間充電してください。
②ブラシの向きを正面にし、カチッと音がするまで差し込みます。
③電源ボタンの長押し(1秒以上)で電源をON/OFF、軽く押すとモードが切り替わります。メモリー機能を搭載しているため、2回目以降は前回使用したモードで起動します。
④2分間使用すると自動的に電源がOFFになります。

Table with 2 columns: Mode (LED Light) and Function. Includes Clean Mode, Sensitive Mode, and Whitening Mode.

Table with 2 columns: Charging Status and LED Indicator Display. Shows indicators for charging, full charge, and low battery.

※6ヶ月以上使用していない場合は、歯ブラシを5時間以上充電してください。フル充電した後、歯ブラシは約60日間、使用が可能です。
※電池残量を使い切ってから再充電してください。残量がなくなる前に充電すると、リチウムイオン電池の寿命が大幅に短くなる可能性があります。
※長時間充電していない場合、約6~20分間LEDインジケータが点灯しない場合がありますが、これは正常な状態のため、そのまま充電してください。

お手入れ

- ブラシのクリーニング
●本体のクリーニング
●充電スタンドのクリーニング
●ブラシヘッドの交換

Table with 2 columns: Specification and Value. Lists voltage, vibration counts, charging time, and IPX7 rating.

アフターサポート and おすすめ商品 sections. Includes contact info for Areti customer support and details for Porescope b2007WH and b1838WH products.

▲本商品は下記の注意事項を理解したうえでの使用をお願いいたします

- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●警告 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
●注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

故障かなと思ったら section. Provides troubleshooting steps for power issues and operation problems.

Areti's Lifestyle Magazine and Ambassador Recruitment banner. Features floral graphics and promotional text for a lifestyle magazine and ambassador program.