

PAINHUNTER



**Brugermanual for
Painhunter massagepistol**



01 Produktintroduktion

02 Specifikationer

03 Hoveder

04 Instruktioner

05 Advarsler

06 Forsigtighedsregler

07 Vedligeholdelse

08 Opladning

09 Reklamationsret

01 PRODUKTINTRODUKTION

Painhunter massagepistol er en ledningsfri massageapparat som kan bruges af alle. Massagepistolen kommer med 4 udskiftelige hoveder, en rejsetaske og en oplader.

Den har et LCD touch display som gør det nemt for dig at betjene den. Hovederne er nemme at tage på og af, da det kun kræver at man sætter dem i.

Massagepistolen hjælper på ømme muskler, forøger blodcirkulationen, forebygger knuder og myoser - og ikke mindst, hjælper den med afslapning.

02 SPECIFIKATIONER

Vibrations frekvens

Fra 1200 – 3200 slag pr. min

Opladning

2500 mAh holder i op til 4 timer





03 HOVEDER

A

Passer godt til lokale smerter og mere dybdegående massage eftersom det rammer mere præcist

B

Bruges til almindelig massage over hele kroppen og den er meget behagelig at bruge

C

Passer godt til lår, lægge og ankler og er perfekt til rygsøjlen da det rammer mere præcist på de ønskede områder

D

Bruges mest til de store muskelgrupper som f.eks. lår og baller/glutes da hovedet har et kraftigere tryk



Fladt hoved

A



Kugle hoved

B



Bullet hoved

C



Gaffel hoved

D



04 INSTRUKTIONER

1. Du skal starte med at tænde massagepistolen nede i bunden.

Dette gør du ved at bevæge den lille firkant, over på ON. Du slukker for den, ved at flytte knappen over til OFF.

2. Vælg et af de fire forskellige hoveder og sat det på.

Det eneste du skal er at skrue hovedet fast på massagepistolen.

Du kan mærke når hovedet sidder fast, ved at mærke at hovedet ikke føles løst.

Brug knapperne + og - til at styre hastigheden. Der er op til 20 hastigheder.

3. Brug din massagepistol på de områder du ønsker at få masseret.

4. Den anbefalede tid for at bruge massagepistolen er ikke mere end en time.

05 ADVARSLER

1. Brug ikke massagepistolen under vand eller i forbindelse med vand.
2. Hold væk fra væsker og varmekilder.
3. Hold udluftningshullerne fri for støv og snavs.
4. Skru ikke skruerne ud og forsøg ikke at skille massagepistolen ad.
5. Brug ikke massagepistolen i mere end 1 time ad gangen.
Lad massagepistolen være slukket lidt, før du bruger den igen.
6. Kun til brug for voksne. Må ikke bruges hvis du er kommet til skade.
Tal med din læge før du tager produktet i brug.
7. Aldrig lad massagepistolen være uden opsyn, imens den er i brug eller til opladning.

06 FORSIGTIGHEDSREGLER

Sikkerhedsanvisninger

1. Kun til brug for voksne.
2. Altid brug massagepistolen uden opsyn.
3. Brug massagepistolen ved at trykke let på kroppen og de forskellige muskelgrupper.
4. Brug ikke massagepistolen mere end 60 sek. pr. område.
5. Må ikke bruges på hovedet.
6. Der kan opstå blå mærker, uanset hvordan du styrer hastigheden eller trykket.
Kontroller og kontakt din læge hvis der er tegn på smerter eller ubehag.
7. Misbrug ikke massagepistolen.
8. Anbring ikke objekter eller andet i massagepistolens ventilationshuller.

Ansvarsfraskrivelse

BRUG IKKE MASSAGEPISTOLEN UDEN FØRST AT HAVE FÅET DIN LÆGES TILLADELSE, HVIS NOGET AF NEDENSTÅENDE GÆLDER (Dette betyder ikke at du ikke må bruge massagepistolen, men vi råder dig til at kontakte din læge først)

Gravide, personer med diabetes, komplikationer, nethindeskader, nylig operation, epilepsi, migræne, diskusprolaps, brug af pacemaker, spondylolistese, spondylyose eller spondylolysis, nylige ledudskiftninger eller IOU'er, metalstifter eller -plader eller enhver bekymring omkring dit fysiske heldbred. Svage personer og børn skal følges af en voksen når de bruger apparatet.

07 VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du skal rengøre massagepistolen, sluk den først og tag den ud af opladeren, hvis den er til opladning.

Brug en fugtig klud til at rengøre massagepistolen og tør efter med en blød klud.

Brug rejsetasken til rejser, for sikker opbevaring.

08 OPLADNING

Når du skal oplade massagepistolen, skal du tilslutte DC-enheden af den medfølgende 26 V-adapter til batteriets opladningsport og AC-enden af kablet sættes i en stikkontakt.

LED-lyset blinker for at vise det aktuelle batteriniveau og for at angive, at apparatet oplades.

Når alle LED-lamper holder op med at blinke og er tændt konstant, angiver det, at batteriet er fuldt opladt.

Du kan ikke bruge massagepistolen under opladning.

Batteriet kan genoplades, uanset batteriniveau.

09 REKLAMATIONSRET

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.

Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen.

Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen.

Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.



Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.

Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til:

ShopMovers ApS | Nørre Allé 70F, 1. sal | 8000 Aarhus C

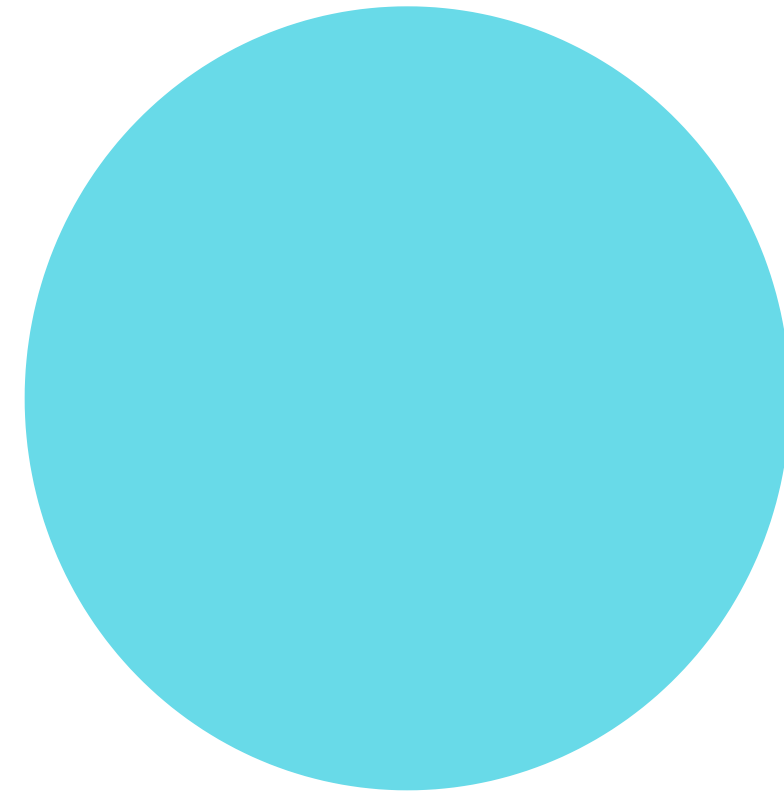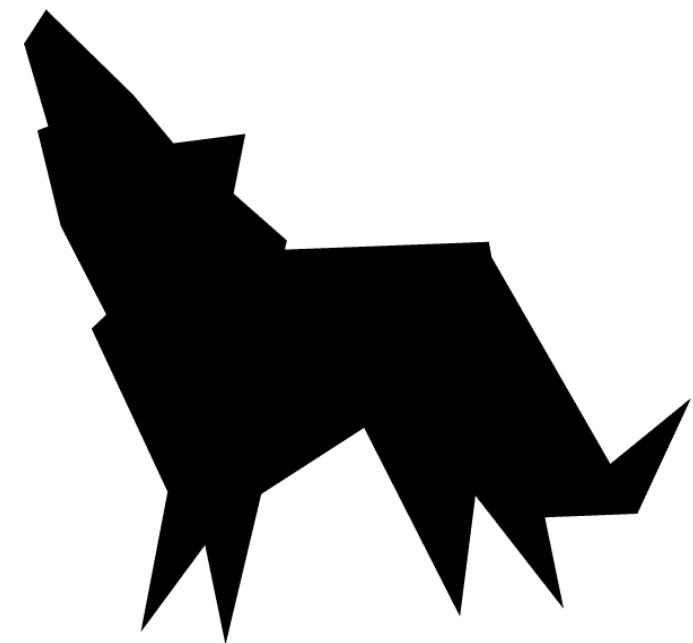

PAINHUNTER

kontakt@painhunter.dk

71 78 03 92