

FAMILY


Inada chair W.1 Multistar

Danke für den Kauf eines INADA Chair W.1.
Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung
Sorgfältig vor der ersten Benutzung. Diese
Bedienungsanleitung sollten sie sorgfältig
Aufbewahren.

Vielfältige Automatikprogramme, Sensorsystem,
Human Touch Massage, Knetmassage, Doppel
Knetmassage, Kneten & Klopfen, Rhythmische
Shiatsumassage 1, Rhythmische Shiatsumassage 2,
Lockerungsmassage 1, Lockerungsmassage 2,
Rollenmassage, Schwingungsfrequenzmassage und
Natürlich der hohe Sitzkomfort und die Vielfältigkeit
sind nur einige herausragende Merkmale dieses
Massagesessels.

Inhalt

| | |
|------------------------------|----|
| *Sicherheitshinweise | 1 |
| *Merkmale & Eigenschaften | 4 |
| *Komponenten & Beschreibung | 6 |
| *Das Bedienteil | 7 |
| *Vor der Benutzung/Hinweise | 9 |
| *Programme und Möglichkeiten | 12 |
| *Pflegethinweise | 13 |
| *Fehlerbehebung | 15 |
| *Technisch Daten | 17 |
| *Garantie/Service | 17 |

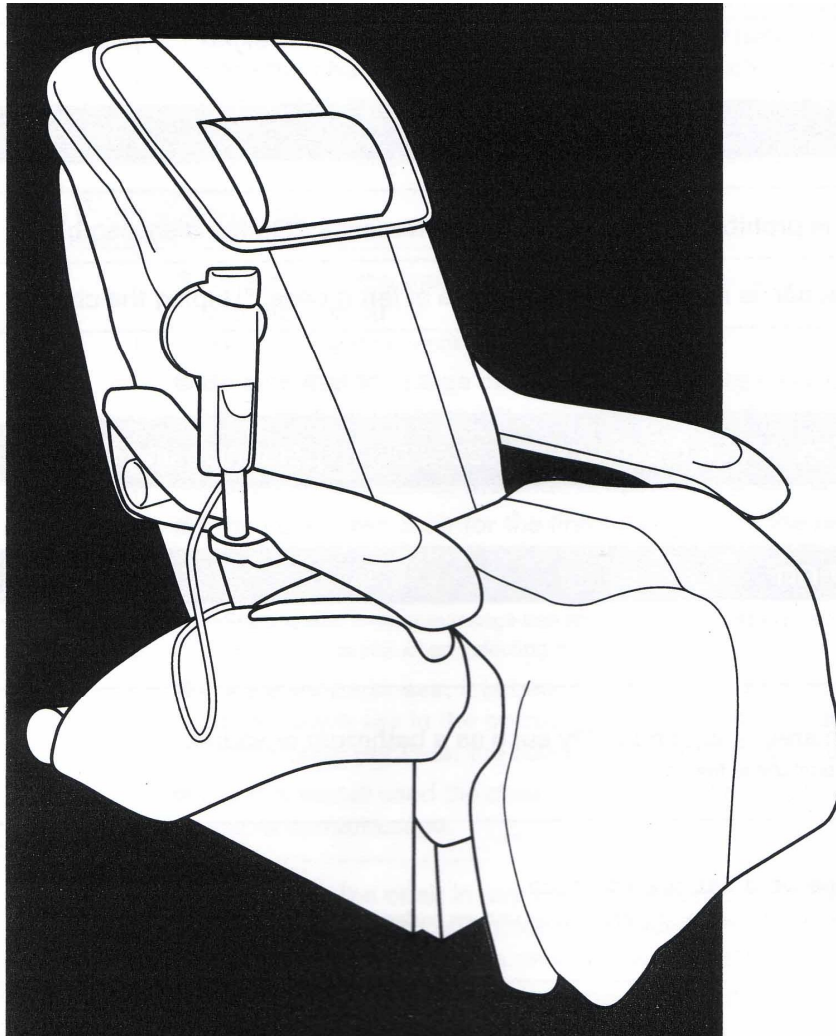

WARNUNG

Personen, die von einem oder mehreren der unten aufgelisteten Symptome betroffen sind, sollten vor Verwendung des Massagesessels ihren Arzt konsultieren.

- Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich krank fühlen.
- Personen, die körperlich ruhiggestellt werden sollen.
- Personen, die z.B. unter Osteoporose leiden.
- Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, an Angina pectoris erkrankt oder Herzinfarkt gefährdet sind.
- Schwangere oder während der Menstruation.
- Personen mit hohem Bluthochdruck.
- Personen mit bösartigen Tumoren.

Vorsicht

| | |
|---|--|
| <p>Den Massagesessel auf ebenem Untergrund aufstellen und verwenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann auf unebenem Untergrund kippen, Verletzungsgefahr. | <p>Fühlen Sie sich unwohl oder empfinden Sie Schmerzen aufgrund einer zu intensiven Stimulation während der Anwendung des Sessels, beenden Sie die Anwendung unverzüglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Verletzungsgefahr. |
| <p>Die Behandlungszeit für die einzelnen Körperpartien auf max. 5 Minuten, für die gesamte Rückenpartie auf höchstens 15 Minuten begrenzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine übermäßig lange Behandlungszeit verursacht unerwünschte Stimulation von Nerven und Muskeln, was sich kontraproduktiv auswirken kann. | <p>Wird der Sessel bewegt, muss vorher sichergestellt werden, dass die Kabel sauber gebündelt sind. Zum Transport sind mindestens zwei Personen (eine auf jeder Seite) erforderlich. Sessel an der Unterkante der Armlehnen greifen. Zum Bewegen des Sessels, diesen nicht am Rückenlehnen-Verstellhebel tragen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Personen können aus dem Gleichgewicht geraten und den Sessel fallen lassen. |
| <p>Beim Aufstellen des Sessels eine Matte unter dem Sessel platzieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann sonst den Fußboden beschädigen. | <p>Den Sessel langsam und vorsichtig auf dem Fußboden abstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Sessel kann sonst den Fußboden beschädigen. |
| <p>Nachdem Sie die Stellung der Massagekugeln geprüft haben, setzen Sie sich bitte langsam in den Sessel, so dass sich die Massagekugeln rechts und links von der Wirbelsäule befinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Verletzungsgefahr. | <p>Das Netzkabel korrekt einstecken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Stromschlaggefahr. • Es kann ein Kurzschluss ausgelöst werden und es besteht Brandgefahr. |

| | |
|---|---|
| <p>Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel herausgezogen ist, wenn die Stromversorgung abgeschaltet und das Gerät nicht verwendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Netzkabel kann unterbrochen oder kurzgeschlossen werden; dadurch kann Brandgefahr entstehen. | <p>Den Sessel nicht verwenden, wenn lockere Kontakte der Stromversorgung festgestellt werden. Defekte Netzkabel und/oder Stecker sind durch den Lieferanten oder einen qualifizierten Fachmann zu ersetzen, um Gefahren wie Elektroschock, Kurzschluss usw. zu vermeiden.</p> |
|---|---|

Hinweis

Den Sessel nur bekleidet benutzen.

Vor Betätigung der Bedientasten prüfen, ob sich der Sessel in ordnungsgemäßer Stellung befindet.

- Ein abrupter Wechsel der Betriebsart kann Schwindel verursachen.

Wird der Sessel kontinuierlich verwendet, sollten zwischen den Anwendungen angemessene Pausen eingelegt werden.

Nicht auf den Sessel springen oder hart mit den Füßen dagegen drücken.

- Die Nähte bzw. der Überzugsstoff können reißen.

Verschmutzungen z.B. durch Badeszusätze (insbesondere schwefelhaltige) oder Substanzen wie z.B. Haarfestiger auf dem Rückenlehnenpolster der Kopfstütze, der Armlehnen (links oder rechts) oder dem Sitzkissen sind unverzüglich mit einem trockenen Tuch zu entfernen.

Bei Gewittern ist die Verwendung des Sessels einzustellen, die Stromversorgung auszuschalten und das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

- Blitze können Funktionsstörungen des Sessels verursachen.

Den Sessel nicht unter direkter Sonneneinstrahlung setzen.

- Die Sitzüberzüge können sich verfärben.

WARNUNG

- ◆ Schalten Sie bitte nach dem Gebrauch des Gerätes immer den Hauptschalter aus bzw. ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
- ◆ Kinder und Behinderte sollten den Massagesessel nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.
- ◆ Benutzung oder Aufbewahrung des Gerätes darf niemals in feuchten oder nassen Räumen erfolgen!
- ◆ Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Gegenstände.

- ◆ Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit eine Überprüfung Ihres Massagesessels in Bezug auf Beschädigungen durchzuführen (z. B. Anschlusskabel/Überzug etc.). Bei Beschädigungen darf das Gerät erst nach erfolgter Reparatur wieder in Betrieb genommen werden!

- ◆ Ziehen Sie niemals an dem Anschlusskabel des Gerätes!

Merkmale und Eigenschaften des Sessels

Optische Sensoren..

Shiatsu Druckpunkterkennung

Automatische Sensoren erkennen die Shiatsu- Druckpunkte bevor die eigentliche Massage beginnt, so dass sie eine individuelle , auf sie zugeschnittene Massage genießen können.

Einfach verstellbar..

Automatisch Verstellung

Das Rückenteil kann in einem Winkel zwischen 120 und 170 Grad verstellt werden. Die Einstellung ist sehr einfach.

Einfach zu verstehen..

Das Bedienteil

Das Bedienteil ist klar gegliedert und einfach zu verstehen. Das Display zeigt Ihnen jeden Schritt der Massage.

Vielfältigkeit der Massagetechniken..

Automatikprogramme

Der INADA W.1 verfügt über 8 verschiedene Vorsorgeprogramme um verschiedene Wellness Ziele zu erreichen. Im manuellen Bereich können Sie Ihre Massage individuell auswählen.

Sanfte Schwingungen..

Vibrationsmassage

Schwingungsfrequenzmassage im Sitzteil und im Rückenteil um Ihre Massage noch angenehmer zu gestalten

Noch schönerer..

Ultraflaches Fußteil

Erst bei Aktivierung füllt sich das Fußteil mit Luft und passt sich Ihren Füßen an.

Einfachere Benutzung..

Klappbare Armlehnen

Einfacheres Ein- und Aussteigen aus dem Massagesessel durch die einfach hochzuklappenden Armlehnen.

Das Gefühl einer Handmassage erleben

Der Sessel verfügt über vier Grundtechniken der Handmassage (Akupressur, Knet-, Klopf-, und Streckmassage). Sowie über Vielfältige Automatikprogramme, Sensorsystem, Human Touch Massage, Knetmassage, Doppel Knetmassage, Kneten & Klopfen, Rhythmische Shiatsu-massage 1, Rhythmische Shiatsu-massage 2, Lockerungsmassage 1, Lockerungsmassage 2, Rollenmassage, Airmassage und Schwingungsfrequenzmassage.

Des Weiteren lassen sich durch Kombination dieser Grundtechniken verschiedene weitere Massagearten realisieren.

Spüren eines neuen Entspannungskomforts



Sie werden sich in Ihrem Massagesessel wohl fühlen, da er unter ergonomischen Aspekten konzipiert wurde und somit Eigenschaften wie Entspannungskomfort, modernes Design und erlesene Materialien in sich vereint. Die Merkmale schließen den Neigemechanismus mit ein.


WIRKUNGEN

- Wirkt belebend
- Fördert die Durchblutung
- Lindert Muskelverspannungen

Komponenten & Beschreibung

Der Massagesessel

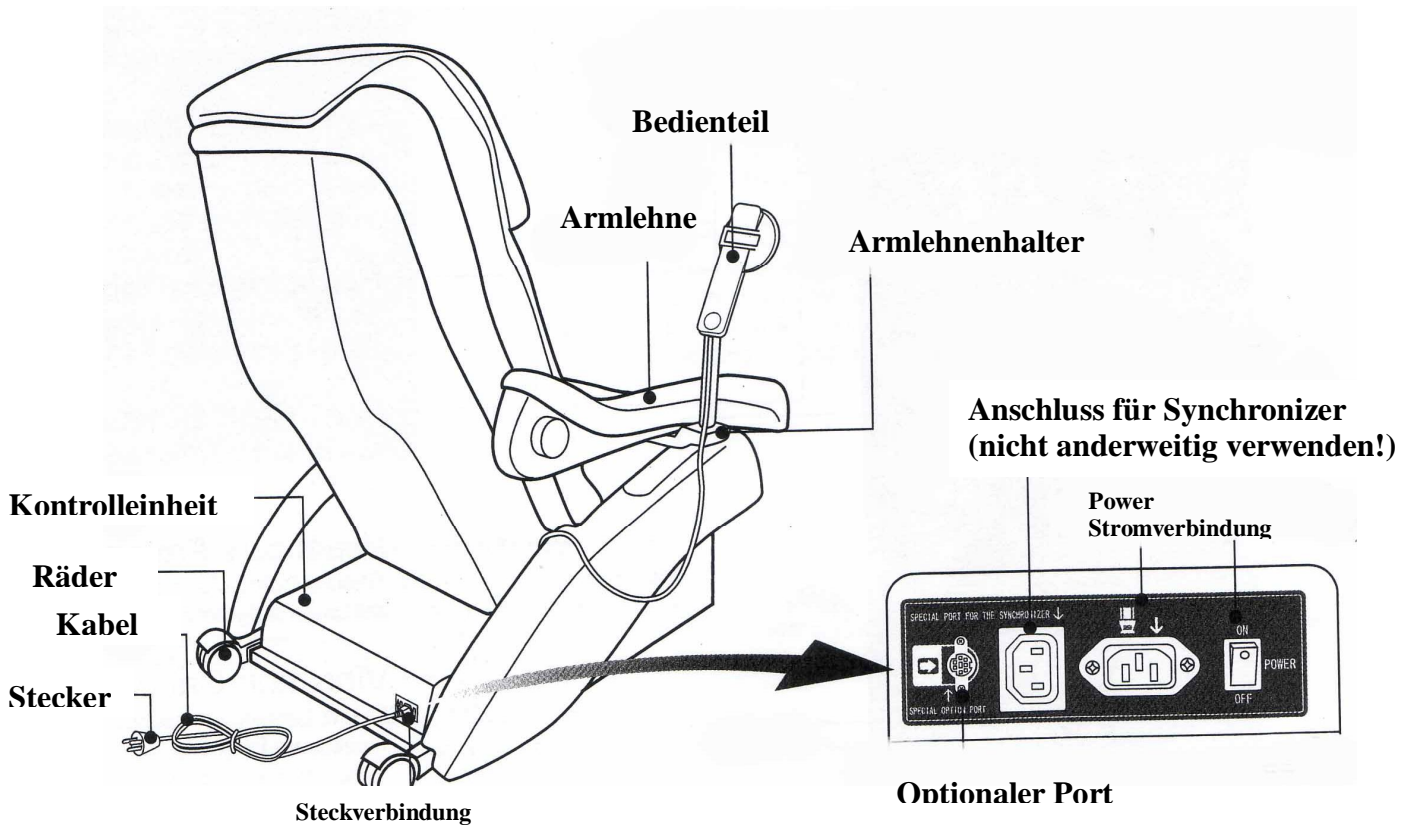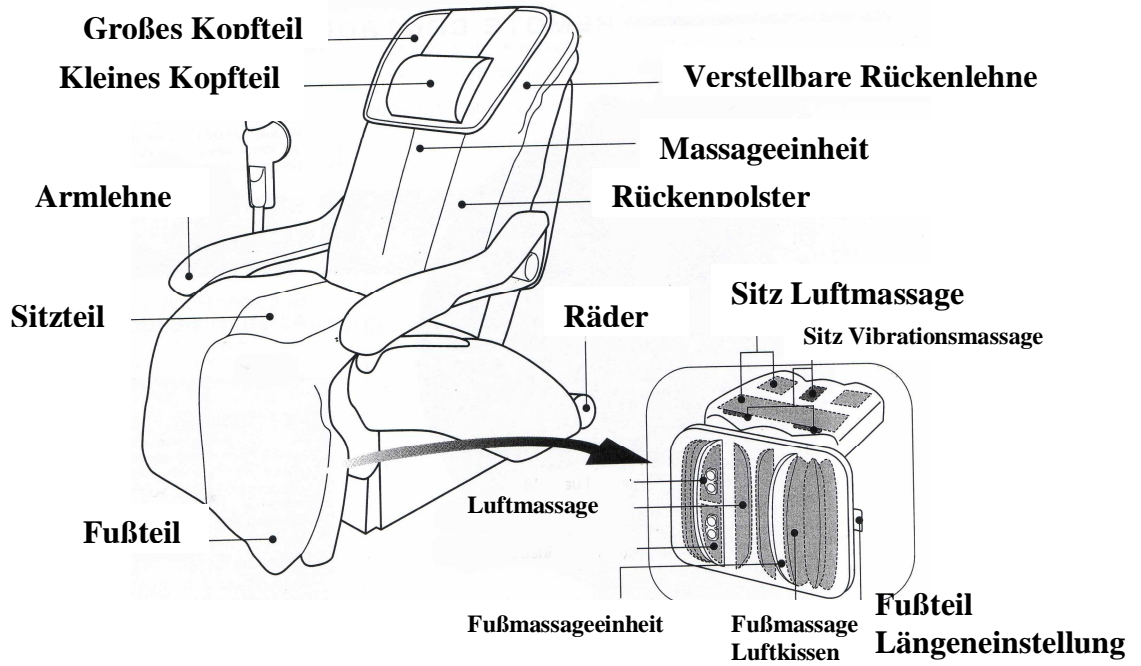

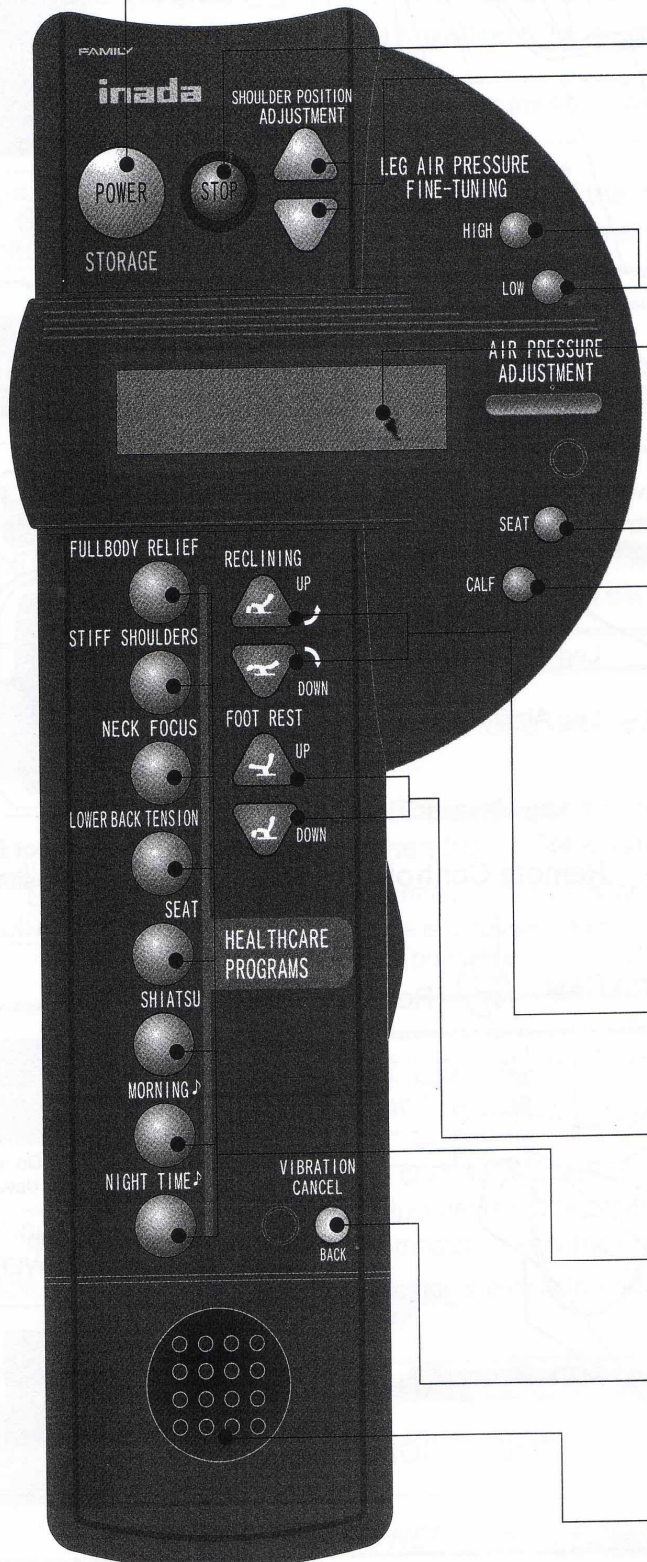

Display des Bedienteils

Bedienteil

Power/Einschaltknopf

Schaltet das Bedienteil Ein und Aus. Durch erneutes Drücken des Power/Einschaltknopfes schaltet sich der Sessel ab und die Massagerollen fahren in Parkposition

Stop/Notstop Knopf

Schaltet die Massagefunktion sofort ab.

Shoulder Position Adjustment

Mit den Up- Down Tasten können Sie die Körpergröße manuell einstellen.

Air Massage Feineinstellung

Benutzen Sie diese Tasten um die Intensität der Air Massage (fein)einzustellen.

Bedienteil Display

Zeigt Ihnen Informationen über die gewählte Massage an.

Air Massage Intensitätseinstellung

Benutzen Sie diese Tasten um die Intensität der Air Massage (Medium/High/Low) einzustellen.

Elektrische Vertellung/Rückenlehne

Drücken Sie Up/Down um die Rückenlehne zu verstellen.

Elektrische Vertellung/Fußteil

Drücken Sie Up/Down um das Fußteil zu verstellen.

Healthcare Programme

Wählen Sie aus der Vielzahl von vorprogrammierten Programmen


Vibrationsabschaltung

Mit dieser Taste können Sie die Vibration im Beinbereich zu/abschalten

Lautsprecher


Das Display informiert Sie über die Massage, die Restzeit, die Geschwindigkeit und die Intensität mit Symbolen und internationalem Text.

Bedienteil/Inneres Bedienteil (Aufgeklappt)

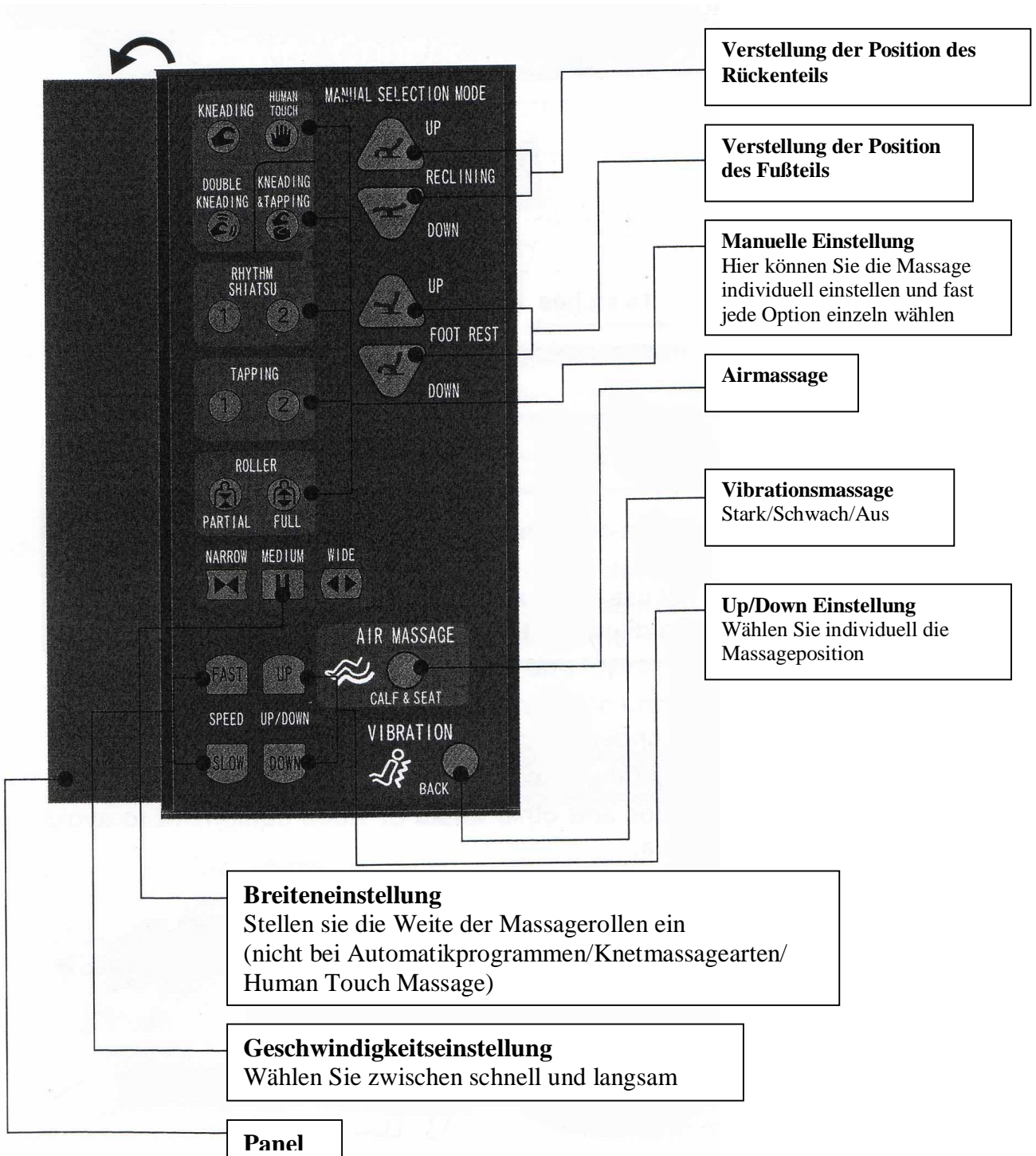

Vor der Benutzung/Hinweise

***Achten Sie bei der Aufstellung auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln, Glasscheiben etc. Beachten Sie, dass sie in der Liegeposition mindestens ca. 2 Meter Gesamtlänge benötigen.**

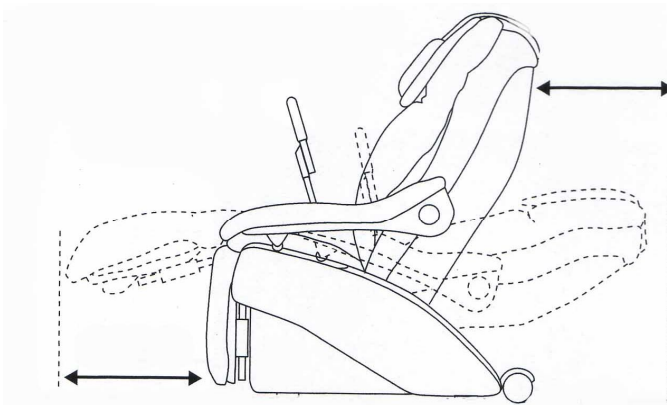

***Achten Sie stets auf einen sicheren, festen, trockenen stand nicht in unmittelbarer nähe der Heizung und anderen Elektrogeräten und auch möglichst nicht im direkten Sonnenlicht.**

***Verstellen Sie den Massagesessel stets zu zweit. Zum einfacheren Transport sind rückseitig Rollen angebracht.**




***Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Rückenpolsters, insbesondere, dass der Reisverschluss richtig verschlossen ist und dass keine Beschädigungen vorliegen.**


***Stromversorgung – stecken sie das Kabel in den Sessel/Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein. Durch Drücken des Hauptschalters können sie den Sessel neu starten/Reset Funktion. Schalten Sie den Hauptschalter möglichst nach der Benutzung aus. Ziehen Sie bei Fehlfunktion des Gerätes oder auch Gewitter stets sofort den Netzstecker.**




***Bedienteilhalterung – bei Bedarf können Sie die Bedienteilhalterung (optionales Zubehör)sehr einfach an der rechten Armlehne gem. Zeichnung montieren.**

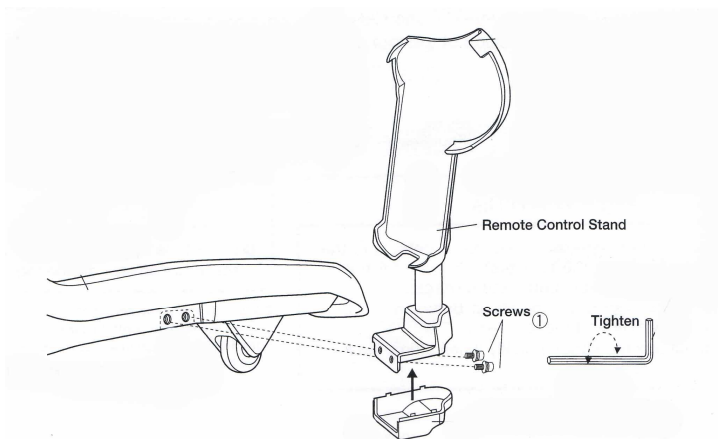

***Die Länge des Fußteils können sie durch Drücken der Verstelltaste verändern.**

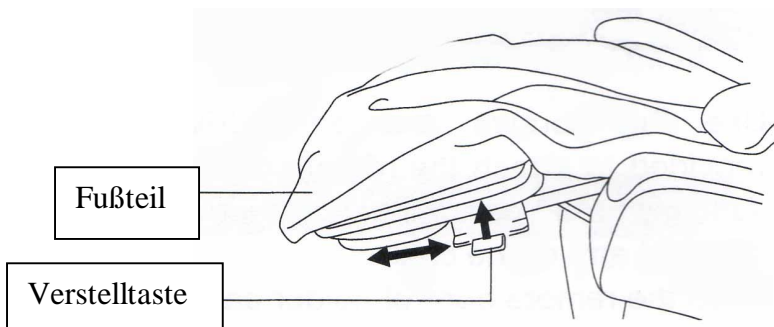

***Die Intensität können Sie über die Polsterung einstellen. Einfach z.B. ein Gartenstuhlkissen oder eine dicke Woldecke über den Sessel legen, und Sie haben eine sanfte Massage. Einen „festen“ Massagesessel können Sie immer sanfter machen, aber niemals einen „sanften“ fester. In der Liegeposition ist die Massage stets stärker, da Sie mit Ihrem Körpergewicht auf die Massageeinheit drücken.**

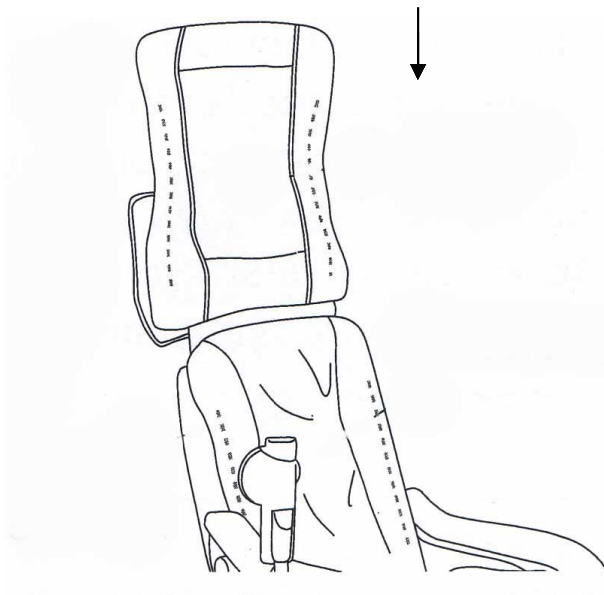

***Zum einfachen Ein-/Ausstieg können Sie die Armlehnen hochklappen**



Programme & Möglichkeiten

Healthcare Programme

**8 Verschieden
Automatikprogramme für
individuelle Wellness Ziele –
einfach über das Bedienteil
einzustellen.**



- 1.- *Fullbody Relief*/Gesamtkörpermassage
- 2.-*Stiff Shoulders*/Spezialisiert für Nacken und Schultern
- 3.-*Neck Focus*/Spezialisiert auf den Nacken
- 4.-*Lower Back tension*/Spezialisiert auf den unteren Rückenbereich
- 5.-*Seat*/Spezialisiert auf den Sitzbereich mit Luftmassage und Vibration
- 6.-*Shiatsu*/traditionelle, langsame Shiatsumassage für den ganzen Körper
- 7.-*Morning (Background Music)*/Morgens empfohlen, anregend
- 8.-*Night Time (Background Music)*/Abends empfohlen, beruhigend

Manuelle Programme (im inneren des Bedienteils)

- Wählen Sie individuell..

*Rollenmassage, Knetmassage, Klopfmassage, Human Touch Massage,
Doppel Knetmassage, Kneten & Klopfen, Rhythmische Shiatsumassage 1,
Rhythmische Shiatsumassage 2, Lockerungsmassage 1,
Lockerungsmassage 2, Schwingungsfrequenzmassage, Airmassage.*

..erleben Sie Ihre eigene Lieblingsmassage.

HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE

Haupteinheit

- ◆ Reinigen Sie den Bezug der Massageauflage schonend, z. B. mit einer milden Seifen-/Warmwasserlösung. Nicht bürsten! Zur Fleckenentfernung keine Lösungsmittel verwenden!
- ◆ Bitte achten Sie darauf, dass die Schaumstoffpolsterung der Massageauflage beim Reinigen nicht nass wird. Wir empfehlen, den Bezug mit einem geeigneten Tuch abzutrocknen.
- ◆ Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Massagesessel haben, empfehlen wir Ihnen, ihn nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Auch eine Bestrahlung durch eine starke Wärmequelle sollte unbedingt vermieden werden.

Bedienelement

- ◆ Den Schmutz auf der Fernbedienung mit einem trockenen Tuch entfernen.

Standort Ihres Massagesessels

Den Sessel in einer Umgebung aufstellen, die folgende Bedingungen erfüllt:

Temperatur: 0°C bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30% bis 85% (es sollte keine Taubildung vorliegen)

Der Lieferant übernimmt keine Haftung für die Qualität dieses Sessels, wenn der Benutzer die obigen Anweisungen zum ordnungsgemäßen Betrieb und zur korrekten Lagerung ignoriert.

REPARATURHINWEISE

- ◆ Das Modell „*Inada*“ ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- ◆ Unsachgemäßer Gebrauch des Massagesessels sowie unautorisierte Reparatur führen automatisch zum Verlust der Garantie.
- ◆ Sollten Sie Übelkeit oder Unwohlsein während der Benutzung des Massagesessels verspüren, schalten sie sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- ◆ Benutzen Sie keine anderen Massagegeräte in Zusammenhang mit dem Massagesessel.
- ◆ Sollten Sie den Sessel für längere Zeit nicht benutzen sollen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schalten Sie nach der Benutzung den Hauptschalter aus.

STÖRUNGSSUCHE

- Bitte lesen Sie diese Hinweise vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen.

| Störung | Mögliche Ursache |
|--|---|
| Der Sessel funktioniert nicht oder schaltet während des Einsatzes ab. | <ul style="list-style-type: none"> · Der Netzstecker ist aus der Steckdose/Sessel gezogen. · Der Hauptschalter auf der Rückseite ist ausgeschaltet. · Die ON/OFF Taste auf dem Bedienteil ist (nicht) betätigt worden. |
| Das Bedienelement leuchtet nicht auf, obwohl die Ein /Aus Taste betätigt wurde. | <ul style="list-style-type: none"> · Schalten Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Sessels aus (ca. Minuten) und nochmals ein. · Drücken Sie die ON/OFF Taste auf dem Bedienteil nochmals. |
| Ein Massagevorgang bricht ab. | <ul style="list-style-type: none"> · Die Zeitschaltuhr ist abgelaufen. |

In den folgenden Fällen ist keine Störung vorhanden.

| Situation | Ursache |
|--------------------------------------|--|
| Ein leises Geräusch. | Solche Geräusche kommen meist von der Rückenauflage, welche durch die Bewegung der Massagerollen strapaziert wird. |
| Ein Massagevorgang bricht ab. | Eine außerordentliche Überbelastung. Schalten Sie den Hauptschalter Ein/Aus/Ein |

| Situation | Schaden und Behebung |
|--|---|
| Eine deutlich sichtbare Beschädigung am Sessel. | Benutzen Sie den Sessel nicht weiter (Netzstecker ziehen!) und kontaktieren Sie den |

| | |
|--|---|
| Funktionsstörungen des Sessels. | Kundendienst. Dies kann z.B. vorkommen wenn in unmittelbarer Nähe Mobiltelefone, Radios, Sender etc. benutzt werden. |
|--|---|

****Kann die Störung durch Ausführen der oben genannten Schritte nicht behoben werden, ist der Lieferant Ihres Sessels zu konsultieren. In diesem Fall sind dem Lieferanten die ausführlichen Angaben über das Produkt, einschließlich Produktbezeichnung, Zeitpunkt der Beschaffung und Beschreibung der Störung zu übermitteln.**

Betriebsgeräusche

Beim Betrieb des Sessels können Geräusche auftreten wie Summen des Motors, Rattern der Getrieberäder, Rascheln reibender Textilien, und Knarren des Sesselgestells. Diese vom Mechanismus generierten Betriebsgeräusche sind unvermeidbar, sie sind nicht das Ergebnis einer Störung. Des weiteren beeinträchtigen diese Geräusche die zu erwartende Lebensdauer des Produkts in keinster Weise.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktname: | Massagesessel Family inada chair W.1 (HCP-W1AEU) |
| Stromverbrauch: | 210 W |
| Stromversorgung: | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Gewicht: | Netto: ca. 75 kg Brutto: ca. 100 kg |
| Abmessungen: | Sessel aufrecht: ca. L 115 cm x B 85 cm x H 120 cm Sessel in Liegeposition: ca. L 195 cm x B 87 cm x H 60 cm Sitzhöhe: ca. 45 cm |
| Manuelle Massagen: | Roll-, Klopf-, Knet-, Streck-, Kombinationsmassage etc. |
| Automatikprogramme: | Gesamter Rücken; Schulter/Nacken, Hüfte/Taille |
| Automatische Zeitschaltuhr: | ca. 15 Minuten |
| Neigungswinkel: | 120°-170° |
| Bezugsmaterial: | Hochwertiges Textilleder nubukstrukturiert |
| Lieferbare Farben: | schwarz |
| Verpackungsmaße: | L 180 cm x B 75 cm x H 68 cm |

- Technisch bedingte Änderungen vorbehalten. Geringe Farbabweichungen möglich.

Bei Rückfragen - bitte stets unter Vorlage der Rechnung bzw. Rechnungsnummer und Kaufdatum, Kaufort:

Alpha Techno GmbH
Ernst-Bauer-Str.1
97941 Tauberbischofsheim
Tel 09341/9285-0
Fax 09341/9285-28
Email: info@alpha-techno.com
Germany

