

 **LUSTRE**  
CLEAR**SKIN**

LUSTRE® ClearSkin

**3XPRESS**

Light Beauty Therapy Patches

**Mode d'emploi**

LUSTRE® ClearSkin

3XPRESS

Light Beauty Therapy Patches

# **Bienvenue dans l'univers des patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS. Découvrez le pouvoir révolutionnaire de la lumière pour transformer l'apparence de votre peau.**

**Nos innovations révolutionnaires sont développées par des scientifiques pour de superbes résultats. Nous visons à dépassons les conventions établies et à réinventer les soins de la peau grâce à des technologies innovantes, sûres et éprouvées pour offrir des avantages étonnants à votre peau.**

Les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS ont été conçus pour aider à favoriser l'éclat de la peau et à lutter contre son aspect mat. Grâce à leur technologie révolutionnaire, les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS conviennent à une utilisation sur le visage et sur le corps. Ils sont efficaces rapidement pour aider à révéler une peau énergisée et fraîche, avec un éclat visiblement radieux.

Vivez un moment de soin relaxant et offrez à votre peau une technologie éprouvée dans le confort de votre propre foyer. Les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sont faciles à utiliser, légers et flexibles pour un confort et un ajustement parfaits.

Il suffit de les mettre et d'en profiter ! Cela ne prend que 3 minutes.

Avantages des patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.



ENERGIZE COMPLEXION  
pour une peau plus fraîche



RADIANT GLOW  
pour une peau d'apparence  
uniforme

## Informations de sécurité importantes

- **NE PAS** utiliser les patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS à un endroit où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.
- **NE PAS** utiliser ou charger pas les patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS avec un adaptateur secteur endommagé et/ou défectueux.
- **NE PAS** plier ou endommager le fil du câble USB avec contrôleur intégré.
- **NE PAS** plier, tordre ou endommager vos patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS car cela pourrait endommager les DEL.
- **NE PAS** essayer de démonter les patches de

luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS. Cela annulera la garantie.

- Arrêtez immédiatement d'utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous pensez qu'ils sont défectueux. Veuillez contacter notre service clientèle à [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com).

## **Clause de non-responsabilité**

Ce produit est un appareil de soin esthétique et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie. LUSTRE® ClearSkin ne fait aucune réclamation, représentation ou garantie concernant la capacité de ce produit à guérir toute condition physique, cutanée ou mentale. Un professionnel de santé qualifié doit être consulté en ce qui concerne toute pathologie nécessitant des soins médicaux.

## **Représentation du produit**

LUSTRE® ClearSkin améliore constamment ses produits grâce aux technologies les plus récentes. En conséquence, le produit réel peut différer légèrement des produits présentés dans les illustrations de l'emballage et le guide utilisateur.

## Précautions

- **NE PAS** regarder directement la source lumineuse.  
Cela pourrait causer un inconfort visuel temporaire.

- **NE PAS** placer les patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS près de l'eau ou de toute surface humide.

- Les patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sont recommandés pour une utilisation sur les adultes de 18 ans et plus, mais peuvent être utilisés par les adolescents de plus de 13 ans sous la supervision d'un parent ou d'un tuteur âgé de 18 ans et plus.

- Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 13 ans.

- Veuillez consulter votre médecin généraliste avant utilisation si vous êtes, ou pensez être, enceinte.

- Veuillez consulter votre médecin généraliste avant utilisation si vous avez, ou pensez avoir, un cancer.

- Nous recommandons fortement aux utilisateurs d'effectuer un test de sensibilité à la lumière avant leur première utilisation des patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.

## Table des matières

|  |    |
|--|----|
| 1. Qu'y a-t-il dans la boîte   | 8  |
| 2. Vue d'ensemble du produit   | 8  |
| 3. Avant de commencer  | 9  |
| - Préparez votre appareil  | 9  |
| - Tester votre peau  | 9  |
| 4. Découvrez le pouvoir révolutionnaire de la lumière pour transformer l'apparence de votre peau | 12 |
| 5. Aperçu  | 12 |
| 6. Comment utiliser le masque  | 12 |
| - Usage general  | 12 |
| - Nettoyage  | 14 |
| - Stockage   | 15 |
| 7. Avertissements  | 15 |
| 8. Dépannage   | 21 |
| 9. Disposition   | 22 |
| 10. Spécification  | 22 |
| 11. Garantie   | 23 |
| 12. Glossaire des symboles   | 25 |
| 13. Informations de contact  | 25 |


## Contenu de la boîte

- 2 patches de luminothérapie
- 1 câble USB avec contrôleur intégré
- 1 pochette de voyage
- 1 56 LUSTRESTRIPS® Mini Dots
- 1 Manuel d'instructions d'utilisation

## Vue d'ensemble du produit

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Port de chargement           | 4. Contrôleur<br>(bouton Marche/Arrêt) |
| 2. LED                          |  |
| 3. Tête de connexion magnétique | 5. port USB                            |

Selon la forme des patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS achetés :

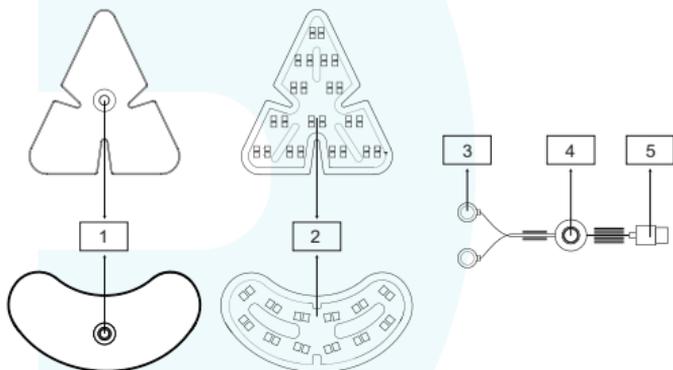

Veuillez contacter notre service clientèle à [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com) si l'un des composants mentionnés est manquant ou endommagé.

# Avant de commencer

## 1. Préparer votre appareil

Connectez le port de charge (1) d'un patch à la tête de connexion magnétique (3) du câble USB.

Insérez le côté USB-A du câble dans une alimentation USB ou dans une batterie portable. Le témoin d'alimentation sur le contrôleur s'allumera, indiquant qu'il est alimenté et prêt à l'emploi.

Remarque : Branchez toujours les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sur une alimentation USB 5V CC ou batterie appropriée avant utilisation. Les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS ne fonctionneront pas s'ils ne sont pas connectés à une alimentation.

## 2. Tester votre peau

Un petit nombre de personnes ont un type de peau plus sensible au niveau normal d'adhérence des LUSTRESTRIPS® Mini Dots et/ou de la lumière. La meilleure façon de vérifier si votre peau est plus sensible est d'effectuer un rapide test avant votre premier traitement.

1. Fixez 3 LUSTRESTRIPS® Mini Dots à un patch de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.

2. Fixez le patch de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sur l'avant-bras interne juste en dessous du coude. Allumez le patch pendant un cycle complet de 3 minutes.

3. Ne regardez pas directement vers la lumière car elle pourrait être nocive pour vos yeux. La prudence est conseillée.

4. Si vous ressentez de la chaleur, de l'inconfort ou des démangeaisons sur votre peau pendant la séance, arrêtez immédiatement !

5. Attendez que la séance soit complètement terminée. Il faudra 3 minutes pour réaliser une séance complète.

6. Le patch de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS s'éteindra automatiquement une fois la séance terminée. Retirez le patch en soulevant soigneusement d'un bord. L'utilisation recommandée est une fois par jour seulement par zone ciblée.

7. Vérifiez votre peau régulièrement jusqu'à 6 heures après l'application. Si votre peau semble rouge et/ou vous démange, les patches de lumineothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS ne vous conviennent pas.

8. Certains types de peau peuvent présenter un assombrissement temporaire qui s'estompe

généralement en 48 heures. Ces marques ne sont que temporaires et disparaîtront progressivement et naturellement.

9. En cas de sensibilité à la lumière, veuillez communiquer avec votre prestataire de santé.

## Découvrez le pouvoir révolutionnaire de la lumière pour transformer l'apparence de votre peau.

DEL signifie diodes électroluminescentes. Nous utilisons une sélection de deux lumières différentes, qui sont la combinaison parfaite pour obtenir une peau plus fraîche et révéler un éclat radieux.

Haricot : 24 DEL monocœur (12 lumières ROUGES + 12 BLEUES). Triangle : 24 DEL monocœur (12 lumières ROUGES + 12 BLEUES)

### Aperçu

|  |   |
|--|---|
| Durée de la séance   | 3 minutes   |
| DEL BLEUES & ROUGES<br>Pour une peau plus fraîche et un éclat visiblement rayonnant. | Peut être utilisé quotidiennement, une fois par jour par zone ciblée. |

## Comment utiliser l'appareil

### Utilisation générale

#### Étape 1


Assurez-vous que votre peau



est propre et sèche et que tout le maquillage est enlevé avant la séance.

## Étape 2

Retirez trois LUSTRESTRIPS® Mini Dots de la feuille de support transparente et appuyez-les fermement sur les positions recommandées sur le patch LUSTRE®.

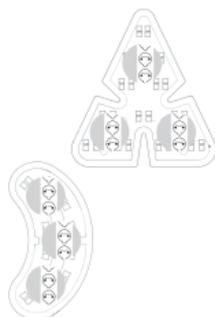

## Étape 3

Retirez la feuille de couverture de chaque LUSTRESTRIPS® Mini Dot à l'aide de la languette de levage affichant le symbole Visage. Ce côté du Mini Dot est conçu pour maintenir le patch en toute sécurité sur votre peau. Collez le patch à la zone ciblée de la peau en prenant soin d'éviter que la lumière n'atteigne l'œil. Appuyez fermement jusqu'à une fixation correcte.



## Étape 4

Connectez la tête de connexion magnétique à chaque patch et



3 min

à une alimentation USB 5V CC appropriée, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer la séance. Le contrôleur s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

## Étape 5

Pour retirer le patch, décollez-le lentement. Retirez les LUSTRESTRIPS® Mini Dots et remplacez-les par de nouveaux chaque fois que nécessaire. Une fois la séance terminée, appliquez vos sérums et crèmes habituels.



## Nettoyage

Il est important de prendre soin de votre appareil. Nettoyez les patches avec un chiffon humide après chaque utilisation. Les taches tenaces peuvent être éliminées en essuyant doucement la tache avec une solution d'alcool à 70 %. N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.

- **NE PAS** nettoyer les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS lorsqu'ils sont allumés.

- **NE PAS** nettoyer les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS pendant le chargement.

- **NE PAS** utiliser d'autres produits de nettoyage car ils pourraient endommager les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.

## Stockage

Conservez les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS dans la pochette ou l'emballage fournis. Assurez-vous que les patches ne sont pas pliés, étirés ou écrasés pendant le stockage ou en voyage.

## Avertissements

- Les types de peau Fitzpatrick V et VI peuvent utiliser les patches en toute sécurité, mais nous vous recommandons fortement d'évaluer soigneusement votre peau après chaque séance, il y a un risque accru de pigmentation sur ces types de peau.

### L'échelle de Fitzpatrick



- **NE PAS** diriger la lumière des DEL directement dans vos yeux ou dans les yeux de quelqu'un d'autre. Cela pourrait causer un inconfort visuel temporaire.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS en-dessous de 13 ans. Les adolescents de plus de 13 ans doivent utiliser les patches sous la supervision d'un parent/tuteur âgé de 18 ans et plus.

- **NE PAS** laisser les enfants de moins de 18 ans nettoyer, charger ou utiliser les patches sans la surveillance d'un adulte.

- **NE PAS** laisser les enfants jouer avec les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS. Tenir hors de portée des enfants.

- **NE PAS** effectuer d'entretien ou démonter le produit. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, veuillez contacter notre service clientèle à [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com).

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS en extérieur pour éviter d'endommager le produit.

- **NE PAS** plier ou tordre les patches. Manipuler avec soin.

- **NE PAS** vous asseoir, vous allonger ou marcher sur les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS. Cela brisera les patches.

- **NE PAS** utiliser de solvants ou de nettoyants abrasifs sur les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin

3XPRESS, sauf indication explicite dans ce manuel ou de l'équipe du service clientèle.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS s'ils ne fonctionnent pas correctement, ou s'ils sont tombés ou ont été endommagés. Pour toute question sur la garantie et les réparations, contactez l'équipe du service clientèle.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous prenez un médicament pouvant provoquer une photosensibilité. Si vous avez un doute sur votre traitement médical, contactez votre professionnel de santé.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous êtes enceinte, prévoyez de le devenir ou si vous allaitez.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous souffrez de lupus érythémateux, d'eczéma photosensible, d'albinisme ou d'autres affections cutanées. Si vous utilisez les patches pour traiter le lupus érythémateux, l'eczéma photosensible ou l'albinisme, vous pouvez provoquer une

réaction cutanée grave.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous souffrez d'un trouble photosensible (sensibilisation à la lumière).

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sur une infection bactérienne, car cela pourrait entraîner une aggravation des symptômes.

- **NE PAS** placer les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS directement sur une plaie ouverte.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous souffrez d'épilepsie.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS sur les zones présentant une phlébite, une thrombophlébite et des varices.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous souffrez de maux de tête induits par la lumière.

- **NE PAS** continuer à utiliser si vous ressentez de la chaleur ou si votre peau est inconfortablement chaude.

- **NE PAS** utiliser ou stocker les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS près de surfaces chaudes.

- **NE PAS** utiliser ou stocker les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS dans une chaleur ou un froid extrême.

- **NE PAS** utiliser les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS lorsqu'ils sont proches de l'eau ou peuvent entrer en contact avec elle.

- **NE PAS** placer les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS à la lumière directe du soleil.

- **NE PAS** utiliser les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous avez une réaction allergique connue au silicone. Les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS contiennent du silicone et des plastiques qui entrent en contact avec la peau pendant l'utilisation. En cas de suspicion d'allergie, contactez d'abord votre prestataire de soins avant d'utiliser les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS.

- **NE PAS** essayer de modifier les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS d'une quelconque manière. Modifier les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS annulera votre garantie. Les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS ne contiennent aucune pièce réparable.

- **NE PAS** utiliser les patchs de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS s'ils sont endommagés ou lorsque le

câble USB avec contrôleur intégré est endommagé.

- **NE PAS** utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS avec des accessoires non approuvés par le fabricant.

- Ce produit est un appareil de soin esthétique et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie.

Remarque : Les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS ne doivent être alimentés qu'avec une basse tension de 5 V CC. Si une partie du câble USB avec contrôleur intégré est endommagée, cessez de l'utiliser. Veuillez contacter notre service clientèle à [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com) pour organiser un remplacement.

Remarque : Consultez votre prestataire de soins avant d'utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, une sensibilité à la lumière, un anesthésique ou des zones désensibilisées.

Remarque : L'irritation de la peau, les ecchymoses, les brûlures de contact, les étourdissements, les nausées et les maux de tête sont de rares mais possibles effets secondaires. Arrêtez immédiatement d'utiliser les patches de luminothérapie LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS et contactez votre prestataire de soins.

Remarque : Nous vous suggérons fortement de faire preuve de prudence lorsque vous prenez des médicaments liés à la peau ou sur ordonnance. En cas de doute, consultez votre prestataire de soins.

## Dépannage

| Problème                                      | Cause  | Solution   |
|---|--|--|
| Les patchs ne s'allument pas.                 | Le câble USB avec contrôleur intégré n'est pas correctement inséré dans la prise de courant. | Insérez correctement le câble dans la prise de courant.  |
|   | Le câble USB avec contrôleur intégré n'est pas correctement inséré dans les patchs.          | Fixez correctement la tête de connexion magnétique au port de chargement des patchs.   |
|   | La prise de courant ne fonctionne pas.   | Essayez une autre prise de courant.  |
|   | Le bouton Marche/Arrêt n'a pas été enfoncé pendant 1 seconde complète.                       | Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour activer les patchs.<br><br>Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour éteindre les patchs pendant un traitement. |
| Les patchs s'éteignent de manière inattendue. | Il n'y a pas assez de puissance pour permettre aux patchs de s'allumer.                      | Connectez les patchs à une autre source d'alimentation.  |

## Élimination

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE ) (2012/19/UE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter l'augmentation des décharges. Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique, veuillez donc vous assurer qu'à la fin de sa vie, il soit éliminé correctement conformément aux exigences des autorités locales.

**NE PAS** jeter les patches avec les ordures ménagères.

## Spécification

|   |   |
|---|---|
| Longueurs d'onde des LED                        | 415 ± 10 nm (Bleu)<br>630 ± 10 nm (Rouge)   |
| Densité de puissance optique de sortie maximale | 30mW/cm <sup>2</sup> pour une peau d'apparence énergisée et plus fraîche et un éclat visiblement radieux            |
| LEDs  | Haricot : 24 LED à noyau unique (12 ROUGES + 12 BLEUES)<br>Triangle : 24 LED à noyau unique (12 ROUGES + 12 BLEUES) |
| Température de fonctionnement et de stockage    | 0°C to 40°C   32°F to 104°F   |

|   |   |
|---|---|
| Humidité de fonctionnement et de stockage | 30% -85%  |
| Source de courant                         | 5V  2A |
| Port de chargement                        | USB-C   |
| Câble de charge                           | USB-C to USB -A   |
| Longueur du câble de charge               | 1.2 mètre   |
| Temps de session                          | 3 minutes   |
| Dimensions de l'appareil                  | Haricot: 86 x 45 mm<br>Triangle: 72 x 65 mm   |
| Poids de l'appareil                       | Haricot: 10.2 gramme / pc<br>Triangle: 9.6 gramme / pc                                  |

## Garantie

Les patchs LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light Beauty Therapy sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat d'origine dans des conditions normales d'utilisation.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur au détail d'origine avec une preuve d'achat originale et uniquement lorsqu'il est acheté auprès d'un détaillant ou d'un revendeur agréé.

Cette garantie ne s'applique que si les patches LUSTRE® ClearSkin 3XPRESS Light Beauty Therapy sont utilisés en conjonction avec les mini points LUSTRESTRIPS® approuvés.

Si le produit devient défectueux pendant la période de garantie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par :

**- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération.**

**- Utilisation avec des accessoires non agréés ou utilisation autre que celle indiquée.**

**- Connexion à un courant et à une tension incorrects.**

Pour enregistrer votre produit et être tenu au courant des nouveaux développements passionnants de l'équipe LUSTRE®, veuillez prendre un moment pour vous inscrire sur notre site Web [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com).

Pour compléter votre inscription en ligne, vous devrez entrer votre numéro de lot LUSTRE® ClearSkin.

## Glossaire des symboles

| Symbole   | La description  |
|---|---|
| ! WARNING   | AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. |
| ! CAUTION   | PRÉCAUTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées. |
| CE  | Indique que le produit est certifié CE.   |
|  | Indique que le produit ne peut pas être jeté comme ordures ménagères.   |

## Informations de contact

### Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston  
Scotland, UK, EH54 7GA

T: +44 (0)1506 592 239

E: [info@lustreskin.com](mailto:info@lustreskin.com)

W: [www.lustreclearskin.com](http://www.lustreclearskin.com)

Lustre Skin Ltd est une entreprise certifiée  
ISO 13485:2016



International Associates Auditing & Certification Limited  
The Black Church, St Mary's Place,  
Dublin 7, D07 P4AX Ireland  
[EUAR@ie.ia-net.com](mailto:EUAR@ie.ia-net.com)

 **LUSTRE**  
CLEAR**SKIN**

DECEMBER.2022-900008.3