

 **LUSTRE**[®]
CLEARSKIN

REVIVE
MASK

使用說明

REVIVE

MASK

歡迎使用 **LUSTRE®ClearSkin REVIVE 10** 分鐘光學美容面罩。探索美容光學的革命性力量，藉助美容光學來改善您的膚質。

我們的革命性創新由科學家發明，希望透過科學的方式讓每個人可以變得更加美麗。我們志在透過創新、安全且經過驗證的技術挑戰傳統，創造新的護膚方式，讓每個人都能夠擁有羨煞旁人的好皮膚。

LUSTRE®ClearSkin REVIVE 10 分鐘光學美容面罩旨在快速起效，讓您的皮膚不再暗沉、缺乏活力。它能让您的皮膚恢復青春與活力並煥發光彩。

The LUSTRE®ClearSkin REVIVE 面罩有兩種設定，可讓您建立個人化的護膚療程。選取「藍色」設定可對抗暗沉皮膚，恢復皮膚活力。選取「紅色」設定可對抗乾枯的皮膚，讓皮膚煥發光彩。交替使用藍色和紅色療程以取得更好的結果。

您可以安坐家中，藉助成熟的護膚技術，輕鬆護理自己的皮膚。只需選擇您的計劃，戴上面罩，便可開啟您的皮膚護理之旅！只需 10 分鐘。

LUSTRE®ClearSkin REVIVE 10 分鐘光學美容面罩易於使用、輕巧且柔韌，使用起來超舒適且完美貼合。它整合了獨特的護目鏡，您可以安全地享受您的療程。

LUSTRE®ClearSkin REVIVE 10 分鐘 LED 燈光美容面罩的效果



LED
藍光



注入活力



煥發活力



LED
紅光



恢復青春

重要資訊

重要安全資訊

- 請勿在可能導致本裝置與水接觸的地方操作本裝置。
- 請勿使用損壞和/或有故障的電源適配器給本裝置供電或充電。
- 請勿用力彎曲或濫用纜線或 USB 充電線。
- 請勿折疊/彎曲或濫用 LUSTRE® ClearSkin REVIVE 10 分鐘光學美容面罩，這會損壞其中的 LED 燈珠。
- 請勿嘗試拆開本裝置。這將導致保固失效。
- 如果您認為面罩有缺陷，請立即停止使用。請透過 info@lustreskin.com 聯絡我們的客戶服務團隊

免責聲明

本產品為美容器具，不用於診斷、治療或預防任何疾病。LUSTRE® ClearSkin 對本產品治愈任何身體、皮膚或精神狀況的能力不作任何聲明、陳述或保證。對於任何需要醫療護理的狀況，應諮詢合格的醫療保健專業人員。

產品展示

LUSTRE® ClearSkin 不斷使用最新技術改進產品。因此，實際產品可能與包裝上的圖像和使用者指南中顯示的產品略有不同。

注意事項：

- 請勿直視面罩發出的燈光。這樣做可能會導致暫時的眼睛不適。請使用護目鏡遮住眼睛。
- 本裝置設計用於 13 歲或以上的青少年和成年人。13 至 18 歲的青少年應在 18 歲或以上的成年人的監督下使用本產品。13 歲以下的兒童不得使用本產品。
- 如果您懷孕或懷疑自己懷孕，請在使用前諮詢您的全科醫生。
- 如果您患有或懷疑自己患有癌症，請在使用前諮詢您的全科醫生。
- 請勿將本裝置放置在水或任何潮濕表面附近。
- 我們強烈建議使用者在首次使用本裝置之前進行光敏感測試。

目錄

1. 產品內容	7
2. 開始前	8
- 為產品充電	8
- 光敏感測試	8
- 準備好您的面罩	9
3. LUSTRE® ClearSkin REVIVE 10 分鐘光學美容面罩如何運作	10
4. 如何使用本裝置	11
- 一般使用	11
- 清潔	12
- 儲存	12
5. 警告	12
6. 疑難排解	17
7. 產品規格	18
8. 處置	19
9. 產品保養	19
10. 符號詞彙表	21
11. 保養限制和免責聲明	21
12. 聯絡資料	22

產品內容



如果上述任何元件遺失或損壞，請聯絡客戶支援。

產品概述



在您開始使用之前

1. 充電


若要為面罩充電，請將 USB-C 纜線插入面罩。將纜線的 USB-A 端插入 USB 電源。控制器上的電源指示燈將開始閃爍，表示正在充電。

注意：使用前務必拔掉電源，本裝置在充電時將無法運作。

2. 光敏感測試


1. 將本裝置放在前臂內側。開啟本裝置，並讓它運作完一個週期，即 10 分鐘。
2. 請勿直視本裝置發出的藍光，因為它可能對您的眼睛有害。使用時應當小心謹慎。
3. 如果您在使用過程中感覺皮膚發熱、不舒服或發癢，請立即停止使用！您可能對光敏感。
4. 等待療程結束。完成一個療程需要 10 分鐘。
5. 療程完成後裝置將自動關閉。取下裝置並等待至少 6 小時。在這六個小時內定時檢查您的皮膚，如果您的皮膚泛紅和/或發癢，則本裝置不適合您。如果發生光敏感，請聯絡您的醫療顧問或醫生。

3. 準備好您的面罩

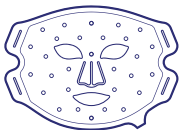


第1步

確認面罩內側朝向您。

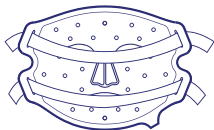


第2步

將兩條帶子穿過面罩的插槽。確認帶子的魔术貼一面朝向您。

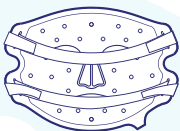

第3步

將魔术貼按壓到帶子上。確認帶子不要太緊。

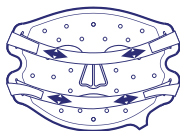

第4步

將面罩戴到臉上，然後透過調整魔鬼氈來收緊或鬆開帶子。

LUSTRE® ClearSkin REVIVE 面罩的運作方式

探索光的革命性力量，藉助光來改善您的膚質

光療

LED 表示發光二極管。我們選取了三種不同的燈光，三者的組合能夠讓您的皮膚恢復青春活力，煥發光彩。LUSTRE® ClearSkin REVIVE 面罩透過兩種不同設定，提供個人化的療程：

選擇「紅色」設定可對抗乾枯的皮膚，讓皮膚煥發光彩。

選擇「藍色」設定可對抗暗沉皮膚，恢復皮膚活力。

概覽

療程時間	10 分鐘
藍色 LED 設定 選取此設定可對抗暗沉皮膚，恢復皮膚活力。	每星期3次，持續8星期
紅色 LED 設定 選取此設定可對抗乾枯的皮膚，讓皮膚煥發光彩。	每星期3次，持續8星期
紅色 LED 和藍色 LED 療程交替進行 以更快取得更好的結果。	每星期3次，持續8星期

如何使用本裝置

一般使用

第1步

首先使用溫和的洗面乳清潔臉部。佩戴面罩並調整至舒適位置，然後按住控制器上的電源按鈕幾秒鐘，直到電源指示燈亮起。面罩現在處於待命模式。

第2步

您可以透過按幾次電源按鈕直到所需的設定出現，來選取所需的設定。

1. 紅色燈光設定

選取此設定可對抗乾枯的皮膚，讓皮膚煥發光彩。

2. 藍色燈光設定

選取此設定可對抗暗沉皮膚，恢復皮膚活力。

第3步

10 分鐘後，電源指示燈會閃爍兩次，然後面罩會自動關閉。療程結束後，取下面罩，您便可以塗抹您常用的精華液和護膚霜。

清潔

保養您的裝置很重要。請使用濕布等清潔本裝置。對於頑固污漬，使用 70% 的酒精溶液輕輕擦拭即可去除。

- 請勿在開啟時清潔本裝置。
- 請勿在充電時清潔本裝置。
- 請勿使用任何其他清潔產品，因為它們可能會損壞本裝置。

儲存

請將本裝置存放在隨附的小袋或包裝中。請確保本裝置在存放或攜帶過程中沒有被彎曲、拉伸或擠壓。

警告

- 皮膚類型為菲茨派屈克 V 和 VI 類型的人士可以安全地使用本面罩，但我們強烈建議這類人士在每次使用後仔細評估自己的皮膚，因為這些類型皮膚的色素沉著風險會增加。

The Fitzpatrick Scale



- 請勿將 LED 發出的光直接照射到您自己的眼睛或其他人的眼睛。

這可能會導致暫時失明。

- 13 歲以下兒童請勿使用本面罩。13 歲以上的青少年必須在 18 歲以上的父母/監護人的監督下使用本面罩。
- 請勿讓 18 歲以下的兒童在沒有成人監督的情況下清潔、充電或使用本面罩。
- 請勿讓兒童將本面罩當作玩具來玩。請將本產品放在兒童接觸不到的地方。
- 請勿維修或拆開本產品。如果出現故障或損壞，請聯絡客戶支援。
- 請勿在戶外使用本面罩，以免損壞產品。
- 請勿彎曲或扭曲本面罩。小心輕放本面罩。
- 請勿坐在、躺在或踩在本面罩上。以免壓壞。
- 請勿對本面罩使用溶劑或研磨性清潔劑，除非本手冊或客戶服務團隊提供明確說明。
- 如果本面罩不能正常運作、掉落或損壞，請勿使用。如需保固和維修，請聯絡客戶支援。
- 如果您正在服用任何可能導致光敏感的藥物，請勿使用本面罩。如果您不確定您使用的藥物是否可能導致光敏感，請聯絡您的醫療專業人員。

- 如果您懷孕、計劃懷孕或正在母乳哺育，請勿使用本面罩。
- 請勿以本手冊規定以外的任何其他方式使用面罩。
- 如果您患有紅斑狼瘡、光敏感性溼疹、白化病或其他皮膚病，請勿使用本面罩。如果您使用本面罩治療紅斑狼瘡、光敏感性溼疹或白化病，可能會導致嚴重的皮膚反應。
- 如果您患有任何光敏感性疾病 (對光敏感)，請勿使用本面罩。
- 請勿在細菌感染處使用本面罩，因為這可能會導致症狀惡化。
- 請勿用本面罩直接照射開放性傷口。
- 如果您患有癲癇症，請勿使用本面罩。
- 請勿在存在靜脈炎、血栓性靜脈炎和靜脈曲張的部位使用本面罩。
- 如果您患有光引起的頭痛，請勿使用本面罩。
- 請勿以本手冊規定以外的任何其他方式使用面罩。
- 如果感覺本面罩發燙或您的皮膚感覺溫度過高，請勿繼續使用。
- 請勿在熱表面附近使用或存放本面罩。
- 當本面罩靠近或可能接觸到水時，請勿充電。
- 請勿將本面罩存放在極熱或極冷的環境中。

- 請勿將本面罩置於陽光直射處。
- 如果您對矽膠有過敏反應，請勿使用本面罩。本面罩含有矽膠和塑料，在使用過程中會與您的皮膚接觸。如果您對過敏有疑問，請在使用本面罩前先聯絡您的醫療保健提供者。
- 如果您對聚酯、尼龍和萊卡® 纖維有過敏反應，請勿使用本面罩的頭帶。頭帶包含聚酯、尼龍和萊卡® 纖維的混合物，在使用過程中會與您的皮膚接觸。如果您對過敏有疑問，請在使用本面罩前先聯絡您的醫療保健提供者。
- 請勿嘗試以任何方式修改本面罩。修改本面罩將導致您的保固失效。本面罩不含可維修部件。
- 如果本面罩或充電線損壞，請勿使用。
- 請勿將面罩與未經製造商核准的配件一起使用。
- 本產品為美容器具，不用於診斷、治療或預防任何疾病。

注意：本面罩只能使用 5V 直流低壓電源供電。本面罩上也標有這一電壓值。如果主適配器或電源線的任何部分損壞，請停止使用，並聯絡 Lustre 客戶支援以安排更換。

注意：如果您有發燒、急性炎症、嚴重的循環系統疾病、光敏感、麻醉或脫敏部位，請在使用本面罩之前諮詢您的醫療保健提供者。

注意：我們強烈建議您在服用任何藥物時格外小心。如有疑問，請諮詢您的醫療保健提供者。


注意：副作用很少見，但仍可能發生，包括皮膚刺激、瘀傷、接觸性燒傷、頭暈、噁心和頭痛。如果出現以上狀況，請立即停止使用本面罩，並聯絡您的醫療保健提供者。

注意：我們強烈建議您在服用任何與皮膚有關的藥物或處方藥時格外小心。如有疑問，請諮詢您的醫療保健提供者。

疑難排解


問題	原因	解決方案
面罩沒有開啟。	充電線未正確插入電源插座。	將充電線正確插入電源插座。
	充電線未正確插入裝置。	將充電線正確插入裝置。
	電源插座沒有運作。	嘗試使用不同的電源插座。
	開/關按鈕未按住一整秒。	按住開/關按鈕 1 秒。
裝置意外關閉。	電池電量過低。	給裝置充電。

規格

LED波長	465nm (藍色), 640nm (紅色)
最大輸出光功率密度	30MW/CM2
LEDs	66 雙核紅色+ 藍色LED
操作和儲存溫度	0°C to 40°C 32°F to 104°F
操作和儲存濕度	30% – 95%
電源供應	5V  2A
充電埠	USB-C
充電線	USB-C to USB-A
充電線長度	1 米 / 3.28 呎
電配接器電源輸出	2A
電池	2600 mAh
電池類別	鋰離子
充電時間	3 – 5 小時
療程時間	10 分鐘

設備尺寸	195 x 290 x 5毫米
設備重量	330 ± 30 克

產品棄置

我們已實作歐盟廢電機電子設備 (WEEE ) 指令 (2012/19/EU)，以使用最佳的回收和再循環技術回收產品，以盡量減少對環境的影響，並處理任何有害物質，以及避免增加垃圾掩埋場。該產品被歸類為電機或電子設備，因此在本產品使用壽命結束時，請確保按照當地政府的要求正確處置。

請勿將本裝置與生活垃圾一起處理。




產品保養

我們保證本面罩在正常使用情況下自原始購買日期起 72 個月內無材料和工藝缺陷。此保養僅適用於擁有原始購買憑證的原始零售購買者，並且僅適用於從授權零售商或經銷商處購買的產品。此保養僅在本面罩與授權的 LUSTRE® ClearSkin 配件一起使用時才生效。如果本產品在保固期內出現缺陷，請聯絡您購買面罩的零售商。此保養不適用於由以下原因造成的產品損壞：

- 意外、誤用、濫用或變更。
- 與未經授權的配件一起使用或以說明以外的方式使用。
- 連接至具有錯誤電流和電壓的電源。

若要註冊您的產品並及時了解 LUSTRE® 的新資訊, 請在我們的網站 www.lustreclearskin.com 上註冊。若要完成線上註冊, 您需要輸入您的 LUSTRE® ClearSkin 產品的批次號碼。

符號詞彙表

符號	描述
! WARNING	「警告」表示如果不避免, 則可能導致死亡或嚴重傷害的危險狀況。
! CAUTION	「注意事項」表示如果不避免, 則可能導致輕微或中度受傷的危險狀況。
	表示產品已通過 CE 認證。
	表示產品不得作為家庭垃圾丟棄。
	該符號表示歐洲授權代表。

保養限制和免責聲明

此保證賦予您特定的法律權利, 並且是對您所擁有的法定權利的補充。您就違反此有限保養所能取得的協助僅限於按照此保固聲明中的規定, 維修和更換您的裝置。

在適用法律允許的最大範圍內, LUSTER SKIN LTD 否認所有默示保證。如果適用法律不允許對默示保證做出免責聲明, 則默示保證的期限在此明確限於上述明示有限保證的期限。

在任何情況下, LUSTER SKIN LTD 均不負責因違反保證、違約、侵權 (包括疏忽或嚴格的產品責任) 或其他原因造成的任何特殊、附帶、衍生性、懲罰性或間接損害, 即使 LUSTER SKIN LTD 已被告知或意識到可能會出現此類損害。此類損害包括但不限於: LUSTER

SKIN LTD 替換設備所需成本帶來的損失、第三方的索賠或財產損失。

如果適用法律不允許限制保證或某些交易中的違約救濟措施，則本段落中的限制和免責聲明或保證例外可能不適用。此限制不適用於因本裝置缺陷或法律不能排除或限制的任何其他責任而導致的死亡或人身傷害索賠。

這些保固條款、條件和限制在 LUSTER SKIN LTD 和您 (購買者) 之間分配產品故障風險。這種分配得到雙方的認可，並反映在價格中。使用 LUSTRE® ClearSkin REVIVE, 即表示您承認您已閱讀、理解並會遵守這些條款、條件和限制。

聯絡資料

Lustre Skin Ltd

Alba Innovation Centre, Alba Campus, Livingston
Scotland, UK, EH54 7GA

T: +(44)1506 592239

E: info@lustreskin.com

W: www.lustreclearskin.com

Lustre Skin Ltd 為一家通過 ISO 13485:2016 認證的公司



International Associates Auditing & Certification Limited
The Black Church, St Mary's Place,
Dublin 7, D07 P4AX Ireland
EUAR@ie.ia-net.com

 **LUSTRE**[®]
CLEAR**SKIN**

NOVEMBER.2022-900015.2