


L'Omnilux Contour Face est un appareil mains libres et totalement portable, ce qui signifie que vous pouvez lire un livre, cuisiner, nettoyer ou regarder la télévision au lieu d'être près d'une prise de courant.

Étape 1

Avant d'utiliser votre masque, chargez le régulateur à l'aide du câble et de la fiche fournis. Le régulateur doit être rechargé


seul, (sans être attaché au masque) par le câble et la fiche qui se connectent à la prise murale. Veuillez ne pas charger votre régulateur avec le masque encore branché, car cela pourrait endommager la batterie.

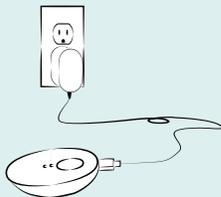

Étape 2

Une fois la charge complète (les 3 témoins de charge s'allument), détachez le régulateur du câble de charge.

REMARQUE : Veuillez ne pas charger le régulateur avec le masque encore connecté. L'Omnilux Contour Face ne fonctionnera pas s'il est branché au régulateur pendant qu'il est en charge, ce qui peut endommager le dispositif et la batterie au fil du temps.

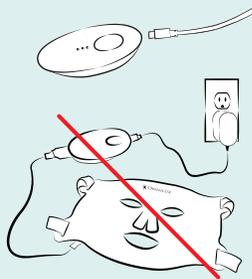

Étape 3

Connectez le masque à l'autre extrémité du régulateur. Pour rappel, l'Omnilux Contour Face fonctionne avec le régulateur fourni, ce qui le rend totalement portable.



Étape 4

Le masque est conçu pour être positionné confortablement sur votre visage. Il doit être bien fixé mais pas trop serré.



Étape 5

Activez le régulateur en appuyant sur le bouton pendant une seconde. Chaque séance dure 10 minutes et votre dispositif s'éteint automatiquement lorsque le traitement est terminé. Nous vous recommandons de l'utiliser pendant 4 à 6 semaines et de continuer à l'entretenir par la suite pour une peau d'apparence naturelle et radieuse !



Étape 6

Rangez votre dispositif à plat si possible et nettoyez la surface de traitement si nécessaire avec un chiffon humide ou une lingette à base d'eau non irritante. Pour un nettoyage en profondeur, essuyez doucement avec de l'alcool à 70 %.



Avez-vous des questions ? Scannez le code QR sur votre smartphone ou visitez le site omniluxled.com/apps/help-center pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de tirer le meilleur parti de votre Omnilux Contour Face.

