


Das Omnilux Contour Glove ist freihändig und komplett tragbar, sodass Sie ein Buch lesen, kochen, putzen oder fernsehen können, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein.


### Schritt 1

Bevor Sie Ihren Glove benutzen, laden Sie den eingebauten Akku/Controller auf. Der Controller muss vor der Behandlung mit dem mitgelieferten Kabel und dem eingebauten Controller aufgeladen werden.

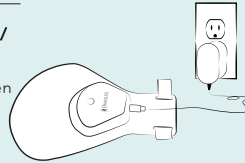


### Schritt 2

Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist (alle 3 Ladelampen leuchten), trennen Sie den eingebauten Controller vom Ladekabel.

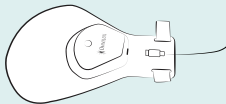


**HINWEIS:** Bitte laden Sie den eingebauten Controller nicht auf, wenn der Glove eingeschaltet ist, da dies zu einer Beschädigung des Akkus führen kann.

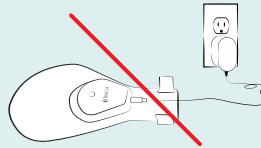

### Schritt 3

Das Omnilux Contour Glove wird über den eingebauten Controller betrieben und ist somit völlig mobil.

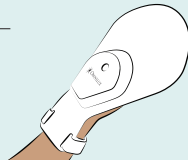

### Schritt 4

Das Gerät ist so konzipiert, dass es bequem auf der Hand sitzt. Sie sollte sich sicher, aber nicht zu fest anfühlen.




### Schritt 5

Aktivieren Sie den Controller, indem Sie die Taste eine Sekunde lang gedrückt halten. Jede Sitzung dauert 10 Minuten, und das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Behandlung beendet ist. Wir empfehlen die Anwendung für 4–6 Wochen und danach eine kontinuierliche Pflege für eine natürlich aussehende, strahlende Haut.



### Schritt 6

Lagern Sie Ihr Gerät möglichst flach und reinigen Sie die Behandlungsoberfläche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch oder einem nicht reizenden Reinigungstuch auf Wasserbasis. Für eine gründlichere Reinigung wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit 70% igem Alkohol ab.

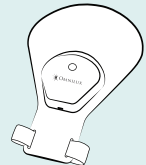

Haben Sie Fragen? Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie [omniluxled.com/apps/help-center](https://omniluxled.com/apps/help-center), um eine detaillierte Anleitung zu erhalten, wie Sie Ihr Omnilux Contour Glove optimal nutzen können.

