


El Omnilux Contour Glove es manos libres y completamente portátil, lo que significa que puede leer un libro, cocinar, limpiar o ver la televisión sin necesidad de estar atada a un enchufe.


Paso 1

Antes de utilizar su Glove, cargue la batería/controlador de la unidad. El controlador debe cargarse antes del tratamiento utilizando el cable y el controlador de la unidad suministrados con el dispositivo.

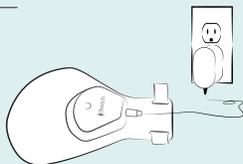


Paso 2

Una vez que esté completamente cargado (las 3 luces de carga se iluminarán), separe el controlador de la unidad del cable de carga.

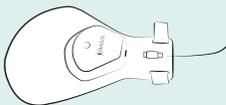

NOTA: No cargue el controlador de la unidad con el Glove encendido, ya que podría dañar la batería.

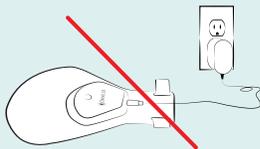

Paso 3

El Omnilux Contour Glove no funcionará si se conecta al controlador mientras se está cargando y esto puede causar daños en el dispositivo y la batería con el tiempo.



Paso 4

El dispositivo está diseñado para adaptarse cómodamente a la cara. Debe sentirse segura pero no demasiado apretada.



Paso 5

Active el controlador pulsando el botón durante un segundo. Cada sesión es de 10 minutos y su dispositivo se apagará automáticamente cuando el tratamiento haya finalizado. Recomendamos su uso durante 4-6 semanas y un mantenimiento continuado a partir de entonces para conseguir una piel natural y radiante.



Paso 6

Guarde su dispositivo en posición horizontal si es posible y limpie la superficie de tratamiento según sea necesario con un paño húmedo o una toallita de base acuosa no irritante. Para una limpieza más profunda, limpie suavemente con alcohol al 70 %.



¿Alguna pregunta? Escanee el código QR en su smartphone o visite omniluxled.com/apps/help-center para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo sacar el máximo partido a su Omnilux Contour Glove.

