


L'Omnilux Contour Glove est un appareil mains libres et totalement portable, ce qui signifie que vous pouvez lire un livre, cuisiner, nettoyer ou regarder la télévision au lieu d'être près d'une prise de courant.


Étape 1

Avant d'utiliser votre Glove, chargez la batterie/le régulateur du dispositif. Le régulateur doit être chargé avant le traitement à l'aide du câble et du régulateur intégré fournis avec le dispositif.

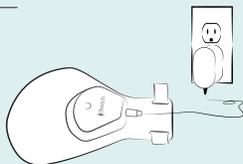


Étape 2

Une fois la charge complète (les 3 témoins de charge s'allument), détachez le régulateur intégré du câble de charge.

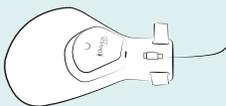

REMARQUE : Veuillez ne pas charger le régulateur intégré lorsque le Glove est allumé, car cela pourrait endommager la batterie.

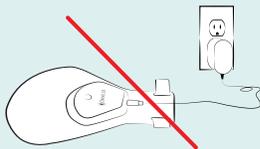

Étape 3

Pour rappel, l'Omnilux Contour Glove fonctionne avec le régulateur fourni, ce qui le rend totalement portable.



Étape 4

Le dispositif est conçu pour être positionné confortablement sur votre main. Il doit être bien fixé mais pas trop serré.



Étape 5

Activez le régulateur en appuyant sur le bouton pendant une seconde. Chaque séance dure 10 minutes et votre dispositif s'éteint automatiquement lorsque le traitement est terminé. Nous vous recommandons de l'utiliser pendant 4 à 6 semaines et de continuer à l'entretenir par la suite pour une peau d'apparence naturelle et radieuse !



Étape 6

Rangez votre dispositif à plat si possible et nettoyez la surface de traitement si nécessaire avec un chiffon humide ou une lingette à base d'eau non irritante. Pour un nettoyage en profondeur, essuyez doucement avec de l'alcool à 70 %.



Avez-vous des questions ? Scannez le code QR sur votre smartphone ou visitez le site omniluxled.com/apps/help-center pour obtenir des instructions plus détaillées sur la façon de tirer le meilleur parti de votre Omnilux Contour Glove.

