


De Omnilux Contour Glove heeft een handsfree en mobiel ontwerp, waardoor u eenvoudig een boek kunt lezen, kunt koken, schoonmaken of tv kijken zonder aan een stopcontact gebonden te zijn.


Stap 1

Laad de ingebouwde batterij/controller op voordat u uw Glove gebruikt. De controller moet vóór de behandeling worden opgeladen met behulp van de kabel en de ingebouwde controller die zijn meegeleverd bij het hulpmiddel.

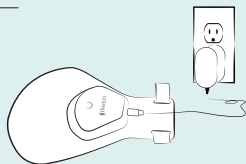


Stap 2

Zodra de controller volledig is opgeladen (alle 3 oplaadlampjes branden), maak de ingebouwde controller los van de laadkabel.

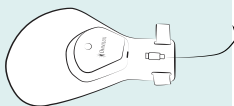


OPMERKING: Laad de ingebouwde controller niet op terwijl de Glove is ingeschakeld, aangezien dit schade aan de batterij kan veroorzaken.

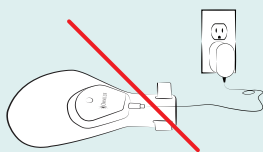

Stap 3

Nogmaals, de Omnilux Contour Glove wordt bediend met de ingebouwde controller, waardoor het apparaat volledig mobiel is.

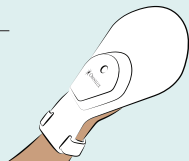

Stap 4

Het hulpmiddel is zodanig ontworpen dat het comfortabel om uw hand past. Het moet stevig aanvoelen, maar niet te strak.



Stap 5

Activeer de controller door de knop gedurende één seconde ingedrukt te houden. Elke sessie duurt 10 minuten en het hulpmiddel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de behandeling is voltooid. Wij adviseren het hulpmiddel 4-6 weken te gebruiken en daarna af en toe voor onderhoud voor een natuurlijke, stralend uitziende huid!



Stap 6

Bewaar uw hulpmiddel indien mogelijk plat en reinig het behandelende oppervlak indien nodig met een vochtige doek of een niet-irriterend doekje op waterbasis. Voor een grondigere reiniging kunt u het oppervlak voorzichtig afvegen met 70% alcohol.



Nog vragen? Scan de QR-code op uw smartphone of ga naar omniluxled.com/apps/help-center voor gedetailleerde instructies over hoe u het meeste uit uw Omnilux Contour Glove kunt halen.

