


Omnilux Contour Glove är handsfree och helt bärbar – du kan läsa en bok, laga mat, städa eller titta på TV i stället för att vara bunden till ett eluttag.


### Steg 1

Innan du använder Glove ska du ladda batteriet/  
handkontrollen i enheten. Handkontrollen måste laddas före  
behandling via den kabel och handkontroll som medföljer  
enheten.

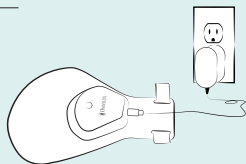


### Steg 2

När handkontrollen är fulladdad (alla tre laddningslamporna  
lyser), koppla bort handkontrollen från laddningskabeln.

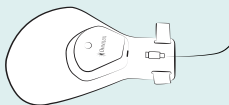


**OBS!** Ladda inte handkontrollen när Glove är påslagen. Annars  
kan batteriet skadas.

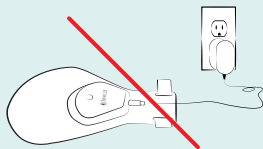

### Steg 3

För att upprepa drivs Omnilux Contour Glove av den medföljande  
handkontrollen, vilket gör den helt bärbar.

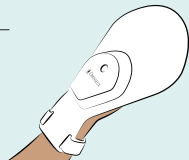

### Steg 4

Enheten är utformad för att passa bekvämt på  
handen. Det ska kännas som att den sitter  
ordentligt men inte för tätt.



### Steg 5

Aktivera handkontrollen genom att trycka ned knappen  
i en sekund. Varje session tar 10 minuter. Enheten  
stängs av automatiskt när behandlingen är klar. Vi  
rekommenderar att du använder den i 4–6 veckor och  
därefter fortsätter då och då för att få en naturlig och  
strålende hud!



### Steg 6

Förvara enheten platt om möjligt och rengör  
behandlingsytan efter behov med en fuktig trasa eller  
en icke-irriterande vattenbaserad torkduk. För djupare  
rengöring torkar du försiktigt med 70 % alkohol.



Har du frågor? Skanna QR-koden på din smartphone eller  
besök [omniluxled.com/apps/help-center](https://omniluxled.com/apps/help-center) för mer  
detaljerade instruktioner om hur du får ut det mesta möjliga  
av din Omnilux Contour Glove.

