


El Omnilux Men es manos libres y completamente portátil, lo que significa que puede leer un libro, cocinar, limpiar o ver la televisión sin necesidad de estar atada a un enchufe.


PASO 1

Antes de utilizar la máscara, cargue el controlador con el cable y el enchufe suministrados. El controlador debe cargarse de forma independiente, (no unido a la máscara) mediante el cable y el enchufe que se conecta a la toma de corriente. No cargue su controlador con la máscara todavía enchufada, ya que esto puede causar daños a la batería.

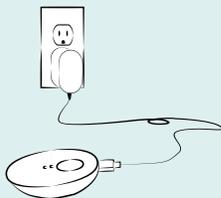

PASO 2

Una vez que esté completamente cargado (las 3 luces de carga se iluminarán), desconecte el controlador del cable de carga.

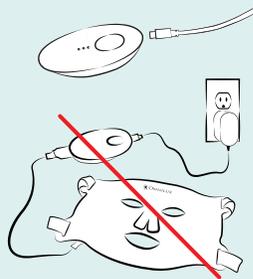

NOTA: No cargue el controlador con la máscara aún conectada. El Omnilux Men no funcionará si se conecta al controlador mientras se está cargando y esto puede causar daños en el dispositivo y la batería con el tiempo.

PASO 3

Una vez que esté completamente cargado (las 3 luces de carga se iluminarán), desconecte el controlador del cable de carga.



PASO 4

La máscara está diseñada para adaptarse cómodamente a la cara. Debe sentirse segura pero no demasiado apretada.



PASO 5

Active el controlador pulsando el botón durante un segundo. Cada sesión es de 10 minutos y su dispositivo se apagará automáticamente cuando el tratamiento haya finalizado. Recomendamos su uso de 3 a 5 días a la semana durante 4 a 6 semanas y, a partir de entonces, un mantenimiento continuado para conseguir una piel más saludable.



PASO 6

Guarde su dispositivo en posición horizontal si es posible y limpie la superficie de tratamiento según sea necesario con un paño húmedo o una toallita de base acuosa no irritante. Para una limpieza más profunda, limpie suavemente con alcohol al 70 %.



¿Alguna pregunta? Escanee el código QR en su smartphone o visite omniluxled.com/apps/help-center para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo sacar el máximo partido a su Omnilux Men.



omniluxled.com