


El Omnilux Contour Neck & Décolleté es manos libres y completamente portátil, lo que significa que puede leer un libro, cocinar, limpiar o ver la televisión sin necesidad de estar atada a un enchufe.


## Paso 1

Antes de utilizar el dispositivo, cargue el controlador con el cable y el enchufe suministrados. El controlador debe cargarse de forma independiente, (no unido al dispositivo) mediante el cable y el enchufe que se conecta a la toma de corriente. No cargue su controlador con el dispositivo todavía enchufada, ya que esto puede causar daños a la batería.

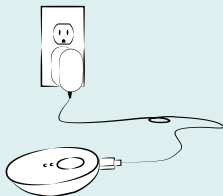


## Paso 2

Una vez que esté completamente cargado (las 3 luces de carga se iluminarán), desconecte el controlador del cable de carga.

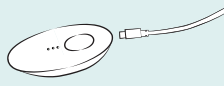

**NOTA:** No cargue el controlador con el dispositivo aún conectada. El Omnilux Contour Neck & Décolleté no funcionará si se conecta al controlador mientras se está cargando y esto puede causar daños en el dispositivo y la batería con el tiempo.

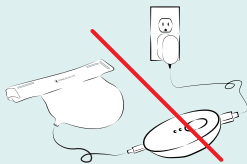

## Paso 3

Conecte el dispositivo al otro extremo del controlador. Como recordatorio: el Omnilux Contour Neck & Décolleté se maneja con el controlador suministrado, lo que lo hace completamente portátil.



## Paso 4

El dispositivo está diseñado para adaptarse cómodamente al cuello y el pecho. Debe sentirse segura pero no demasiado apretada.



## Paso 5

Active el controlador pulsando el botón durante un segundo. Cada sesión es de 10 minutos y su dispositivo se apagará automáticamente cuando el tratamiento haya finalizado. Recomendamos su uso durante 4-6 semanas y un mantenimiento continuado a partir de entonces para conseguir una piel natural y radiante.



## Paso 6

Guarde su dispositivo en posición horizontal si es posible y limpie la superficie de tratamiento según sea necesario con un paño húmedo o una toallita de base acuosa no irritante. Para una limpieza más profunda, limpie suavemente con alcohol al 70 %.



¿Alguna pregunta? Escanee el código QR en su smartphone o visite [omniluxled.com/apps/help-center](https://omniluxled.com/apps/help-center) para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo sacar el máximo partido a su Omnilux Contour Neck & Décolleté

