


De Omnilux Contour Neck & Décolleté heeft een handsfree en mobiel ontwerp, waardoor u eenvoudig een boek kunt lezen, kunt koken, schoonmaken of tv kijken zonder aan een stopcontact gebonden te zijn.


Stap 1

Laad de controller op met de meegeleverde kabel en stekker voordat u het apparaat gebruikt. De controller moet apart worden opgeladen (niet aan het masker bevestigd) via de kabel en de stekker die op het stopcontact wordt aangesloten. Laad uw controller niet op terwijl het masker nog aangesloten is, want dit kan schade aan de batterij veroorzaken.

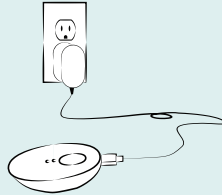


Stap 2

Zodra de controller volledig is opgeladen (alle 3 oplaadlampjes branden), maakt u deze los van de laadkabel.

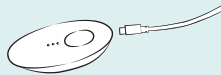

OPMERKING: Laad de controller niet op terwijl het apparaat nog is aangesloten. De Omnilux Contour Neck & Décolleté werkt niet als deze tijdens het opladen op de controller is aangesloten en dit kan na verloop van tijd schade aan het apparaat en de batterij veroorzaken.

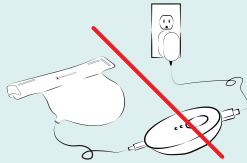

Stap 3

Sluit het apparaat aan op het andere uiteinde van de controller. Nogmaals, de Omnilux Contour Neck & Décolleté wordt bediend met de bijgeleverde controller, waardoor het apparaat volledig mobiel is.




Stap 4

Het hulpmiddel is zodanig ontworpen dat het comfortabel om uw nek en op uw borst zit. Het moet stevig aanvoelen, maar niet te strak.




Stap 5

Activeer de controller door de knop gedurende één seconde ingedrukt te houden. Elke sessie duurt 10 minuten en het hulpmiddel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de behandeling is voltooid. Wij adviseren het hulpmiddel 4-6 weken te gebruiken en daarna af en toe voor onderhoud voor een natuurlijke, stralend uitziende huid!

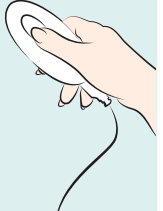

Stap 6

Bewaar uw hulpmiddel indien mogelijk plat en reinig het behandelende oppervlak indien nodig met een vochtige doek of een niet-irriterend doekje op waterbasis. Voor een grondigere reiniging kunt u het oppervlak voorzichtig afvegen met 70% alcohol.

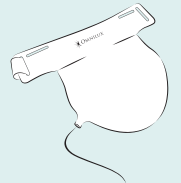

Nog vragen? Scan de QR-code op uw smartphone of ga naar omniluxled.com/apps/help-center voor gedetailleerde instructies over hoe u het meeste uit uw Omnilux Contour Neck & Décolleté kunt halen.

