



# ESSENTIALS MINI



## GEBRUIKERS HANDLEIDING



SOS  
Help Button



GPS  
Plaatsbepaling



Binnen/Buiten  
Connectiviteit



2-Richtingen  
Communicatie

# Zembro Essentials Mini

**Zembro Essentials Mini is een SOS-knop voor alarmmelding.**

## **KENMERKEN**

- Alarmmelding binnen/buiten met een druk op de knop
- Belknop met ingebouwde microfoon en luidspreker
- Duidelijke stemkwaliteit
- Altijd geconnecteerd dankzij de ingebouwde Simkaart

Uw Zembro Essentials Mini is een draagbare SOS-knop, een ergonomisch en oplaadbaar apparaat met een knop en met een ingebouwde Simkaart, zodat het zowel binnen als buiten verbonden blijft met Zembro.

U kunt het dragen als een hanger met een sleutelkoord of het gewoon in uw zak stoppen. Wij raden aan om het altijd bij de hand te houden.

# Leer uw apparaat kennen

## VOORKANT

Opening voor  
het sleutelkoord

LED-verlichting

Microfoon

SOS-knop



# Leer uw apparaat kennen

## ZIJKANT

### Belknop

*(Knop om het volume te verhogen)*



### Knop stille modus

*(Knop om het volume te verlagen)*




# Leer uw apparaat kennen

## ACHTERKANT



# Leer uw apparaat kennen

## LAADSTATION

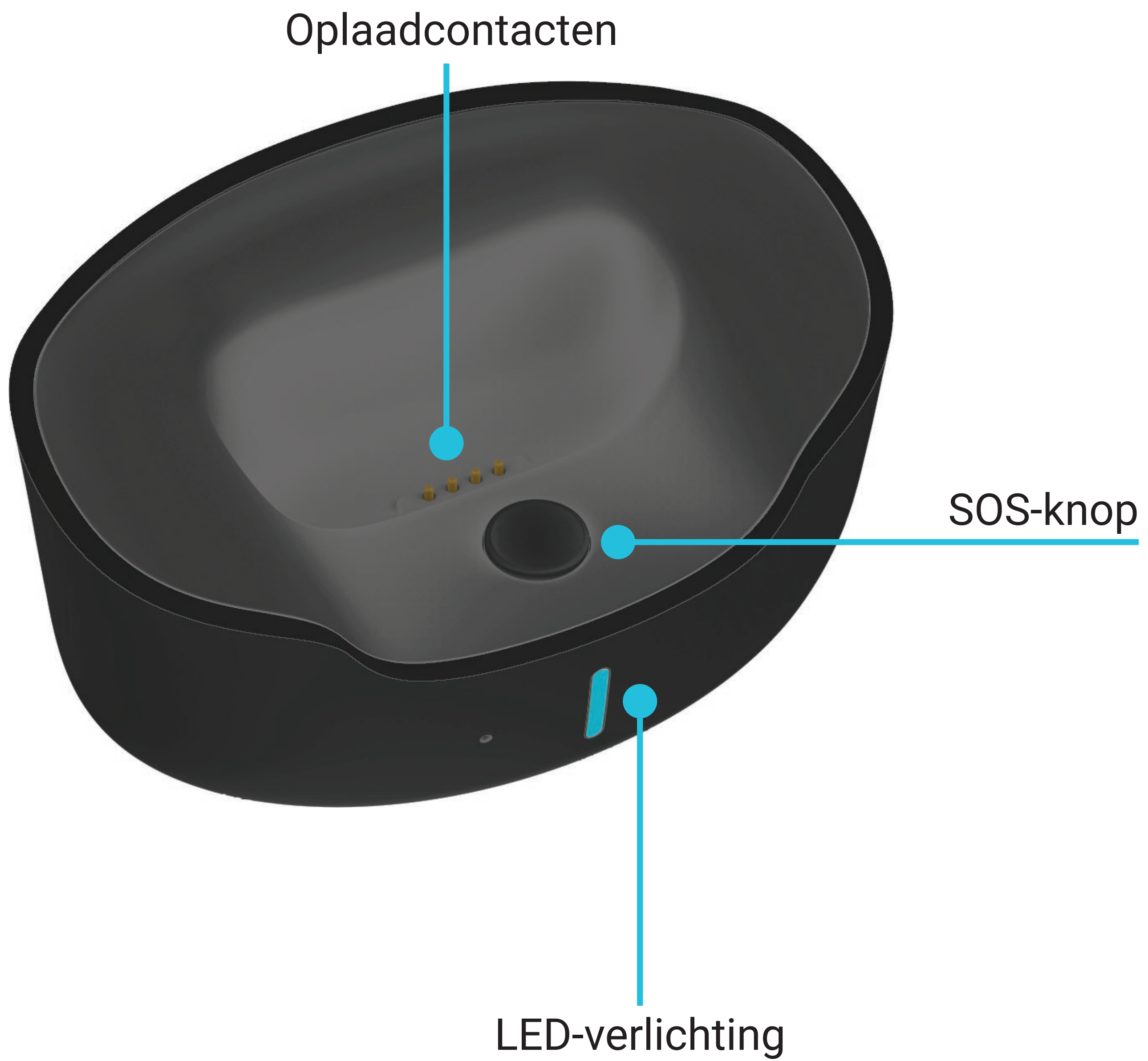

# Uw apparaat opladen




- Plaats het apparaat op het laadstation.
- Sluit de USB-kabel van het laadstation aan op de AC-adapter.
- Het lampje van het laadstation licht op tijdens het laden en brandt continu wanneer uw apparaat volledig opgeladen is.
- De batterijduur varieert afhankelijk van gebruik en configuratie van de Essentials Mini, actuele resultaten zullen variëren.

**TIP** Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u de batterij best volledig opladen gedurende 2-3 uur.

In toevoeging tot het dagelijks laden, raden we ook ten zeerste aan om het toestel na gebruik van de SOS functie op te laden.

**TIP** Zakt het batterijniveau tot onder 20%, krijgen de ontvangers op de contactenlijst een waarschuwing via een tekstbericht of via de app.

# Batterijstatus

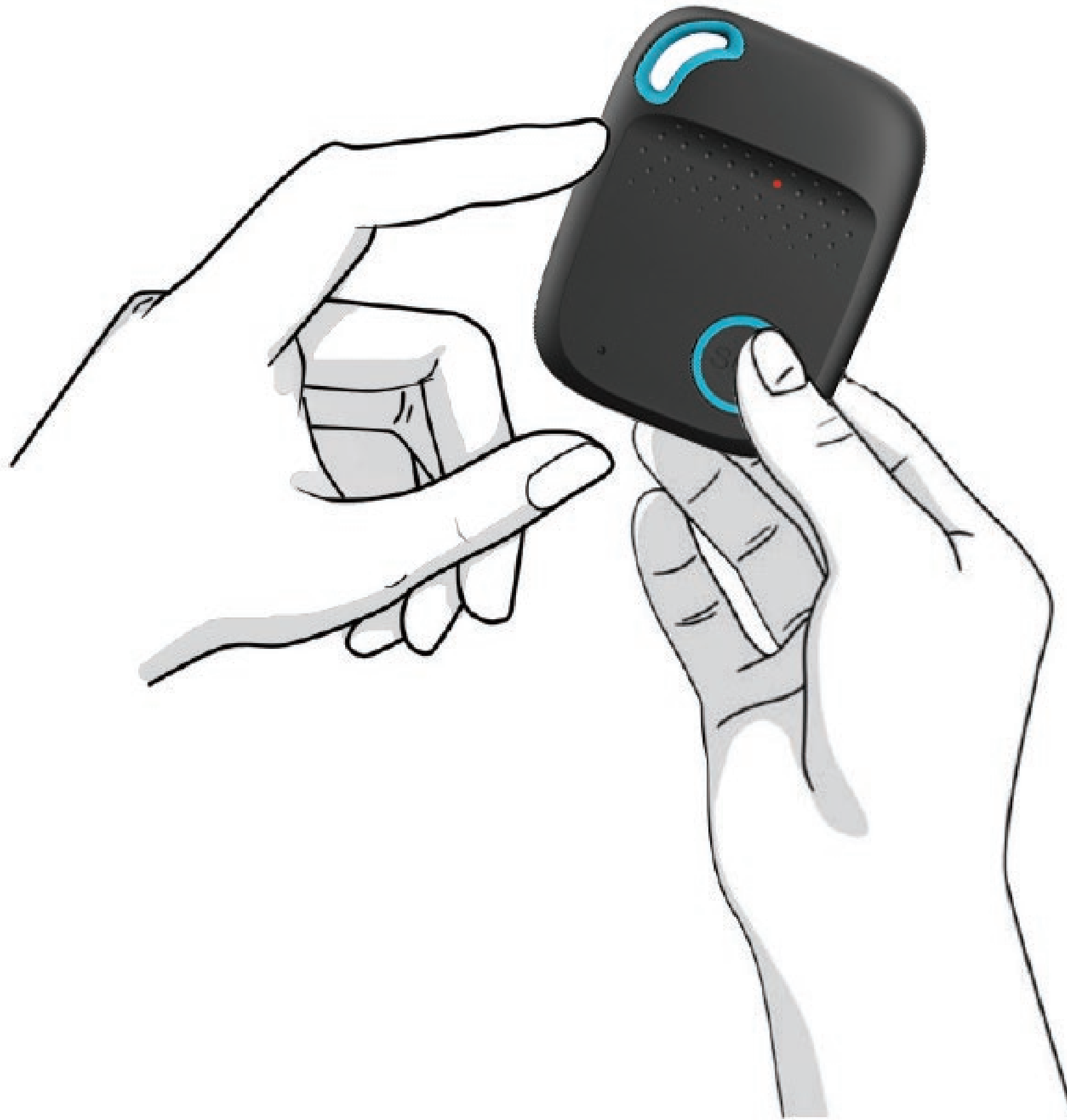

Wanneer u snel op de SOS knop drukt, verkrijgt u niet enkel de tijd, maar ook de batterijstatus via het rode LED-licht.

## **Het rode LED-licht zal x aantal keer knipperen:**

1 keer knipperen = 20% of minder

2 keer knipperen = 40% - 20%

3 keer knipperen = 60% - 40%

4 keer knipperen = 80% - 60%



5 keer knipperen = 100% - 80%



# Het apparaat aan- en uitschakelen

## OM HET APPARAAT TE ACTIVEREN:

- Druk gedurende 1 seconde op de BEL-knop en alle LED-lampjes gaan snel knipperen.
- Het apparaat kan ook automatisch ingeschakeld worden door het op te laden via de magnetische kabel of door het op het laadstation te plaatsen.

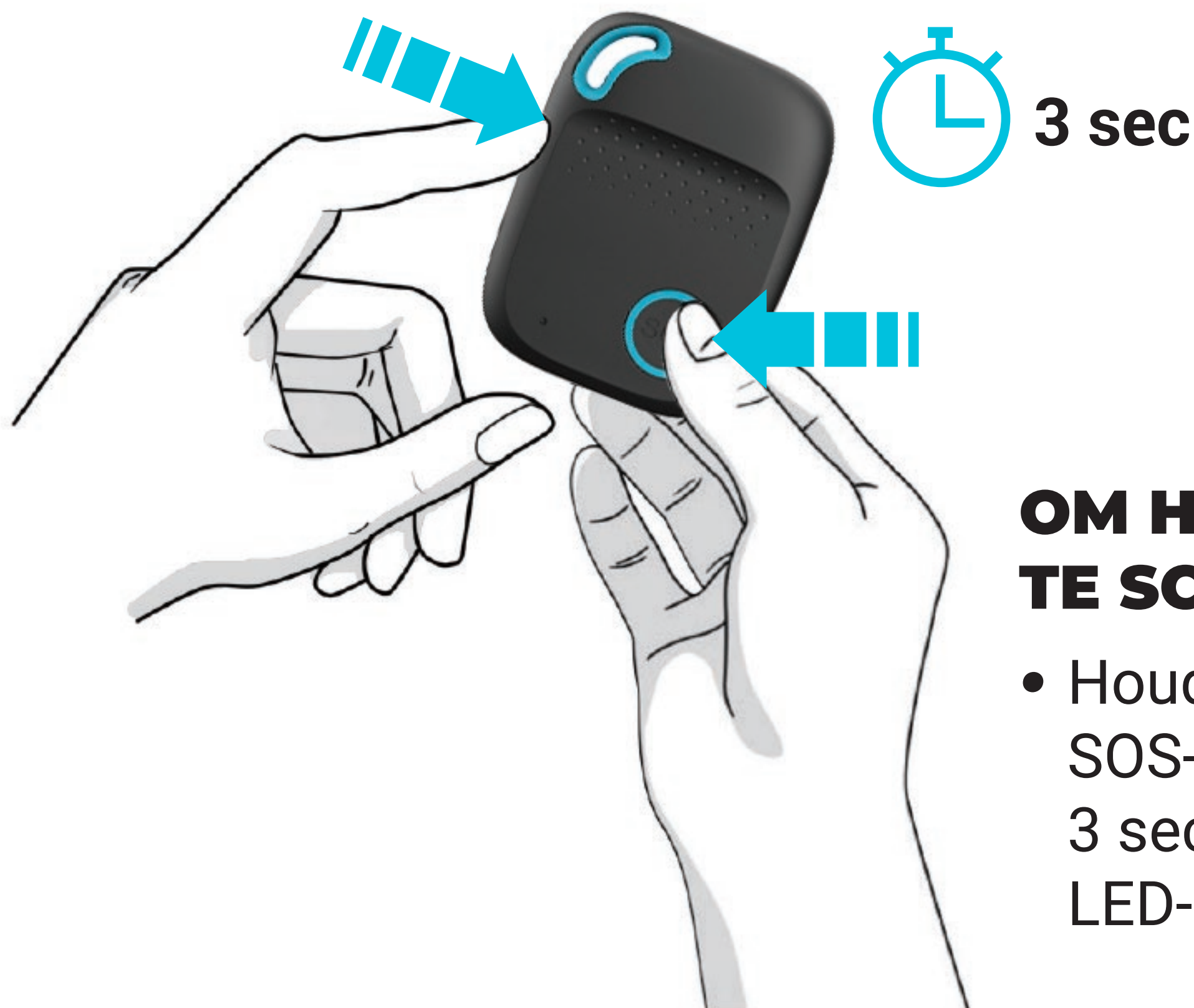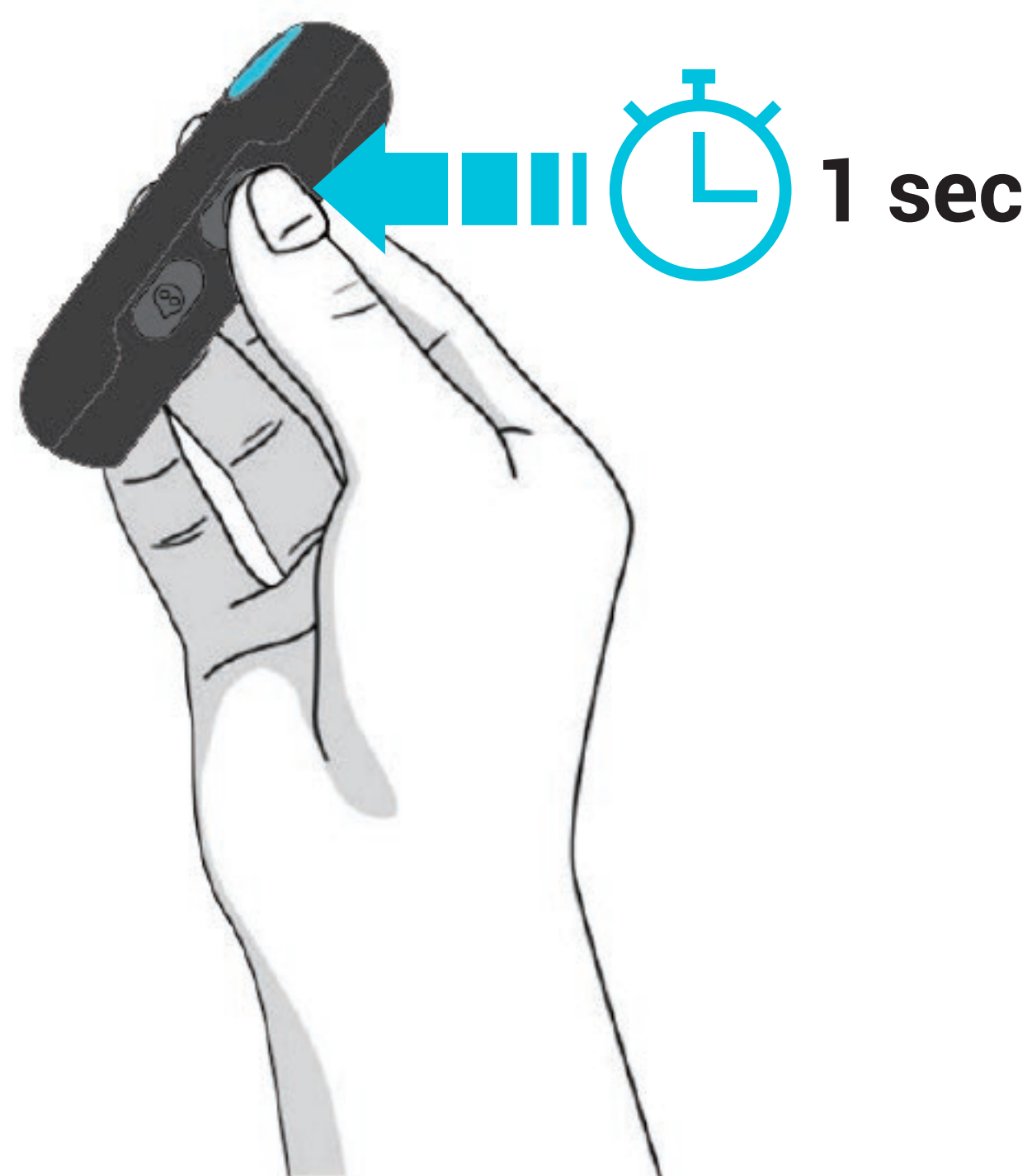

## OM HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN:

- Houd de knop bovenaan en de SOS-knop samen gedurende 3 seconden ingedrukt tot de LED-lampjes uitgaan.

# Wat betekenen de lampjes?

## INDICATOR MOBIEL SIGNAAL - GROEN

<b>GROEN</b>	Het lampje licht elke 3 seconden een keer snel op	Het lampje licht elke 3 seconden twee keer snel op
<b>BETEKENIS</b>	Het apparaat heeft een stabiel mobiel signaal	Het apparaat is geregistreerd op het mobiele netwerk.

## INDICATOR MOBIEL SIGNAAL - BLAUW

<b>BLAUW</b>	Het lampje licht elke 3 seconden een keer snel op	Het lampje licht elke 3 seconden twee keer snel op	Het lampje brandt niet
<b>BETEKENIS</b>	Het apparaat heeft geen recente plaatsbepaling	Het apparaat heeft een recente plaatsbepaling	Het apparaat is de recente locatie niet aan het bepalen

## Een SOS-alarm activeren



Wanneer u hulp nodig hebt, drukt u 3-4 seconden op de SOS-knop tot u een spraakmelding hoort die een SOS-alarm bevestigt.

Dit start de verzendsequentie van een tekstbericht met "Help me!" naar uw noodcontacten. Daarna volgen de uitgaande oproepen.

Kan het apparaat geen verbinding maken met het eerste noodcontact, dan belt het 10 seconden later het tweede contact.

Indien ook met het tweede nummer geen verbinding kan worden gemaakt, probeert het systeem verbinding te maken met het derde nummer, enz.



## Een SOS-alarm activeren

Tussen elke oproep wordt 10 seconden gewacht en tijdens deze 10 seconden kan de gebruiker de oproepsequentie stoppen of een mogelijk vals alarm voorkomen door op de SOS-knop te drukken.

Gebruik de zijknoppen +/- om het volume tijdens een oproep aan te passen.



**TIP** Vergeet uw noodcontacten niet te programmeren.

Het is niet verplicht om alle geautoriseerde nummers in te stellen, maar u moet wel altijd minstens een nummer instellen.

**TIP** Wees geduldig tijdens de oproepsequentie.


Er kunnen zich kleine vertragingen voordoen wanneer het alarm telefoons probeert te bellen die zich buiten bereik bevinden of wordt doorgeschakeld naar de voicemail van de ontvanger.



# Een gps-positiebepaling krijgen

Ga voor een positiebepaling voor de gps-functie naar buiten of bij een raam staan. Zo kan het apparaat de plaats bepalen via de satellieten.

Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van uw omgeving.

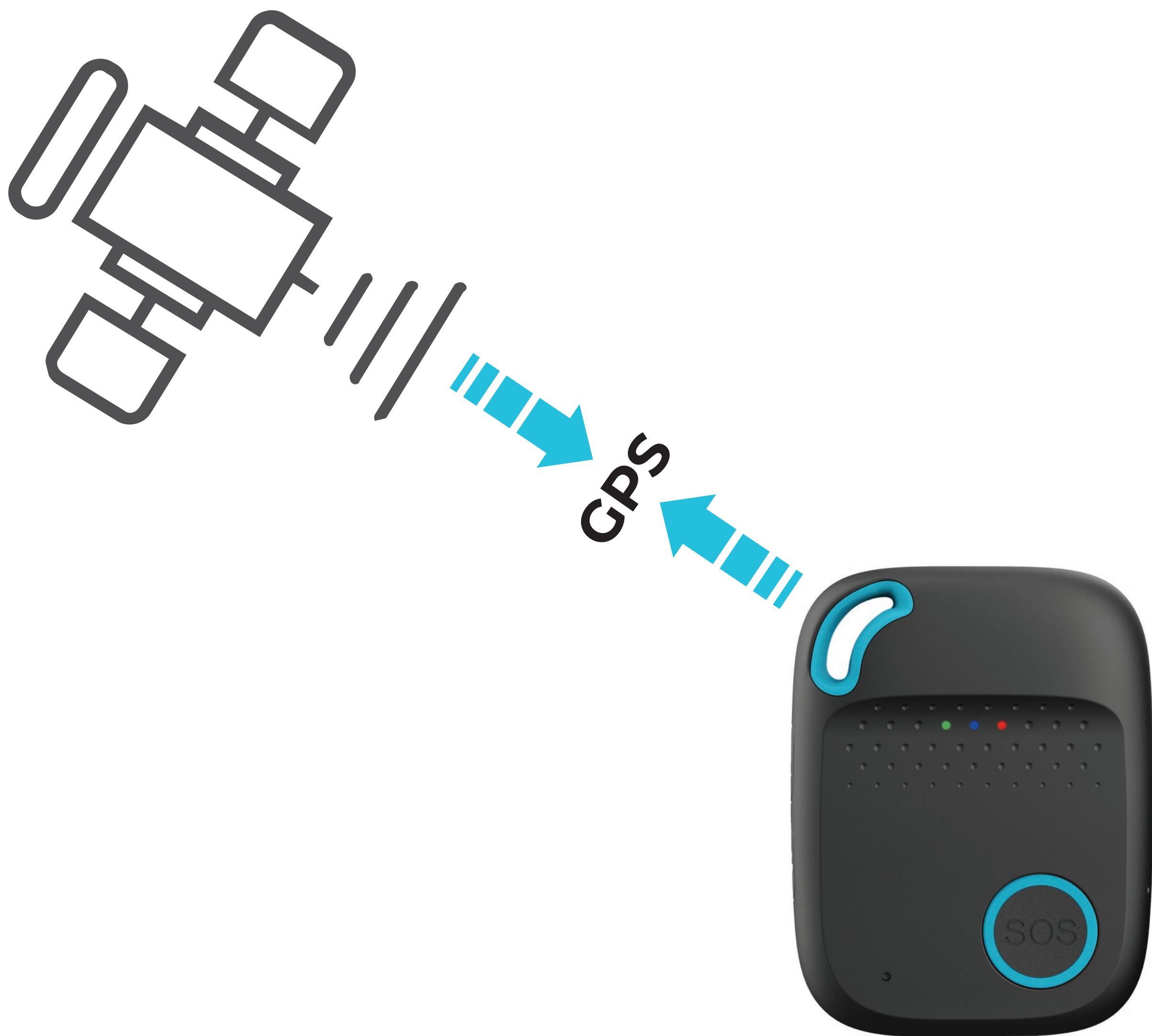

Het lokaliseren binnen werkt enkel indien het toestel gebruikt wordt in combinatie met een BLE (Bluetooth) beacon.

# Bellen

## OM TE BELLEN:

Wanneer u gedurende 3 seconden op de BELknop drukt, hoort u een pieptoon. Daarna wordt het vooraf ingestelde nummer gebeld.



## OM DE OPROEP TE BEËINDIGEN:

Druk op de SOS-knop



# Stille modus

Dubbelklik op de knop voor de stille modus om gesproken waarschuwingen uit te schakelen.

Dubbelklik nogmaals om gesproken waarschuwingen in te schakelen.



# Bluetooth-koppeling

Zet het apparaat meer dan 30 seconden op het laadstation en het wordt automatisch gekoppeld via Bluetooth.





# Een alarmmelding krijgen

Bent u het noodcontact voor iemand met een Zembro Essentials Mini SOS-knop, dan wordt hieronder beschreven hoe u alarmmeldingen ontvangt en erop kunt reageren.

U krijgt een oproep van de persoon die de alarmmelding stuurt, en een sms en e-mail van Zembro met informatie over de alarmmelding en een link waarop u kunt klikken.

Via deze link opent u de browser van uw telefoon of computer en komt u op een website met de details van de alarmmelding en de meest recente locatie van de persoon die het alarm heeft ingeschakeld.

Deze waarschuwingspagina wordt een keer per minuut bijgewerkt met de positie van de persoon op het moment dat deze het alarm indrukte.

We raden u aan de waarschuwingsdienst te testen wanneer u voor het eerst een nieuw Zembro Essentials Mini SOS-knop gebruikt.

Sla het nummer dat u belt en waarnaar u tekstberichten stuurt op in uw favorieten om er zeker van te zijn dat de dienst de instelling niet storen of de stille modus op uw telefoon (bv. 's nachts) kan opheffen.

Het kan zijn dat u de instellingen van uw telefoon moet raadplegen voor meer details over hoe dit moet.

# Uw contactnummers wijzigen

Indien u een contact moet wijzigen, een contactnummer moet toevoegen of verwijderen, gelieve contact op te nemen met de klantendienst van Zembro.

---

**Bedankt dat u gekozen hebt voor de Zembro Essentials Mini SOS-knop.**

Wij wensen u vele jaren van bescherming en gemoedsrust.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst indien u vragen of problemen hebt.

**Gemoedsrust  
met geconnecteerde  
gezondheid & veiligheid**

[zembro.com](https://zembro.com)

# Waterresistentie

Essentials Comfort en Mini zijn spatwaterdicht en waterresistent maar niet waterdicht. U kan bijvoorbeeld gebruik maken van het apparaat en het dragen tijdens het sporten, in de regen en tijdens het handenwassen, maar het is niet aangeraden het onder te dompelen.

Essentials Comfort and Mini hebben een waterresistentie rating van IPX7 volgens de IEC standaard 60529.

Waterbestendigheid is geen permanente toestand en kan na verloop van tijd afnemen. De Essentials Comfort/Mini kan niet opnieuw worden gecontroleerd op waterbestendigheid en ook niet opnieuw worden verzegeld.

## **Het volgende kan van invloed zijn op de waterbestendigheid van uw Essentials Comfort/Mini en moet worden vermeden:**

- De Essentials Comfort/Mini laten vallen of blootstellen aan andere schokken
- De Essentials Comfort/Mini blootstellen aan zeep of zeepwater (bijvoorbeeld tijdens het douchen of baden)
- De Essentials Comfort/Mini blootstellen aan parfum, oplosmiddelen, wasmiddelen, zuren of zuurrijk voedsel, producten tegen insecten, lotion, zonnebrandcrème, olie of haarverf
- De Essentials Comfort/Mini blootstellen aan water met een sterke stroming
- De Essentials Comfort/Mini dragen in een stoomcabine
- De Essentials Comfort/Mini dragen in een sauna

Als uw Essentials Comfort/Mini toch per ongeluk in contact komt met zeep, shampoo, conditioner, lotion, parfum, oplosmiddelen, wasmiddelen, zuren of zuurrijk voedsel, producten tegen insecten, zonnebrandcrème, olie, haarverf of andere stoffen dan water, moet u de Watch schoonmaken met schoon warm water en afdrogen met een pluisvrije doek. De chemicaliën in deze producten kunnen waterafdichtingen en akoestische membranen beschadigen.

# Specificaties

<b>Afmetingen:</b>	62 mm x 47 mm x 17 mm
<b>Gewicht:</b>	53 g
<b>Batterij:</b>	Oplaadbaar, 3.7 V, 950 mAh
<b>Oplaadspanning</b>	5 V DC
<b>Waterdicht:</b>	IPX7 (IEC standaard 60529)
<b>Lokalisatietechnologieën:</b>	GPS, BLE, WiFi, LBS

# Opgelet

## **Gelieve de instructies te volgen om de levensduur van het apparaat te verlengen:**

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige plaatsen.
- Probeer het apparaat niet op te bergen of te gebruiken waar het zou kunnen worden blootgesteld aan extreme temperaturen.
- Maak het apparaat schoon met een droge doek. Gebruik geen chemicaliën of detergenten.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Het gebruik van andere batterijen kan leiden tot problemen.

## **WAARSCHUWING**

Houd uw IMEI en SIM geheim voor uw privacy en veiligheid.